

ACTIVESHOP®

Bedienungsanleitung

UV-C-Sterilisator Germix Einzelgerät HQ YM9001A



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, Gebäude
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/04/2026



Der Germix-Sterilisator ist eine sichere Methode zur wirksamen Desinfektion ohne den Einsatz von chemischen Lösungen oder hoher Temperaturen. Die Funktionsweise des Geräts basiert auf der bakteriziden Wirkung von UV-Strahlung – ultraviolettes Licht mit einer Wellenlänge von 100–280 nm, insbesondere 254 nm (UV-C), das direkt auf die Oberfläche trifft, lebende Mikroorganismen wirksam abtötet. Es ermöglicht eine effiziente Trockendesinfektion, bei der die Geräte keinen mechanischen Beschädigungen oder Abnutzung ausgesetzt sind. Es reinigt hervorragend die Oberflächen von Werkzeugen wie Scheren, Kämmen, Bürsten, Nagelzangen, Pinzetten oder Rasierklingen.

Technische Daten	
Leistung	220 W
Spannung	220–240 V, 50 Hz
Sterilisationszeit	30–45 min

Anwendung

1. Der UV-Sterilisator dient zur Desinfektion von Werkzeugen aus Metall, Kunststoff, Holz und Verbundwerkstoffen (Scheren, Kämmen, Pinzetten usw.)
2. Die Desinfektion erfolgt mit UV-Strahlen, wodurch die Geräte keinen mechanischen Beschädigungen ausgesetzt sind. Bei der UV-Sterilisation wird das Material mit ultravioletter Strahlung bestrahlt.
3. Diese Strahlung verändert die Struktur der Nukleinsäuren und wirkt daher am stärksten auf vegetative Formen von Mikroorganismen.
4. Das Gerät eignet sich ideal für Kosmetiksalons, Spas, die ästhetische Medizin und Friseursalons.

Anwendung

1. Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen Untergrund, legen Sie dann die Instrumente ein und schließen Sie den UV-Sterilisator.
Die Instrumente, die in die Schublade des Sterilisators gelegt werden, sollten sauber, trocken und zuvor gereinigt sein. Sie sollten sich zudem nicht überlappen.
2. Schließen Sie den Sterilisator an das Stromnetz an. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter ein.
3. Die Sterilisationszeit beträgt ca. 30–45 Minuten.
4. Nach Ablauf der gewünschten Zeit schalten Sie den Sterilisator mit dem Ein-/Aus-Schalter aus.
5. Öffnen Sie den Sterilisator und nehmen Sie die Gegenstände heraus (dies ist nicht zwingend erforderlich – Sie können sie auch im Behälter lassen).
6. Die Instrumente sind einsatzbereit.

Wichtig


1. Der Deckel des Sterilisators muss immer geschlossen sein, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
2. Es ist verboten, das Gerät zu öffnen, bevor der Sterilisationsvorgang abgeschlossen ist und die LED-Anzeigen erloschen sind.
3. Der Kontakt mit Wasser oder ätzenden Chemikalien ist zu vermeiden.
4. Komplex aufgebaute Teile sollten so weit wie möglich geöffnet und zerlegt werden, damit die Sterilisation der Instrumente so effektiv wie möglich durchgeführt werden kann.

Empfehlungen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche aufgestellt haben, um die Gefahr eines Umkippens und einer Beschädigung zu verringern.
2. Lassen Sie das angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt.
3. Verwenden Sie das Gerät gemäß der in der Anleitung beschriebenen Bestimmung.
4. Verwenden Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist

6. Ziehen Sie nicht direkt am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
7. Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Setzen Sie es nicht direkt den Witterungseinflüssen aus.
8. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Schmutzansammlungen zu vermeiden. Reinigen Sie das Gerät am besten mit einem feuchten Tuch.
9. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

Abmessungen

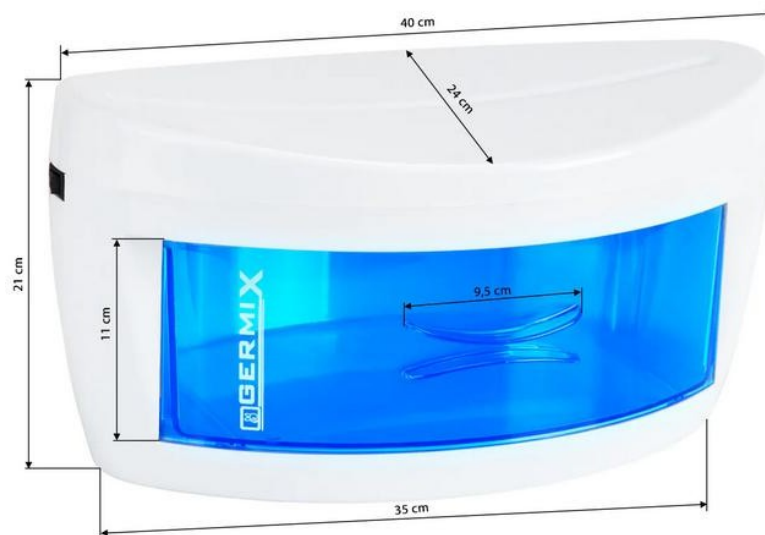

Sicherheitshinweise

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetikstudios. Die Bedienung des Geräts darf ausschließlich durch qualifiziertes Kosmetikpersonal erfolgen, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt werden, und es dürfen keine Versuche unternommen werden, es für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke zu verwenden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von einem Mitarbeiter eines autorisierten Kundendienstes (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an feuchten Orten oder mit nassen Händen aufgestellt oder bedient werden. Es ist darauf zu achten, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) Flüssigkeit ist in das Gerät gelangt, b) Das Gerät verströmt einen seltsamen Geruch, raucht oder gibt seltsame Geräusche von sich, c) das Netzkabel ist beschädigt, d) das Gerät ist umgekippt oder das Gehäuse ist beschädigt.
5. Es dürfen keine Gegenstände auf die Kabel gelegt werden. Das Gerät darf nicht an Orten aufgestellt werden, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.
6. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jedem Gebrauch des Geräts aus der Steckdose ziehen.
7. Es dürfen keine Fremdkörper in das Gerät gelangen. Sollte ein Fremdkörper ins Innere gelangen, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.
8. Das Gerät darf nicht auf einem instabilen Wagen, Regal oder Fahrzeug abgestellt werden. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.

9. Um die angegebene Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, vor dem erneuten Drücken des Netzschalters eine Minute zu warten (zwischen dem Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion des Geräts, einer Beschädigung oder sogar eines Brandes.

ACHTUNG

1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst – so vermeiden Sie Gefahren.
2. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen, die mit der Funktionsweise dieses Geräts nicht vertraut sind, sofern ihnen eine angemessene Aufsicht oder Einweisung in die ordnungsgemäße und sichere Nutzung gewährt wird und die damit verbundenen Gefahren verständlich sind.
3. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht über ausreichende Kenntnisse zur Bedienung des Geräts verfügen, in dessen Nähe aufhalten.
4. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Eine unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem Elektrogerät kann zu Gesundheitsschäden oder zum Tod führen; daher muss das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und aufbewahrt werden.

Entsorgung des Geräts



Zum Schutz der Umwelt und gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sollten Elektroaltgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Bitte befolgen Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Geräteart zu befolgen und diese nicht in den Hausmüll zu werfen.

Am Ende ihrer Nutzungsdauer enthalten diese Geräte noch vollwertige, recycelbare Bestandteile; daher sollten sie zur Wiederverwertung an entsprechende Sammelstellen oder an die Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. übergeben werden.

Lagerung und Transport

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (–)20 °C und (+)40 °C ausschließlich in der Originalverpackung transportiert werden. Es ist in einem gut belüfteten Raum bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 90 % zu lagern. Betriebstemperatur von (+)10 °C bis (+)40 °C. Während der Prozesse Bei der Lagerung und beim Transport darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und darf keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.