

ACTIVESHOP®

Manual de utilizare

Sterilizator UV-C Germix simplu HQ YM9001A



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, cl. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2026



Sterilizatorul Germix este o metodă sigură pentru o dezinfectare eficientă, fără utilizarea de soluții chimice sau a temperaturilor ridicate. Funcționarea aparatului se bazează pe acțiunea bactericidă a radiației UV – lumina ultravioletă cu lungimea de undă de 100-280 nm, în special 254 nm, adică UV-C, care cade direct pe suprafață, distruge eficient formele vii ale microorganismelor. Permite o dezinfectare eficientă prin uscare, în timpul căreia echipamentul nu este expus la deteriorări mecanice sau uzură. Curăță perfect suprafețele ustensilelor precum foarfece, piepteni, perii, clești, pensete sau lame pentru mașini de tuns.

Date tehnice	
Putere	220 W
Tensiune	220-240 V 50 Hz
Timp de sterilizare	30-45 min

Aplicație

1. Sterilizatorul UV este utilizat pentru dezinfectarea instrumentelor din metal, plastic, lemn și materiale compozite (foarfece, piepteni, pensete etc.)
2. Dezinfectarea se realizează cu raze UV, astfel încât echipamentul nu este expus la deteriorări mecanice. Sterilizarea UV constă în iradierea materialului cu radiații ultraviolete.
3. Această radiație modifică structura acizilor nucleici, de aceea are cel mai puternic efect asupra formelor vegetative ale microorganismelor.
4. Aparatul este ideal pentru saloane de înfrumusețare, SPA, medicina estetică și saloane de coafură.

Mod de utilizare

1. Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, apoi introduceți instrumentele și închideți sterilizatorul UV.
Instrumentele introduse în sertarul sterilizatorului trebuie să fie curate, uscate și spălate în prealabil. De asemenea, nu trebuie să se suprapună unele peste altele.
2. Conectați sterilizatorul la curent. Porniți aparatul apăsând butonul de pornire/oprire.
3. Durata sterilizării este de aproximativ 30 - 45 de minute.
4. După expirarea timpului dorit, opriți sterilizatorul cu ajutorul butonului de pornire/oprire.
5. Deschideți sterilizatorul și scoateți obiectele (acest lucru nu este obligatoriu – le puteți lăsa și în recipient).
6. Instrumentele sunt gata de utilizare.

Important

1. Capacul sterilizatorului trebuie să fie întotdeauna închis când acesta este pornit.
2. Este interzisă deschiderea aparatului înainte de finalizarea procesului de sterilizare și de stingerea luminilor LED.
3. Nu trebuie să se permită contactul cu apa sau substanțele chimice corozive.
4. Elementele cu structură complexă trebuie deschise și dezasamblate cât mai mult posibil, pentru ca sterilizarea instrumentelor să se desfășoare cât mai eficient.


Recomandări

1. Asigurați-vă că ați instalat aparatul pe o suprafață plană și stabilă, pentru a reduce riscul de cădere și deteriorare.
2. Nu lăsați niciodată aparatul conectat la curent fără supraveghere.
3. Utilizați dispozitivul conform destinației descrise în manual.
4. Nu utilizați niciodată acest aparat dacă cablul sau ștecherul este deteriorat.
5. Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corect sau dacă a fost scăpat, deteriorat sau a căzut

în apă.

6. Nu trageți direct de cablu pentru a scoate ștecherul din priză.
7. Produs destinat exclusiv utilizării în interior. Nu-l expune la intemperii.
8. Curățați periodic aparatul pentru a preveni acumularea de murdărie. Cel mai bine este să curățați aparatul cu o cârpă umedă.
9. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.

Dimensiuni

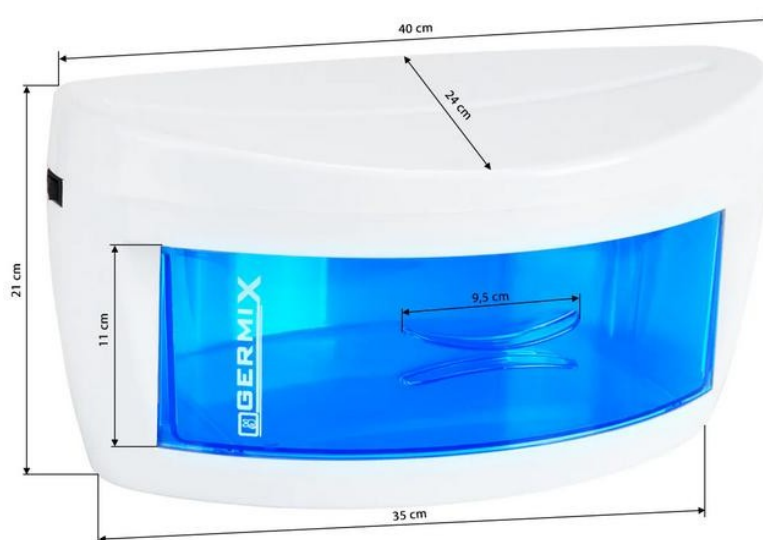

Măsuri de siguranță

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Utilizarea aparatului exclusiv de către personal cosmetic calificat permite evitarea efectelor nedorite în timpul tratamentului.
2. Nu este permisă dezasamblarea aparatului sau încercarea de a-l utiliza în alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual de utilizare. Toate lucrările de service și reparațiile trebuie efectuate exclusiv de către un angajat al unui service autorizat (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu utilizați aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude. Asigurați-vă că niciun lichid nu pătrunde în aparat.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați serviciul de service autorizat al firmei ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri: a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate, c) cablul de alimentare este deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați obiecte pe cabluri. Nu instalați aparatul în locuri în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză după fiecare utilizare a aparatului.
7. Nu introduceți obiecte străine în interiorul aparatului. În cazul în care un obiect nedorit pătrunde în interior, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, un raft sau un vehicul instabil. În cazul unei căderi, aparatul se poate deteriora.

9. Pentru a garanta durata de viață specificată a aparatului, se recomandă să se aștepte un minut înainte de a apăsa din nou butonul de pornire (între pornire și oprire și invers).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să fie conformă cu specificațiile indicate pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul de funcționare incorectă a aparatului, de deteriorare a acestuia și chiar de incendiu.

ATENȚIE

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un service autorizat – acest lucru va permite evitarea pericolelor.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani, de către persoane cu capacități fizice și mentale reduse, precum și de către persoane care nu sunt familiarizate cu modul de funcționare al acestui echipament, cu condiția să li se asigure supravegherea corespunzătoare sau instruirea privind utilizarea corectă și în condiții de siguranță, iar riscurile asociate să fie înțelese.
3. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când copiii sau persoanele care nu au cunoștințe suficiente privind utilizarea acestuia se află în apropiere.
4. Aparatul nu este destinat jocului copiilor. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu un aparat poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, de aceea aparatul trebuie utilizat și păstrat în afara razei de acțiune a copiilor.

Eliminarea aparatului



În scopul protejării mediului, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE privind echipamentele electrice și electronice uzate, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a echipamentelor electronice și electrice uzate. Respectați regulile privind aruncarea acestui tip de echipamente și nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere.

La sfârșitul duratei de viață, aceste aparate conțin în continuare componente valoroase care pot fi reciclate, de aceea trebuie predate pentru reciclare la punctele de colectare corespunzătoare sau la firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Depozitare și transport

Aparatul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (–)20 °C și (+)40 °C, exclusiv în ambalajul original. Acesta trebuie depozitat într-o încăpere bine ventilată, la o umiditate relativă de maximum 90%. Temperatura de funcționare este cuprinsă între (+)10 °C și (+)40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, nu se permite aruncarea sau scăparea aparatului, nici expunerea acestuia la șocuri mecanice sau la intemperii.