

ACTIVESHOP[®]

Navodila za uporabo

UV-C sterilizator Germix, enojni HQ YM9001A



Uvoznik:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2026



Sterilizator Germix je varen način za varno in učinkovito razkuževanje brez uporabe ali visokih temperatur. Delovanje naprave temelji na baktericidnem delovanju UV-sevanja – ultravijolične svetlobe z valovno dolžino 100–280 nm, zlasti 254 nm, tj. UV-C, ki pada neposredno na površino, učinkovito uniči žive oblike mikroorganizmov. Omogoča učinkovito suho dezinfekcijo, med katero oprema ni izpostavljena mehanskim poškodbam ali otupitvi. Odlično očisti površine pripomočkov, kot so škarice, glavniki, čopiči, klešče, pincete ali rezila za stroje.

Tehnični podatki	
Moč	220 W
Napetost	220–240 V 50 Hz
Čas sterilizacije	30–45 min

Uporaba

1. UV-sterilizator se uporablja za razkuževanje pripomočkov iz kovin, plastike, lesa in kompozitnih materialov (škarice, glavniki, pincete itd.)
2. Razkuževanje poteka z UV-žarki, zaradi česar oprema ni izpostavljena mehanskim poškodbam. UV-sterilizacija temelji na obsevanju materiala z ultravijoličnim sevanjem.
3. To sevanje spreminja strukturo nukleinskih kislin, zato najmočnejše deluje na vegetativne oblike mikroorganizmov.
4. Naprava je idealna za kozmetične salone, SPA, estetsko medicino in frizerske salone.

Način uporabe

1. Napravo postavite na stabilno podlago, nato vstavite instrumente in zaprite UV-sterilizator.
Orodje, ki ga položite v predal sterilizatorja, mora biti čisto, suho in predhodno oprano. Prav tako se ne sme prekrivati.
2. Sterilizator priključite na električno omrežje. Napravo vklopite s tipko za vklop/izklop.
3. Čas sterilizacije je približno 30–45 min.
4. Po preteku zelenega časa sterilizator izklopite s tipko za vklop/izklop.
5. Odprite sterilizator in izvlecite predmete (to ni obvezno – lahko jih pustite tudi v posodi).
6. Orodje je pripravljeno za uporabo.

Pomembno

1. Pokrov sterilizatorja mora biti vedno zaprt, ko je ta vklopljen.
2. Naprave ni dovoljeno odpreti, dokler se postopek sterilizacije ne konča in se LED-lučke ne ugasnejo.
3. Preprečite stik z vodo ali jedkimi kemikalijami.
4. Kompleksne sestavne dele je treba čim bolj razpreti in razstaviti, da se sterilizacija instrumentov opravi čim bolj učinkovito.


Priporočila

1. Prepričajte se, da ste napravo namestili na ravno in stabilno površino, da zmanjšate tveganje padca in poškodb.
2. Nikoli ne puščajte priključene naprave brez nadzora.
3. Napravo uporabljajte v skladu z namenom, opisanim v navodilih.
4. Nikoli ne uporabljajte te naprave, če ima poškodovan kabel ali vtič.
5. Naprave ne uporabljajte, če ne deluje pravilno ali če je padla, je poškodovana ali je padla

v vodo.

6. Ne vlecite neposredno za kabel, da bi izvlekli vtič iz vtičnice.
7. Izdelek je namenjen izključno za notranjo uporabo. Ne izpostavljajte ga neposrednim vremenskim vplivom.
8. Napravo je treba redno čistiti, da se prepreči nabiranje umazanije. Najbolje je, da napravo čistite z vlažno krpo.
9. Napajalnega kabla ne ovijajte okoli naprave.

Dimenzije

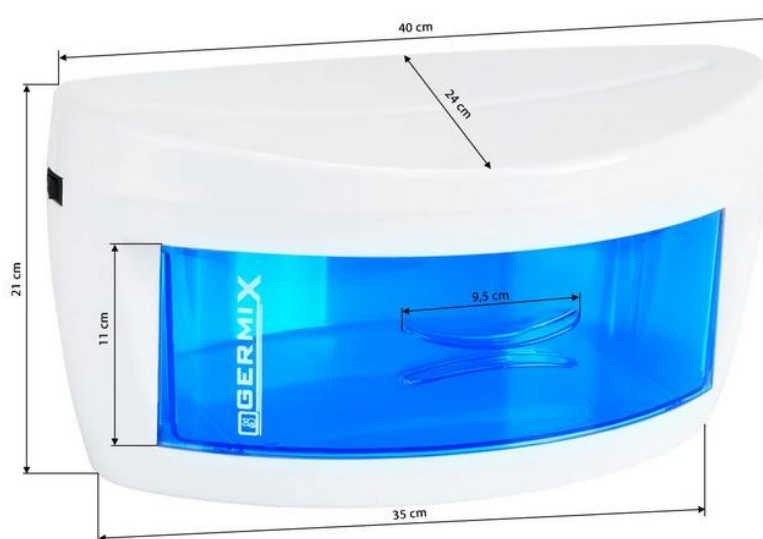

Varnostni ukrepi

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Uporabo naprave sme izvajati izključno usposobljeno kozmetično osebje, da se med posegom preprečijo neželeni učinki.
2. Naprave ne smete razstavljati niti poskušati uporabljati za namene, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo. Vsa servisna dela in popravila mora opravljati izključno osebje pooblaščenega servisa (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne smete namestiti ali uporabljati v bližini tekočin, na vlažnih mestih ali z mokrimi rokami. Poskrbite, da v napravo ne pridejo nobene tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izključite napravo iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis podjetja ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) v napravo je prišla tekočina, b) naprava oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke, c) napajalni kabel je poškodovan, d) je naprava prevrnjena ali je poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne smete polagati nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mestih, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti po vsakem zaključku dela z napravo izključite napajalni kabel iz vtičnice.
7. V notranjost naprave ne smete vstavljati tujih predmetov. Če se v notranjost naprave vdre neželen predmet, izključite napajalni kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne smete postaviti na nestabilen voziček, polico ali vozilo. V primeru padca se lahko naprava poškoduje.

9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, priporočamo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop počakate eno minuto (med vklopom in izklopom in obratno).
10. Napajanje mora biti v skladu s specifikacijami na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja naprave, njene poškodbe ali celo pregretja.

OPOZORILO

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servis – s tem boste preprečili nevarnost.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi ter osebe, ki niso seznanjene z delovanjem te opreme, če jim je zagotovljen ustrezen nadzor ali navodila o pravilni in varni rabi ter če so jim s tem povezana tveganja razumljiva.
3. Naprave ne puščajte brez nadzora, če so v njeni bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.
4. Naprava ni namenjena za igro otrok. Otrokom ne smete dovoliti, da se igrajo z napravo.
5. Ta električna naprava ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električno napravo lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato napravo uporabljajte in shranjujte izven dosega otrok.

Odstranjevanje naprave



Zaradi varstva okolja je v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi treba odpadno električno opremo zbrati ločeno in jo odnesti na zbirna mesta za odpadno električno in elektronsko opremo. Upoštevajte navodila za odstranjevanje te vrste opreme in jih ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke.

Ob koncu življenjske dobe naprave še vedno vsebujejo polno vredne elemente, primerne za recikliranje, zato jih je treba predati v ponovno predelavo na ustrezne zbirne točke ali podjetju ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Skladiščenje in prevoz

Napravo je treba prevažati pri temperaturi med $(-20\text{ }^{\circ}\text{C})$ in $(+40\text{ }^{\circ}\text{C})$ izključno v originalni embalaži. Shranjujte ga v dobro prezračenem prostoru pri relativni vlagi največ 90 %. Delovna temperatura od $(+10\text{ }^{\circ}\text{C})$ do $(+40\text{ }^{\circ}\text{C})$. Med postopki skladiščenja in prevoza; naprave ne smete metati ali spuščati na tla ter je ne smete izpostavljati mehanskim udarcem ali vremenskim vplivom.