

ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Glow MX6 / MX3 laual olev ravidamp



Importija:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
8b Graniczna Street,
building DC 2a 54-610
Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl




Tehnilised andmed:

Mudel	HD-M3X	HD-M6X
Sisendpinge	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Sisendpinge	12V 2A	24V 1,5A
Võimsus Max	20W	36W
Värv	3000/4500/6000K	3200-5600K
CRI	RA>90	RA>90
Lumen	1800LM	2800LM
Mõõtmed	400 x 200 x 40mm	580 x 190 x 445mm
Kaal	1,4 kg	4,6 kg

HD-M6X laterna ehitus ja paigaldus


1. Kruvige statii vi alumine osa (osa D) alusele. Seejärel kruvige statii vi ülemine osa (osa C) alumisse ossa (osa D).

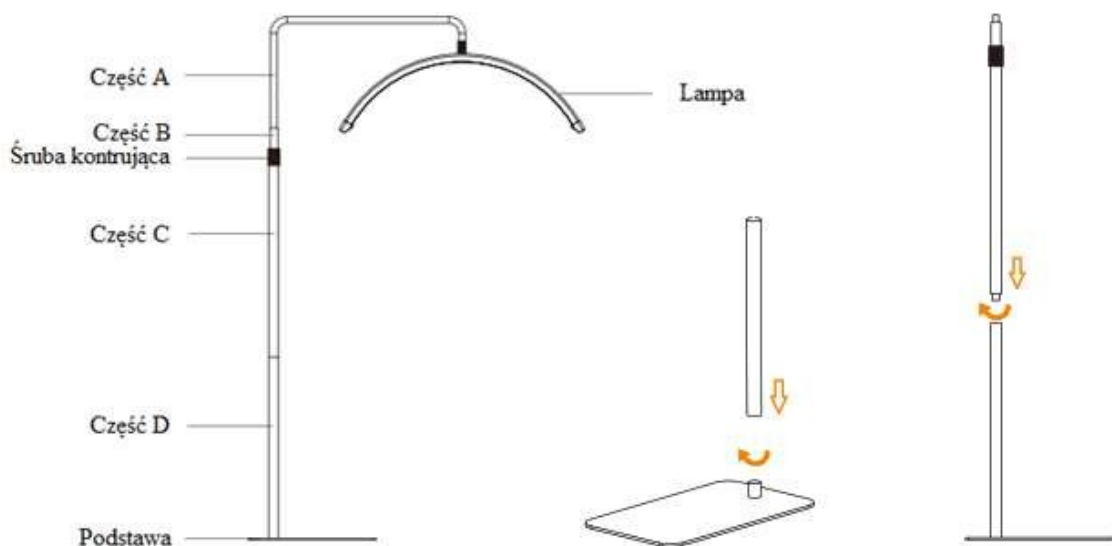


2. Laterna paigaldamine statiivile

- Keerake kinnituskruvi lahti.
- Tõmmake osa B osast C välja.
- Keerake osa A koos osaga B.
- Sisestage osa B osasse C.
- Pingutage kinnituskruvi.
- Ühendage toitekaablid.

Märkus: Lambi doki paigutamine kenasti statii vi jala kohale annab lambile kõige suurema stabiilsuse.

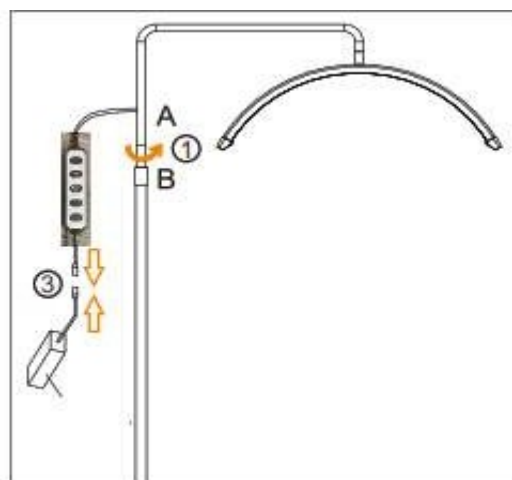


HD-M3X laterna ehitus ja paigaldus

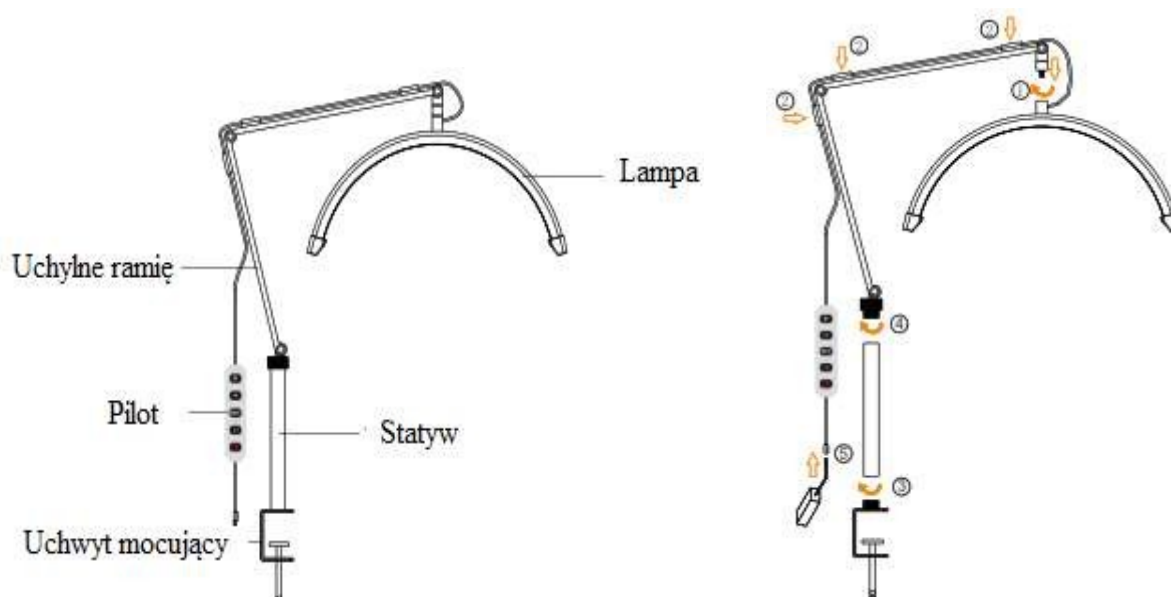

1. Keerake lamp kallutusvarre ülemisse ossa.
2. Paigaldage kaabel spetsiaalsetesse juhtmehoidikutesse
3. Paigaldage lampi stativi kinnituskonksu külge
4. Ühendage lamp stativi külge
5. Ühendage toitejuhe vooluvõrku

Märkus: Pöörlevate varraste liigendite jäikust on võimalik reguleerida kuuskantvõtme abil. Pärast lampivarre pikemaajalist või intensiivset kasutamist võib tekkida liigeste liigne mäng. Parandage liigendite jäikust, pingutades kinnituskruvisid.

Ettevaatust! Ärge pingutage kruvisid üle. Kinnituskruvide liigse pingutamise korral on oht, et lambivars võib kahjustada.

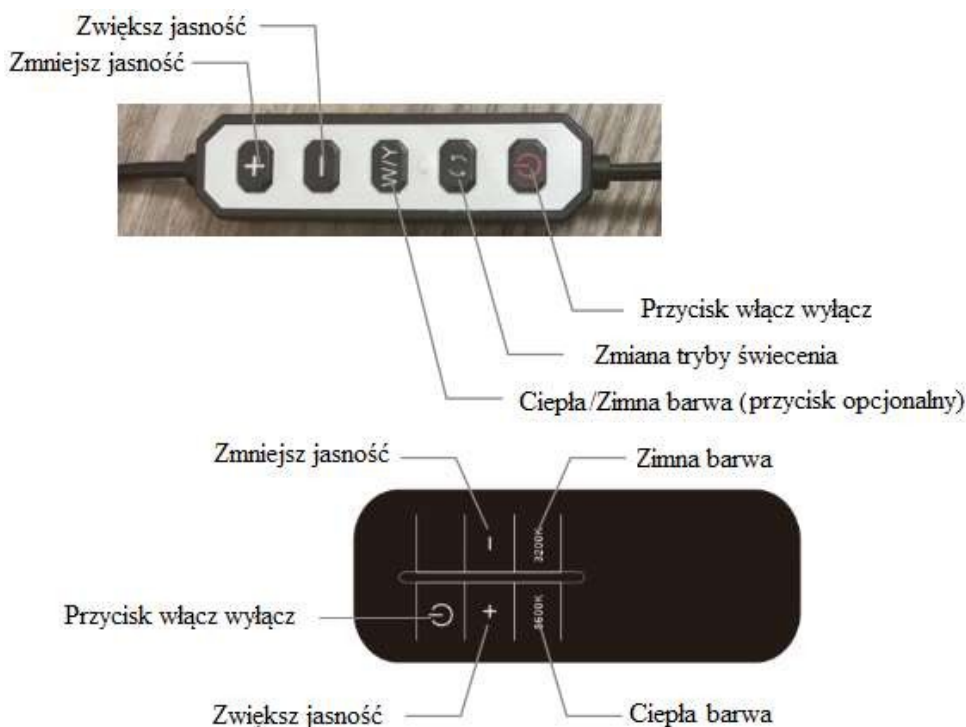

Laterna HD-M3X/ HD-M6X kasutamine

Märkus: Kaugjuhtimispuult on lambile lisavarustus (mõnedel mudelitel ei ole kaugjuhtimispuulti kaasas).

Märkus: Valgusrežiimi muutmise nupp on lambi juhtseadmel valikuline (mõnel mudelil ei ole seda nuppu).

TURVAMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mida kasutatakse kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärgil. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab teostama ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja pöörduge ACTIVESHOP SP. O.O. poolt pakutud volitatud teeninduskeskuse poole. Z O.O.). järgmistel juhtudel:
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage kaablitele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohta, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge pange midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb ära.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisel, kui seadme ohutuks kasutamiseks on tagatud järelevalve või juhendamine, nii et sellega seotud riskid oleksid mõistetavad.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjäätmete konteinerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonnakaitse eesmärgil vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta

tuleb kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed eraldi koguda ja viia kasutatud elektroonika- ja elektriseadmete kogumispunktidesse.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need saata ümbertöötlemisele. Seetõttu tuleks need anda üle asjakohastele kogumispunktidele ja ka ACTIVESHOP SP-le. Z O.O.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb ladustada hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.