

ACTIVESHOP[®]

MODE D'EMPLOI

Lampe de traitement de table Glow MX6 / MX3



Importateur :
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
8b Graniczna Street, building
DC 2a 54-610 Wrocław,
Poland
www.activeshop.com.pl




Données techniques :

Modèle	HD-M3X	HD-M6X
Tension d'entrée	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Tension d'entrée	12V 2A	24V 1.5A
Puissance maximale	20W	36W
Couleur	3000/4500/6000K	3200-5600K
IRC	RA>90	RA>90
Lumen	1800LM	2800LM
Dimensions de la lampe	400 x 200 x 40 mm	580 x 190 x 445 mm
Poids	1,4 kg	4,6 kg

Construction et montage de la lampe HD-M6X


1. Visser la partie inférieure du trépied (partie D) dans la base. Vissez ensuite la partie supérieure du trépied (partie C) dans la partie inférieure (partie D).

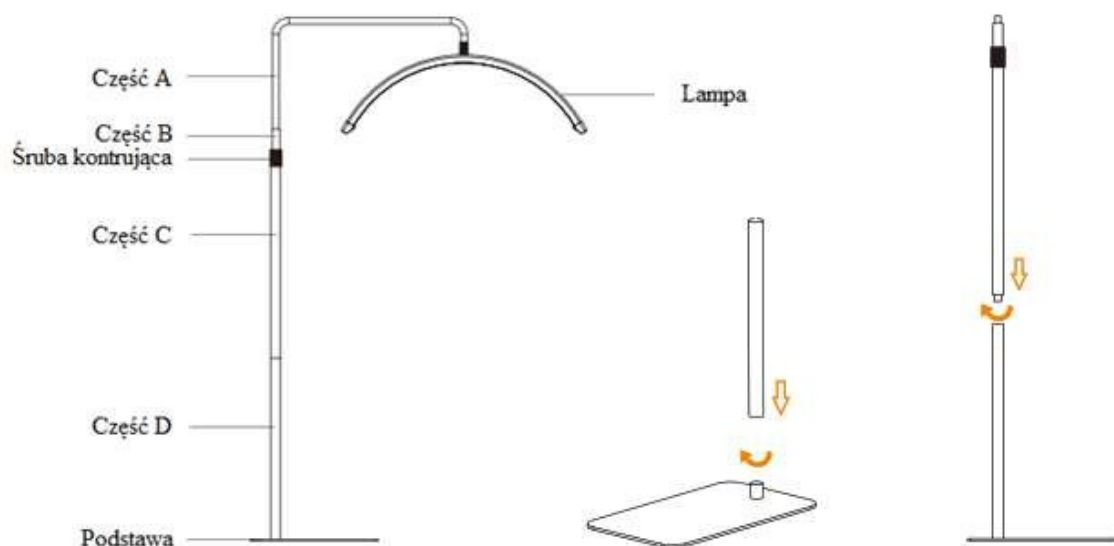


2. Montage de la lampe sur le trépied

- Desserrer la vis de fixation.
- Retirer la partie B de la partie C.
- Tordre la partie A avec la partie B.
- Insérer la partie B dans la partie C.
- Serrer la vis de fixation.
- Connecter les câbles d'alimentation électrique.

Remarque : Le positionnement de la station d'accueil de la lampe sur le pied du trépied offre une stabilité optimale à la lampe.

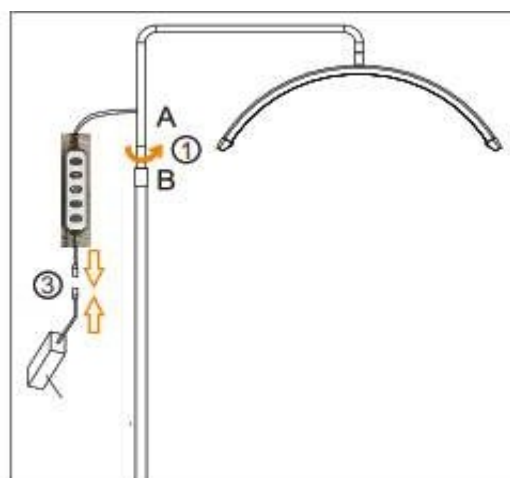


Construction et montage de la lampe HD-M3X

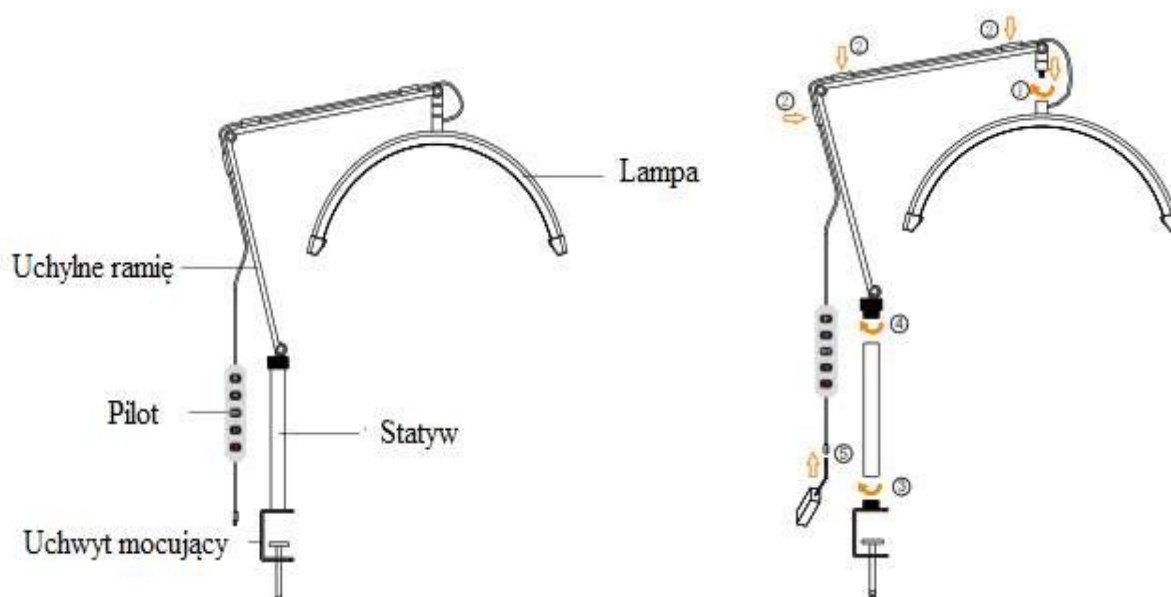

1. Vissez la lampe dans la partie supérieure du bras inclinable.
2. Montez le câble dans les supports de guidage spéciaux.
3. Montez le support de la lampe sur le support de montage.
4. Connecter la lampe au trépied
5. Connecter le câble d'alimentation à l'alimentation électrique

Note : Il est possible de régler la rigidité des articulations du bras pivotant à l'aide d'une clé Allen. Après une utilisation prolongée ou intensive du bras de la lampe, un jeu excessif des articulations peut se produire. Améliorez la rigidité des articulations en serrant les vis de fixation.

Attention ! Ne serrez pas trop les vis. Le bras de la lampe risque d'être endommagé si les vis de fixation sont trop serrées.

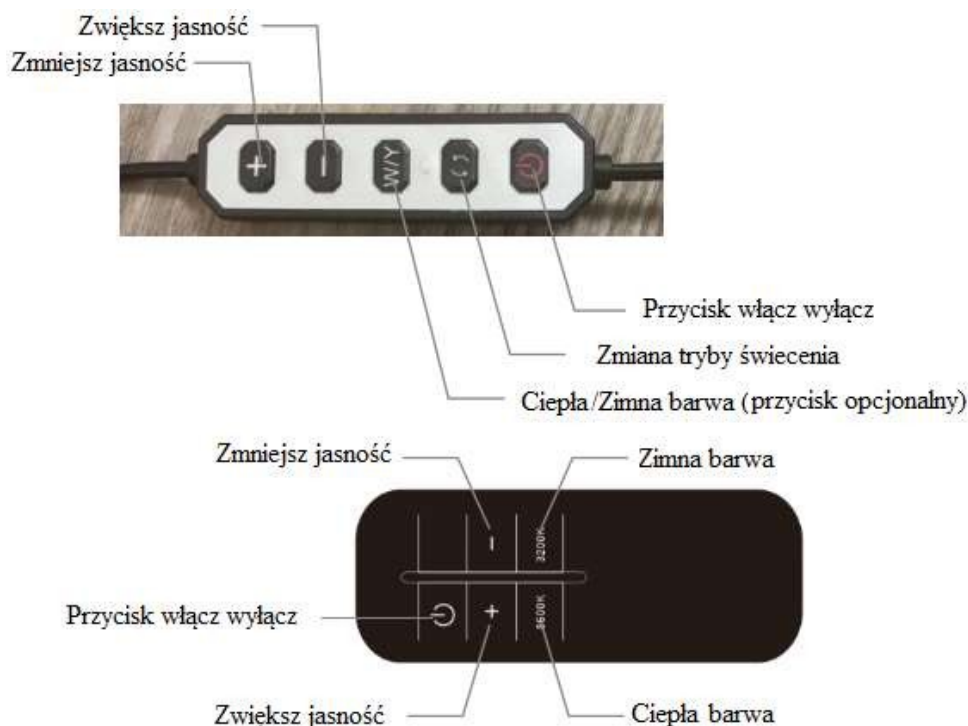

Utilisation de la lampe HD-M3X/ HD-M6X

Note : La télécommande est optionnelle sur la lampe (certains modèles ne comprennent pas de télécommande).

Note : Le bouton de changement de mode d'éclairage est optionnel sur le contrôleur de la lampe (certains modèles n'ont pas ce bouton).

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé en chirurgie esthétique. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en chirurgie esthétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - de sorte qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débrancher immédiatement l'appareil de la prise de courant et contacter un centre d'assistance agréé par ACTIVESHOP SP. Z O.O.) dans les cas suivants :
(a) un liquide a pénétré dans l'appareil, (b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des bruits bizarres, (c) le cordon d'alimentation est endommagé, (d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'introduisez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, adressez-vous à un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient données concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort. L'appareil doit donc être utilisé et rangé hors de portée des enfants.



ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux principes de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques

les équipements électriques et électroniques usagés doivent être collectés séparément et déposés dans les points de collecte des équipements électroniques et électriques usagés.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être envoyés au retraitement. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP SP. Z O.O.

STOCKAGE ET TRANSPORT

Le dispositif doit être transporté à des températures comprises entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. Stocker l'appareil dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.