

ACTIVESHOP[®]

ISTRUZIONI PER L'USO

Poltrona cosmetica hyd. Sillon 210



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polonia

www.activeshop.com.pl Rev.

A/05/2025






Scansione
per
diverse
lingue




Dimensioni:





Montaggio:

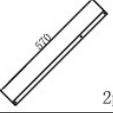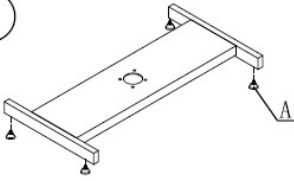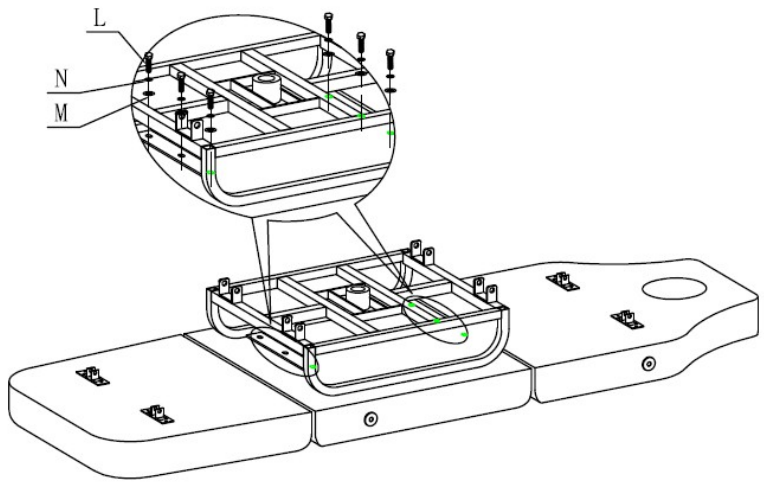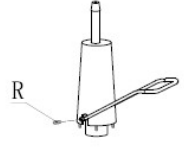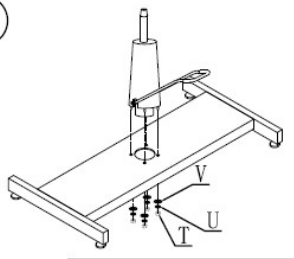A  4pcs	B  M6 4pcs	C  M6X35 4pcs	D  2pcs	E  M5X8 8pcs	F  4pcs	G  2pcs	H  M12X80 4pcs
I  ø12 4pcs	J  M12 4pcs	K  2pcs	L  M8X25 6pcs	M  ø8 6pcs	N  ø8 6pcs	O  M10X25 1pcs	P  ø10 1pcs
Q  ø10 1pcs	R  2pcs	S  1pcs	T  M6 4pcs	U  M6 4pcs	V  M6 4pcs	① 	
④ 						② 	
						③ 	
						CH-210	


1. Far scorrere le imbottiture nella base del sedile.
2. Inserire la leva di regolazione dell'altezza nell'attuatore utilizzando l'elemento R.
3. Montare l'attuatore sulla base del sedile, quindi serrare utilizzando gli elementi V, U e T.
4. Posizionare il telaio metallico del sedile sulla base del sedile e fissarlo con gli elementi L, M e N.

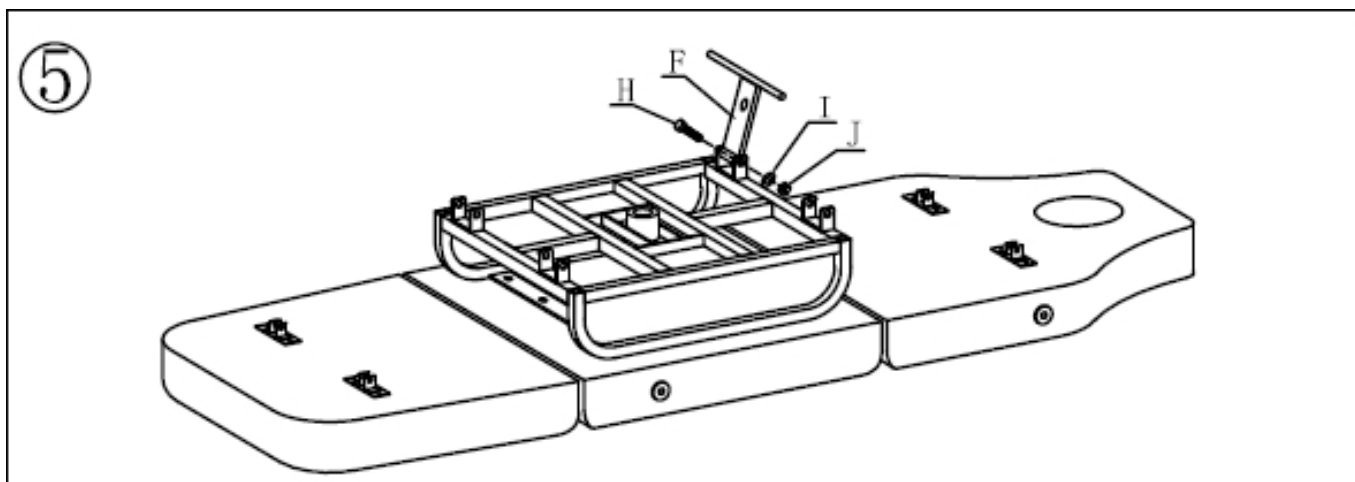


5. Montare l'elemento F serrandolo con gli elementi I, J e H.

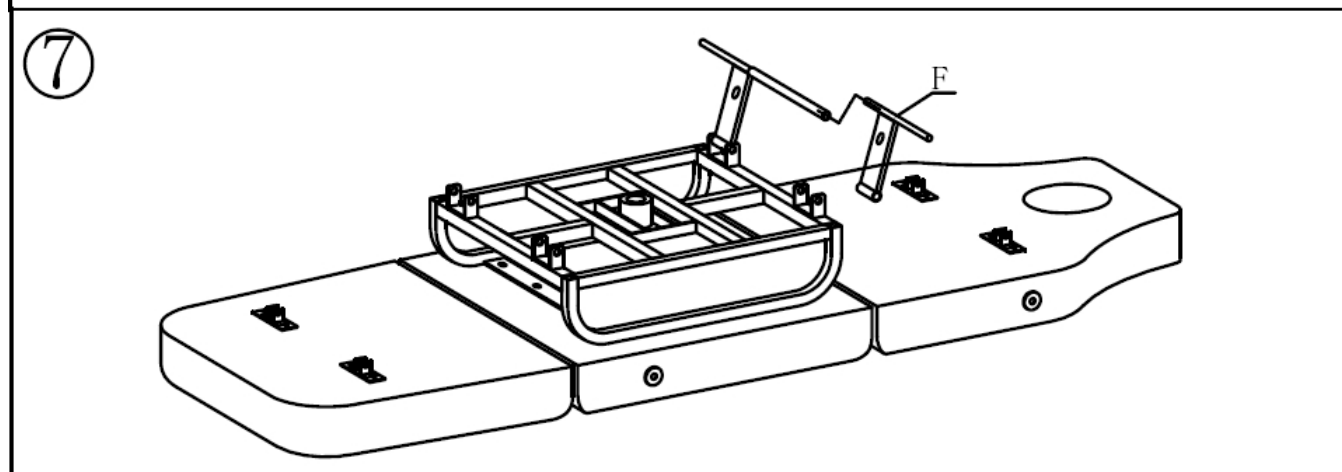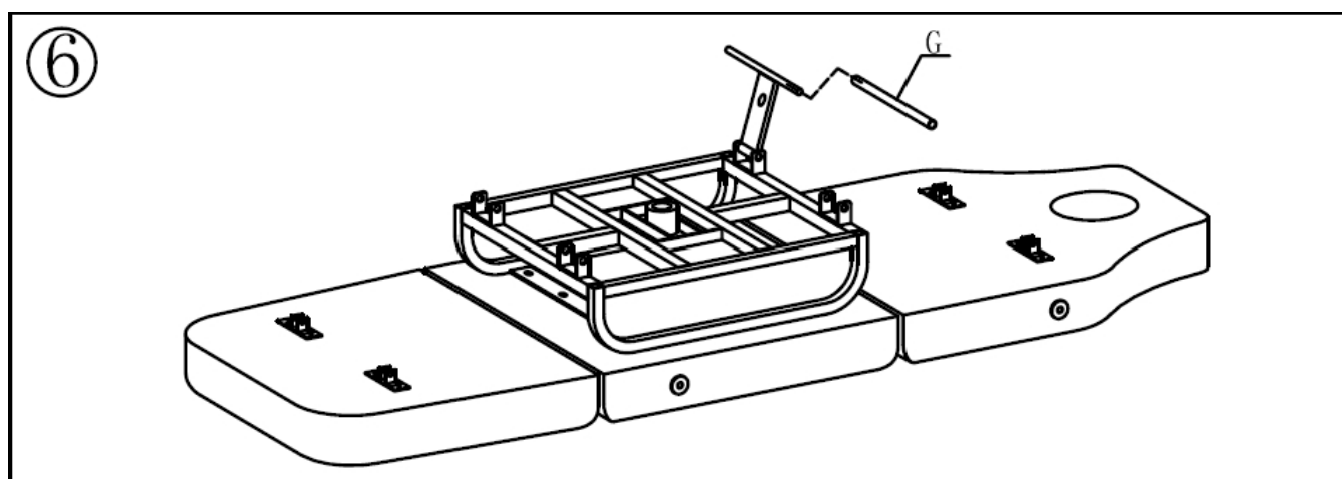


- 6.7 Utilizzare l'elemento G per unire i due elementi F.

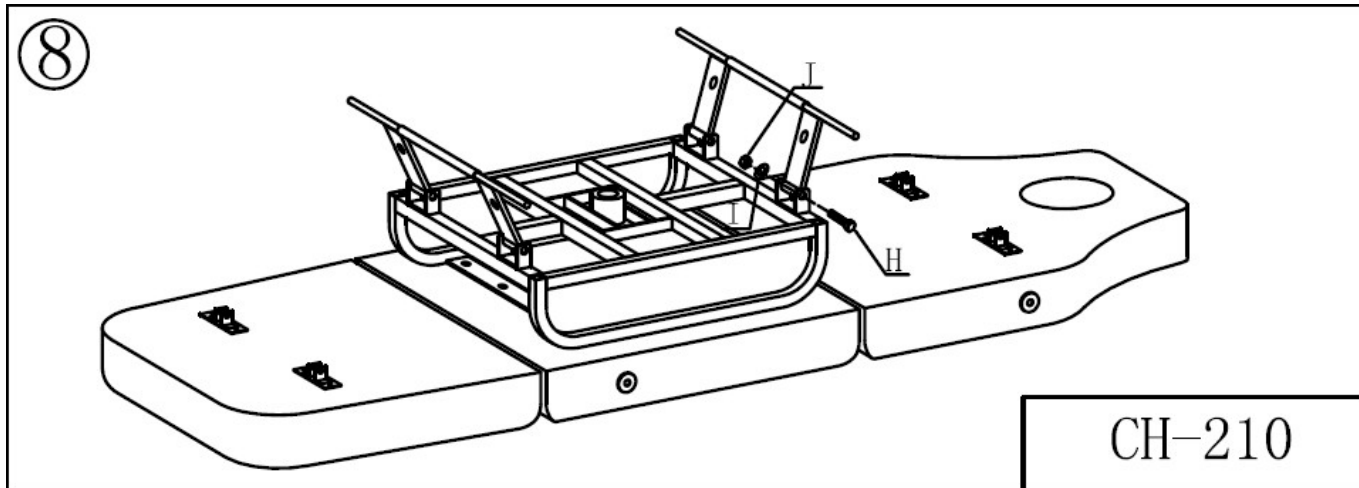

8. Avvitare con J e H e ripetere sull'altro lato.

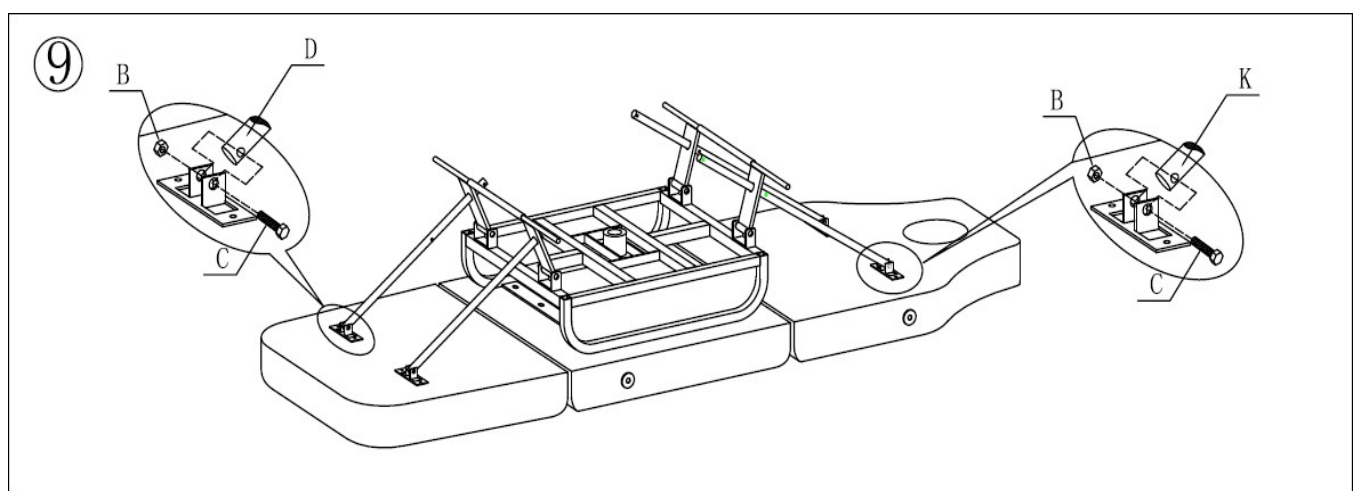


9. Inserire gli elementi D e K e avvitarli con B e C.

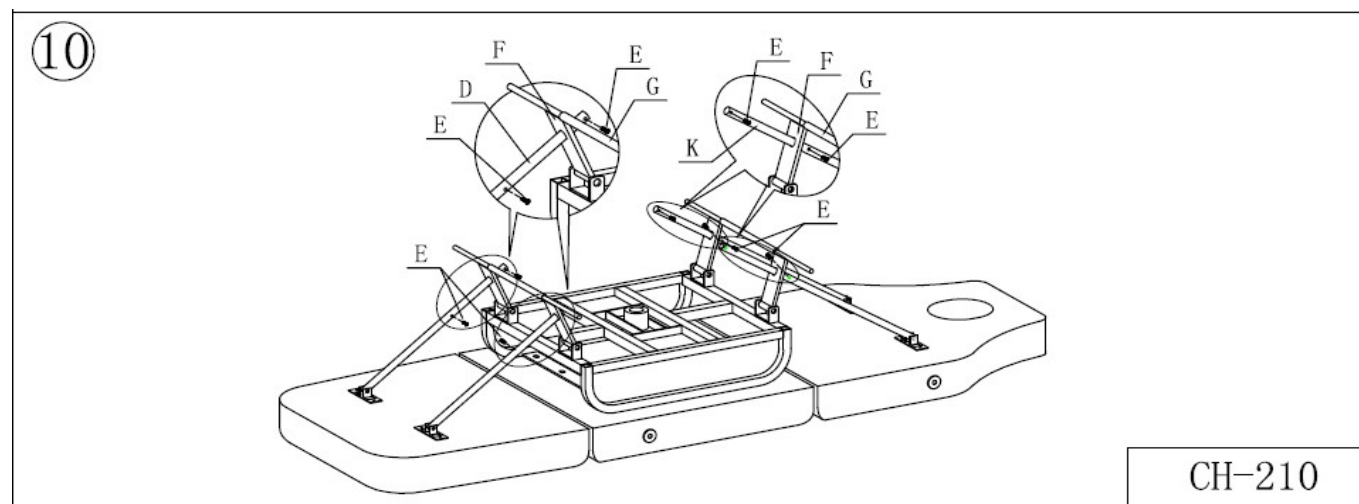


10. Fissare le gambe di supporto con E.


11

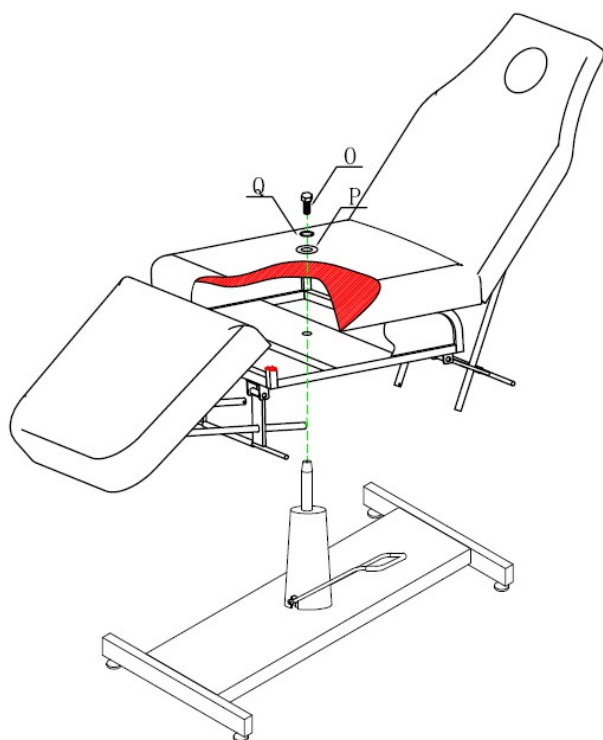

12

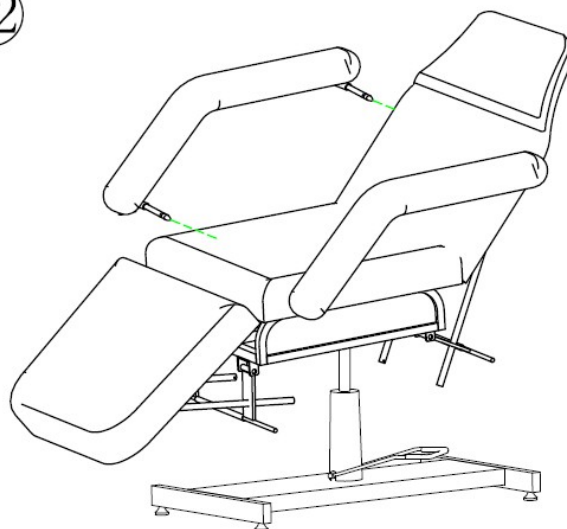

13

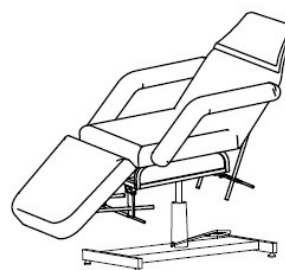

CH-210

11. Inserire il sedile sull'asta dell'attuatore e serrarlo con Q, P e O.

12. Inserire i braccioli come indicato nella figura.

Funzioni del sedile:

- Sollevare il sedile: sollevare il sedile premendo la leva.
- Abbassare il sedile: spingere verso il basso finché il sedile non si abbassa completamente.
- Blocco del sedile: sollevare la leva il più possibile.

Attenzione!

Non sedersi bruscamente e non scaricare il peso sul sedile. Non spostare o trasferire il sedile con persone o carichi sopra. Non salire sulla sedia con i piedi o le ginocchia, non dondolarsi, non sedersi sui braccioli e non sedersi su più di una persona.

Pulizia e disinfezione dell'unità:

Scollegare l'unità prima di pulirla.

Per mantenere la superficie della sedia in buone condizioni, è necessario pulirla regolarmente. Ricordarsi di pulire e disinfettare la sedia dopo ogni utilizzo. Si consiglia di effettuare una disinfezione accurata una volta al mese.

I Superfici in metallo e plastica

Per pulire le superfici e i comandi in metallo e plastica, passare un panno umido. Una piccola spazzola è utile per pulire le aree o gli angoli più difficili da raggiungere. Non usare troppo liquido per pulire l'apparecchio. Disinfettare poi l'apparecchio con un liquido adatto.

II Superfici in acciaio inox

La pulizia con una soluzione detergente delicata è la soluzione migliore. L'ammoniaca e la maggior parte dei solventi possono essere utilizzati per rimuovere le macchie più resistenti. Evitare le soluzioni a base di cloro.

III Superfici metalliche verniciate o cromate

- Non utilizzare getti d'acqua (docce, cannoni ad alta pressione) per la pulizia.
- Non pulire in presenza di temperature e umidità elevate e non esporre l'unità a condizioni che potrebbero causare la contaminazione da parte di liquidi.
- Non utilizzare solventi o acidi per la pulizia.

IV Superficie della sedia

- Strofinare uniformemente la superficie del sedile con un detergente speciale per pelle e poi passare un panno morbido e pulito.

Manutenzione:

1. Pulizia quotidiana

Rimozione della polvere con un panno morbido e asciutto.

2. Rimozione dello sporco ostinato

Come sapete, è difficile rimuovere lo sporco ostinato con un normale panno asciutto. In questo caso, utilizzare prima un panno morbido con un detergente neutro diluito e poi passare un panno asciutto.

3. È vietato l'uso di benzene, diluenti, benzina o altri solventi.

Questi agenti possono danneggiare la pelle o corrodere il prodotto.

4. Condizioni di stoccaggio e di funzionamento

Non esporre il prodotto alla luce solare intensa o all'umidità. In caso contrario, il prodotto potrebbe subire danni.

MISURE DI SICUREZZA

L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale da utilizzare nei centri estetici. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.

L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.

Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato da ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:

- (a) un liquido è entrato nell'apparecchio, (b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani suoni,
c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.

Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.

Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.

Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.

Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.

Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).

L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.

L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.

Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente, in conformità con la Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli apparecchi elettrici usati devono essere smaltiti in centri di riciclaggio.

elettriche devono essere raccolti separatamente e poi portati ai punti di raccolta delle

centri di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il trattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, nonché alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. Conservare l'unità in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.

