

ACTIVESHOP®

MODE D'EMPLOI

Fauteuil cosmétique hyd. Sillon 210



Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Poland

www.activeshop.com.pl Rev.

A/05/2025





Scan pour
différentes
langues




Dimensions :





Assemblage :

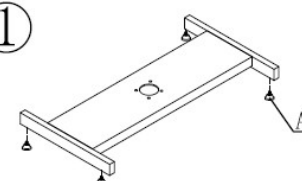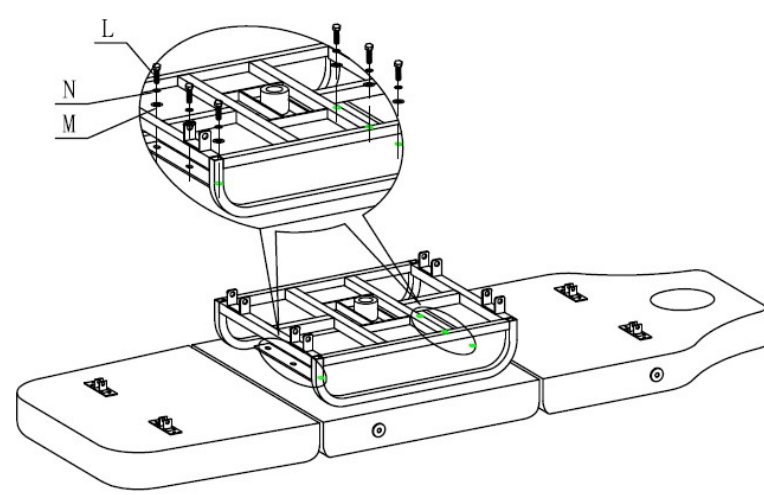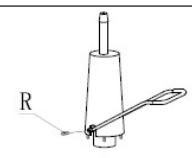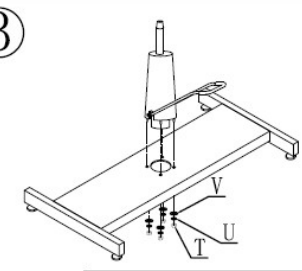A  4pcs	B  M6 4pcs	C  M6X35 4pcs	D  2pcs	E  M5X8 8pcs	F  4pcs	G  2pcs	H  M12X80 4pcs
I  φ12 4pcs	J  M12 4pcs	K  2pcs	L  M8X25 6pcs	M  φ8 6pcs	N  φ8 6pcs	O  M10X25 1pcs	P  φ10 1pcs
Q  φ10 1pcs	R  2pcs	S  1pcs	T  M6 4pcs	U  M6 4pcs	V  M6 4pcs	① 	
④ 						② 	
						③ 	
						CH-210	


1. Glissez les coussins dans la base du siège.
2. Monter le levier de réglage de la hauteur sur l'actionneur à l'aide de l'élément R.
3. Monter l'actionneur sur la base du siège, puis le serrer à l'aide des éléments V, U et T.
4. Placez le cadre métallique du siège sur la base du siège et fixez-le à l'aide des éléments L, M et N.

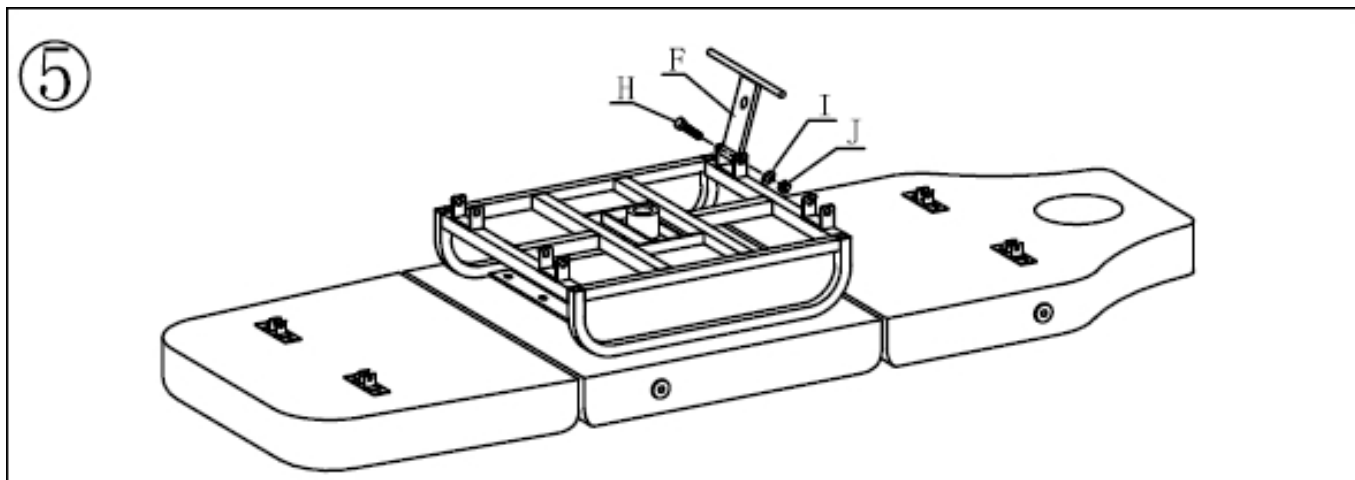


5. Monter l'élément F en le serrant avec les éléments I, J et H.

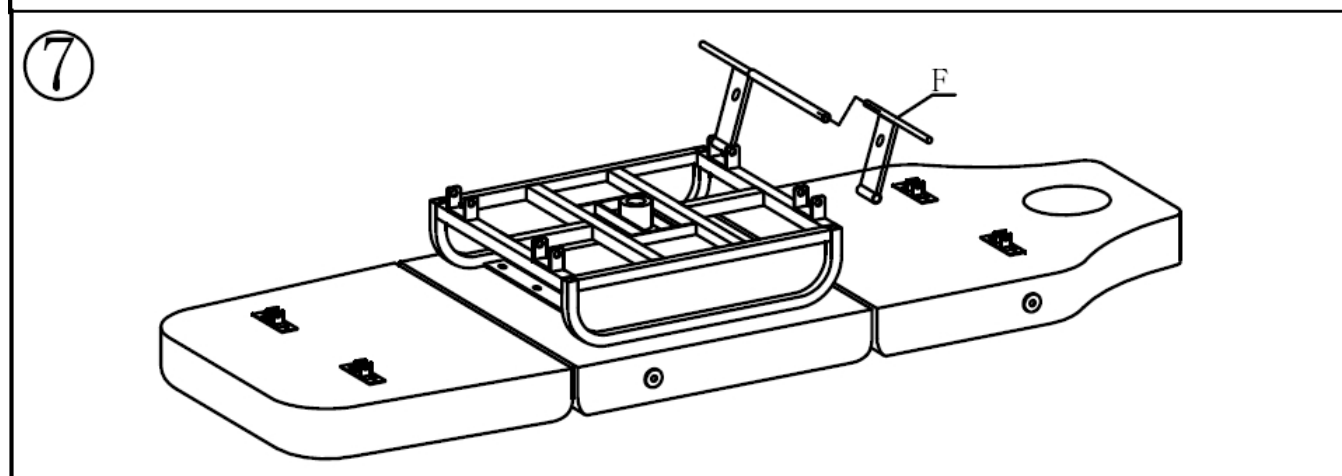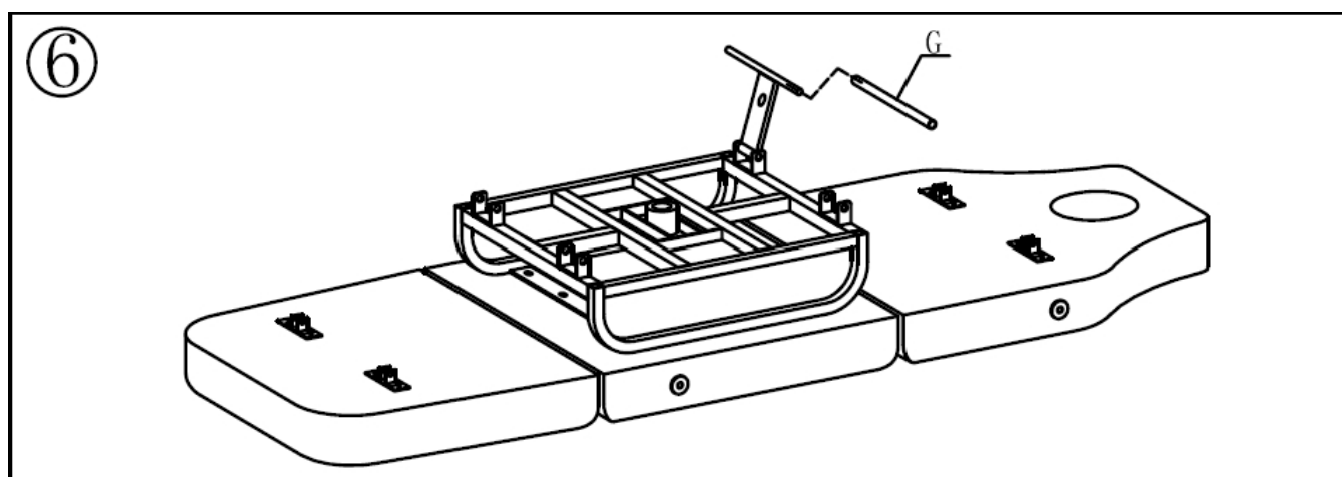


- 6.7 Utiliser l'élément G pour assembler les deux éléments F. Serrer à l'aide de J et H et répéter l'opération de l'autre côté.

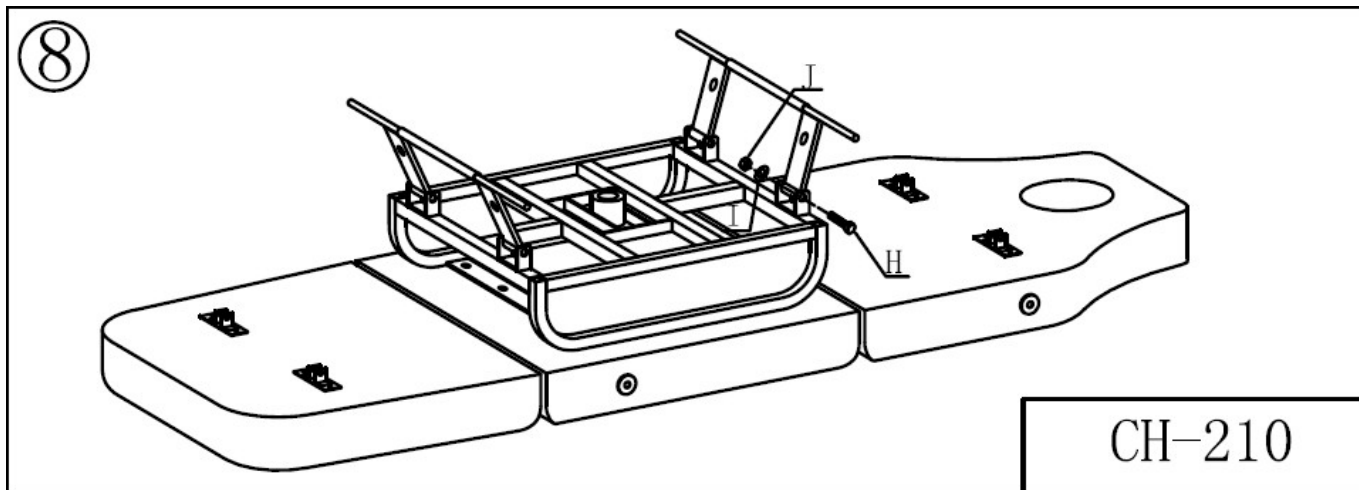

8. Serrez à l'aide de J et H et répétez l'opération de l'autre côté.

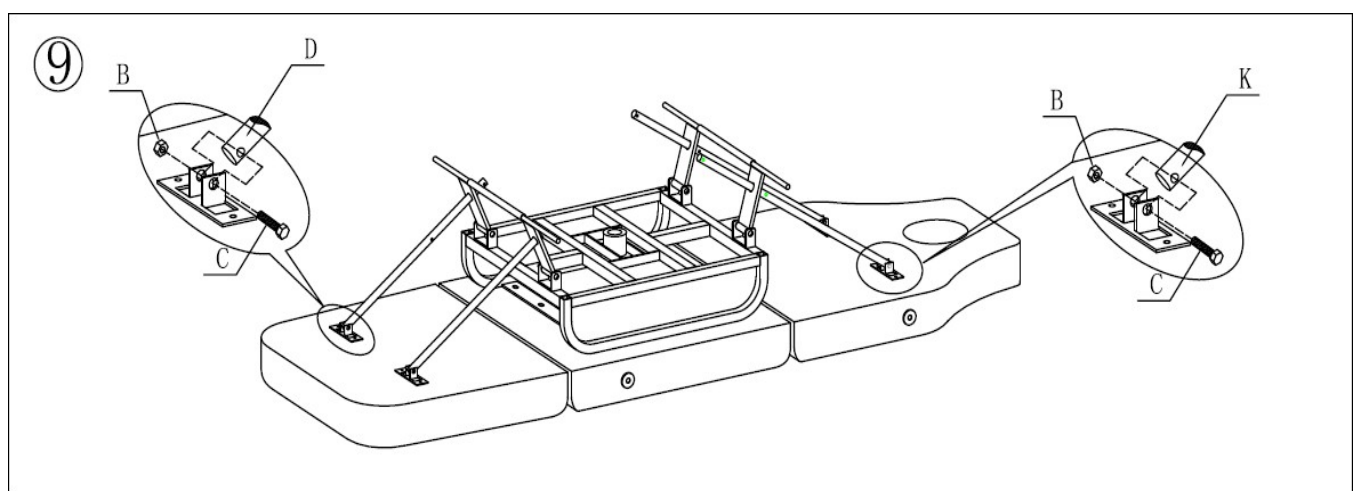


9. Insérez les pièces D et K, et vissez-les à l'aide de B et C.

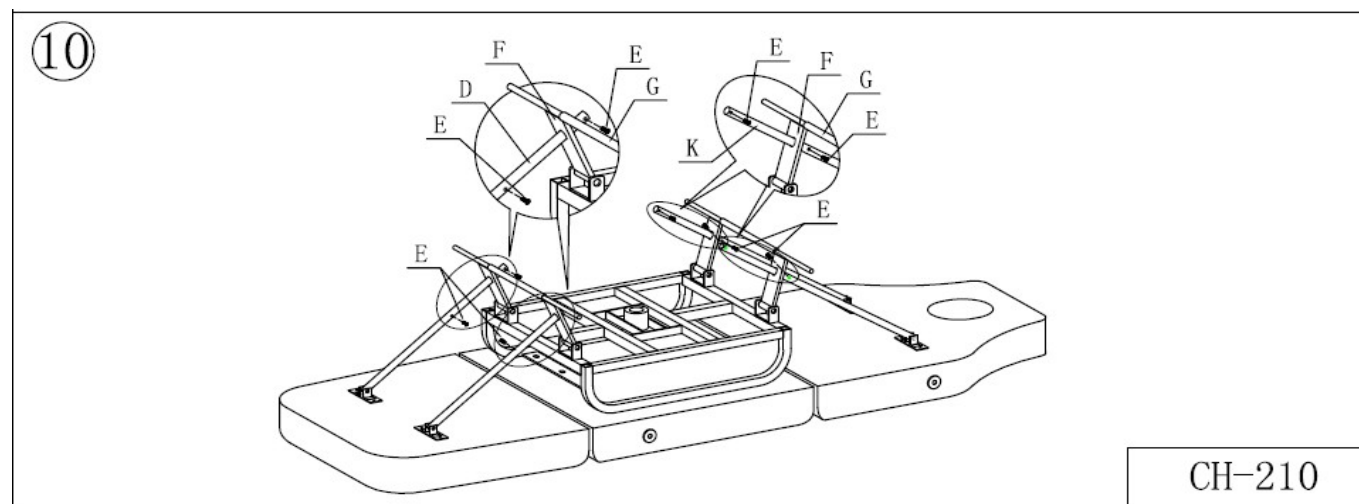


10. Fixer les pieds de support à l'aide de E.


11

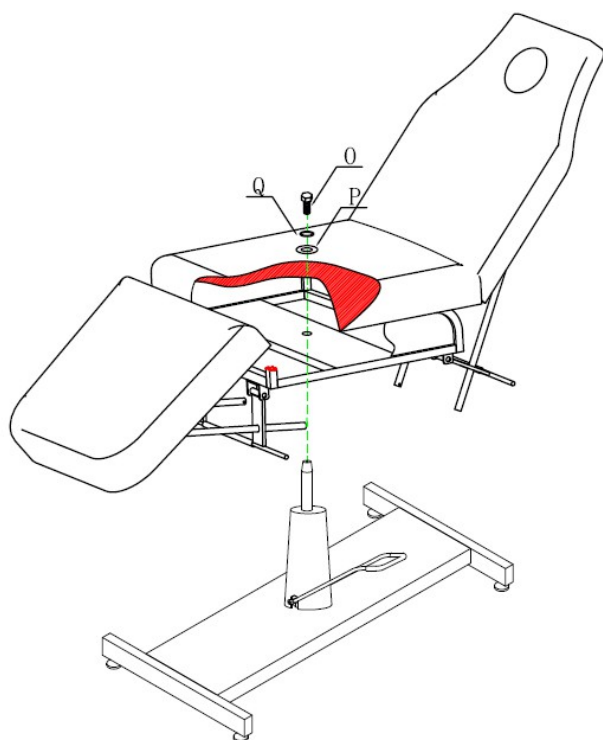

12

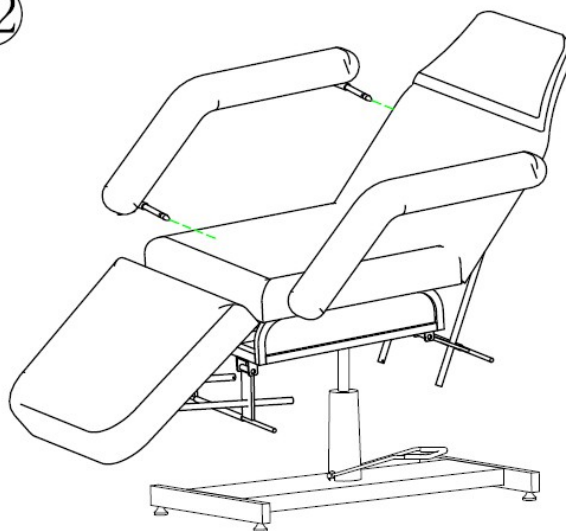

13

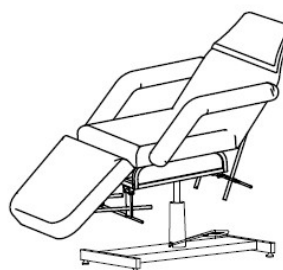

CH-210

11. Monter le siège sur la tige de l'actionneur et le serrer à l'aide de Q, P et O.

12. Glissez les accoudoirs comme indiqué sur l'illustration.

Fonctions du siège :

-Lever le siège : lever le siège en appuyant sur le levier.

-Abaissement du siège : pousser vers le bas jusqu'à ce que le siège s'abaisse complètement.

-Verrouillage du siège : soulever le levier le plus haut possible.

Attention !

Ne vous asseyez pas brusquement et ne pesez pas sur le siège. Ne pas déplacer ou transférer le siège avec des personnes ou des charges dessus. Ne pas monter sur le siège avec les pieds ou les genoux, se balancer, s'asseoir sur les accoudoirs ou s'asseoir sur plus d'une personne.

Nettoyage et désinfection de l'appareil :

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Pour maintenir la surface de la chaise en bon état, il faut la nettoyer régulièrement. Pensez à nettoyer et à désinfecter le fauteuil après chaque utilisation. Il est recommandé d'effectuer une désinfection complète une fois par mois.

I Surfaces métalliques et plastiques

Pour nettoyer les surfaces et les commandes en métal et en plastique, passez un chiffon humide. Une petite brosse permet de nettoyer les zones difficiles d'accès ou les coins. N'utilisez pas trop de liquide pour nettoyer l'appareil. Désinfectez ensuite l'appareil avec un liquide approprié.

II Surfaces en acier inoxydable

Le nettoyage à l'aide d'une solution détergente douce est le plus efficace. L'ammoniaque et la plupart des solvants peuvent être utilisés pour éliminer les taches tenaces. Évitez les solutions à base de chlore.

III Surfaces métalliques peintes ou chromées

- Ne pas utiliser de jets d'eau (douches, canons à eau à haute pression) pour le nettoyage.
- Ne pas nettoyer à des températures et à des taux d'humidité élevés, et ne pas exposer l'appareil à des conditions susceptibles d'entraîner une contamination par des liquides.
- Ne pas utiliser de solvants ou d'acides pour le nettoyage.

IV Surface du siège

- Essuyez uniformément la surface du siège avec un nettoyant spécial pour le cuir, puis essuyez-la avec un chiffon propre et doux.

Entretien :

- 1. Nettoyage quotidien**
Enlever la poussière avec un chiffon doux et sec.
- 2. Élimination des salissures tenaces**
Comme vous le savez, il est difficile d'éliminer les salissures tenaces avec un chiffon sec normal. Dans ce cas, utilisez d'abord un chiffon doux avec un détergent neutre dilué, puis essuyez avec un chiffon sec.
- 3. L'utilisation de benzène, de diluants, d'essence ou d'autres solvants est interdite.**
Ces agents peuvent endommager la peau ou corroder le produit.
- 4. Conditions de stockage et d'utilisation**
N'exposez pas le produit à une lumière solaire intense ou à l'humidité. Le non-respect de cette consigne peut endommager le produit.

MESURES DE SÉCURITÉ

L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des conséquences indésirables pendant le traitement.

L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez le service agréé d'ACTIVESHOP Ltd. dans les cas suivants : a) un liquide a pénétré dans l'appareil ; b) l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée, etc :

(a) du liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, dégage de la fumée ou émet des sons bizarres,

c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.

Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.

Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.

N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le cordon de la prise de courant et contactez le distributeur ou le fabricant.

Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.

Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).

L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient fournies concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.

Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL



Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux principes de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement, conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être mis au rebut dans des centres de recyclage.

Les déchets d'équipements électroniques et électriques doivent être collectés séparément et acheminés vers des points de collecte pour les déchets d'équipements électroniques et électriques.

les installations de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques. Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de retraitement. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C uniquement dans son emballage d'origine. Stocker l'appareil dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.

