

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Fotoliu cosmetic hid. Sillon 210



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polonia

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2025





Scanare
pentru
diferite
limbi




Dimensiuni:





Asamblare:

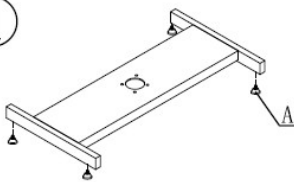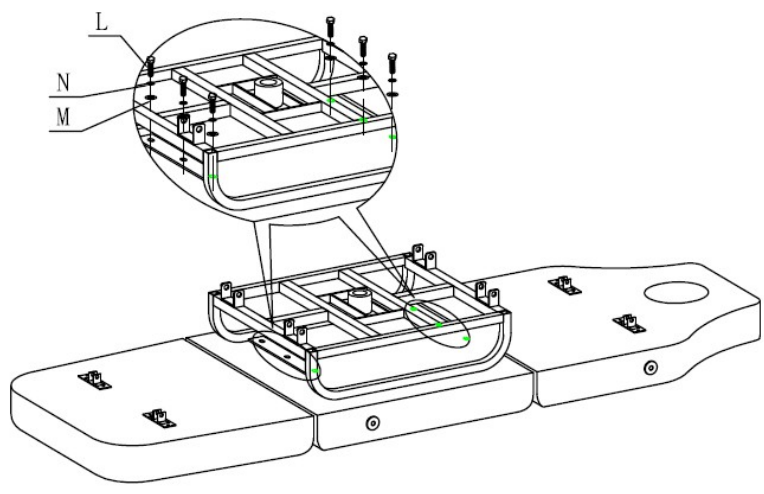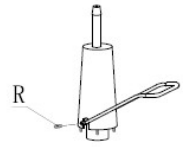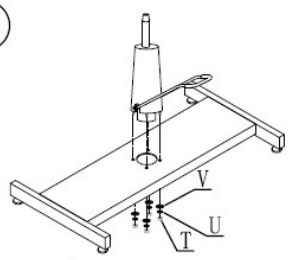A  4pcs	B  M6 4pcs	C  M6X35 4pcs	D  2pcs	E  M5X8 8pcs	F  4pcs	G  2pcs	H  M12X80 4pcs
I  φ12 4pcs	J  M12 4pcs	K  2pcs	L  M8X25 6pcs	M  φ8 6pcs	N  φ8 6pcs	O  M10X25 1pcs	P  φ10 1pcs
Q  φ10 1pcs	R  2pcs	S  1pcs	T  M6 4pcs	U  M6 4pcs	V  M6 4pcs	① 	
④ 						② 	
						③ 	
						CH-210	


1. Introduceți tampoanele în baza scaunului.
2. Montați maneta de reglare a înălțimii pe actuator folosind elementul R.
3. Montați actuatorul pe baza scaunului, apoi strângeți folosind elementele V, U și T.
4. Așezați cadrul metalic al scaunului pe baza scaunului și fixați-l folosind L, M și N.

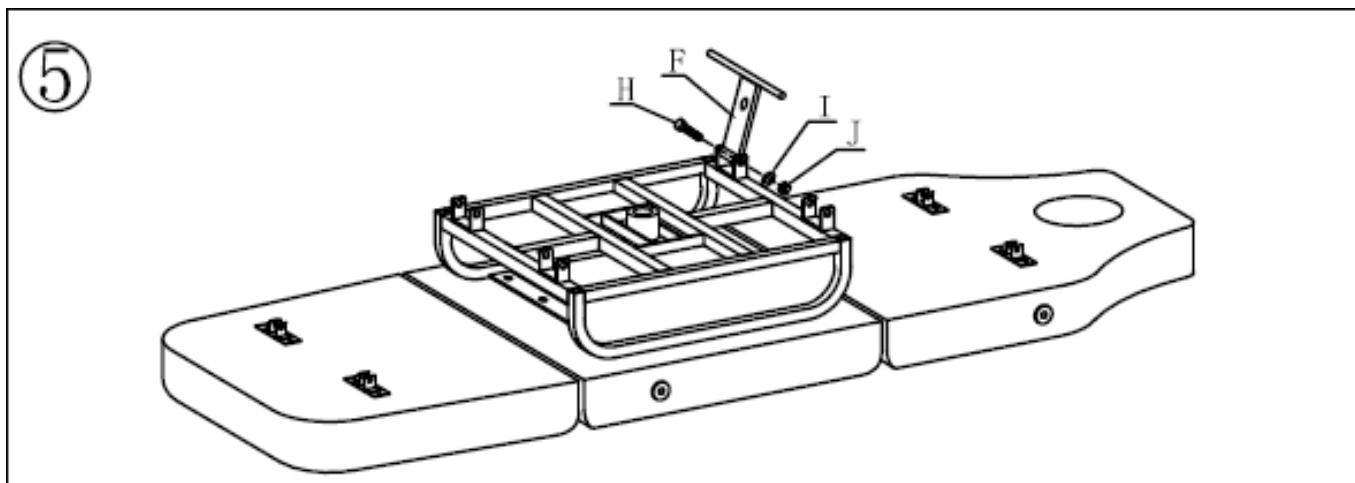


5. 6.6. Montați elementul F prin strângerea acestuia cu elementele I, J și H.

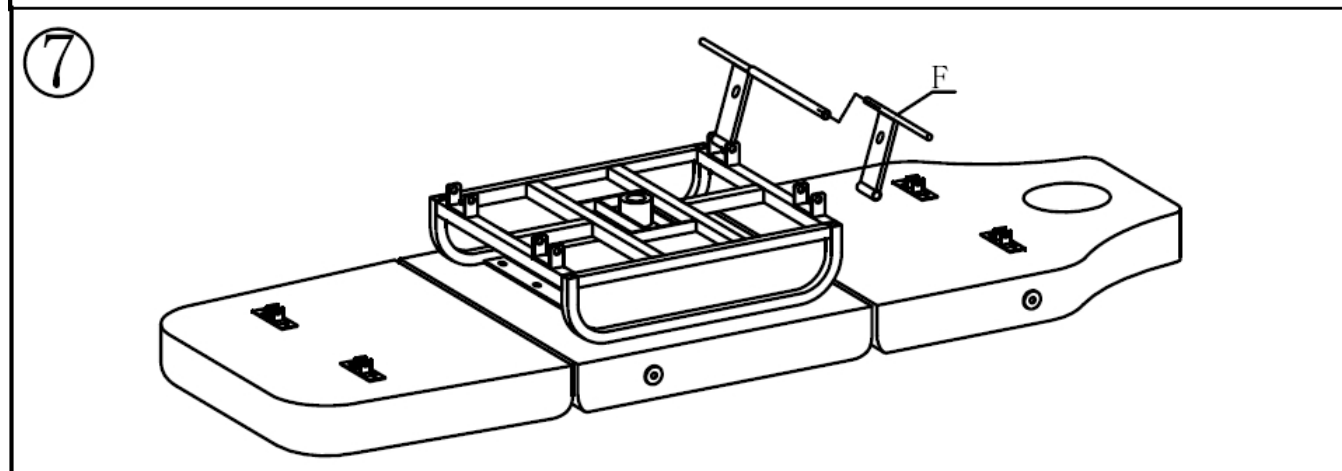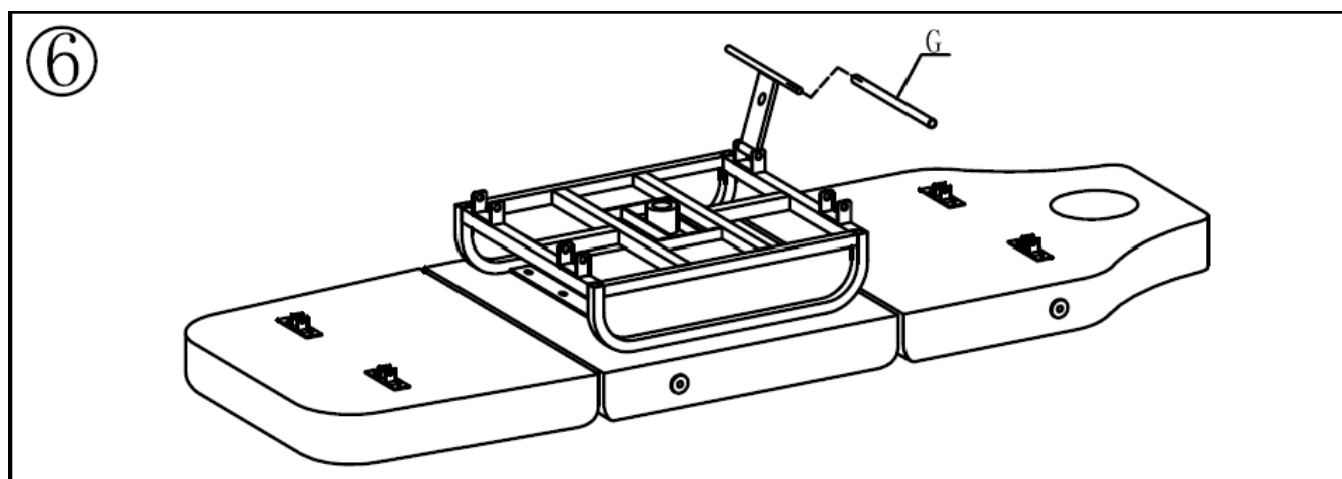


- 6.7 Utilizați elementul G pentru a îmbina cele două elemente F.

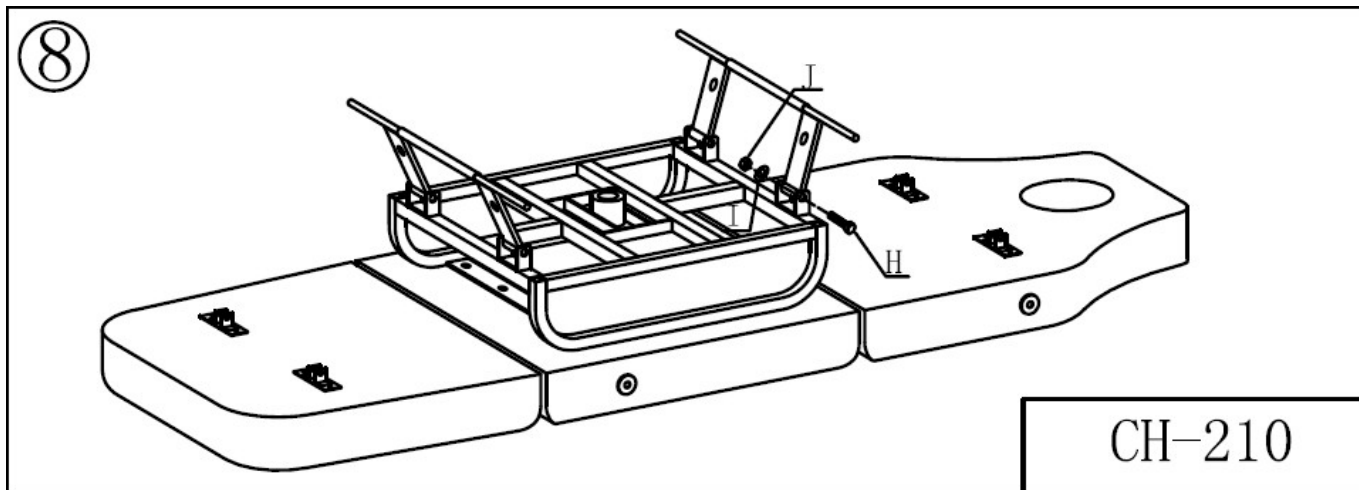


8. Strângeți folosind J și H și repetați pe cealaltă parte.

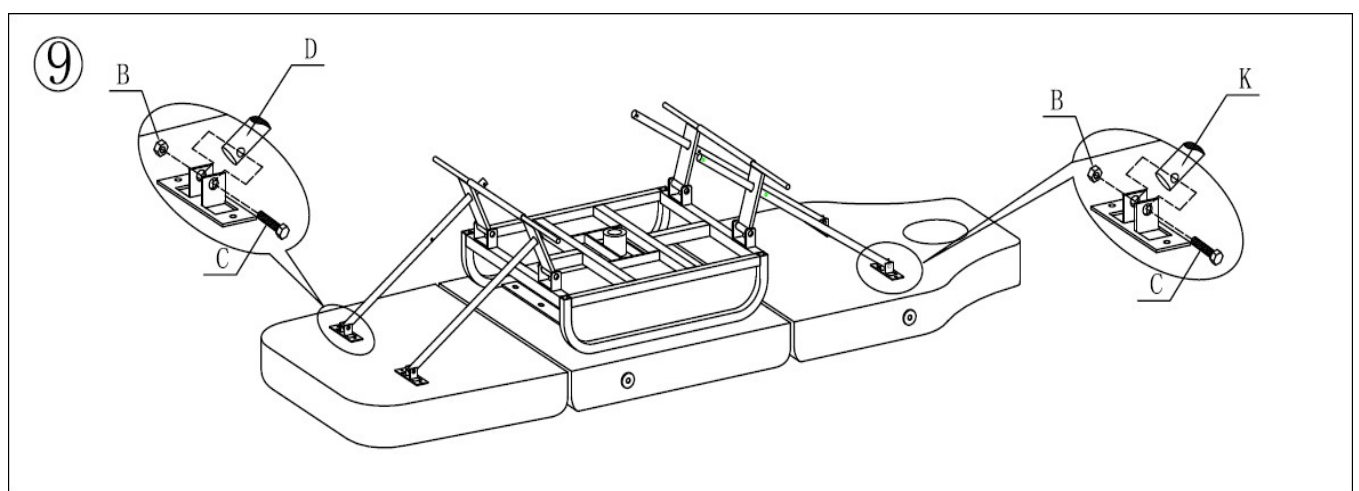

9. Introduceți elementele D și K și înșurubați-le folosind B și C.

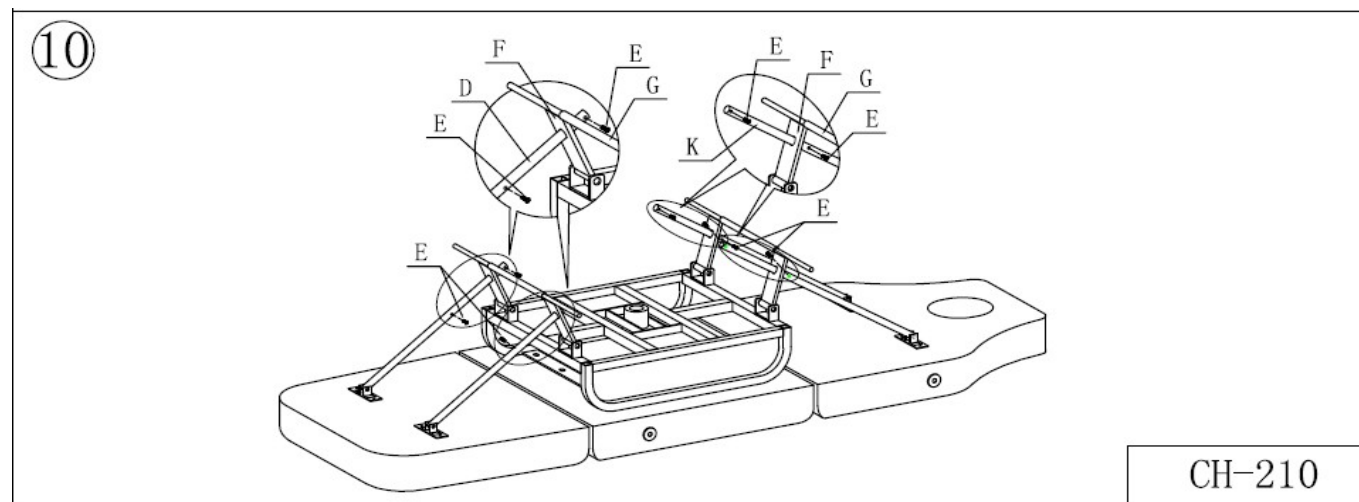

10. Fixați picioarele de susținere folosind E.

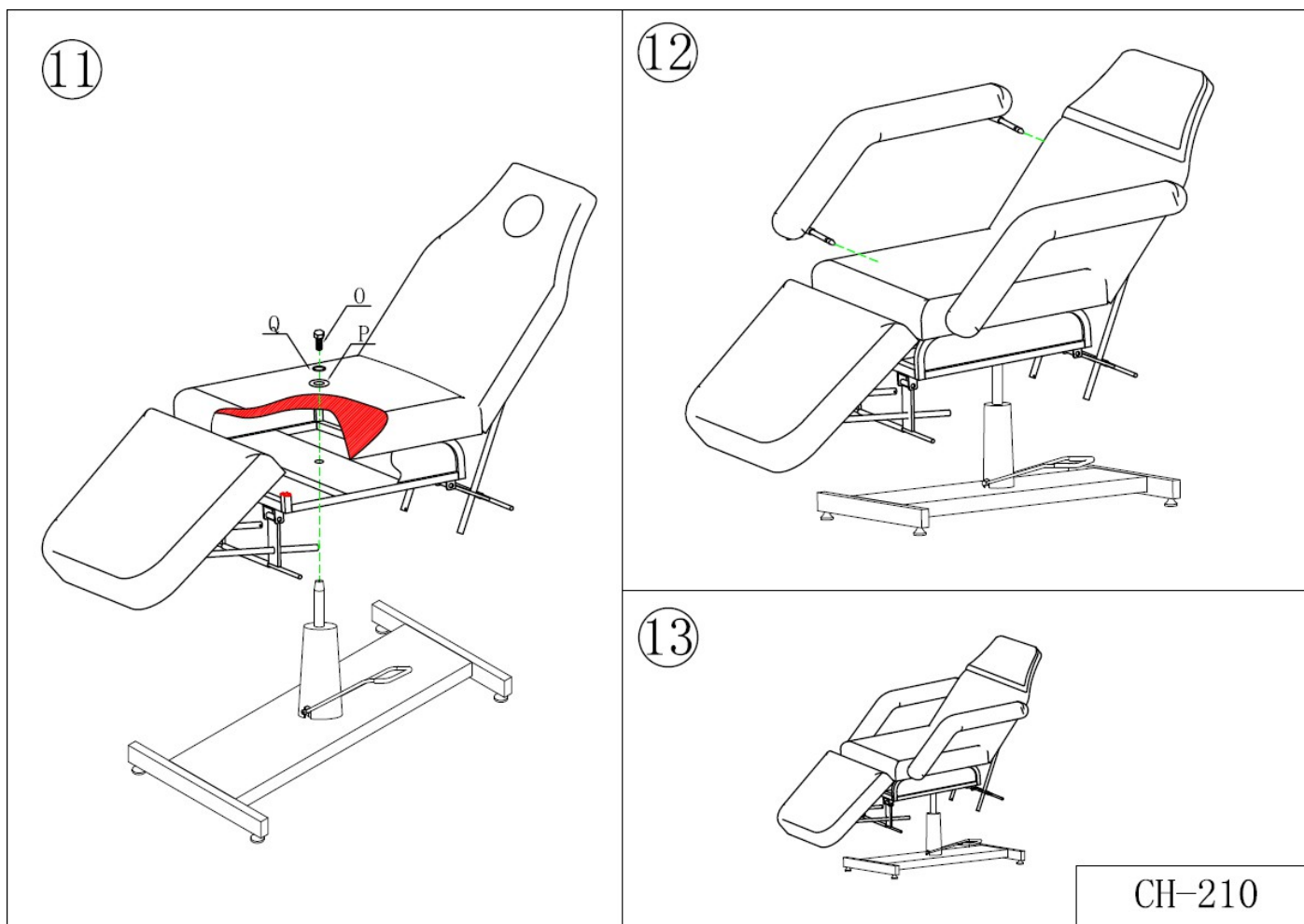

11. Montați scaunul pe tija de acționare, apoi strângeți-l folosind Q, P și O.

12. Introduceți cotierele, așa cum se arată în ilustrație.

Funcțiile scaunului:

- Ridicarea scaunului: ridicați scaunul apăsând pe pârghie
- coborârea scaunului: apăsați în jos până când scaunul coboară complet
- Blocarea pivotantă a scaunului: ridicați maneta cât mai mult posibil în sus

Atenție!

Nu vă așezați brusc sau nu vă aruncați greutatea pe scaun. Nu mutați sau transferați scaunul cu persoane sau încărcături pe el. Nu stați pe scaun cu picioarele sau genunchii, nu vă balansați, nu vă așezați pe cotiere și nu vă așezați pe mai multe persoane.

Curățarea și dezinfectarea unității:

Deconectați unitatea înainte de curățare.

Pentru a menține suprafața scaunului în stare bună, aceasta trebuie curățată în mod regulat. Nu uitați să curățați și să dezinfectați scaunul după fiecare utilizare. Este recomandat să efectuați o dezinfecție completă o dată pe lună.

I Suprafețe metalice și din plastic

Pentru a curăța suprafețele și comenzile din metal și plastic, ștergeți-le cu o cârpă umedă. O perie mică va funcționa bine pentru curățarea zonelor greu accesibile sau a colțurilor. Nu utilizați prea mult lichid pentru a curăța aparatul. Apoi dezinfectați aparatul cu un lichid adecvat.

II Suprafețe din oțel inoxidabil

Curățarea cu o soluție ușoară de detergent funcționează cel mai bine. Amoniacul și majoritatea solvenților pot fi utilizați pentru a îndepărta petele dificile. Evitați soluțiile pe bază de clor.

III Suprafețe metalice vopsite sau cromate

- Nu utilizați jeturi de apă (dușuri, tunuri de apă de înaltă presiune) pentru curățare.
- Nu curățați la temperaturi ridicate și umiditate ridicată și nu expuneți unitatea la condiții care pot duce la contaminarea cu lichide.
- Nu utilizați solvenți sau acizi pentru curățare.

IV Suprafața scaunului

- Ștergeți uniform suprafața scaunului cu un detergent special pentru piele și apoi ștergeți-o cu o cârpă curată și moale.

Întreținere:

1. **Curățare zilnică**
Îndepărtarea prafului cu o cârpă moale și uscată.
2. **Îndepărtarea murdăriei încăpățănate**
După cum știți, este dificil să îndepărtați murdăria încăpățănată cu o cârpă uscată normală. În acest caz, utilizați mai întâi o cârpă moale cu detergent neutru diluat și apoi ștergeți cu o cârpă uscată.
3. **Este interzisă utilizarea benzenului, diluanților, benzinei sau a altor solvenți.**
Acești agenți pot deteriora pielea sau coroda produsul.
4. **Condiții de depozitare și funcționare**
Nu expuneți produsul la lumina puternică a soarelui sau la umiditate. Nerespectarea acestei reguli poate cauza deteriorarea produsului.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal calificat în cosmetică evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.

Aparatul nu trebuie dezamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.

Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri

(a) a intrat lichid în aparat; b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate,
c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.

Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați unitatea într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.

Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu unitatea.

Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.

Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.

Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).

Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolele.

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe privind echipamentul, dacă se asigură supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.

Aparatul nu este destinat să fie folosit de copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.

Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeurile menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aparatele electrice și electronice uzate

echipamente electrice trebuie colectate separat și apoi duse la punctele de colectare pentru

centre de colectare a deșeurilor de echipamente electronice și electrice. Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie predate pentru reprelucrare. Prin urmare, acestea ar trebui predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, aparatul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.

