

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Kosmetické křeslo Azzurro Special 152



Dovozce:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610
Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SE SEZNAMTE S NÁVODEM K POUŽITÍ

Tento návod obsahuje podrobné informace o obsluze a údržbě zařízení. Před použitím zařízení si přečtěte obsah přiloženého návodu. Používejte zařízení v souladu s popisem. Tento návod si uschovejte a ujistěte se, že jsou s ním seznámeny všechny osoby, které mohou zařízení používat.

Technické údaje:

Rozměry: 119 x 60 x 53 cm

Hmotnost: 14 kg

Maximální nosnost: 150 kg Nastavení


výšky: 55–75 cm Nastavení sklonu

opěradla dopředu/dozadu: 0–5 cm

Nastavení úhlu sklonu: 10°

Konstrukce:

1. Opěradlo a sedák židle
2. Plynová pružina
3. Podstavec židle
4. Kolečka

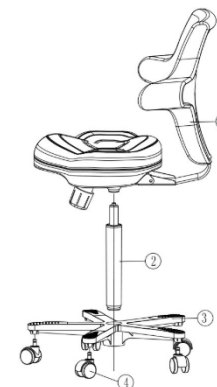

Montáž:

1. U některých modelů nejsou opěradlo a sedák židle smontovány dohromady. V takovém případě zasuňte opěradlo do úchytu v sedáku a přišroubujte 3 přiloženými šrouby.
2. Namontujte kolečka na podnož tak, že je zatlačíte.
3. Zasuňte píst silnější stranou do podnože.
4. Nasadte sedák na píst.

Pozor. U některých modelů je píst chráněn plastovým krytem

(v místě spojení se sedákem). Před nasazením sedáku zkontrolujte, zda byla odstraněna plastová krytka. V opačném případě nebude po montáži možné měnit polohu ve svislém směru.

Obsluha:

Vertikální nastavení:

Chcete-li sedák spustit dolů, stiskněte páčku označenou na obrázku, zatímco sedíte na sedáku nebo jej jinak zatěžujete.

Chcete-li sedák zvednout nahoru, stiskněte páčku označenou na obrázku, aniž byste sedák zatěžovali.




Nastavení sklonu opěradla:

Vysuňte konec páčky ven, aby se odemkla možnost nastavení sklonu. Stiskněte opěradlo a nastavte ho do požadované polohy.

Poté zasuněte konec páčky, aby se poloha opěradla zafixovala.


Upozornění: vzhledem k typu použitého blokovacího mechanismu je třeba pro nastavení opěradla blíže k sedáku nejprve zatlačit opačným směrem (podle šipky na přiloženém

obrázku).

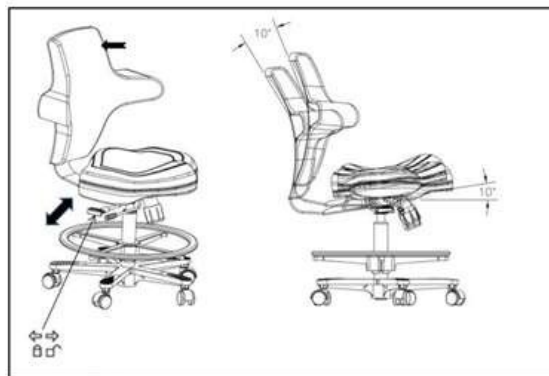

Nastavení sedáku v horizontální rovině

Chcete-li posunout sedák dopředu nebo dozadu, je třeba zvednout označenou na o b rázku a poté posunout sedadlo do požadované polohy. Po uvolnění páčky zůstane sedadlo v zvolené poloze.

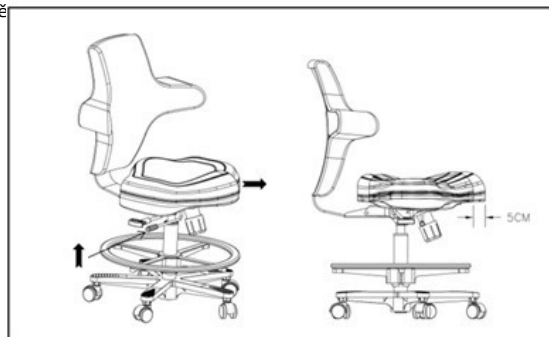

Doporučení:

1. Nepřekračujte doporučené zatížení křesla, překročení doporučené hmotnosti může způsobit trvalé poškození (max. 150 kg).
2. K čištění křesla nepoužívejte přípravky obsahující žíraviny a barviva ani olejové čisticí prostředky.
3. Nevhodné čisticí prostředky mohou způsobit poškození materiálu, korozi nebo jiné jevy.
4. Křeslo je třeba pravidelně čistit, aby se zabránilo trvalému usazování nečistot. V případě znečištění čalounění je nejbezpečnější použít vlažnou mýdlovou vodu.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotách v rozmezí od (-) 20 °C do (+) 50 °C výhradně v originálním obalu.

Zařízení je třeba skladovat v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota je od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy se zařízení nesmí házet ani upouštět, nesmí být vystaveno mechanickým otřesům ani povětrnostním vlivům.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Toto zařízení je profesionální přístroj určený k použití v kosmetických salonech. Používání přístroje výhradně kvalifikovaným kosmetickým personálem umožňuje předejít nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Zařízení nesmí být rozebíráno ani používáno k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Veškeré servisní práce a opravy smí provádět výhradně pracovník autorizovaného servisu (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zařízení nesmí být instalováno ani obsluhováno v blízkosti tekutin, na vlhkých místech nebo mokřýma rukama – tak, aby se do zařízení nedostaly žádné tekutiny.
4. V následujících případech je nutné okamžitě vytáhnout zástrčku ze zásuvky a kontaktovat autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - a) do přístroje vnikla kapalina, b) přístroj vydává podivný zápach, kouř nebo podivné zvuky, c) napájecí kabel byl poškozen, d) přístroj se převrhl nebo došlo k poškození jeho krytu.
5. Na kabely nesmí být položeny žádné předměty. Zařízení neinstalujte na místech, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů je třeba po každém ukončení práce se zařízením vytáhnout napájecí kabel ze zásuvky.
7. Do otvoru v zařízení nesmí být vkládán žádný předmět. V případě, že se do otvoru dostane cizí předmět, je třeba vyjmout kabel ze zásuvky a kontaktovat distributora nebo výrobce. 8. Zařízení nesmí být umístěno na nestabilním vozíku, polici nebo vozidle. V případě pádu může dojít k poškození zařízení.
9. Aby byla zaručena stanovená životnost zařízení, doporučuje se před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutí a vypnutí a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat specifikaci uvedené na typovém štítku. V opačném případě hrozí riziko nesprávné funkce zařízení, jeho poškození nebo dokonce spálení.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizovaný servis – tím se vyhnete nebezpečí.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a mentálními schopnostmi a osoby bez zkušeností a znalostí o zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo poučení o bezpečném používání zařízení, aby byly s tím spojené rizika srozumitelné.
3. Zařízení není určeno k hraní pro děti. Nedovolte dětem, aby si s tímto zařízením hrály.
4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o jeho používání.
5. Toto elektrické zařízení není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může představovat riziko poškození zdraví nebo vést ke smrti, proto je třeba zařízení používat a uchovávat mimo dosah dětí.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ



Vyřazená elektrická zařízení, příslušenství a obaly je třeba odevzdat do center pro recyklaci surovin v souladu s pravidly ochrany životního prostředí. Elektrická zařízení se nesmí vyhazovat do kontejnerů na domácí odpad. Je třeba postupovat v souladu s pravidly týkajícími se likvidace tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí

v souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je třeba použítá elektrická zařízení sbírat odděleně a následně je odevzdávat do sběrných míst pro odpadní elektronická a elektrická zařízení. Na konci životnosti obsahují i stará zařízení plnohodnotné součásti vhodné k recyklaci, proto je třeba je předat k opětovnému zpracování. Proto je třeba je předat do příslušných sběrných míst, stejně tak je lze předat také společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.