

ACTIVESHOP®

Kasutusjuhend

UV-C Germix ühekohaline sterilisaator HQ
YM9001A



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, hoone
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2026



Germix-sterilisaator on ohutu viis turvaliseks ja tõhusaks desinfitseerimiseks ilma kemikaalide lahuseid ega kõrget temperatuuri. Seadme töö põhineb UV-kiirguse bakteritsiidsel toimel – ultravioletvalgusel lainepikkusega 100–280 nm, eriti 254 nm ehk UV-C, mis langeb otse pinnale, hävitab tõhusalt mikroorganismide elusvormid. See võimaldab tõhusat kuivdesinfektsiooni, mille käigus seadmed ei ole mehaanilise kahjustuse või kulumise ohus. Puhastab suurepäraselt selliste tööriistade pindu nagu käärid, kammid, harjad, küüneviilid, pintsetid või masinate terad.

Tehnilised andmed	
Võimsus	220 W
Pinge	220–240 V 50 Hz
Steriliseerimisaeg	30–45 min

Kasutamine

1. UV-sterilisaatorit kasutatakse metallist, plastist, puidust ja komposiitmaterjalidest tööriistade (käärid, kammid, pintsetid jne) desinfitseerimiseks.
2. Desinfitseerimine toimub UV-kiirguse abil, mistõttu seadmed ei ole mehaaniliste kahjustuste ohus. UV-steriliseerimine seisneb materjali ultraviolettkiirgusega valgustamises.
3. See kiirgus muudab nukleiinhapete struktuuri, mistõttu mõjub see kõige tugevamalt mikroorganismide vegetatiivsetele vormidele.
4. Seade sobib ideaalselt ilusalongidesse, spaadesse, esteetilisse meditsiini ja juuksurisalongidesse.

Kasutamine

1. Asetage seade stabiilsele alusele, seejärel asetage sinna instrumendid ja sulgege UV-sterilisaator. Sterilisaatori sahtlisse paigutatavad tööriistad peavad olema puhtad, kuivad ja eelnevalt pestud. Samuti ei tohi need üksteisega kokku puutuda.
2. Ühendage sterilisaator vooluvõrguga. Lülitage seade sisse sisse/välja nupuga.
3. Steriliseerimisaeg on umbes 30–45 minutit.
4. Pärast soovitud aja möödumist lülitage sterilisaator sisse-välja nupuga välja.
5. Avage sterilisaator ja võtke esemed välja (see ei ole kohustuslik – need võib ka anumasse jätta).
6. Tööriistad on kasutusvalmis.

Oluline

1. Sterilisaatori kaas peab olema alati suletud, kui seade on sisse lülitatud.
2. Seadet ei tohi avada enne steriliseerimisprotsessi lõppu ja LED-tulede kustumist.
3. Seadet ei tohi kokku puutuda veega ega söövitavate kemikaalidega.
4. Keeruka ehitusega osad tuleks avada ja lahti monteerida nii palju kui võimalik, et tööriistade steriliseerimine oleks võimalikult tõhus.


Soovitused

1. Veenduge, et olete seadme paigaldanud tasasele ja stabiilsele pinnale, et vähendada kukkumise ja kahjustuste ohtu.
2. Ärge jätke ühendatud seadet kunagi järelevalveta.
3. Kasutage seadet vastavalt kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbele.
4. Ära kasuta seda seadet kunagi, kui selle juhe või pistik on kahjustatud.
5. Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta korralikult või kui see on kukkunud, kahjustunud või vette kukkunud.

vett.

6. Ärge tõmmake pistikupesa väljatõmbamiseks otse juhtmest.
7. Toode on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides. Ärge jätke seda otseselt ilmastikutingimuste mõjule.
8. Seadet tuleb regulaarselt puhastada, et vältida mustuse kogunemist. Seadet on kõige parem puhastada niiske lapiga.
9. Ärge mähkige toitekaablit seadme ümber.

Mõõtmed

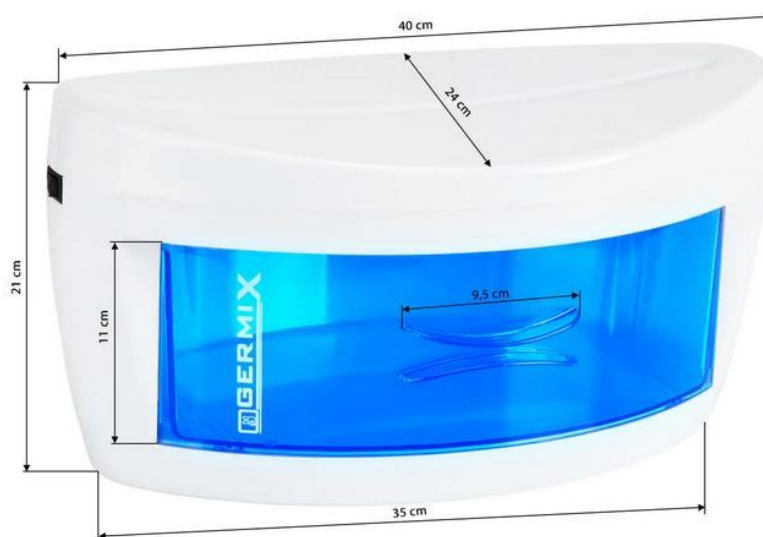

Ohutusnõuded

1. Seade on professionaalne kosmeetikaseadme, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikupersonali poolt aitab vältida soovimatuid tagajärgi protseduuri ajal.
2. Seadet ei tohi lahti monteerida ega proovida seda kasutada muudel eesmärkidel kui käesolevas kasutusjuhendis on näidatud. Kõik hooldus- ja remonditööd peab tegema ainult volitatud teeninduse töötaja (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada vedelike läheduses, niisketes kohtades ega märgade kätega. Tuleb tagada, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tuleb pistik viivitamatult pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o. volitatud teenindusega: a) seadmesse on sattunud vedelik, b) seadmest tuleb imelikku lõhna, suitsu või kummalisi hääli, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Kaablitele ei tohi asetada mingeid esemeid. Seadet ei tohi paigaldada kohtadesse, kus keegi võib toitejuhtmele astuda.
6. Ohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe pärast seadme kasutamist alati pistikupesast välja tõmmata.
7. Seadme sisse ei tohi panna võõrkehi. Kui seadme sisse satub võõrkeha, tuleb toitepistik pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Seadet ei tohi asetada ebastabiilsele alusele, riulile ega sõidukile. Kukkumise korral võib seade kahjustuda.

9. Seadme ettenähtud kasutusaja tagamiseks on soovitatav oodata üks minut enne toitenupu uuesti vajutamist (siselülitamise ja väljalülitamise vahel ja vastupidi).
10. Toiteallikas peab vastama tüübisildil esitatud spetsifikatsioonile. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korrektselt, võib kahjustuda või isegi põlema süttida.

TÄHELEPANU

1. Toitekaabli kahjustumise või muude rikete korral tuleb võtta ühendust volitatud teenindusega – see aitab vältida ohtu.
2. Käesolevat seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed, isikud füüsilise ja vaimse võimekusega inimestele ning ka neile, kes ei ole selle seadme tööpõhimõttega tuttavad, kui neile tagatakse asjakohane järelevalve või juhendamine seadme õige ja ohutu kasutamise kohta ning kui seonduvad ohud on neile arusaadavad.
3. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamise kohta.
4. Seade ei ole mõeldud laste mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
5. Käesolev elektriseade ei ole mänguasi. Seadme väärkasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib põhjustada tervisekahjustusi või surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida laste käeulatuses väljas.

Seadme kõrvaldamine



Keskkonna kaitsmiseks tuleb vastavalt kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete direktiivile 2012/19/EL kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja viia need kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktidesse. Tuleb järgida selle ja neid ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse.

Kasutusaja lõpus sisaldavad need seadmed endiselt täisväärtuslikke ringlussevõetavaid komponente, mistõttu tuleb need suunata ringlussevõtuks vastavatesse kogumispunktidesse või ettevõttesse ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ladustamine ja transport

Seadet tuleks transportida temperatuurivahemikus (–)20 °C kuni (+)40 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritavas ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 90%. Kasutustemperatuur on vahemikus (+)10 °C kuni (+)40 °C. Protsesside ajal ladustamisel ja transportimisel ei tohi seadet visata ega maha kukutada, samuti ei tohi seda mehaanilistele löökidele ega ilmastikutingimustele avada.