

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD K POUŽITÍ

**Elektrické kosmetické křeslo Sillon Luxury 3 motory,
ovládání nožním pedálem
C502 3 motory / 150223**



Dovozce:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026



Vyhledat
different
languages



Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.

Před prvním použitím si prosím přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.

Kosmetické křeslo Sillon Luxury kombinuje moderní vzhled, intuitivní ovládání a širokou funkčnost. Je vybaveno třemi servomotory ovládanými kabelovým ovladačem, které umožňují přesné přizpůsobení individuálním preferencím. Nožní pohon zajišťuje uživateli pohodlí a přesnost při nastavování polohy křesla bez použití rukou.

Technické údaje	
Vstupní napětí	220-230 V
Elektrický výkon	200 W
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Potahový materiál	Syntetická kůže
Ovládání	Kabelový ovladač a nožní ovládání
Teplota v místnosti	(+)10 °C – (+)40 °C
Vlhkost prostředí	30 % – 75

Poznámka


K balení se používá karton a vnější krabice, celkem 10 vrstev papíru, které zajišťují řádnou ochranu produktu. Doporučujeme ponechat si originální obal pro budoucí použití, zejména v případě vrácení zboží v záruční době.

Křeslo lze zvednout pouze za opěrku hlavy a podnožku, nikoli za obě strany područek. Z bezpečnostních důvodů jsou k vytažení křesla z kartonu zapotřebí dvě osoby.

Elektrické kosmetické křeslo musí být používáno v uzavřených, suchých prostorách. Teplota v místnosti by měla být od (+)10 °C do (+)40 °C a relativní vlhkost od 30 % do 75 %. Pokud byl tento kosmetický křeslo vystaveno teplotám pod 0 °C, např. během přepravy, je třeba před spuštěním počkat alespoň 5 hodin, aby zařízení dosáhlo pokojové teploty.

Konstrukce zařízení:

1. Opěrka hlavy
2. Opěradlo
3. Područka
4. Sedák
5. Opěrka nohou
6. Kabelový ovladač
7. Nožní ovládání
8. Zvedací píst
9. Plastový kryt

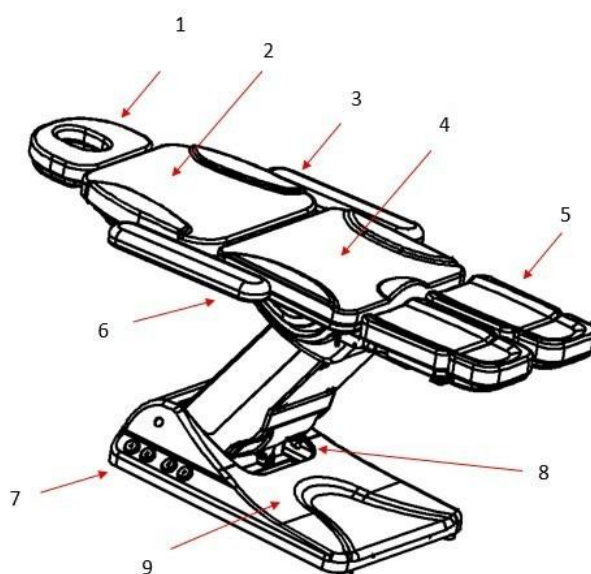


Návod k montáži křesla

- Umístěte křeslo na místo, kde bude používáno
- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky


Popis funkcí dálkového ovládání

1. Nastavení výšky sedáku.

Rozsah nastavení výšky je 60 cm – 82 cm od podlahy

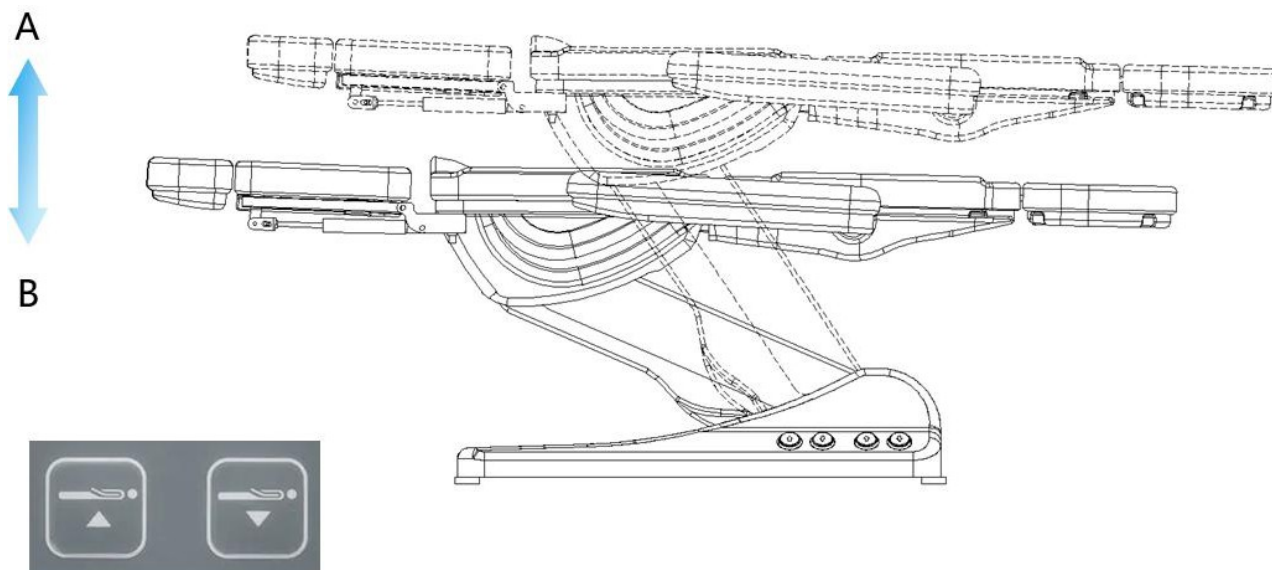


2. Nastavení sklonu opěradla – rozsah 0–80°

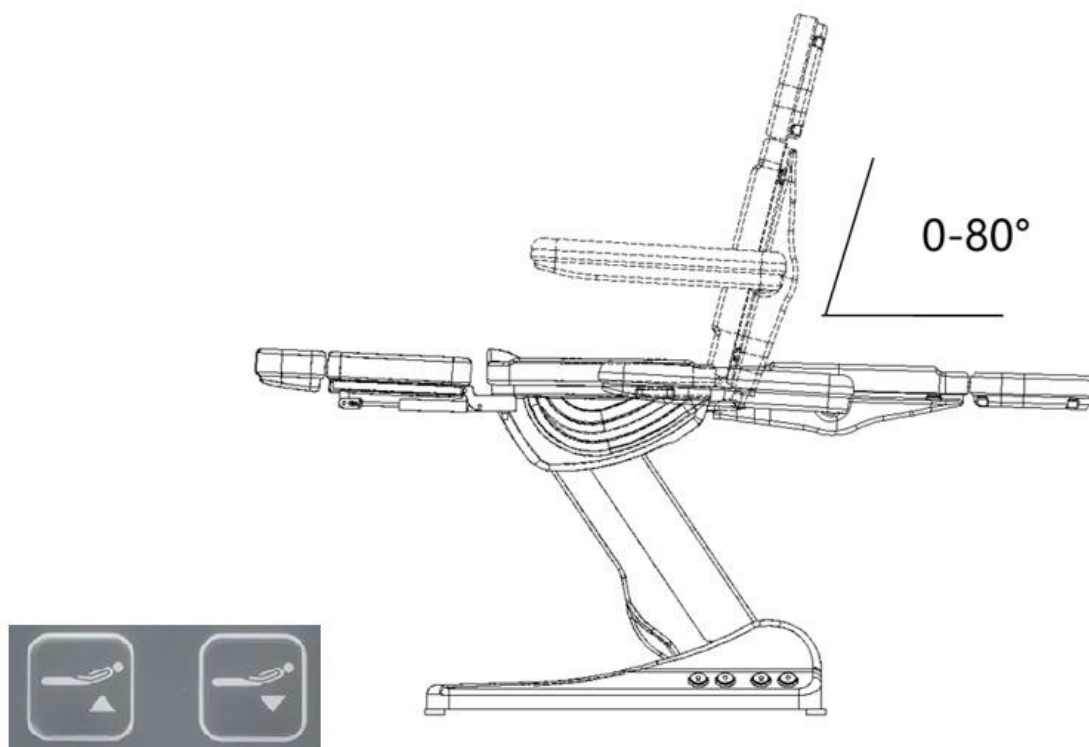

3. Nastavení sklonu nohou – rozsah 0~90°

Stiskněte rukojeť pneumatické tyče, abyste změnil polohu opěrky nohou.

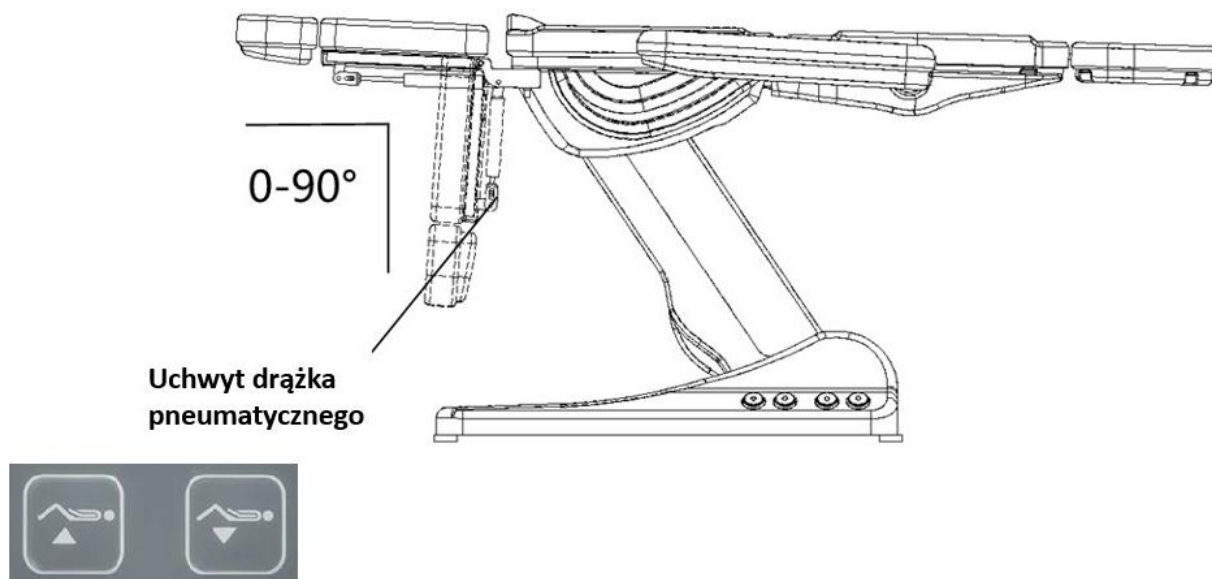


4. Podsvícení spodní části základny




5. **Pozor! Funkce vyhřívání u tohoto modelu není aktivní. Dálkové ovládání je univerzální a lze jej použít u mnoha modelů.**

Funkce teleskopického vysunutí opěrky hlavy a nohou – prodloužení o 12 cm

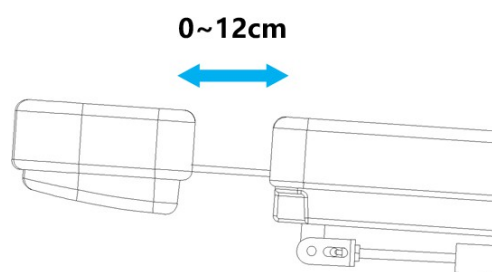

Opěrka hlavy

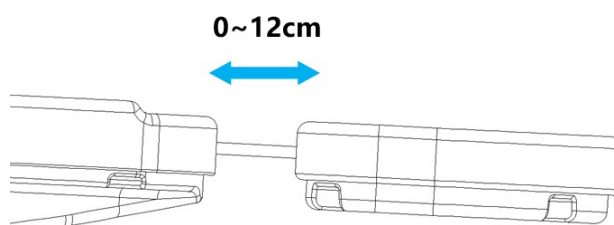

Opěrka nohou


Montáž područek

Křeslo musí být v horizontální poloze. Vsuňte područku do otvoru na boku opěradla a pohybujte s ní doprava a doleva, aby správně zapadla na místo. Totéž proveďte s druhou područkou.

Područka je kolmá k podlaze bez ohledu na úhel sklonu sedadla. Její rozsah pohybu je 180°.

Upozornění

Maximální zatížení je 150 kg. Nesedějte si přímo na rozloženou opěrku, područky a na podnožce.

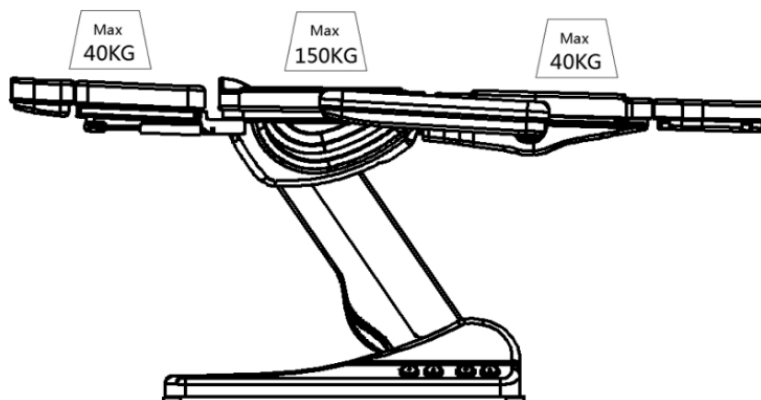

Údržba

Aby povrch kosmetického lůžka zůstal v dobrém stavu, je třeba jej pravidelně čistit a udržovat. Před zahájením čištění nezapomeňte vytáhnout kabel ze zásuvky.

- Kovové a plastové povrchy a ovládací prvky čistěte vlhkým hadříkem a jemným čisticím roztokem. V rozích a jiných těžko přístupných místech použijte malý kartáček. Při čištění doporučujeme nepoužívat příliš velké množství tekutiny
- Nerezové povrchy – čistěte jemným roztokem detergentu. K odstranění obtížných a odolných skvrn můžete použít čpavek a většinu rozpouštědel. Vyhněte se roztokům na bázi chloru.
- Lakované nebo chromované kovové povrchy – k čištění nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny.
- Povrch postele – používejte čistý, měkký hadřík. Můžete použít malé množství speciálního prostředku na čištění a impregnaci syntetických kůží.

Všechny povrchy musí být před připojením k napájení a opětovným použitím suché. Nečistěte při vysoké teplotě a vysoké vlhkosti vzduchu.


Nevystavujte zařízení vlivům, které by mohly vést k znečištění tekutinami.

Doporučení:

1. Ujistěte se, že jste zařízení nainstalovali na rovný a stabilní povrch, abyste omezili riziko pádu a poškození.
2. Nikdy nenechávejte připojené zařízení bez dozoru.
3. Používejte zařízení v souladu s účelem popsáním v návodu.
4. Nikdy nepoužívejte toto zařízení, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku.
5. Nepoužívejte zařízení, pokud nefunguje správně nebo pokud spadlo, bylo poškozeno nebo spadlo do vody.
6. Za kabel přímo netahat, abyste vyjmuli zástrčku ze zásuvky.
7. Produkt je určen výhradně pro použití v interiéru. Nevystavujte jej přímému působení povětrnostních vlivů.

8. Zařízení pravidelně čistěte, aby se v něm nehromadily nečistoty. Zařízení čistěte nejlépe vlhkým hadříkem.
9. Neobalujte napájecí kabel kolem zařízení.

Rozměry zařízení

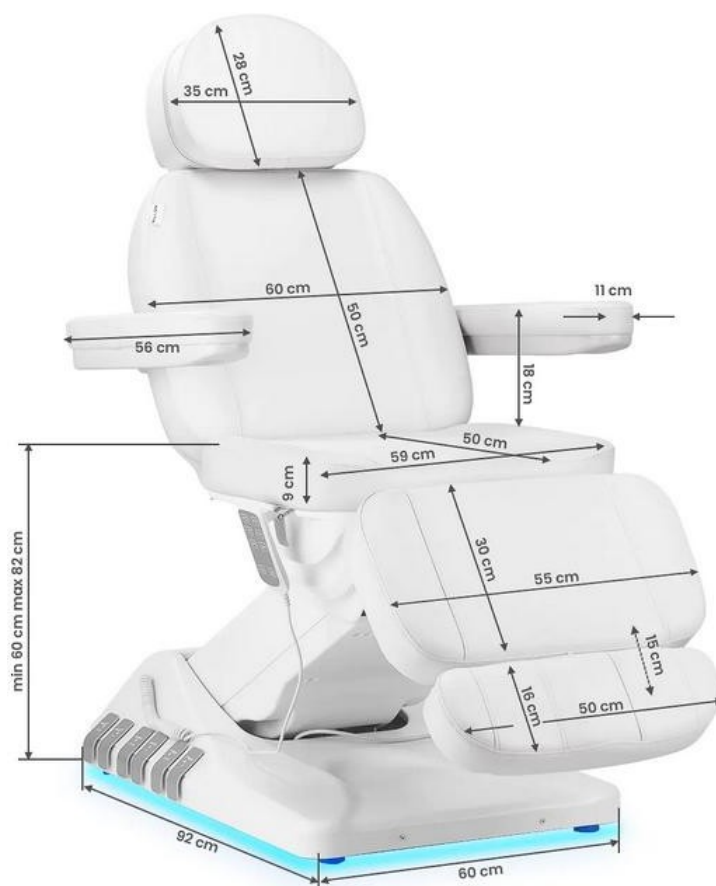

Bezpečnostní opatření:

1. Zařízení je profesionální přístroj určený pro použití v kosmetických salonech. Pouze kvalifikovaný kosmetický personál smí zařízení obsluhovat, aby se předešlo nežádoucím účinkům během procedury.
2. Zařízení nesmí být rozebíráno ani používáno k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu k použití. Veškeré servisní práce a opravy smí provádět pouze pracovník autorizovaného servisu (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zařízení nesmí být instalováno ani obsluhováno v blízkosti tekutin, mokrých míst nebo mokřýma rukama. Dbejte na to, aby se do zařízení nedostaly žádné tekutiny.
4. V následujících případech okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) do zařízení se dostal kapalina, b) zařízení vydává podivný zápach, kouř nebo vydává podivné zvuky, c) napájecí kabel byl poškozen, d) zařízení bylo převráceno nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Na kabely nesmí být pokládány žádné předměty. Zařízení nesmí být instalováno na místech, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky po každém ukončení práce se zařízením.
7. Do zařízení nekládejte žádné cizí předměty. Pokud se do zařízení dostane nežádoucí předmět, odpojte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Zařízení nesmí být umístěno na nestabilním vozíku, polici nebo vozidle. V případě pádu může dojít k poškození zařízení.

může dojít k jeho poškození.

9. Aby byla zaručena stanovená životnost zařízení, doporučuje se před opětovným stisknutím tlačítka napájení počkat jednu minutu (mezi zapnutím a vypnutím a opačně).
10. Napájení musí odpovídat specifikaci uvedené na typovém štítku. V opačném případě hrozí riziko nesprávné funkce zařízení, jeho poškození nebo dokonce spálení.

UPOZORNĚNÍ

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizovaný servis – tím se vyhnete nebezpečí.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku minimálně 8 let, osoby s omezenými fyzickými a mentálními schopnostmi a také osobami, které nejsou seznámeny s fungováním tohoto zařízení, pokud jim bude zajištěn odpovídající dohled nebo poučení o správném a bezpečném používání a pokud budou rozumět souvisejícím rizikům.
3. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o jeho používání.
4. Zařízení není určeno k hraní pro děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
5. Toto elektrické zařízení není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může představovat riziko ztráty zdraví nebo smrti, proto zařízení používejte a skladujte mimo dosah dětí.

Likvidace zařízení



V zájmu ochrany životního prostředí je v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních nutné použité elektrické zařízení sbírat odděleně a odevzdávat do sběrných míst pro odpadní elektronická a elektrická zařízení. Je nutné postupovat v souladu s pravidly pro likvidaci tohoto typu zařízení a nevyhazovat je do kontejnerů na domácí odpad.

Na konci své životnosti obsahují tato zařízení stále plnohodnotné recyklovatelné součásti, proto je třeba je odevzdat k recyklaci do příslušných sběrných míst nebo společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Skladování a přeprava

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotě v rozmezí od (–)20 °C do (+)40 °C výhradně v originálním obalu. Skladujte je v dobře větrané místnosti s relativní vlhkostí nejvýše 90 %. Provozní teplota od (+)10 °C do (+)40 °C. Během procesů skladování a přepravy nesmíte zařízení házet ani upustit, vystavovat mechanickým otřesům ani povětrnostním vlivům.