

ACTIVESHOP[®]

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Fotel kosmetyczny elektryczny Sillon Luxury 3 silniki
sterowanie nożne**

C502 3 motors / 150223



Importer:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026



Scan for
different
languages



Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem i zachować ją na później.

Fotel kosmetyczny Sillon Luxury łączy w sobie nowoczesny wygląd, intuicyjną obsługę oraz szeroką funkcjonalność. Wyposażony w trzy siłowniki sterowane przewodowym pilotem, pozwala na precyzyjne dopasowanie do indywidualnych preferencji. Napęd nożny zapewnia użytkownikowi wygodę i precyzję w dostosowywaniu pozycji fotela bez użycia rąk.

Dane techniczne	
Napięcie wejściowe	220-230 V
Moc elektryczna	200W
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Materiał obicia	Skóra syntetyczna
Sterowanie	Pilot przewodowy i sterowanie nożne
Temperatura pomieszczenia	(+)10°C – (+)40°C
Wilgotność otoczenia	30% - 75%

Uwaga


Do pakowania używany jest karton i kartony zewnętrzne, łącznie 10 warstw papieru, które zapewniają należyłą ochronę produktu. Zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania do wykorzystania w przyszłości, szczególnie w przypadku zwrotów w okresie gwarancyjnym.

Fotel można podnieść tylko z pozycji zagłówek i podnóżka, a nie z obu stron podłokietników. Ze względów bezpieczeństwa potrzebne są dwie osoby do wyciągnięcia fotela z kartonu.

Elektryczny fotel kosmetyczny musi być używany w zamkniętych, suchych pomieszczeniach. Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić od (+)10 °C do (+)40 °C, a wilgotność względna od 30% do 75%. Jeśli niniejszy fotel kosmetyczny był wystawiony na działanie temperatury poniżej 0 °C, np. w czasie transportu, przed uruchomieniem należy odczekać co najmniej 5 godzin by urządzenie zdążyło osiągnąć temperaturę pokojową.

Budowa urządzenia:

1. Zagłówek
2. Oparcie
3. Podłokietnik
4. Siedzisko
5. Podnóżek
6. Pilot przewodowy
7. Sterowanie nożne
8. Siłownik podnoszący
9. Pokrywa plastikowa

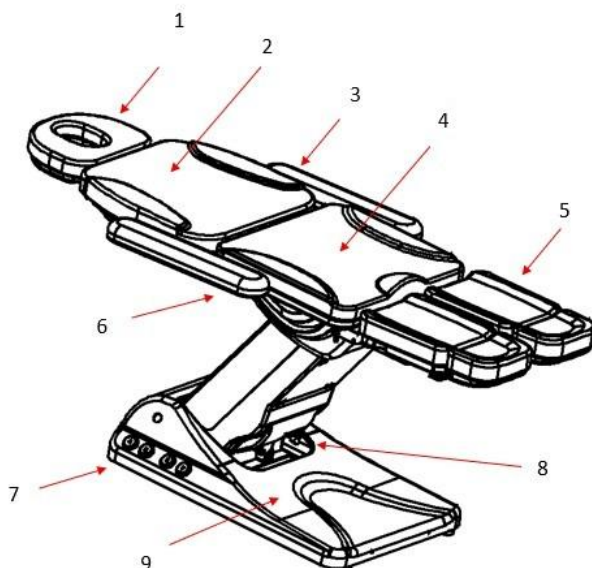


Instrukcja montażu fotela

- Umieść fotel w miejscu, w którym będzie używany
- Podłącz wtyczkę sieciową do gniazdka zasilania


Opis funkcji sterowania pilotem

1. Regulacja wysokości siedziska.

Zakres regulacji wysokości wynosi 60 cm – 82 cm od podłogi

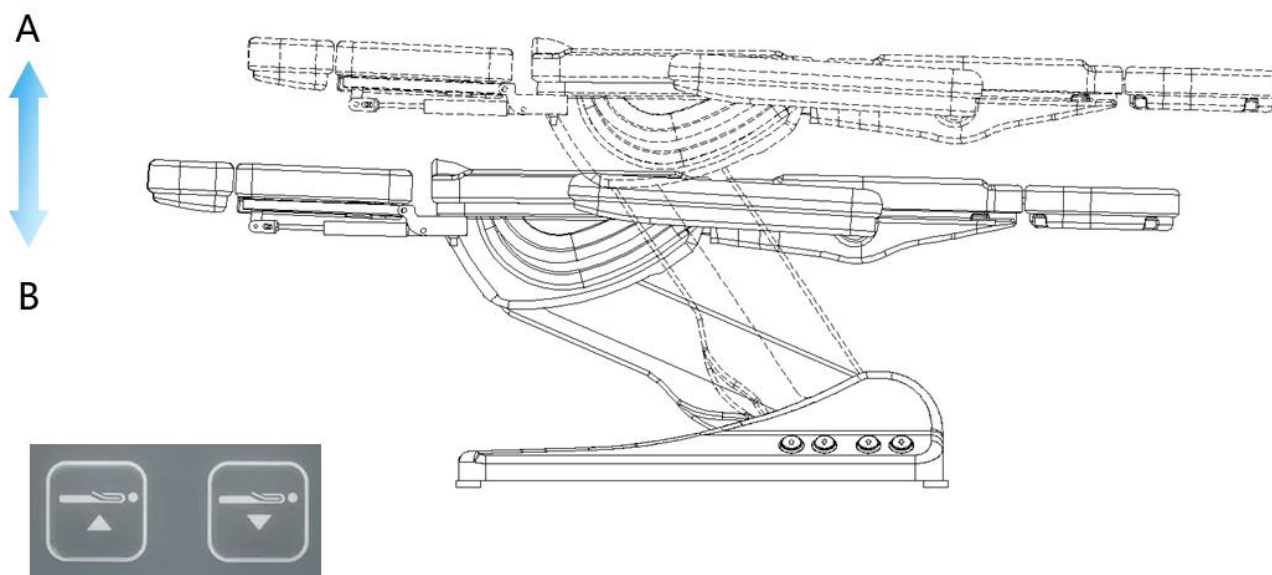


2. Regulacja kąta nachylenia oparcia – zakres 0 - 80°

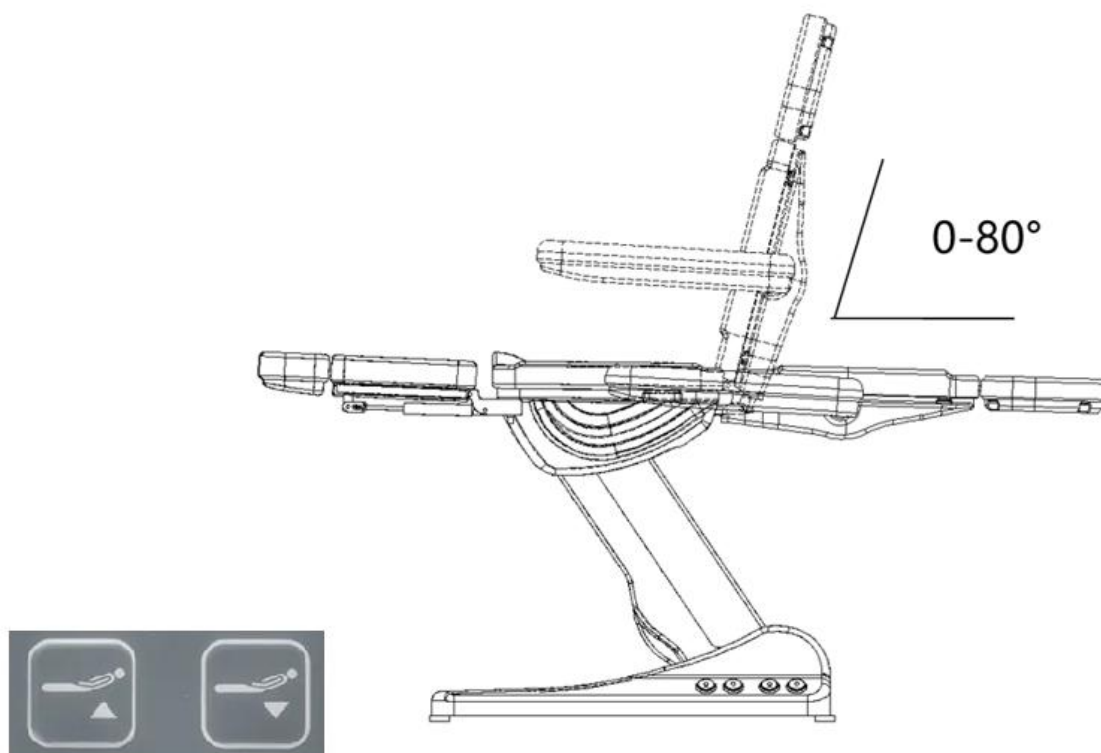

3. Regulacja kąta nachylenia nóg – zakres 0~90°

Naciśnij uchwyt drążka pneumatycznego by zmienić pozycję podnóżka.

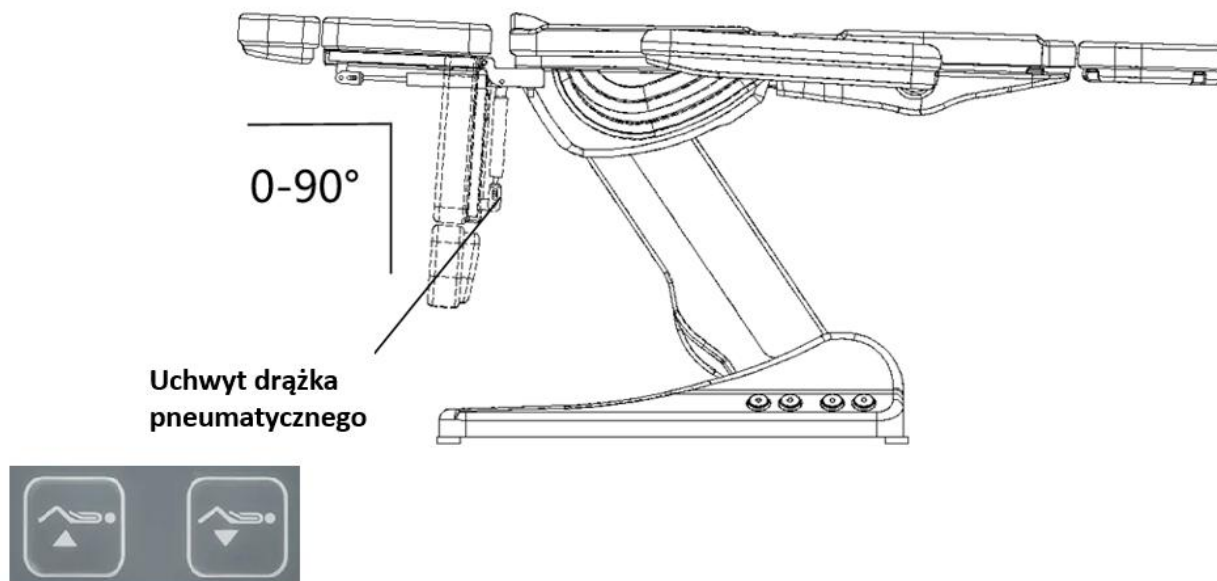


4. Podświetlenie spodu podstawy



5. **Uwaga!** Funkcja podgrzewania w tym modelu jest nieaktywna. Pilot jest uniwersalny, stosowany w wielu modelach.

Funkcja teleskopowego wyciągania zagłówka i podnóżka – przedłużenie o 12cm

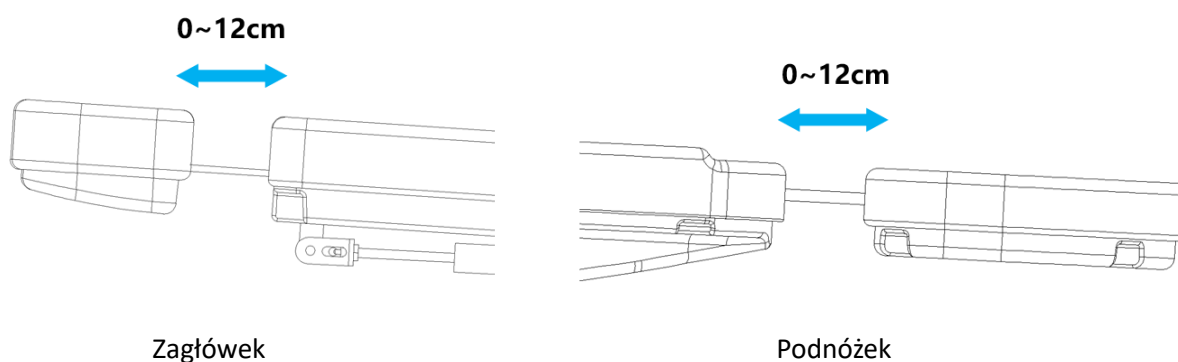

Montaż podłokietników


Fotel musi znajdować się w pozycji poziomej. Wsuń podłokietnik w otwór znajdujący się z boku oparcia, poruszaj nim w prawo i lewo, by odpowiednio wszedł na miejsce. Zrób to samo z drugim podłokietnikiem.

Podłokietnik jest prostopadły do podłoża niezależnie od kąta nachylenia fotela. Jego zakres ruchu wynosi 180°

Uwaga

Obciążenie maksymalne wynosi 150kg.

Prosimy nie siadać bezpośrednio na rozłożonym oparciu, podłokietnikach i podnóżku.

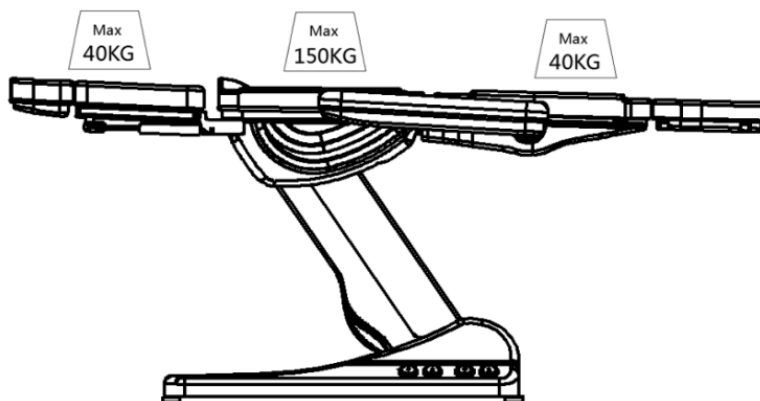

Konserwacja

By utrzymać powierzchnię łóżka kosmetycznego w dobrym stanie, należy ją regularnie czyścić i konserwować.

Przed przystąpieniem do czyszczenia pamiętaj by wyciągnąć przewód z gniazdka zasilania.

- Powierzchnie metalowe i plastikowe, oraz elementy sterujące należy czyścić wilgotną ściereczką i delikatnym roztworem czyszczącym. W narożnikach i innych trudno dostępnych miejscach należy używać małej szczoteczki. Podczas czyszczenia zalecamy nie używać zbyt dużej ilości płynu
- Powierzchnie ze stali nierdzewnej - czyścić łagodnym roztworem detergentu. Do usuwania trudnych i uporczywych plam można użyć amoniaku i większości rozpuszczalników. Unikać roztworów na bazie chloru.
- Powierzchnie metalowe malowane lub chromowane - nie używać rozpuszczalników oraz kwasów do czyszczenia
- Powierzchnia łóżka – używaj czystej, miękkiej ściereczki. Można wykorzystać niewielką ilość specjalnego środka do czyszczenia i impregnacji skór syntetycznych.

Wszystkie powierzchnie muszą być suche przed podłączeniem do zasilania i ponownym użyciem.

Nie czyścić w wysokiej temperaturze i przy wysokiej wilgotności powietrza.


Nie wystawiaj urządzenia na działanie czynników mogących prowadzić do zanieczyszczenia płynami.

Zalecenia:

1. Upewnij się, że zainstalowałeś urządzenie na powierzchni płaskiej i stabilnej, by ograniczyć ryzyko upadku i uszkodzenia.
2. Nigdy nie pozostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.
3. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
4. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę.
5. Nie używaj urządzenia, jeżeli nie działa prawidłowo lub jeżeli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody.
6. Nie ciągnij bezpośrednio za kabel by wyjąć wtyczkę z gniazdka.
7. Produkt do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.

8. Należy okresowo czyścić urządzenie, aby zapobiec akumulacji brudu. Najlepiej czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki.
9. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.

Wymiary urządzenia

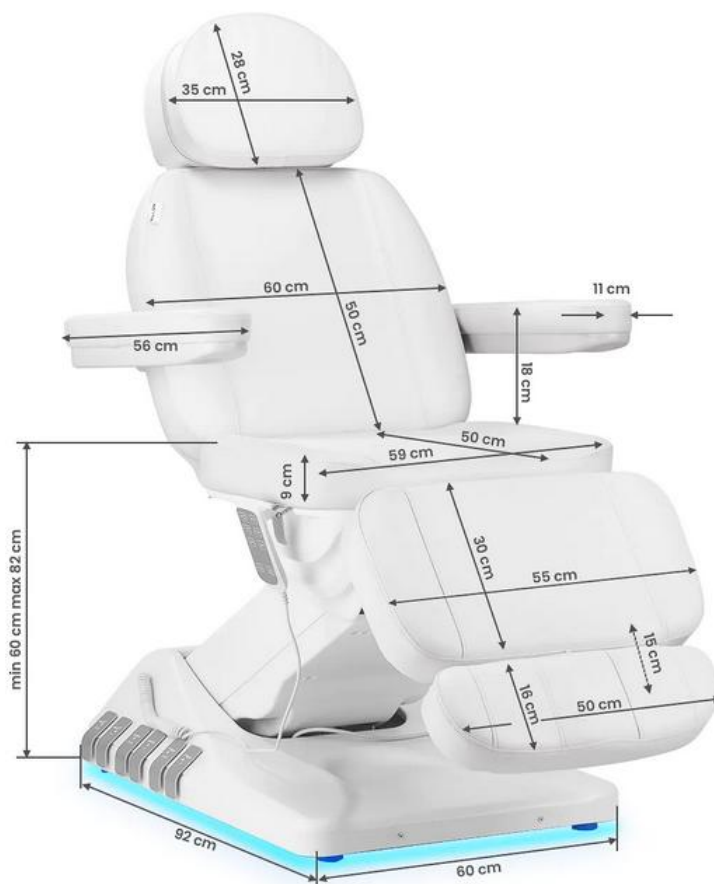

Środki bezpieczeństwa:

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania go do innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami. Należy zadbać o to, by żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowym zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno umieszczać obcych elementów wewnątrz urządzenia. W przypadku, gdy niepożądany element dostanie się do środka, należy wyjąć przewód z gniazdka zasilania i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie

może ulec uszkodzeniu.

9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórным naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia, jego uszkodzenia, a nawet spalania.

UWAGA

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych i umysłowych, a także przez osoby niezaznajomione ze sposobem działania tego sprzętu, jeżeli zostanie im zapewniony odpowiedni nadzór lub instruktaż na temat prawidłowego korzystania w sposób bezpieczny i by związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja urządzenia



W celu ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie i przekazywać je do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu i nie wrzucać go do pojemników z odpadami domowymi.

Pod koniec użyteczności urządzenia te nadal zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazywać je do ponownego przetworzenia do odpowiednich punktów zbiórki lub do firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Przechowywanie i transport

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (-20°C) do $(+40^{\circ}\text{C})$ wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać je w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i wilgotności względnej nie większej niż 90%. Temperatura eksploatacji od $(+10^{\circ}\text{C})$ do $(+40^{\circ}\text{C})$. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać go na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.