

ACTIVESHOP[®]


NÁVOD K POUŽITÍ

Elektrické kosmetické křeslo Azzurro 708B 4 motory



Dovozce:

z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

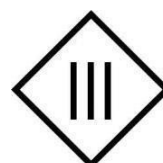


Před použitím kosmetického křesla si přečtěte návod a proveďte následující kroky:

1. Ujistěte se, že byly odstraněny všechny obalové materiály.
2. Ujistěte se, že je křeslo v provozuschopném stavu.
3. Umístěte kosmetické křeslo na místo, kde bude používáno.
4. Zapojte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky.

Poznámka! Tento spotřebič nesmí používat děti a nezkušené osoby. Děti musí být pod dohledem a nesmí si hrát v blízkosti kosmetického křesla.

Rozměry přístroje:

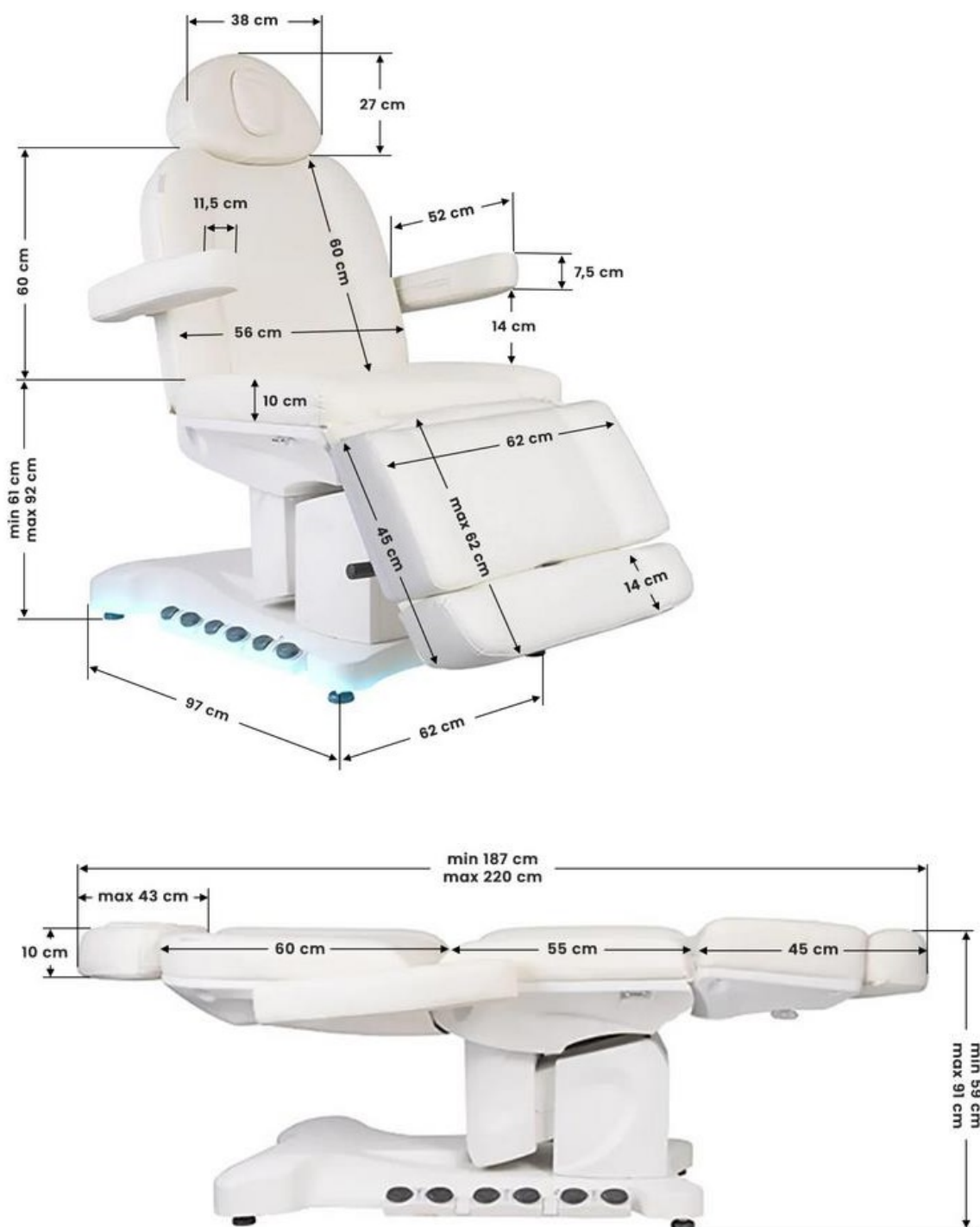

Konstrukce přístroje:



Upozornění:


1. Opěrka nohou není navržena tak, aby unesla plnou hmotnost dospělého člověka.
2. Nesedejte si přímo na opěrku rukou a nohou.
3. Dbejte na to, aby vzdálenost mezi zásuvkami nepřesáhla 2 metry.

Upozornění:

1. Z bezpečnostních důvodů vždy zapojujte napájecí kabel do uzemněné zásuvky.
2. Napájecí kabel k jednotce nepřivazujte. Zvedání nebo tahání za napájecí kabel jej může poškodit. Ujistěte se, že napájecí kabel lze v nouzové situaci snadno vyjmout.
3. Před přemístěním elektrického kosmetického křesla odpojte napájecí kabel, aby se nezasekl mezi některými částmi křesla.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě jej odpojte, křeslo nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální napájecí kabel.


5. Nedovolte, aby osoba, která neprovádí ošetření, ovládala dálkový ovladač.
6. Pod křeslo neumísťujte žádné předměty.
7. Ujistěte se, že je kolem sedadla dostatečný volný prostor, aby se dalo volně skládat a rozkládat.
8. Ujistěte se, že v okolí sedadla nejsou žádné ostré nebo nebezpečné předměty, které by mohly přístroj poškodit.
9. Neprovádějte na jednotce žádné vlastní úpravy. Pokud židle nefunguje správně, přestaňte ji používat a obraťte se na autorizované servisní středisko.

Funkce dálkového ovládání:

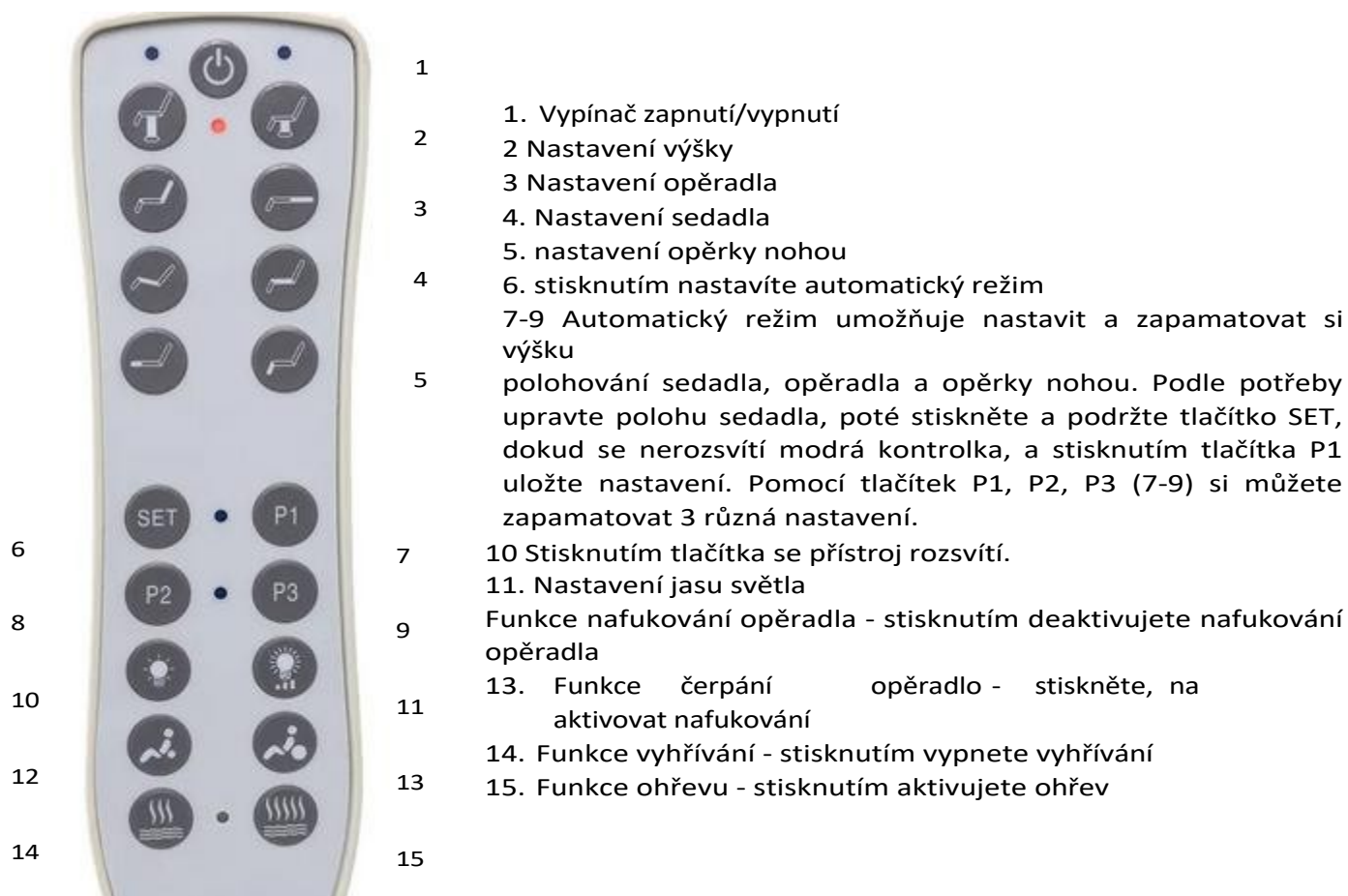

Funkce nožního ovládání:

Spotřebič je vybaven 4 nožními ovládacími pedály. Každý z nich odpovídá za jinou funkci.

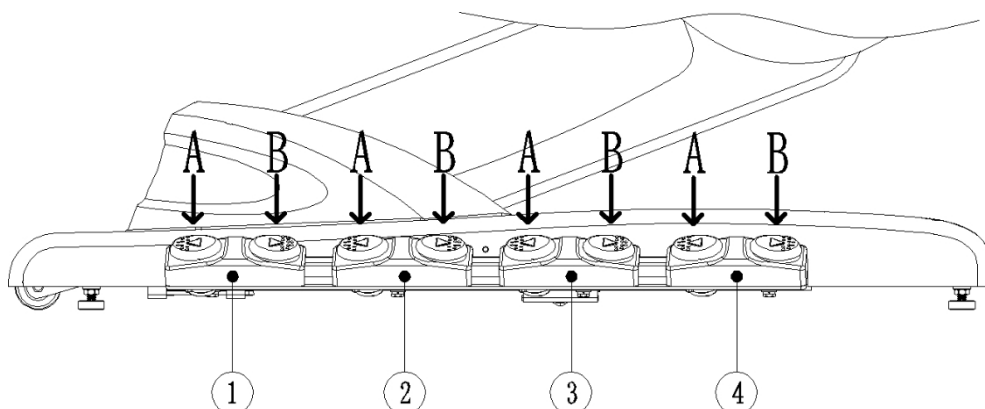


1. Nastavení výšky

Zapněte vypínač. Poté sešlápněte pedál 1
výšky židle.




pro nastavení

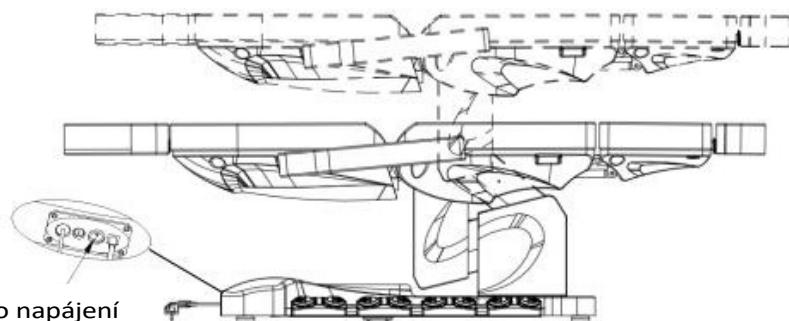

Tlačítko napájení


2. Nastavení opěradla

Na pedálu 2 stiskněte  pro nastavení polohy opěradla.

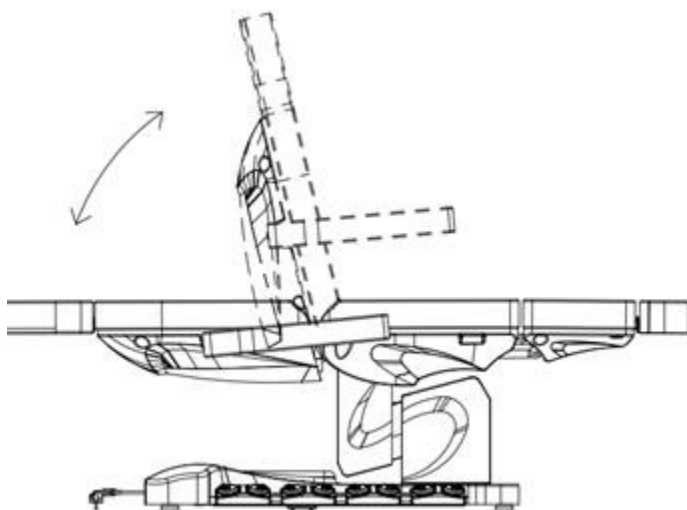


3. Nastavení sedadla

Na pedálu 3 stiskněte  nastavíte polohu a sklon sedadla.

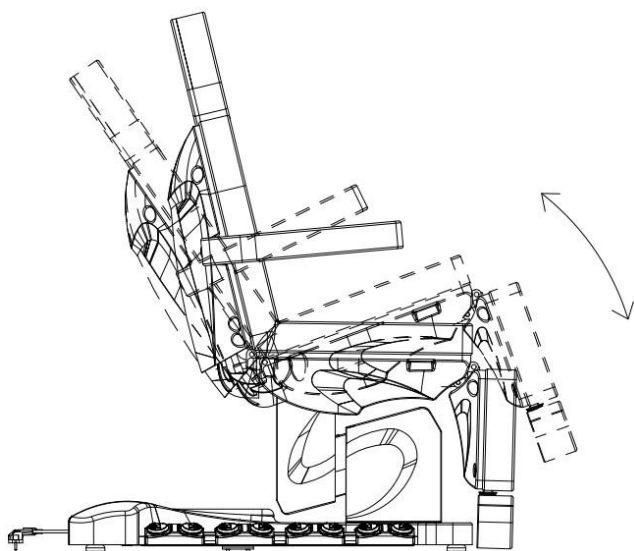

4. Nastavení opěrky nohou



Na pedálu č. 4 stiskněte  pro nastavení polohy opěrky nohou

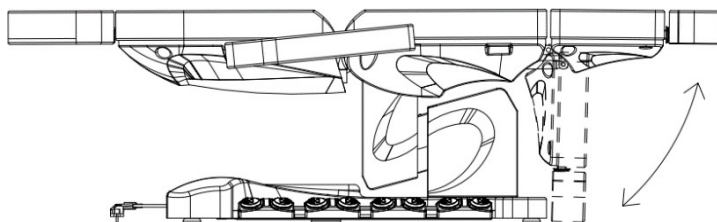

5. Vysunutí opěrky nohou

Křeslo má také možnost prodloužení opěrky nohou, což usnadňuje provádění ošetření u vyšších osob a zvyšuje pohodlí.

Opěrka nohou se nastavuje pomocí knoflíku na spodní straně opěrky nohou. Odšroubováním knoflíku se opěrka nohou prodlouží.

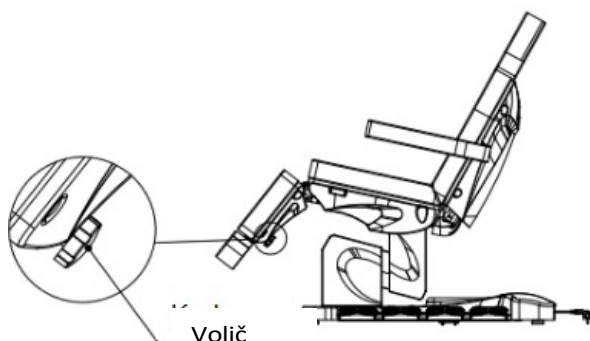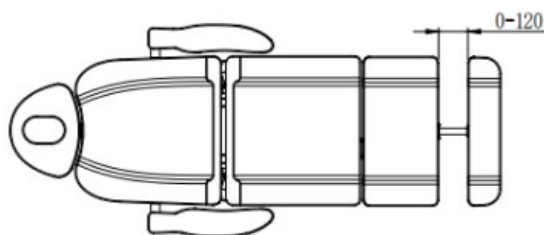


Instalace opěrky rukou:

Zasuňte područku do otvoru umístěného na boku opěradla. Opěrka by měla být pevně připevněna. Otočte ji doprava nebo doleva, aby správně zapadla na své místo. Totéž proveďte s druhou loketní opěrkou. Loketní opěrka je kolmá k zemi (bez ohledu na úhel sedadla). Lze ji otočit o 180°.

Instalace opěrky hlavy:

Zasuňte opěrku hlavy do otvoru v horní části opěradla sedadla. Když je opěrka hlavy ve správné výšce, utáhněte kliku umístěnou na opěradle, abyste opěrku hlavy zajistili.

Chcete-li opěrku hlavy snížit nebo prodloužit, vyšroubujte kliku, nastavte opěrku hlavy a kliku utáhněte.

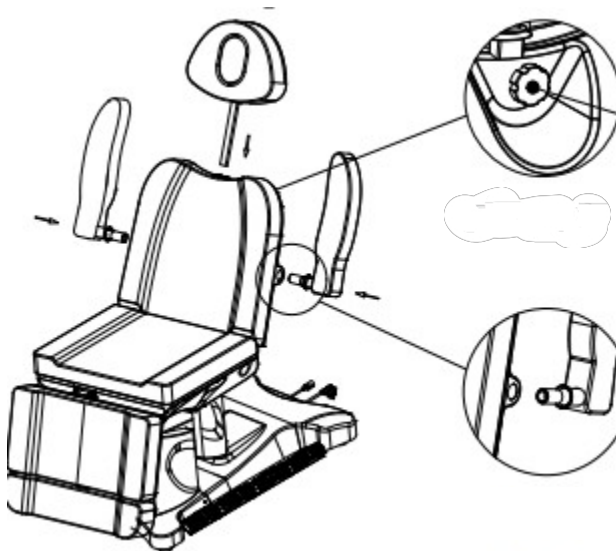

Čištění a dezinfekce jednotky:

Před čištěním odpojte jednotku od sítě.

Aby byl povrch sedačky v dobrém stavu, je třeba ji pravidelně čistit. Po každém použití nezapomeňte křeslo vyčistit a vydezinfikovat. Doporučujeme provádět důkladnou dezinfekci jednou měsíčně.

I Kovové a plastové povrchy

Kovové a plastové povrchy a ovládací prvky otřete vlhkým hadříkem. K čištění těžko přístupných míst nebo rohů dobře poslouží malý kartáček. K čištění spotřebiče nepoužívejte příliš velké množství tekutiny. Poté spotřebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nerezové oceli

Nejlépe funguje čištění jemným roztokem čisticího prostředku. K odstranění odolných skvrn lze použít čpavek a většinu rozpouštědel. Vyhněte se roztokům na bázi chlóru.

III Lakované nebo chromované kovové povrchy

- K čištění nepoužívejte vodní trysky (sprchy, vysokotlaká vodní děla).
- Jednotku nečistěte při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti a nevystavujte ji podmínkám, které by mohly vést ke kontaminaci kapalinou.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny.

IV Povrch židle

- Povrch židle rovnoměrně otřete speciálním čisticím prostředkem na kůži a poté jej otřete čistým měkkým hadříkem.

Údržba

Před zahájením údržby odpojte přístroj ze sítě.

1. Opravy by měl provádět zkušený a výrobcem autorizovaný personál. Opravy prováděné neautorizovaným personálem mohou způsobit zranění nebo poškození přístroje, za které výrobce nenese odpovědnost.
2. Používejte pouze originální náhradní díly schválené výrobcem.
3. Nepoužívejte elektrické kosmetické křeslo ani příslušenství, pokud nefunguje správně.
4. Veškerá údržba a opravy musí být zdokumentovány.

Opatření pro údržbu

Jednou týdně zkontrolujte ovládací prvky a jejich zapojení. Nejméně jednou za šest měsíců zkontrolujte stav a funkci následujících položek:

1. napájecí kabel a jeho upevnění
2. kabeláž motoru
3. ovládací skříň a její zapojení
4. zda je připojeno příslušenství
5. normální fungování uzamykacího systému

Pokud zjistíte jakékoli závady, přestaňte zařízení používat a obraťte se na autorizované servisní středisko. Otevřít nebo vyměnit pohon/řídící jednotku může pouze zkušený nebo autorizovaný personál.

Pokud je některá část zařízení poškozena, odpojte napájecí kabel a přestaňte zařízení používat. Poté informujte servis.

Řešení problémů

Problém	Příčina	Metody řešení
Pedál ovládání nožní pedál nereaguje	1. Tlačítko napájení se aktivuje nebo neaktivuje. 2. Zkontrolujte, zda pedál je sešlápnutý na maximum. 3. Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojen do sítě. 4. Zkontrolujte, zda je bylo vše správně správně připojeno.	1. Zkuste restartovat tlačítkem napájení. 2. Zkuste zapnout jiná tlačítka a zjistěte, zda fungují. 3. Odpojte webovou stránku zařízení i znovu jej připojte. 4. Odpojte zástrčky a znovu je připojte.
Zařízení dělá podivné zvuky při spouštění sedadla	Uvolněný šroub	Utáhněte šrouby
Nerozsvítí se kontrolky nožního ovládacího pedálu	Spálená pojistka	Vyměňte pojistku

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Zařízení je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím účinkům při ošetření.
2. Zařízení se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP s.r.o.).
3. Zařízení neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP s.r.o.:
(a) do spotřebiče se dostala tekutina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení přístroje nebo poškození jeho krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Spotřebič nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a osoby nezkušené a neznalé zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí

2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být použitá elektrozařízení sbírána odděleně a odevzdávána na následujících sběrných místech

sběr odpadních elektronických a elektrických zařízení. Staré spotřebiče po skončení své životnosti obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k opětovnému zpracování. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotě (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.