

ACTIVESHOP[®]


INSTRUCCIONES DE USO

Sillón de estética eléctrico Azzurro 708B 4 motores



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

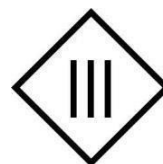


Antes de utilizar el sillón cosmético, lea las instrucciones y realice los siguientes pasos:

1. Asegúrese de haber retirado todos los materiales de embalaje.
2. Asegúrese de que el sillón funciona correctamente.
3. Coloque el sillón cosmético en el lugar donde vaya a utilizarlo.
4. Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada.

Nota. Los niños y las personas inexpertas no deben utilizar este aparato. Los niños deben estar vigilados y no deben jugar cerca del sillón cosmético.

Dimensiones del aparato:

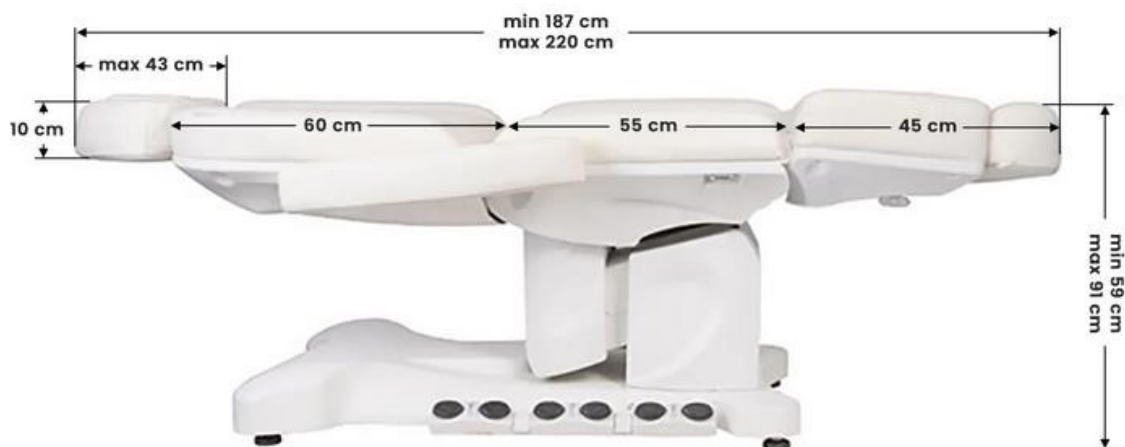

Construcción del aparato:



Advertencia:


1. El reposapiés no está diseñado para soportar todo el peso de un adulto.
2. No se sienta directamente en el reposabrazos ni en el reposapiés.
3. Asegúrese de que la distancia entre los reposapiés no supere los 2 metros.

Precaución

1. Por razones de seguridad, conecte siempre el cable de alimentación a una toma de corriente con toma de tierra.
2. No ate el cable de alimentación a la unidad. Levantar o tirar del cable de alimentación puede dañarlo. Asegúrese de que el cable de alimentación pueda retirarse fácilmente en caso de emergencia.
3. Retire el cable de alimentación antes de mover el sillón de belleza eléctrico para que no quede atascado entre algunas partes del sillón.
4. Si el cable de alimentación está dañado, desconéctelo inmediatamente, no utilice el sillón y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. Utilice únicamente el cable de alimentación original.


5. No permita que una persona ajena al tratamiento controle el mando a distancia.
6. No coloque objetos debajo del sillón.
7. Asegúrese de que hay suficiente espacio libre alrededor del asiento para poder plegarlo y desplegarlo libremente.
8. Asegúrese de que no haya objetos afilados o dañinos alrededor del asiento que puedan dañar la unidad.
9. No modifique la unidad usted mismo. Si la silla no funciona correctamente, deje de utilizarla y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

Funciones del mando a distancia:

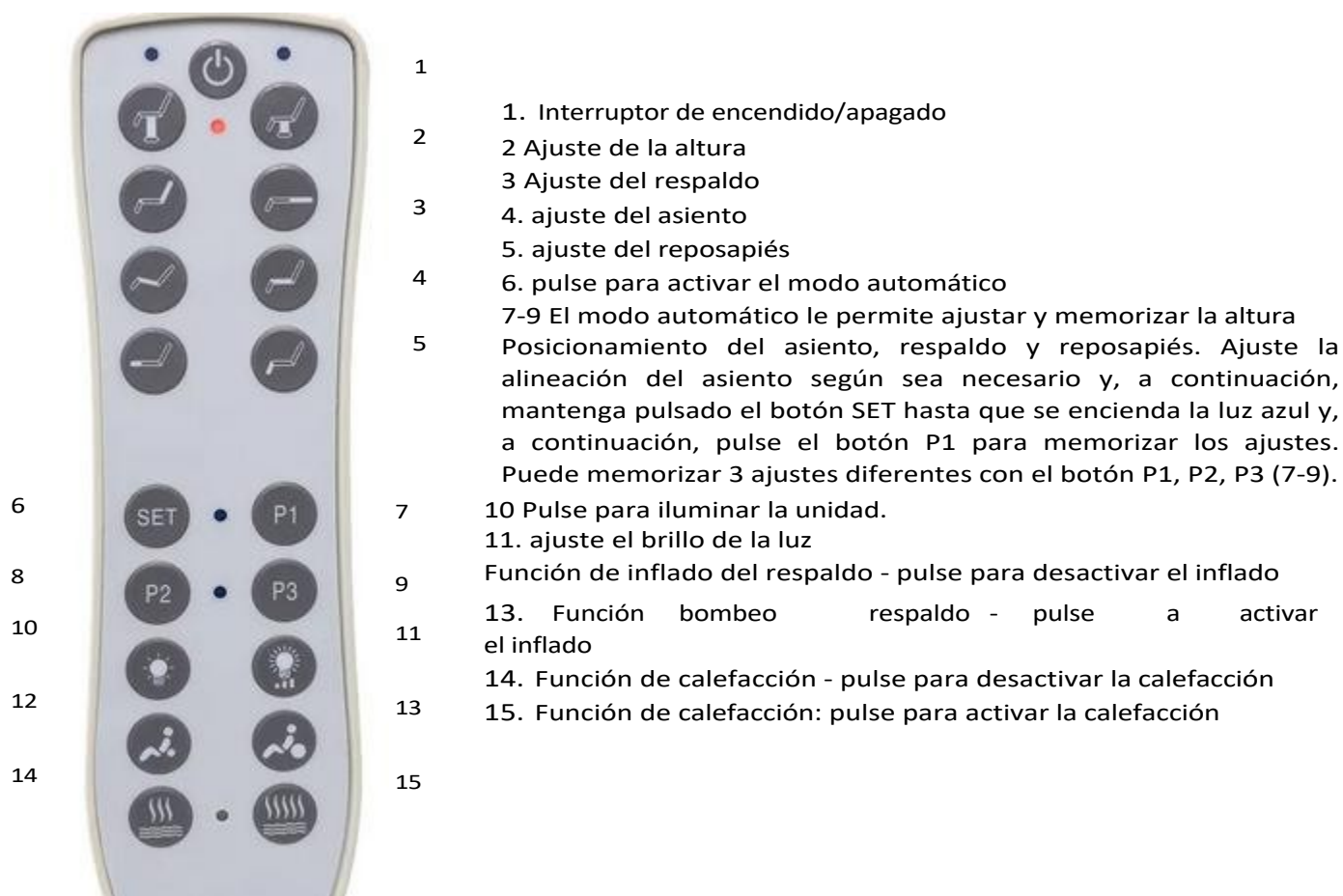

Funciones de pedal:

El aparato dispone de 4 pedales de control. Cada uno es responsable de una función diferente.

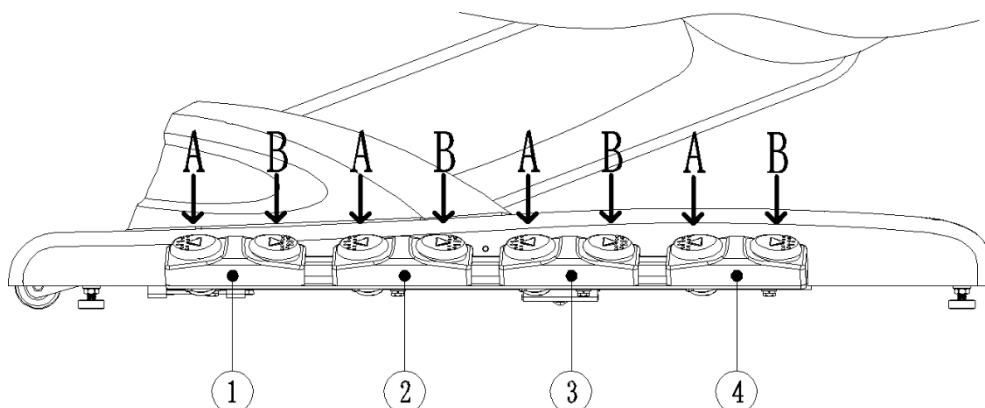


1. Ajuste de la altura

Encienda el aparato. A continuación, pulse el pedal 1 altura del asiento.



para ajustar la

Botón de
encendido

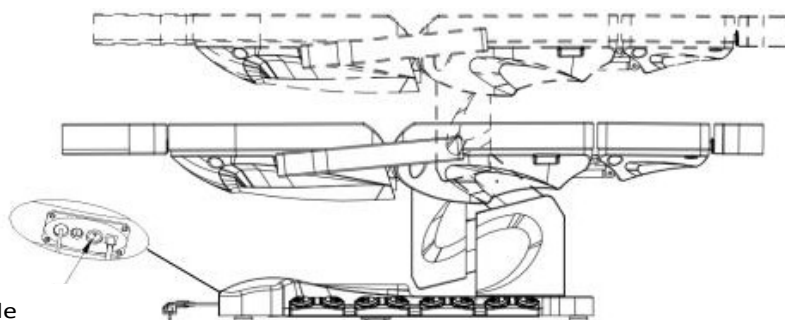


2. Ajuste del respaldo

En el pedal 2, pulse




para ajustar la posición del respaldo.

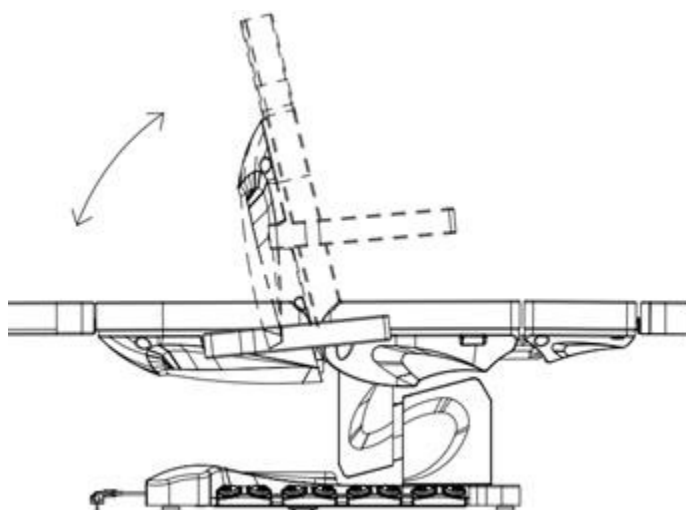


3. Regulación del asiento

En el pedal 3, pulse  para ajustar la posición y la inclinación del asiento.

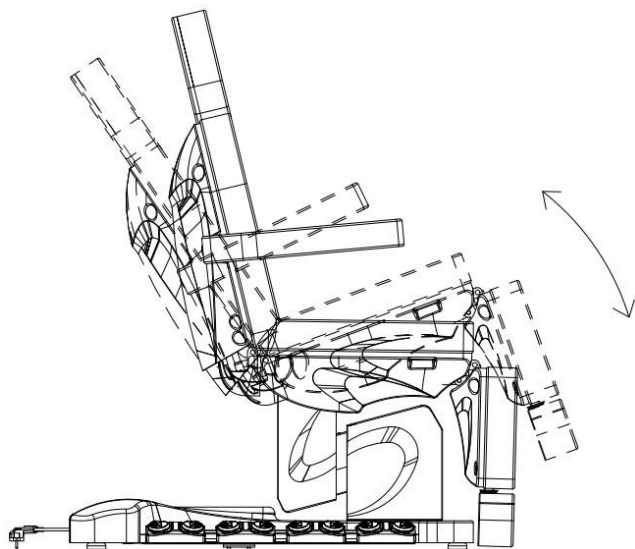

4. Regulación del reposapiés



En el pedal nº 4, pulse  para ajustar la posición del reposapiés

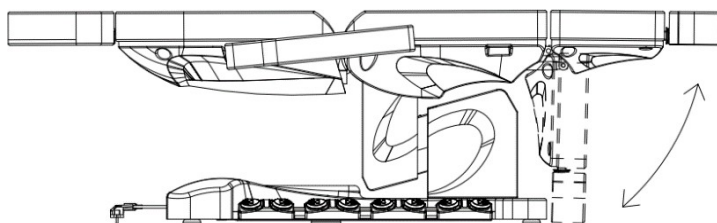

5. Extensión del reposapiés

El sillón también dispone de una opción para extender el reposapiés, lo que facilita la realización de tratamientos en personas más altas y mejora la comodidad.

El reposapiés se ajusta mediante el mando situado en la parte inferior del reposapiés. Desenroscando el mando se podrá extender el reposapiés.

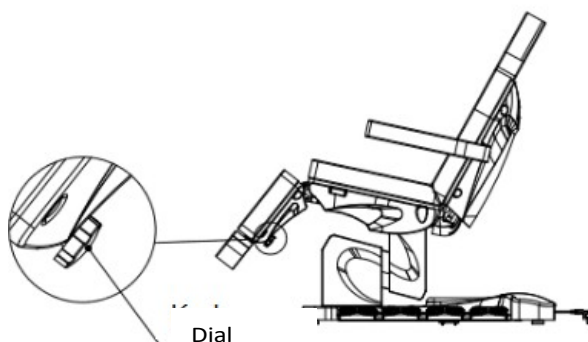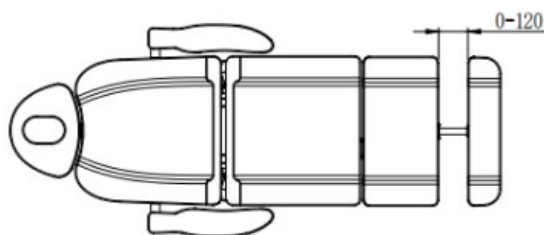


Instalación del reposabrazos:

Deslice el reposabrazos en el orificio situado en el lateral del respaldo. El reposabrazos debe quedar firmemente sujeto. Gírelo hacia la derecha o hacia la izquierda para que entre correctamente en su sitio. Haga lo mismo con el otro reposabrazos. El reposabrazos está perpendicular al suelo (independientemente del ángulo del asiento). Puede girarse 180°.

Instalación del reposacabezas:

Introduzca el reposacabezas en el orificio situado en la parte superior del respaldo. Cuando el reposacabezas esté a la altura correcta, apriete la manivela situada en el respaldo para fijar el reposacabezas.

Para bajar o extender el reposacabezas, desenrosque la manivela, ajuste el reposacabezas y apriete la manivela.

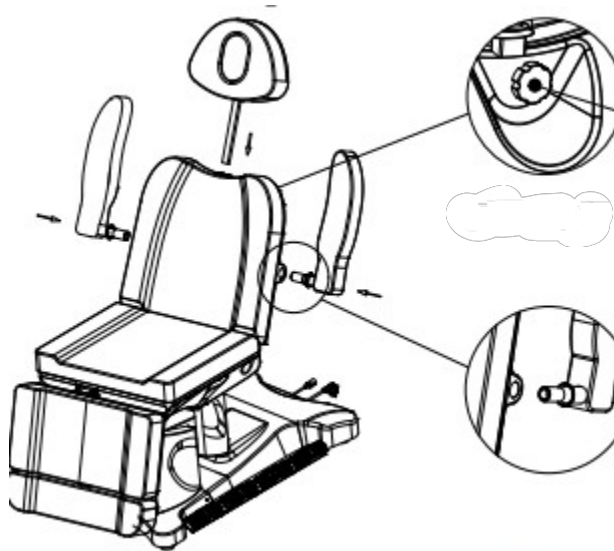

Limpieza y desinfección del aparato

Desenchufe la unidad antes de limpiarla.

Para mantener la superficie del asiento en buen estado, debe limpiarse regularmente. Recuerde limpiar y desinfectar la silla después de cada uso. Se recomienda realizar una desinfección a fondo una vez al mes.

I Superficies de metal y plástico

Para limpiar las superficies y los mandos de metal y plástico, páseles un paño húmedo. Utilice un cepillo pequeño para limpiar las zonas de difícil acceso o las esquinas. No utilice demasiado líquido para limpiar el aparato. A continuación, desinfecte el aparato con un líquido adecuado.

II Superficies de acero inoxidable

Lo mejor es limpiar con una solución de detergente suave. El amoníaco y la mayoría de los disolventes pueden utilizarse para eliminar manchas difíciles. Evite las soluciones a base de cloro.

III Superficies metálicas pintadas o cromadas

- No utilice chorros de agua (duchas, cañones de agua a alta presión) para la limpieza.
- No lo limpie a altas temperaturas ni con mucha humedad, y no exponga la unidad a condiciones que puedan provocar la contaminación por líquidos.
- No utilice disolventes ni ácidos para la limpieza.

IV Superficie del sillón

- Limpie uniformemente la superficie del asiento con un limpiador especial para cuero y, a continuación, pásele un paño limpio y suave.

Mantenimiento

Desenchufe el aparato antes de proceder a su mantenimiento.

1. Las reparaciones deben ser realizadas por personal experimentado y autorizado por el fabricante. Las reparaciones realizadas por personal no autorizado pueden causar lesiones o daños en el aparato de los que el fabricante no se hace responsable.
2. Utilice únicamente piezas de repuesto originales autorizadas por el fabricante.
3. No utilice el sillón estético eléctrico ni sus accesorios si no funcionan correctamente.
4. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben documentarse.

Medidas de mantenimiento

Compruebe los mandos y su cableado una vez por semana. Compruebe el estado y el funcionamiento de los siguientes elementos al menos una vez cada seis meses:

1. Cable de alimentación y su fijación
2. Cableado del motor
3. La caja de control y su cableado
4. La fijación de los accesorios
5. El funcionamiento normal del sistema de cierre

Si detecta algún defecto, deje de utilizar el equipo y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. Sólo personal experimentado o autorizado puede abrir o sustituir el actuador/unidad de control.

Si alguna pieza del equipo está dañada, desenchufe el cable de alimentación y deje de utilizarlo. A continuación, avise al servicio técnico.

Resolución de problemas

Problema	Causa	Métodos de solución
Pedal control pedal no reacciona	1. Botón el botón de encendido se acciona o no se acciona. 2. Compruebe si pedal está pisado al máximo. 3. Compruebe que el aparato está enchufado. 4. Compruebe que todo ha sido correctamente conectado correctamente.	1. Pruebe a reiniciar el botón de encendido. 2. Pruebe a encender otros botones y compruebe si funcionan. 3. Desconecte el dispositivo i conéctalo de nuevo. 4. Desconecta los enchufes y vuelve a conectarlos.
El dispositivo hace ruidos extraños al bajar el asiento	Tornillo flojo	Apriete los tornillos
Las luces del pedal de control no se encienden	Fusible quemado	Sustituya el fusible

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal estético cualificado evita efectos indeseados durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en este manual. Todas las operaciones de mantenimiento y reparación deben ser realizadas exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP Ltd.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de ACTIVESHOP Ltd. en los siguientes casos
 - (a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite sonidos extraños,
 - c) se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha volcado el aparato o se ha dañado su carcasa.
5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si un objeto extraño entra en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente de conformidad con la Directiva

2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en los siguientes puntos de recogida

recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Al final de su vida útil, los aparatos viejos contienen componentes totalmente reciclables y, por lo tanto, deben entregarse para su reprocesamiento. Por lo tanto, deben ser entregados a los puntos de recogida adecuados, así como a ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a temperaturas comprendidas entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el aparato en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.