

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>


## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Azzurro 708B elektromos kozmetikai szék 4 motorral



**Importőr:**

Z O.O.  
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław,  
Lengyelország  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/05/2024

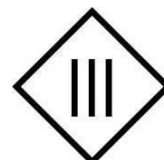


A kozmetikai szék használata előtt olvassa el a használati utasítást, és végezze el a következő lépéseket:

1. Győződjön meg róla, hogy minden csomagolóanyagot eltávolított.
2. Győződjön meg arról, hogy a szék működőképes.
3. Helyezze a kozmetikai széket arra a helyre, ahol használni fogja.
4. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy megfelelő konnektorba.

**Megjegyzés!** Gyermekek és tapasztalatlan személyek nem használhatják ezt a készüléket. A gyermekeket felügyelni kell, és nem szabad a kozmetikai szék közelében játszani.

#### A készülék méretei:

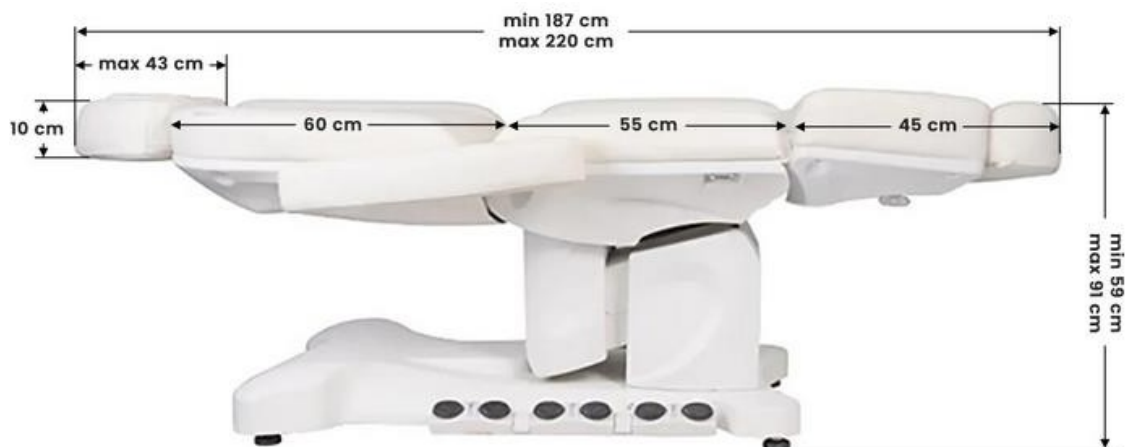

### A készülék felépítése:



### Figyelmeztetés:


1. A lábtartót nem úgy tervezték, hogy egy felnőtt teljes súlyát elbírja.
2. Ne üljön közvetlenül a karfára és a lábtartóra.
3. Ügyeljen arra, hogy a lábtartók közötti távolság ne haladja meg a 2 métert.

### Figyelmeztetés

1. Biztonsági okokból a hálózati kábelt mindig földelt konnektorba dugja be.
2. Ne kösse a tápkábelt a készülékhez. A tápkábel megemelése vagy meghúzása károsíthatja azt. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel vészhelyzetben könnyen eltávolítható legyen.
3. Az elektromos szépségfotel mozgatása előtt húzza ki a tápkábelt, hogy az ne akadjon be a szék egyes részei közé.
4. Ha a tápkábel megsérült, azonnal húzza ki a kábelt, ne használja a széket, és forduljon hivatalos szervizközponthoz. Csak az eredeti tápkábelt használja.


5. Ne engedje, hogy a kezelést nem végző személy irányítsa a kezelő távirányítót.
6. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szék alá.
7. Győződjön meg róla, hogy az ülés körül elegendő szabad tér van, hogy szabadon össze- és kihajtható legyen.
8. Győződjön meg róla, hogy az ülés körül nincsenek éles vagy veszélyes tárgyak, amelyek károsíthatják a készüléket.
9. Ne módosítsa a készüléket saját maga. Ha a szék nem működik megfelelően, hagyja abba a használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz.

#### Távirányító funkciók:

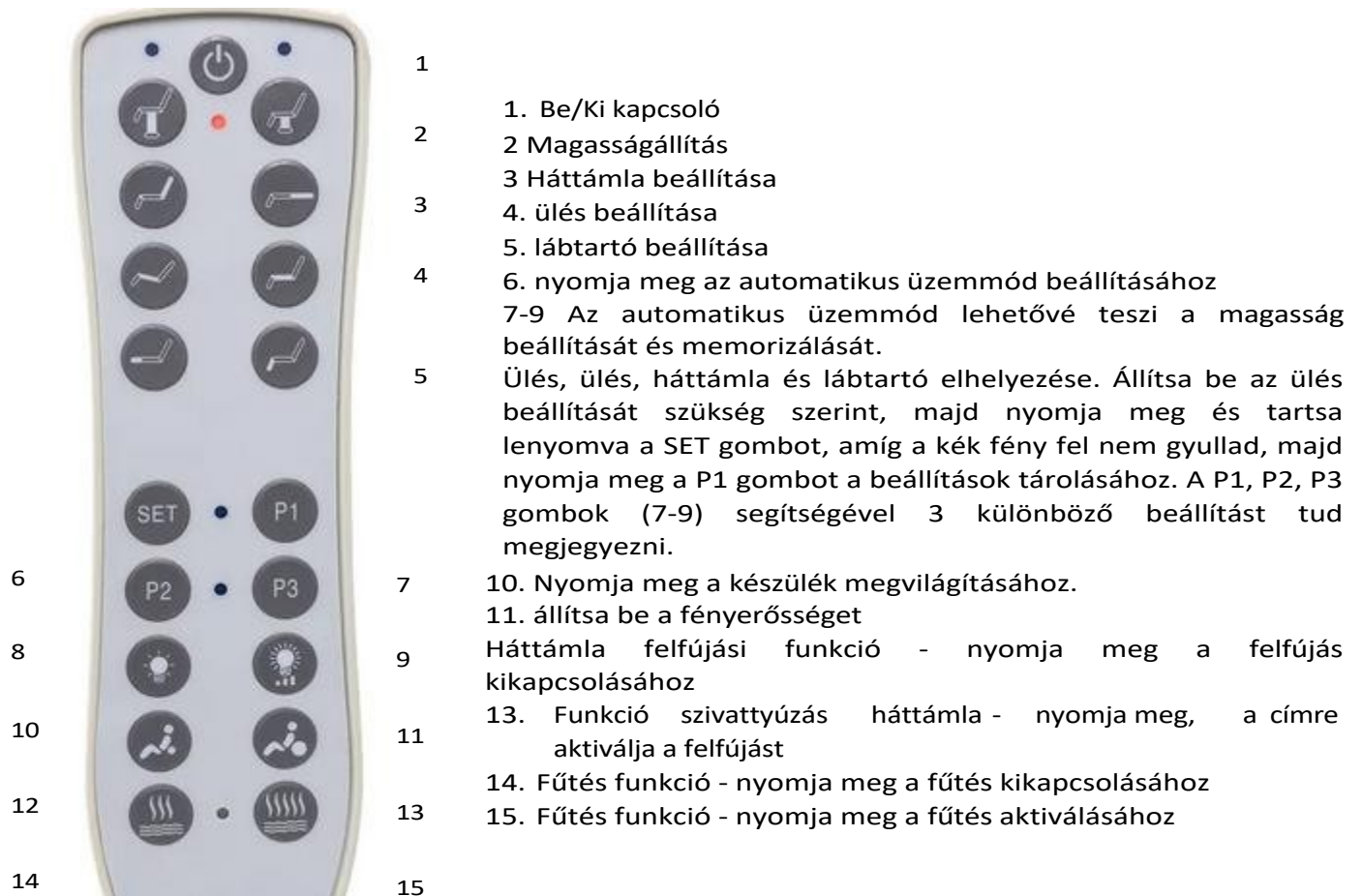

#### Lábvezérlő funkciók:

A készülék 4 lábvezérlő pedállal rendelkezik. Mindegyik más-más funkcióért felelős.

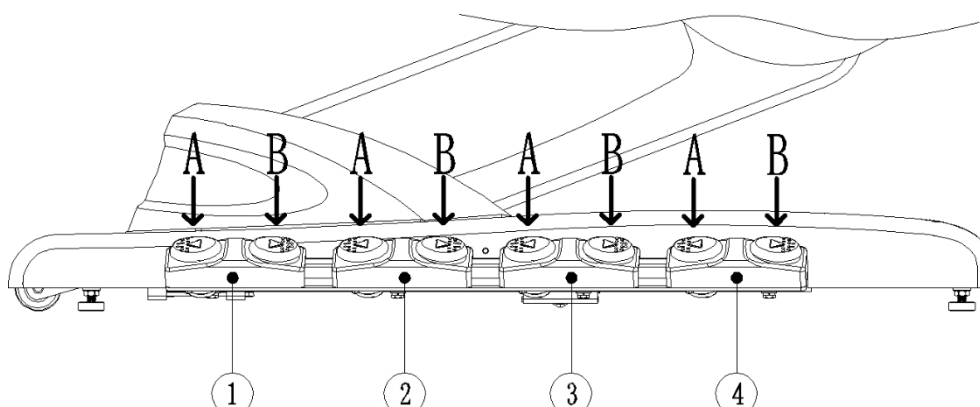


## 1. Magasságállítás

Kapcsolja be a hálózati kapcsolót. Ezután nyomja meg az 1. pedált




az ülés magasságának beállításához.

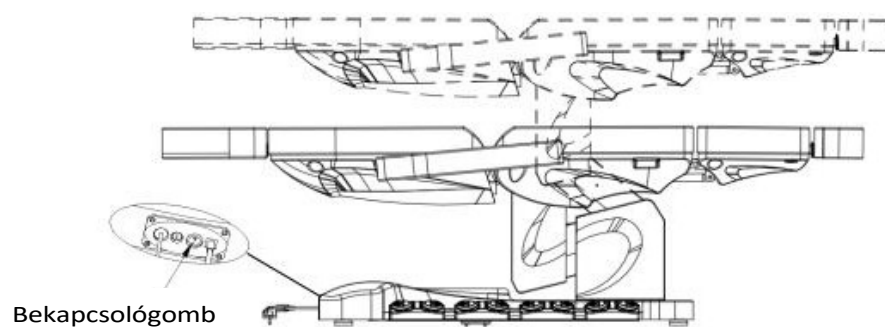


## 2. Háttámla beállítása

A 2. pedálon nyomja meg  a háttámla pozíciójának beállításához.

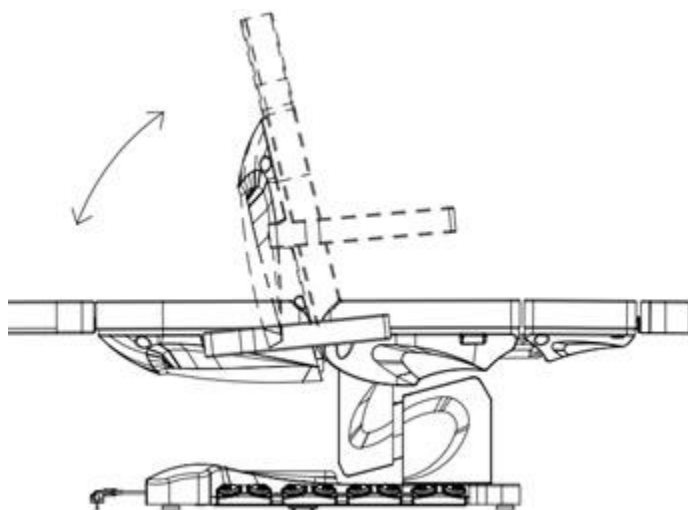


### 3. Ülés beállítása

A 3. pedálon nyomja meg  az ülés helyzetének és dőlésének beállításához.

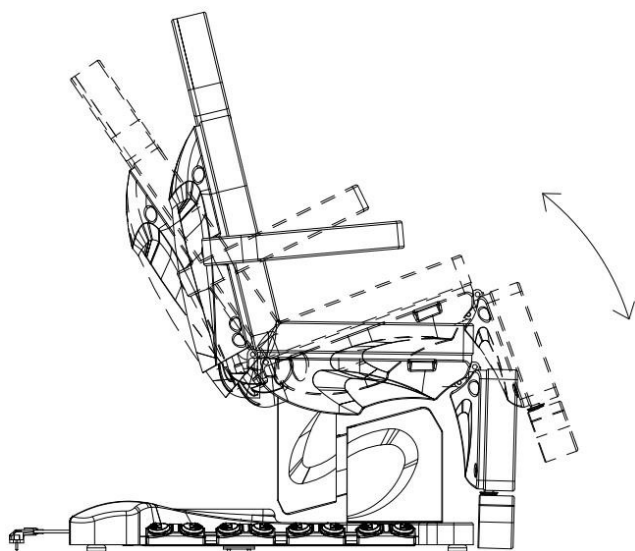

### 4. Lábtartó beállítása



A 4. pedálon nyomja meg  a lábtartó helyzetének beállításához

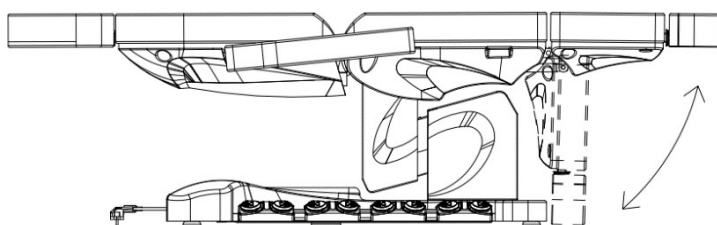

### 5. Lábtartó meghosszabbítása

A székben lehetőség van a lábtartó meghosszabbítására is, ami megkönnyíti a kezelések elvégzését magasabb embereknek, és javítja a kényelmet.

A lábtartó beállítása a lábtartó alján található gomb segítségével történik. A gomb kicsavarásával a lábtartó meghosszabbítható.

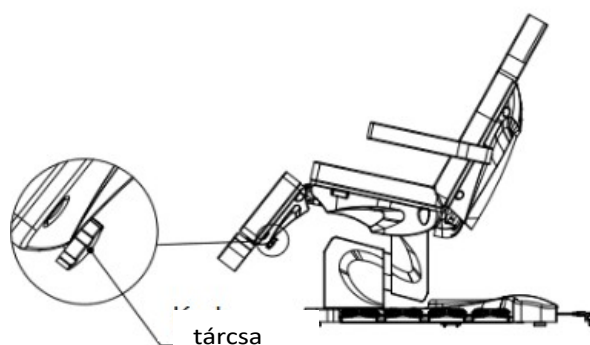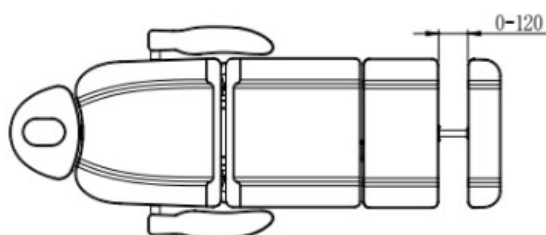


## Karfatámasz felszerelése:

Csúsztassa a kartámaszt a háttámla oldalán található lyukba. A kartámasznak szilárdan kell rögzülnie. Csavarja el jobbra vagy balra, hogy megfelelően a helyére kerüljön. Ugyanígy járjon el a másik kartámasszal is. A kartámasz merőlegesen áll a talajra (függetlenül az ülés szögétől). Ez 180°-kal elforgatható.

## A fejtámla felszerelése:

Csúsztassa a fejtámlát az üléstámla tetején található lyukba. Amikor a fejtámla a megfelelő magasságban van, húzza meg a háttámlánál található kurbli-t a fejtámla rögzítéséhez.

A fejtámla leengedéséhez vagy kinyújtásához csavarja ki a kurbli-t, állítsa be a fejtámlát, és húzza meg a kurbli-t.

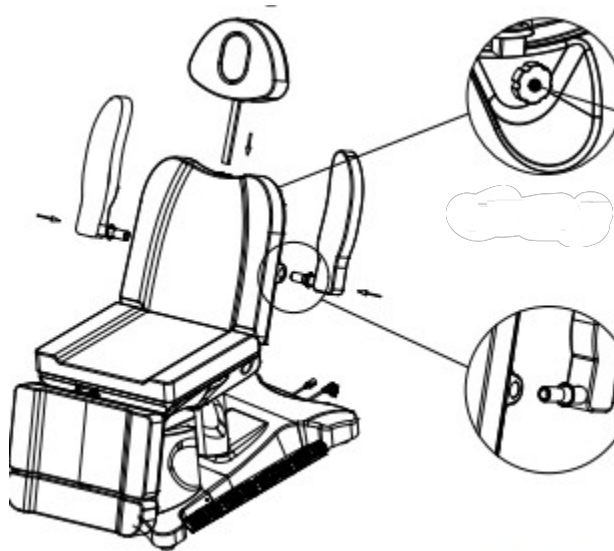

## A készülék tisztítása és fertőtlenítése:

Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz.

Az ülés felületének jó állapotban tartása érdekében rendszeresen tisztítani kell. Ne feledje, hogy minden használat után tisztítsa és fertőtlenítse a széket. Havonta egyszer ajánlott alapos fertőtlenítést végezni.

### I Fém és műanyag felületek

A fém- és műanyag felületek és kezelőszervek tisztításához törölje át őket nedves ruhával. A nehezen hozzáférhető területek vagy sarkok tisztításához egy kis kefe is jól használható. Ne használjon túl sok folyadékot a készülék tisztításához. Ezután fertőtlenítse a készüléket megfelelő folyadékkal.

### II Rozsdamentes acélfelületek

A tisztítás enyhe tisztítószerez oldattal működik a legjobban. A kemény foltok eltávolítására ammónia és a legtöbb oldószer használható. Kerülje a klór alapú oldatokat.

### III Festett vagy krómozott fémfelületek

- Ne használjon vízsugarakat (zuhany, nagynyomású vízágyú) a tisztításhoz.
- Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett, és ne t e g y e ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadékszennyezéshez vezethetnek.
- Ne használjon oldószereket vagy savakat a tisztításhoz.

#### IV A szék felülete

- Törölje át egyenletesen az ülés felületét speciális bőrtisztítóval, majd tiszta, puha ruhával törölje át.

#### Karbantartás

##### Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a hálózathál.

1. A javításokat tapasztalt és a gyártó által felhatalmazott személyzetnek kell elvégeznie. Az illetéktelen személyek által végzett javítások sérülést vagy a készülékben olyan károkat okozhatnak, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott eredeti pótalkatrészeket használjon.
3. Ne használja az elektromos kozmetikai széket vagy a tartozékokat, ha azok nem működnek megfelelően.
4. Minden karbantartási és javítási munkát dokumentálni kell.

##### Karbantartási intézkedések

Hetente egyszer ellenőrizze a kezelőszerveket és azok kábelezését. Hat havonta legalább egyszer ellenőrizze a következő elemek állapotát és működését:

1. tápkábel és annak rögzítése
2. a motor vezetékei
3. a vezérlődoboz és annak kábelezése
4. a tartozékok csatlakoztatása
5. a zárrendszer normál működése

Ha bármilyen hibát talál, hagyja abba a berendezés használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz. A működtető/vezérlőegységet csak tapasztalt vagy felhatalmazott személyzet nyithatja ki vagy cserélheti ki. Ha a berendezés bármelyik része megsérült, húzza ki a tápkábelt, és hagyja abba a használatot. Ezután értesítse a szervizt.

#### Problémamegoldás

| Probléma                                                | Ok                                                                                                                                                                                                                                                                   | Megoldási módszerek                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pedál vezérlés lábpedál nem reagál                      | 1. Gomb bekapcsológomb működésbe lép vagy nem lép működésbe.<br>2. Ellenőrizze, hogy a pedál a pedál maximálisan lenyomva van-e.<br>3. Ellenőrizze, hogy a a készülék be van-e dugva.<br>4. Ellenőrizze, hogy a minden be van-e helyesen megfelelően csatlakoztatva. | 1. Próbálja meg újraindítani a bekapcsológombot.<br>2. Próbálja meg bekapcsolni a többi gombot, és nézze meg, hogy működnek-e.<br>3. Távolítsa el a címet. a készüléket i dugja be újra.<br>4. Húzza ki a dugókat és csatlakoztassa újra. |
| Készülék a furcsa hangokat ad ki az ülés leeresztésekor | A csavar meglazult                                                                                                                                                                                                                                                   | Húzza meg a csavarokat                                                                                                                                                                                                                    |
| A lábpedál lámpái nem világítanak                       | Kiégett biztosíték                                                                                                                                                                                                                                                   | Cserélje ki a biztosítékot                                                                                                                                                                                                                |

## BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban használatos professzionális berendezés. A készüléket csak szakképzett kozmetikusok kezelhetik, így elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos következmények.
2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen kézikönyvben megadott célokön kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Kft. cég) végezhet.
3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - így nem kerülhet folyadék a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:  
(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott egy perc szünetet tartani a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva).
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

## VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközpontoz - így elkerülhető minden veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatáról, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

## A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az irányelvnek megfelelően

2012/19/EK rendeletnek megfelelően a használt elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról szóló rendelet értelmében a használt elektromos berendezéseket elkülönítetten kell gyűjteni és a következő gyűjtőhelyeken kell leadni

elektronikus és elektromos berendezések hulladékának gyűjtése. A régi készülékek hasznos élettartamuk végén teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell átadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Kft.

## **TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS**

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.