

ACTIVESHOP[®]


GEBRUIKSAANWIJZING

Azzurro 708B elektrische cosmetische stoel 4 motoren



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

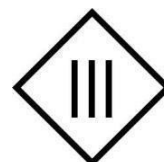


Lees de instructies en voer de volgende stappen uit voordat u de cosmeticastoel gebruikt:

1. Zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen verwijderd zijn.
2. Controleer of de stoel in orde is.
3. Plaats de cosmeticastoel in de ruimte waar hij gebruikt gaat worden.
4. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.

Let op! Kinderen en onervaren personen mogen dit apparaat niet gebruiken. Kinderen moeten onder toezicht staan en mogen niet in de buurt van de cosmeticastoel spelen.

Afmetingen van het apparaat:

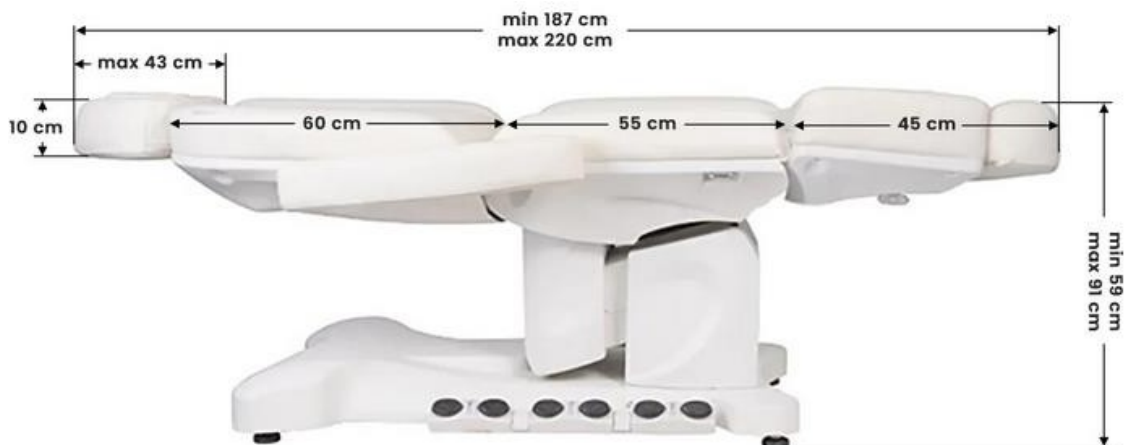

Constructie van het apparaat:



Waarschuwing:


1. De voetsteun is niet ontworpen om het volledige gewicht van een volwassene te dragen.
2. Ga niet rechtstreeks op de armsteun en voetsteun zitten.
3. Zorg ervoor dat de afstand tussen de stopcontacten niet meer dan 2 meter bedraagt.

Let op

1. Steek de stekker om veiligheidsredenen altijd in een geaard stopcontact.
2. Bind het netsnoer niet vast aan het apparaat. Als u het netsnoer optilt of eraan trekt, kan het beschadigd raken. Zorg ervoor dat het netsnoer gemakkelijk verwijderd kan worden in een noodsituatie.
3. Verwijder het netsnoer voordat u de elektrische schoonheidsstoel verplaatst, zodat het niet klem komt te zitten tussen bepaalde onderdelen van de stoel.
4. Als het netsnoer beschadigd is, haal het dan onmiddellijk uit het stopcontact, gebruik de stoel niet en neem contact op met een erkend servicecentrum. Gebruik alleen het originele netsnoer.


5. Laat de afstandsbediening niet bedienen door iemand die de behandeling niet uitvoert.
6. Plaats geen voorwerpen onder de stoel.
7. Zorg voor voldoende vrije ruimte rond de stoel zodat deze vrij in- en uitgekapt kan worden.
8. Zorg ervoor dat er geen scherpe of schadelijke voorwerpen in de buurt van de stoel zijn die het toestel kunnen beschadigen.
9. Pas het apparaat niet zelf aan. Als de stoel niet goed werkt, gebruik hem dan niet meer en neem contact op met een erkend servicecentrum.

Funcities van de afstandsbediening:

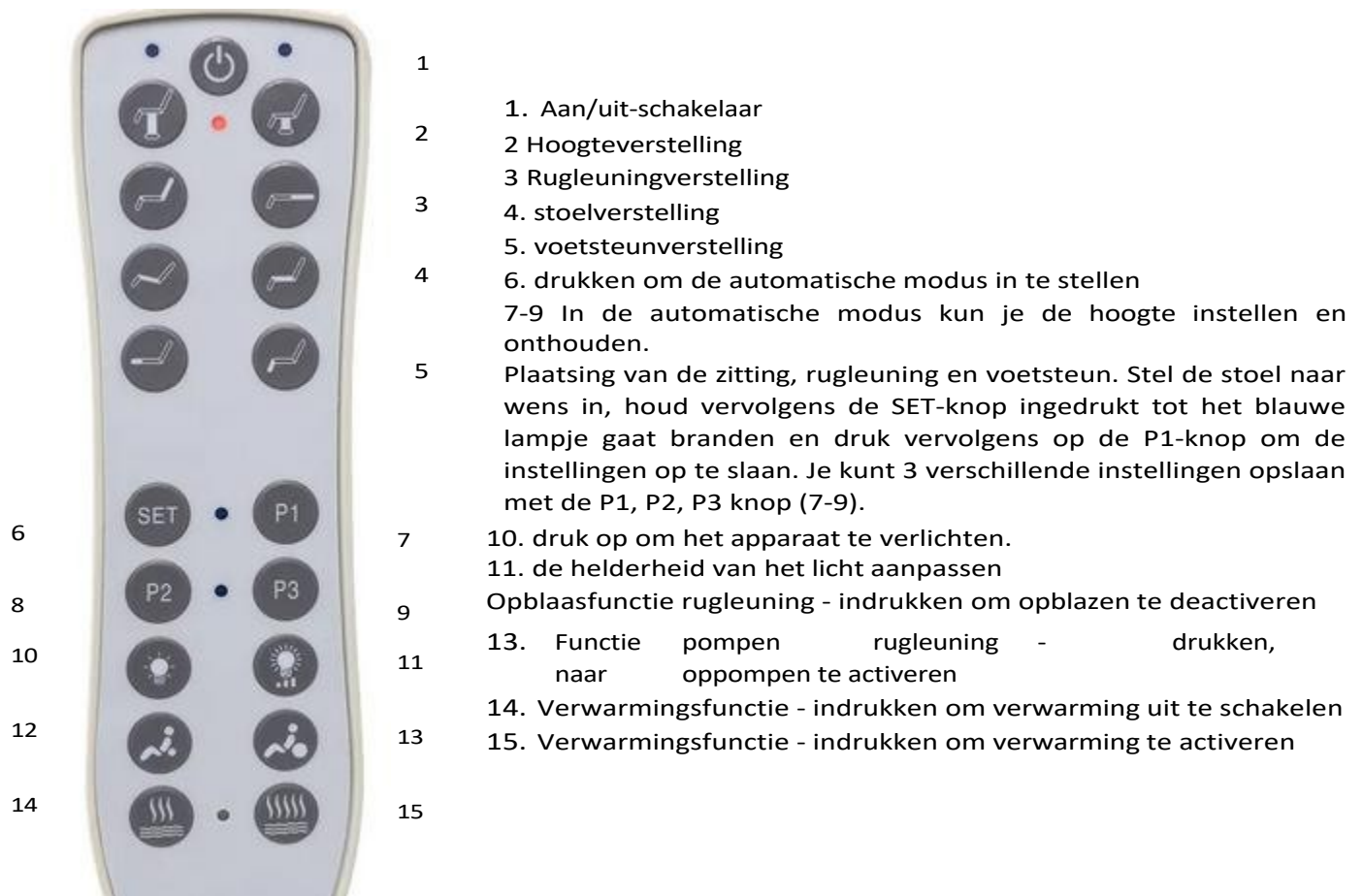

Voetpedaalfuncties:

Het apparaat heeft 4 voetpedalen. Elk is verantwoordelijk voor een andere functie.

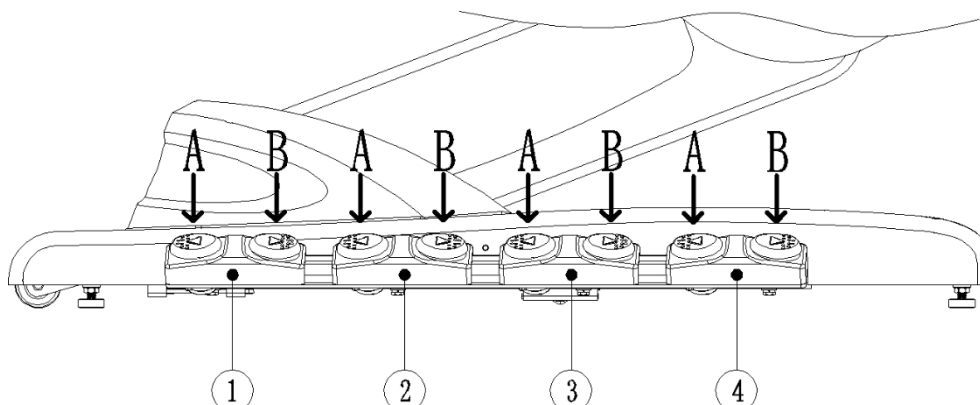


1. Hoogteverstelling

Zet de aan/uit-schakelaar aan. Druk vervolgens op pedaal 1 om de hoogte van de stoel in te stellen.



om de hoogte van

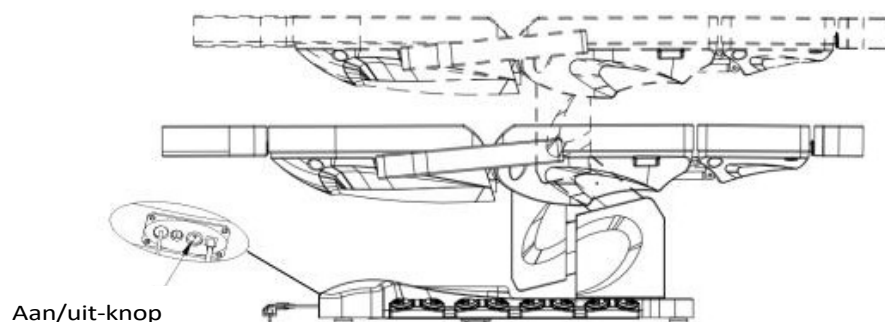


Aan/uit-knop

2. Rugleuning verstellen

Druk op pedaal 2



om de positie van de rugleuning aan te passen.

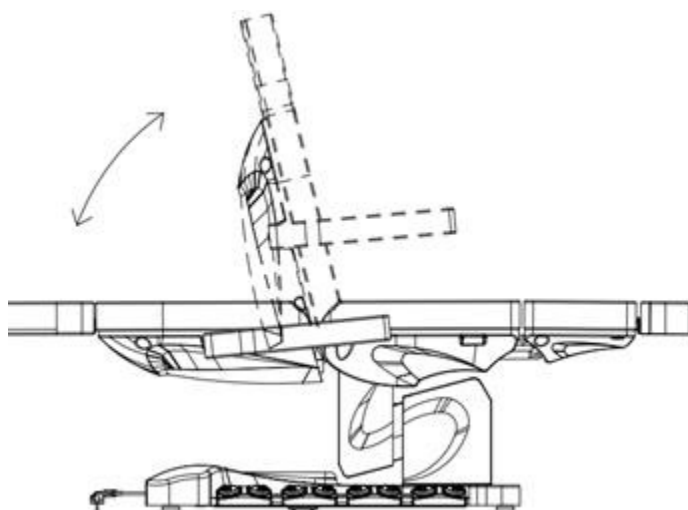


3. Zitting aanpassen

Druk op pedaal 3



om de positie en helling van de zitting aan te passen.

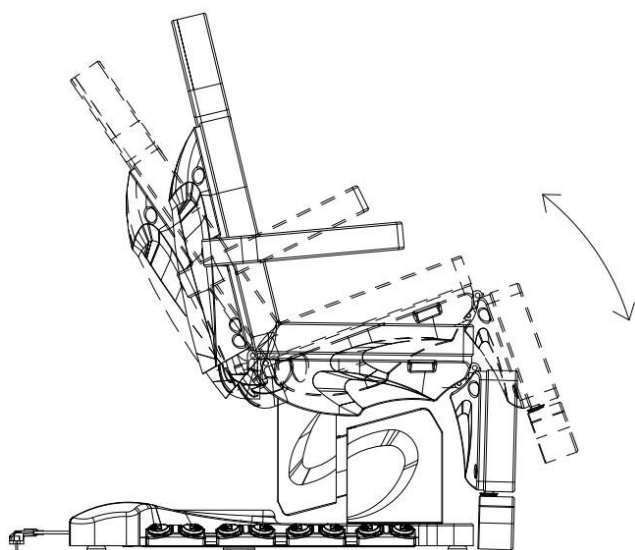


4. Voetsteun aanpassen

Druk op pedaal nr. 4 op





om de positie van de voetsteun aan te passen

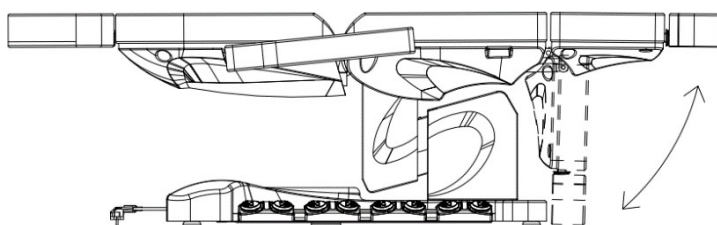

5. Voetsteunverlenging

De stoel heeft ook een optie om de voetsteun te verlengen, wat het makkelijker maakt om behandelingen uit te voeren bij langere mensen en het comfort verbetert.

De voetsteun wordt versteld met de knop aan de onderkant van de voetsteun. Door de knop los te draaien kan de voetsteun worden uitgeschoven.

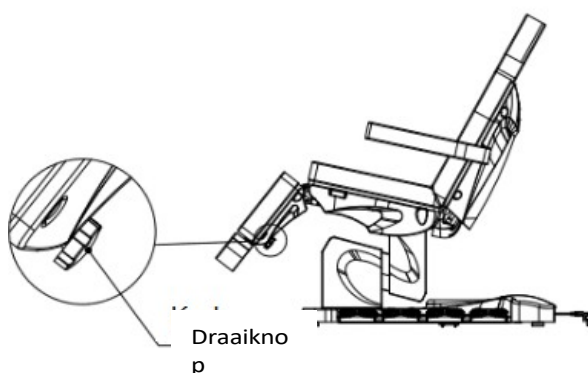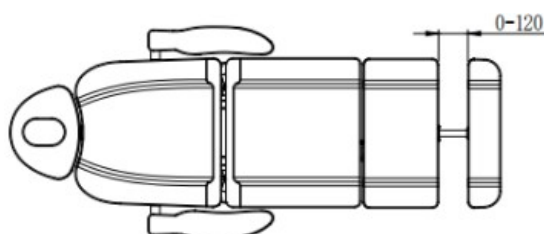


Armsteun installeren:

Schuif de armleuning in het gat aan de zijkant van de rugleuning. De armleuning moet stevig vastzitten. Draai hem naar rechts of links zodat hij goed op zijn plaats komt. Doe hetzelfde met de andere armsteun. De armsteun staat loodrecht op de grond (ongeacht de hoek van de stoel). Hij kan 180° gedraaid worden.

Installatie van de hoofdsteun:

Schuif de hoofdsteun in het gat bovenaan de rugleuning. Als de hoofdsteun op de juiste hoogte is, draai je de hendel aan de achterkant vast om de hoofdsteun vast te zetten.

Om de hoofdsteun te verlagen of te verlengen, draait u de draaihendel los, past u de hoofdsteun aan en draait u de draaihendel weer vast.

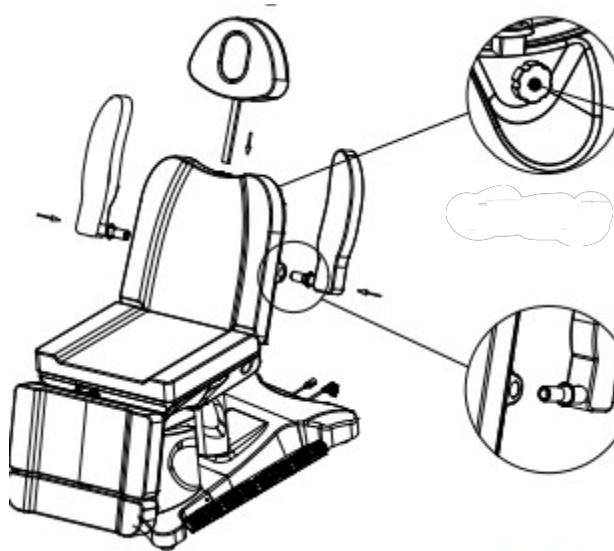

Het apparaat reinigen en desinfecteren

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

Om het oppervlak van de stoel in goede staat te houden, moet deze regelmatig worden gereinigd. Vergeet niet om de stoel na elk gebruik te reinigen en te desinfecteren. Het wordt aanbevolen om eens per maand een grondige desinfectie uit te voeren.

I Metalen en kunststof oppervlakken

Veeg metalen en kunststof oppervlakken en bedieningselementen schoon met een vochtige doek. Een kleine borstel werkt goed voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken. Gebruik niet te veel vloeistof om het apparaat schoon te maken. Desinfecteer het apparaat vervolgens met een geschikte vloeistof.

II Oppervlakken van roestvrij staal

Schoonmaken met een mild schoonmaakmiddel werkt het beste. Ammoniak en de meeste oplosmiddelen kunnen worden gebruikt om hardnekkige vlekken te verwijderen. Vermijd chloorhoudende oplossingen.

III Geverfde of verchroomde metalen oppervlakken

- Gebruik geen waterstralen (douches, hogedrukwaterkanonnen) voor het reinigen.
- Reinig het apparaat niet bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid en stel het niet bloot aan omstandigheden die kunnen leiden tot verontreiniging met vloeistoffen.
- Gebruik geen oplosmiddelen of zuren voor het reinigen.

IV Stoeloppervlak

- Neem het stoeloppervlak gelijkmatig af met een speciale leerreiniger en veeg het vervolgens af met een schone, zachte doek.

Onderhoud

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud gaat plegen.

1. Reparaties moeten worden uitgevoerd door ervaren en door de fabrikant goedgekeurd personeel. Reparaties door onbevoegd personeel kunnen letsel of schade aan het apparaat veroorzaken waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk is.
2. Gebruik alleen originele reserveonderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
3. Gebruik de elektrische cosmetische stoel of accessoires niet als ze niet goed werken.
4. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten worden gedocumenteerd.

Onderhoudsmaatregelen

Controleer de bedieningselementen en hun bedrading eenmaal per week. Controleer de conditie en werking van de volgende onderdelen minstens één keer per zes maanden:

1. Stroomkabel en de bevestiging ervan
2. Bedrading van de motor
3. De schakelkast en de bedrading ervan
4. Of er accessoires zijn bevestigd
5. Normale werking van het sluitsysteem

Als u defecten vaststelt, stop dan met het gebruik van de apparatuur en neem contact op met een erkend servicecentrum. Alleen ervaren of bevoegd personeel mag de actuator/bedieningseenheid openen of vervangen. Als een onderdeel van de apparatuur beschadigd is, trekt u de stekker uit het stopcontact en stopt u het gebruik. Stel vervolgens de service op de hoogte.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing methoden
Pedaal bediening voetpedaal reageert niet	1. Knop aan/uit-knop werkt wel of niet. 2. Controleer, of pedaal maximaal is ingedrukt. 3. Controleer of de stekker van het apparaat in het stopcontact zit. 4. Controleer, of alles correct correct is aangesloten.	1. Probeer de aan/uit-knop opnieuw in te schakelen. 2. Probeer andere knoppen in te schakelen en kijk of ze werken. 3. Ontkoppel apparaat i sluit het opnieuw aan. 4. Koppel de stekkers los en sluit ze opnieuw aan.
Apparaat maakt vreemde geluiden bij het laten zakken van de stoel	Schroef los	Schroeven vastdraaien
Lampjes voetpedaal branden niet	Doorgebrande zekering	Zekering vervangen

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is een professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Ltd.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Ltd:
(a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden,
c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut in acht te nemen voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn

2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en worden afgegeven bij de volgende inzamelpunten

inzameling van afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Aan het einde van hun levensduur bevatten oude apparaten volledig recycleerbare onderdelen en moeten ze dus worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.