

ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Kosmeetikatool 557A koos kaussidega



Importija:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, hoone
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2026

Enne kosmeetikatooli kasutamist lugege läbi kasutusjuhend.

1. Veenduge, et kõik pakkematerjalid on eemaldatud.
2. Veenduge, et tool on töökorras.
3. Paigutage kosmeetikatool sinna, kus seda kasutama hakatakse.


Nõuanne! Lapsed ja kogenematud isikud ei tohi seda seadet kasutada. Lapseid tuleb jälgida ja nad ei tohi kosmeetikatooli läheduses mängida.

Mõõtmed:

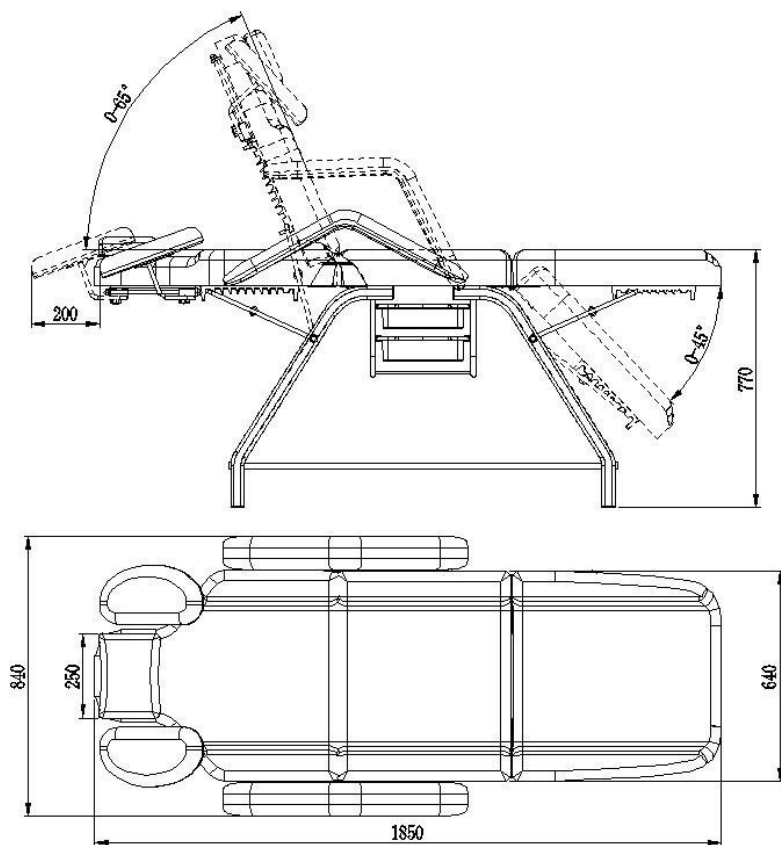


Seadme paigaldusjuhend:

Paigalda tugiraam. Aseta lamamisosa tasasele ja stabiilsele pinnale, seejärel kinnita tugiraam lamamisosale kruvidega. Paigalda järjekorras: lamamispind (1), seejärel ühendusdetail (2) ja kruvi (3).

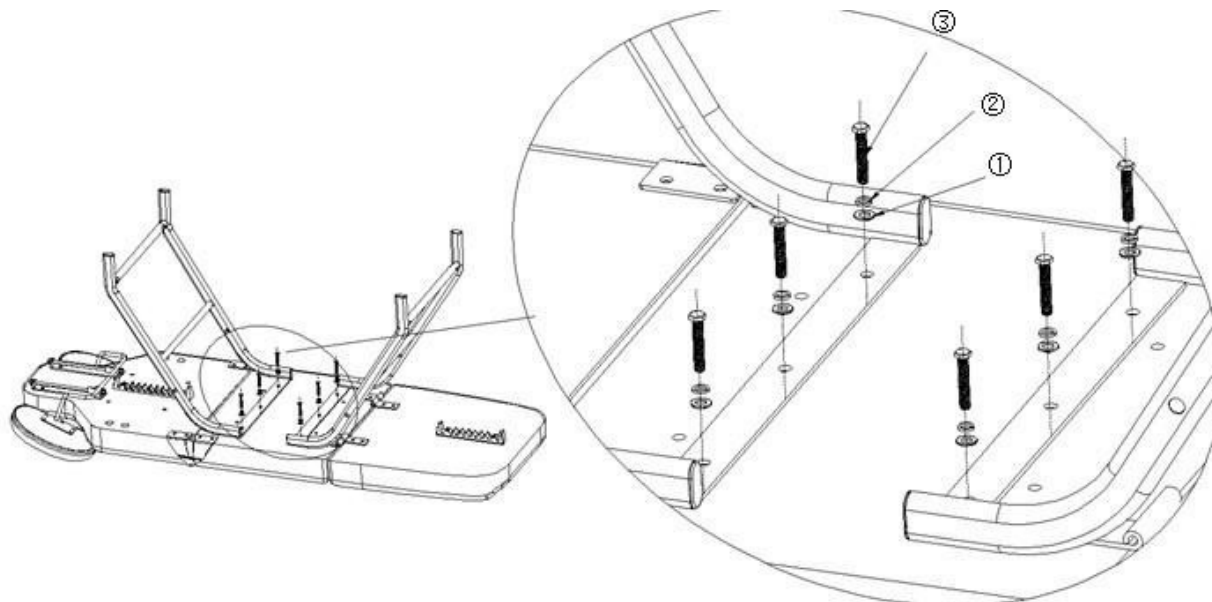


Paigaldage taldriku tugi:


Asetage taldriku tugi raamile ja kinnitage see kruvidega.

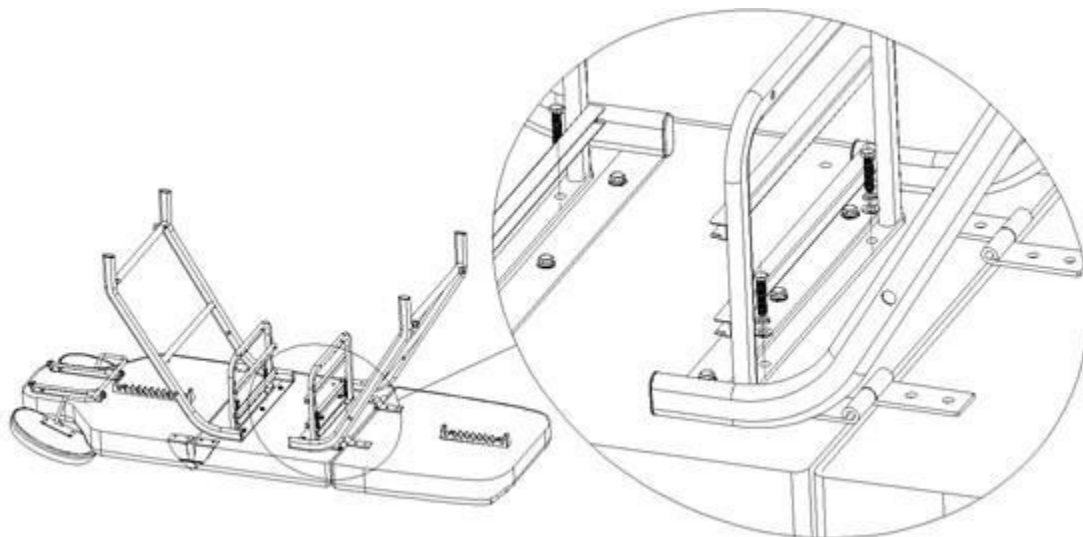


Seejärel ühendage taldriku kinnitus ühendustoruga ja pingutage see kruvidega kinni, nagu alloleval pildil näidatud.

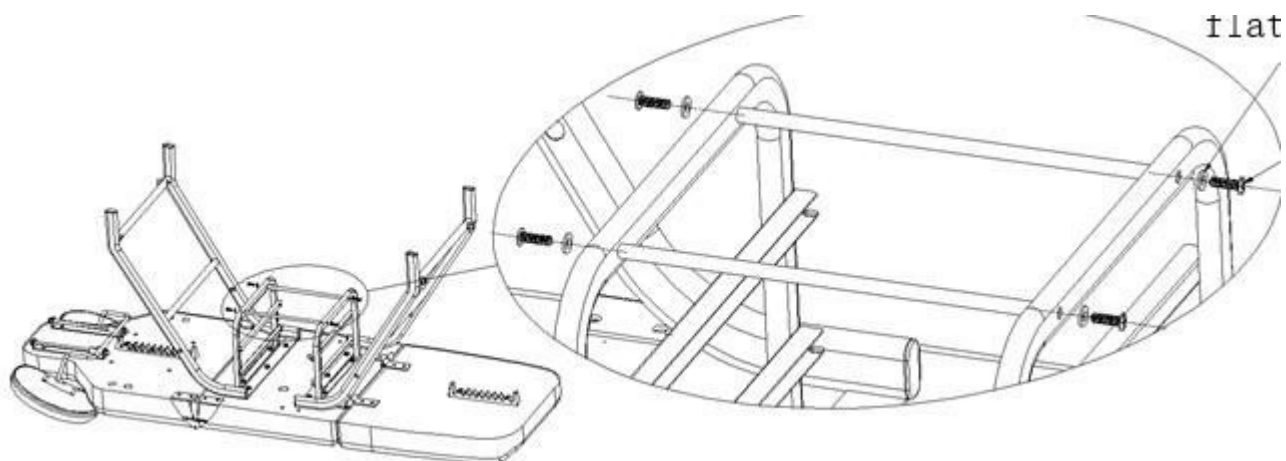

Kinnitage tugitooli raami ühendusvarras: kinnitage ühendusvarras kruvidega tugitooli jalgade 4 avasse.

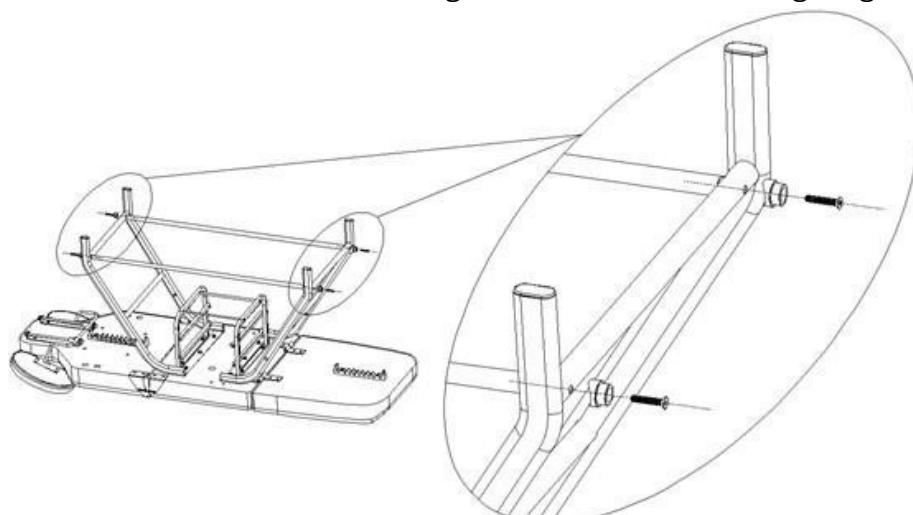


Kinnitage seljatoe ja jalatoe reguleerimisseadmed mõlemal pool tugitooli jalgu kruvidega (lühem vedru seljatoe alla ja pikem vedru jalatoe alla):

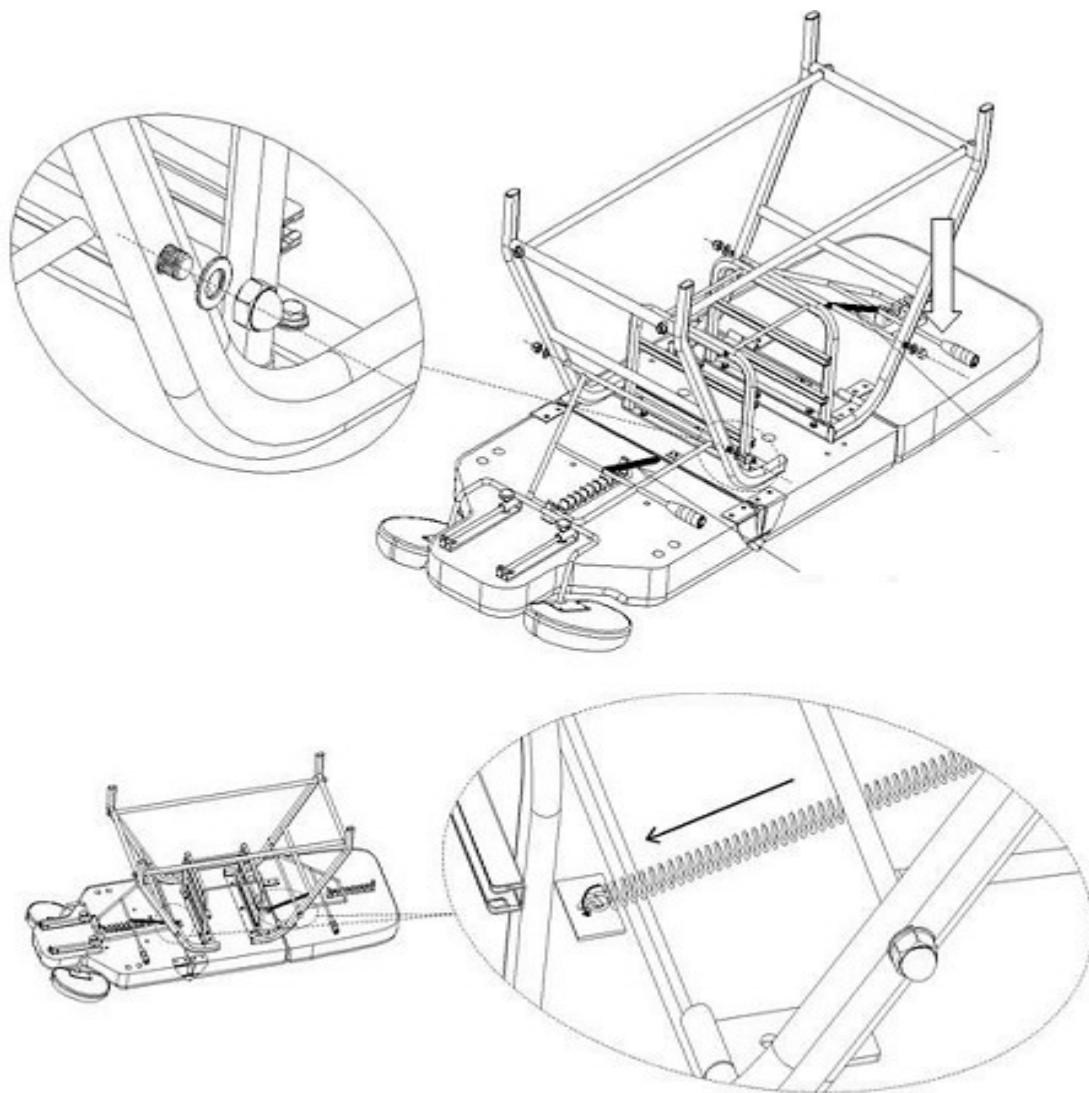


Paigaldage käetoe nupp:

Suuna nupp käetoe paigaldusavale ja keerake seda päripäeva. Löö nupp lahti, et nihutada käetoet, nagu pildil näidatud.

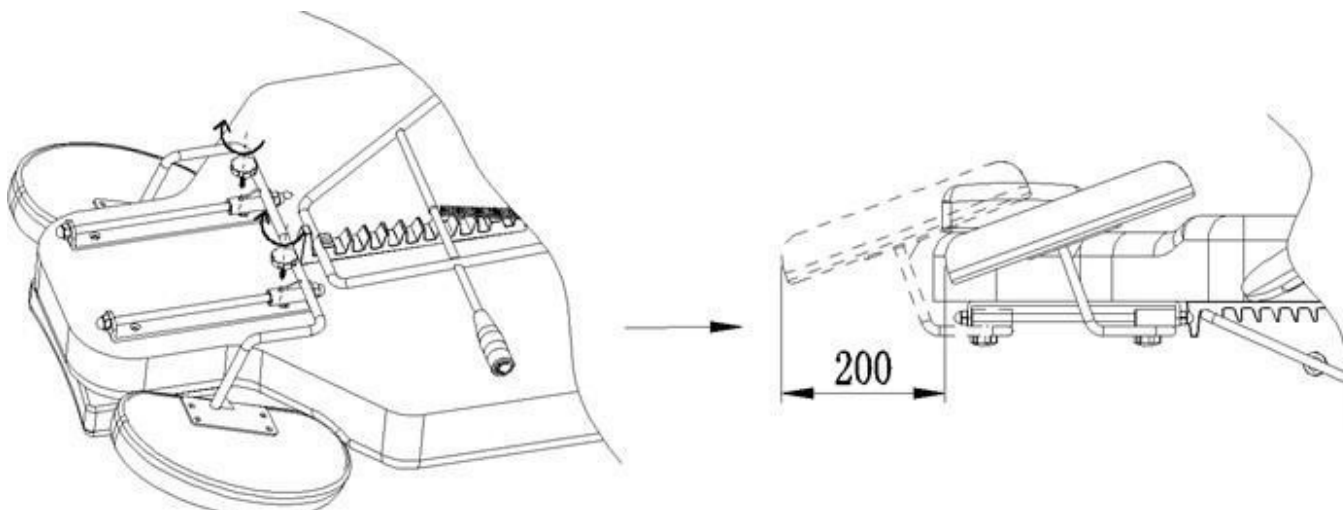


Käetoe paigaldamine:

Lükake käetugi seljatoe küljel asuvasse avasse. Käetugi peab olema kindlalt kinnitatud. Pöörake seda paremale või vasakule, et see asuks õigesti oma kohale.

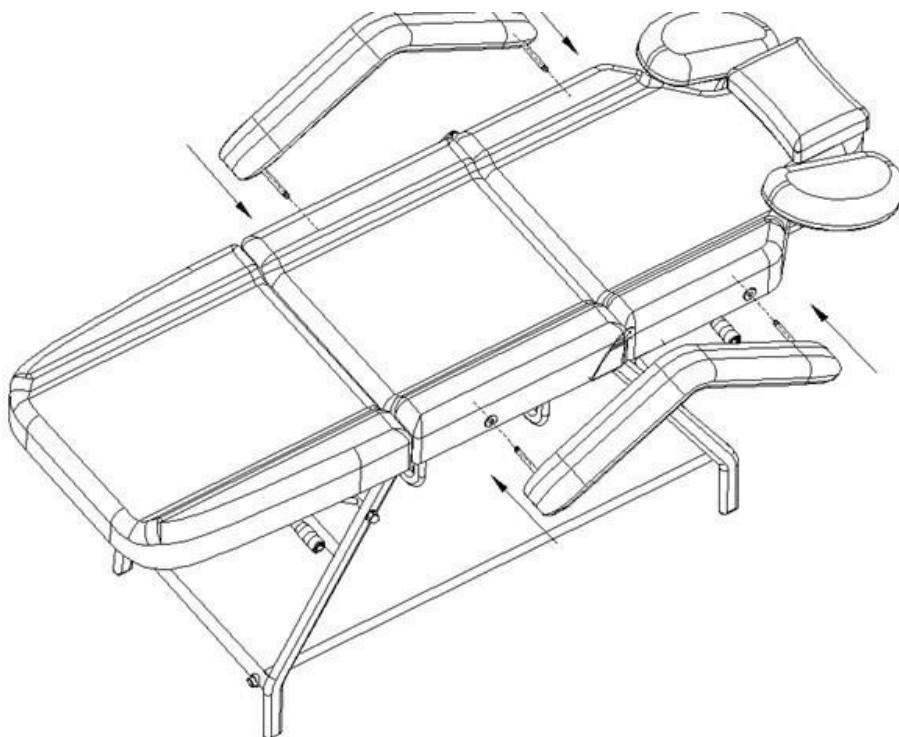

Paigaldage hoidik vastavalt allolevale pildile. Lükake hoidik istme all asuvasse juhtidesse.

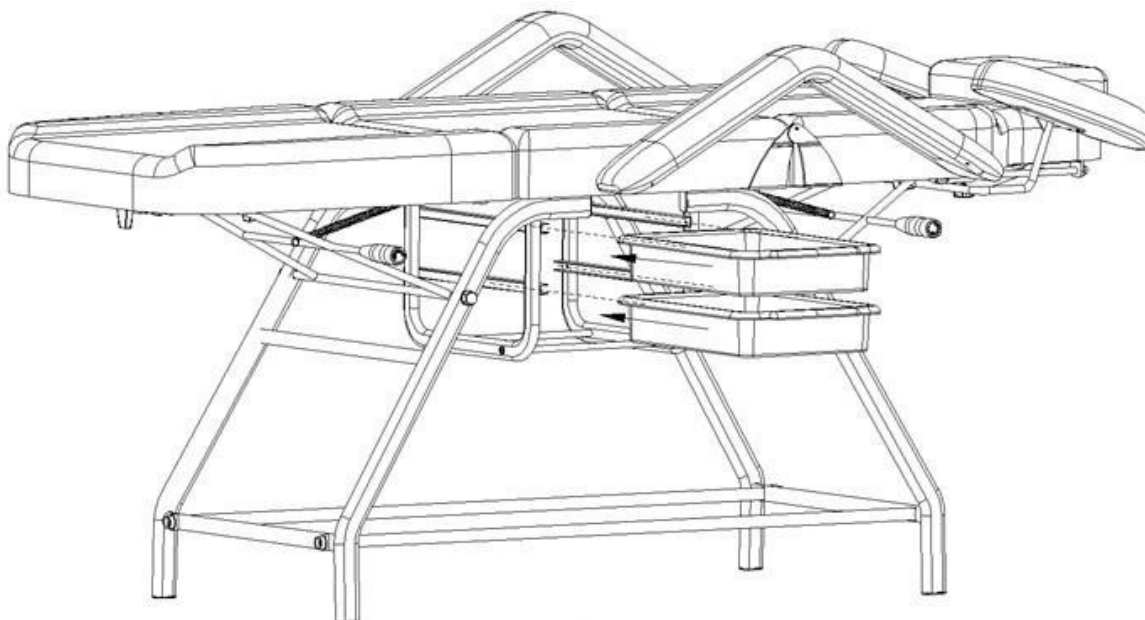

Istme funktsioonid:

1. Seljatoe tõstmine

Seljatoe ja jalatoe kaldenurka saab reguleerida käsitsi käepideme abil. Nii seljatoel kui ka jalatoel on eraldi käepidemed, mistõttu saab iga osa kõrgust eraldi reguleerida. See võimaldab istme seadeid kohandada vastavalt kliendi vajadustele, et protseduur oleks võimalikult mugav. Tugitooli saab lahti klappida kuni lamamisasendini.

Seljatoe tõstmiseks haarake hoobast kinni, tõstke see üles ja seadke soovitud kõrgusele.

2. Seljatoe langetamine

Hoia kinni istme seljatoest ja haara teisega käega hoobast kinni ning liiguta seda allapoole, kuni saavutad sobiva asendi. Kui oled saavutanud soovitud kõrguse, lase hoob lahti.



Seadme puhastamine ja desinfitseerimine:

- Tooli pinna heas seisukorras hoidmiseks tuleb seda regulaarselt puhastada. Puhasta ja desinfitseeri tool pärast iga kasutamist. Soovitav on teha põhjalik desinfitseerimine kord kuus.

I Metall- ja plastpinnad

- Metall- ja plastpindade ning juhtnuppude puhastamiseks pühkige neid niiske lapiga. Raskesti ligipääsetavate kohtade või nurkade puhastamiseks sobib hästi väike harja. Ärge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju puhastusvedelikku. Seejärel desinfitseeri seade sobiva desinfektsioonivedelikuga.

II Roostevabast terasest pinnad

- Parim tulemus annab puhastamine pehme pesuvahendi lahusega. Ammoniaaki ja enamikku lahusteid võib kasutada raskesti eemaldatavate plekkide puhastamiseks. Vältige klooripõhiseid lahuseid.

III Värvitud või kroomitud metallpinnad

- Ärge kasutage puhastamiseks veepihustid (dušš, kõrgsurve pesurid).
- Ära puhasta kõrgel temperatuuril ja kõrge õhuniiskuse juures, ära jäta seadet tingimustesse, mis võivad põhjustada vedelikuga saastumist.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega happeid.

IV Istme pind

- Pühkige istme pinda ühtlaselt spetsiaalse nahapuhastusvahendiga ja seejärel puhastage seda puhta, pehme lapiga.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne kosmeetikaseadme kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikupersonali poolt aitab vältida soovimatuid tagajärgi protseduuri ajal.
2. Seadet ei tohi lahti monteerida ega kasutada muudel eesmärkidel kui käesolevas kasutusjuhendis on näidatud. Kõik hooldus- ja remonditööd peab tegema ainult volitatud teeninduse töötaja (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada vedelike läheduses, niisketes kohtades ega märgade kätega – nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tuleb pistik viivitamatult pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust ACTIVESHOP Sp. z o.o. volitatud teenindusega:
 - a) vedelik on sattunud seadmesse, b) seadmest tuleb imelik lõhn, suitsu või imelikke hääli, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Kaablitele ei tohi asetada mingeid esemeid. Seadet ei tohi paigaldada kohtadesse, kus keegi võib toitejuhtmele astuda.
6. Ohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe pärast seadme kasutamist alati pistikupesast välja tõmmata.
7. Seadme avasse ei tohi midagi panna. Kui avasse satub võõrkeha, tuleb pistik pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Seadet ei tohi asetada ebastabiilsele alusele, riiulile või sõidukile. Kukkumise korral võib seade kahjustuda.
9. Seadme ettenähtud kasutusaja tagamiseks on soovitatav oodata üks minut enne toitenupu uuesti vajutamist (siselülitamise ja väljalülitamise vahel ning vastupidi).
10. Toiteallikas peab vastama tüübisildil esitatud spetsifikatsioonile. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korrektselt töötamist, seadme rikkumist või isegi põlemist.

TÄHELEPANU:

1. Toitekaabli kahjustumise või muude rikete korral tuleb pöörduda volitatud teeninduskeskuse poole – see aitab vältida ohtu.
2. Käesolevat seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning füüsilise või vaimse puudega isikud ning seadme kasutamise kogemuse ja teadmistega isikud, kui tagatakse järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, nii et sellega seotud ohud oleksid arusaadavad.
3. Seade ei ole mõeldud laste mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamise kohta.

5. Käesolev elektriseade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida laste käeulatusesst väljas.

SEADME KÄITLEMINE



Kasutatud elektriseadmed, tarvikud ja pakendid tuleb viia ringlussevõtukeskustesse vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata konteineritesse koos olmejäätmetega. Tuleb

järgida sellise seadmete äraviskamise eeskirju. Looduskeskkonda kaitstes

vastavalt direktiivile 2012/19/EL kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kohta tuleb kasutatud seadmed koguda eraldi ning seejärel viia kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktidestse. Kasutusaja lõpus sisaldavad ka vanad seadmed täisväärtuslikke komponente, mis sobivad ringlussevõtuks, seetõttu tuleb need suunata ümbertöötlemiseks. Seetõttu tuleb need viia vastavatesse kogumispunktidestse, samuti võib need anda üle ettevõttele ACTIVESHOP Sp. z o.o.

HOIDMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleks transportida temperatuurivahemikus (–) 20 °C kuni (+) 50

°C vahemikus ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritavas ruumis, kus suhteline õhuniiskuse ei ületa 75%. Käitamistemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Ladustamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega kukutada, samuti ei tohi seda avaldada mehaanilistele löökidele ega ilmastikutingimustele.