

ACTIVESHOP®

MANUAL DE UTILIZARE

Scaun cosmetic 557A cu tăvi



Importator:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Str. Graniczna 8b, cl. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2026

Înainte de a utiliza scaunul cosmetic, citiți instrucțiunile.

1. Asigurați-vă că toate materialele de ambalare au fost îndepărtate.
2. Asigurați-vă că scaunul este în stare de funcționare.
3. Așezați scaunul cosmetic în locul în care va fi utilizat.


Sfat! Copiii și persoanele fără experiență nu pot utiliza acest aparat. Copiii trebuie supravegheați și nu au voie să se joace în apropierea scaunului cosmetic.

Dimensiuni:

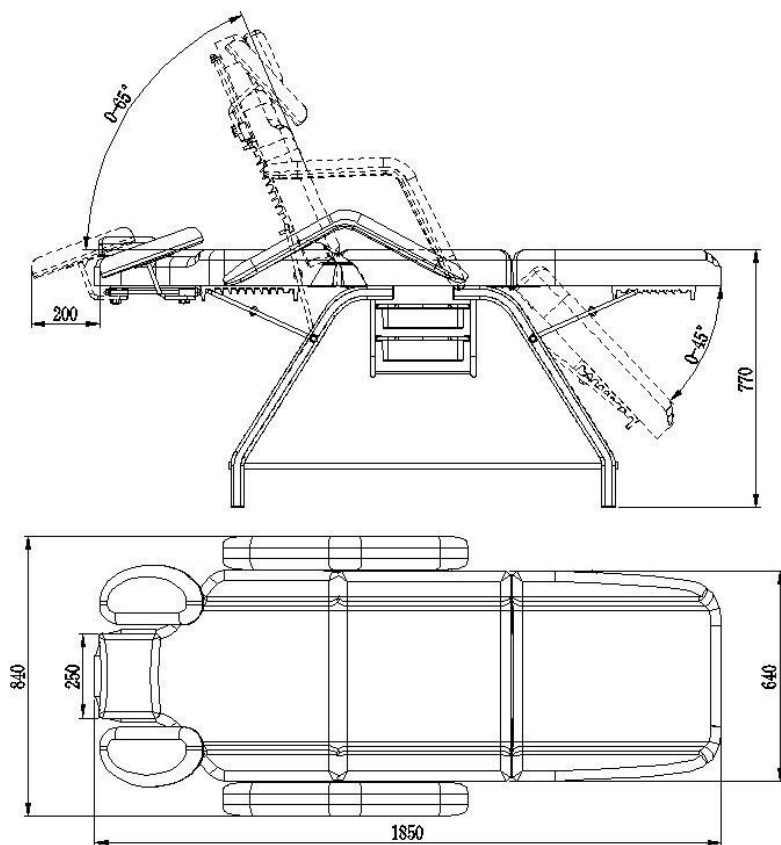


Instrucțiuni de asamblare a aparatului:

Instalați cadrul fotoliului. Așezați șezlongul pe o suprafață plană și stabilă, apoi fixați cadrul fotoliului de șezlong cu ajutorul șuruburilor. Introduceți în ordine: suportul plat (1), apoi elementul de legătură (2) și șurubul (3).

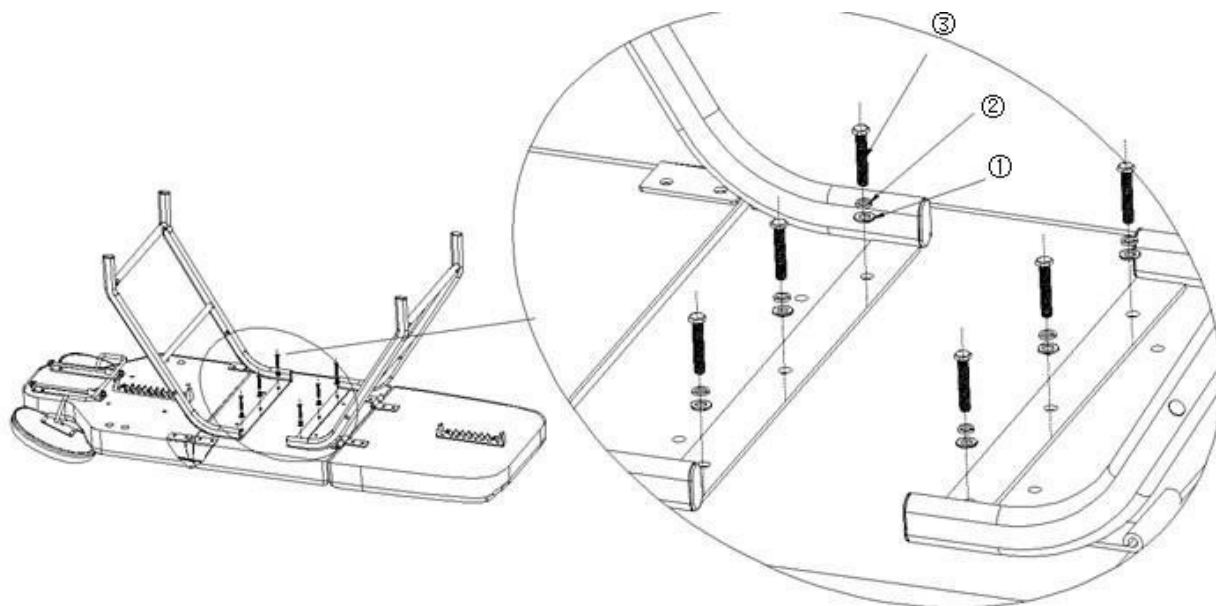


Instalați suportul pentru tavă:


Așezați suportul tăvii pe cadru și fixați-l cu șuruburi.

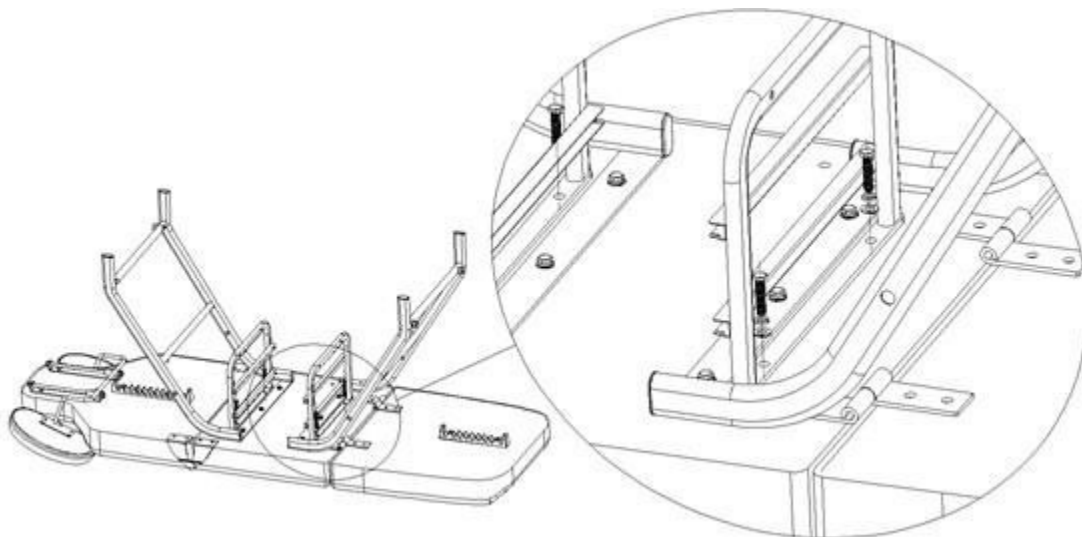


Apoi conectați suportul tăvii la țeava de legătură și strângeți-l cu șuruburi, așa cum se arată în imaginea de mai jos.

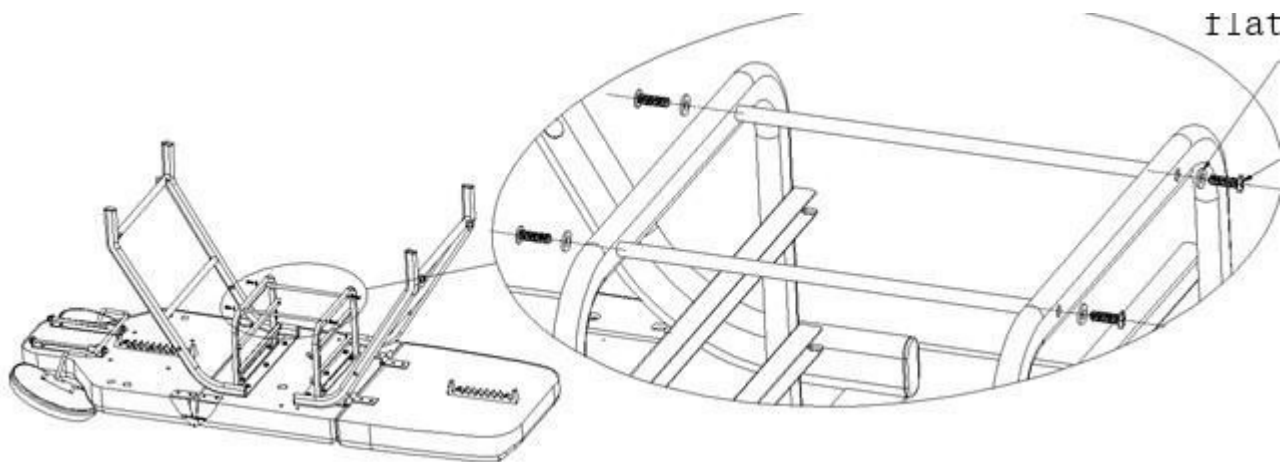

Fixați tija de legătură a cadrului fotoliului: fixați tija de legătură în cele 4 orificii din picioarele fotoliului, folosind șuruburi.

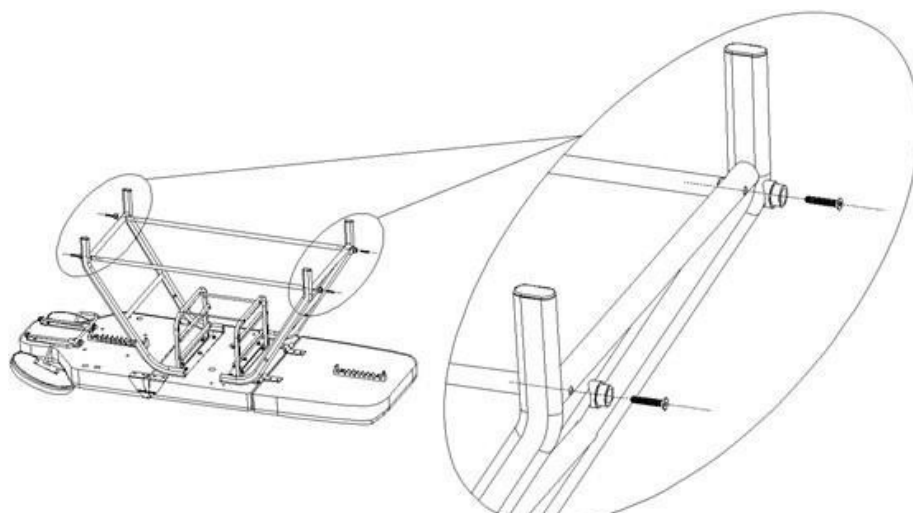


Instalați dispozitivul de reglare a spătarului și a suportului pentru picioare pe ambele părți ale picioarelor scaunului cu ajutorul șuruburilor (arcul mai scurt sub spătar, iar cel mai lung sub

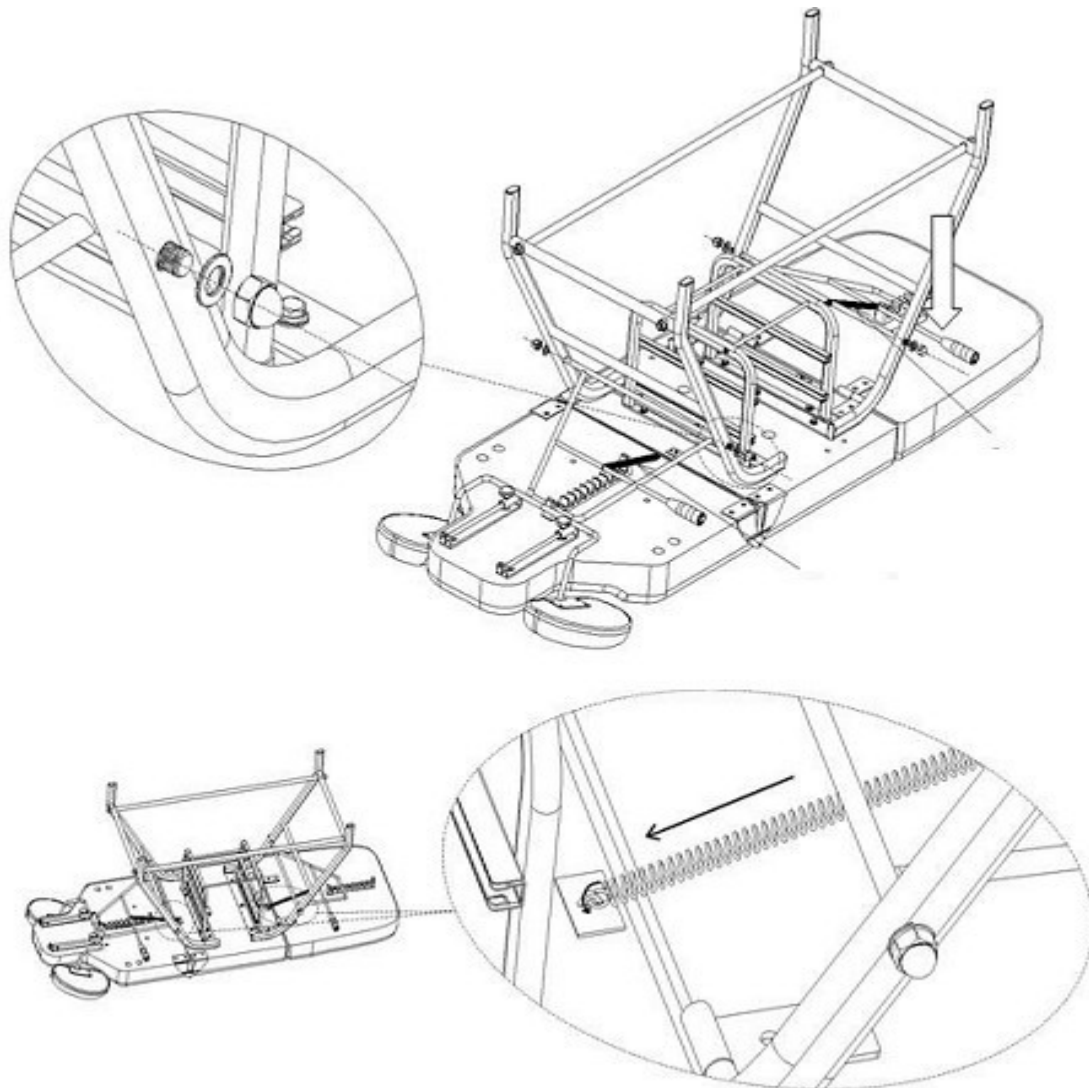

suportul pentru picioare):


Instalați butonul cotierii:

Aliniați butonul cu orificiul de montare al cotierului, apoi strângeți-l în sensul acelor de ceasornic. Slăbiți butonul pentru a regla poziția cotierului, conform imaginii.

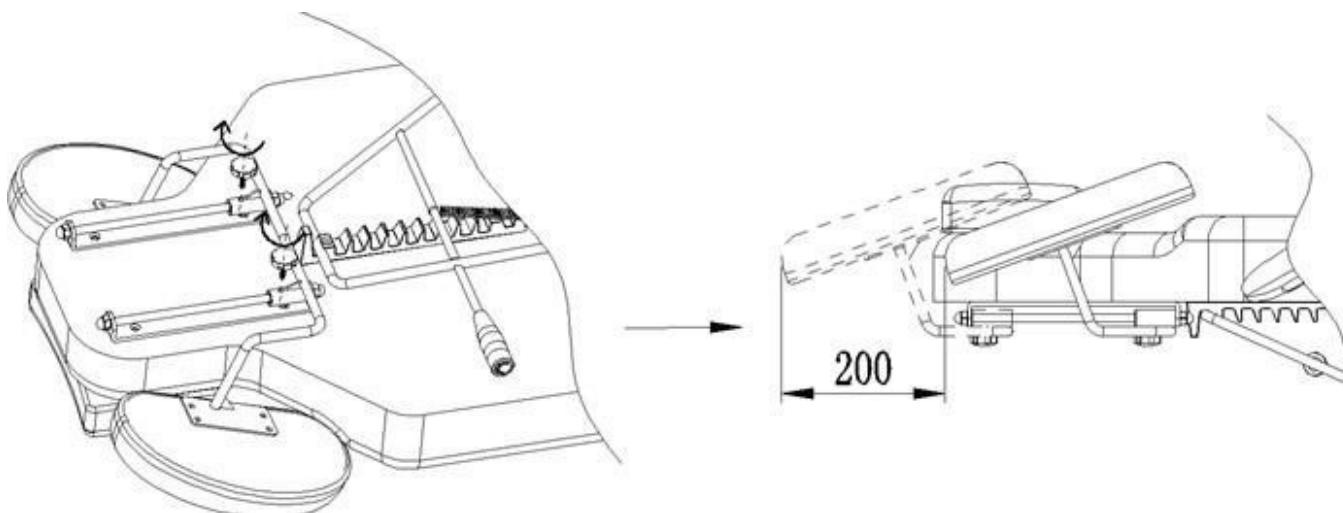


Instalarea cotierului:

Introduceți cotiera în orificiul situat pe partea laterală a spătarului. Cotiera trebuie să fie fixată stabil. Rotiți-o spre dreapta sau spre stânga pentru a o fixa corespunzător.

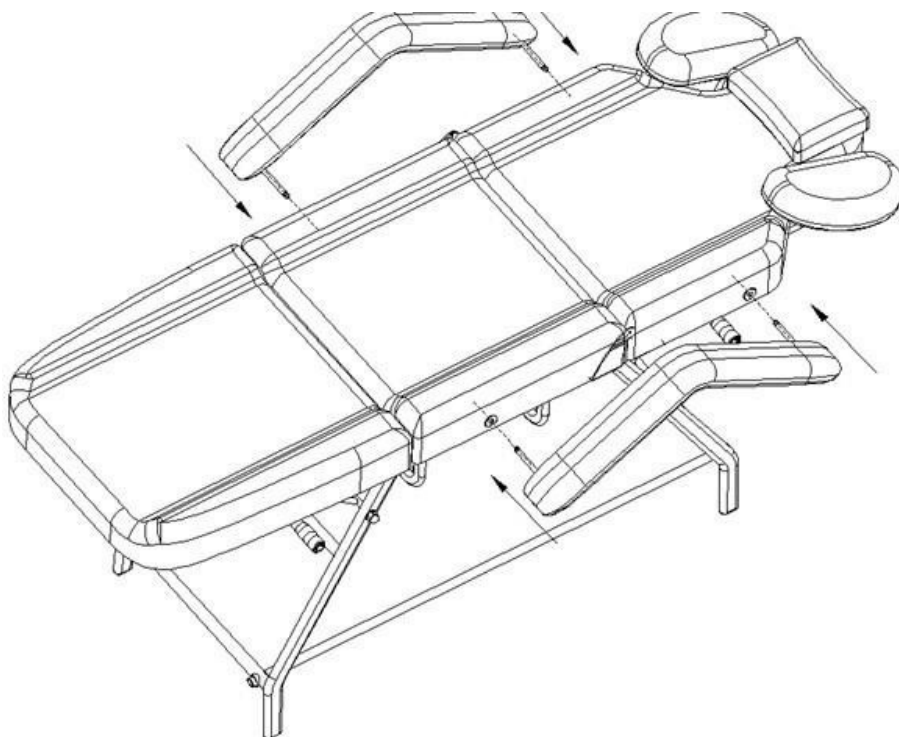

Instalați recipientul conform imaginii de mai jos. Introduceți recipientul în ghidajele situate sub scaun.

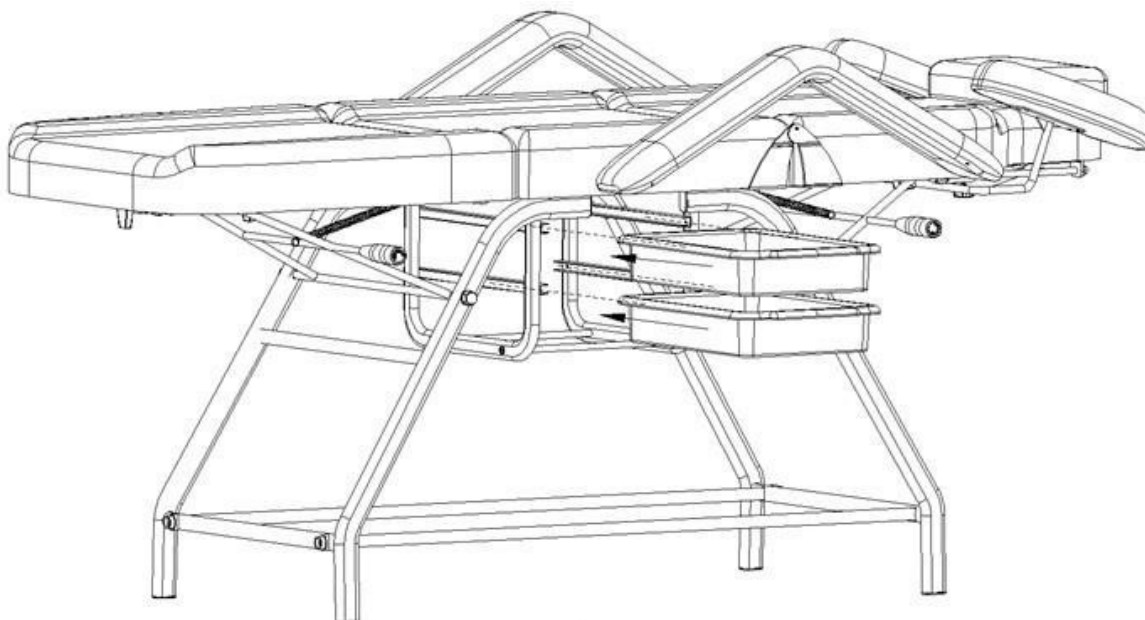

Funcțiile scaunului:

1. Ridicarea spătarului

Reglarea unghiurilor spătarului și a suportului pentru picioare se face cu ajutorul unei manete manuale. Atât spătarul, cât și suportul pentru picioare au manete separate, astfel încât înălțimea fiecărei părți se reglează separat. Acest lucru permite adaptarea poziției scaunului în mod individual la nevoile clientului, pentru ca tratamentul efectuat să fie cât mai confortabil. Scaunul poate fi rabatat până în poziția de șezlong.

Pentru a ridica spătarul, apucați maneta, ridicați-o și reglați-o la înălțimea dorită.

2. Coborârea spătarului

Țineți spătarul scaunului, iar cu cealaltă mână apucați mânerul pârghiei și coborâți-o până ajunge în poziția dorită. După ce ați atins înălțimea dorită, eliberați pârghia.



Curățarea și dezinfectarea dispozitivului:

- Pentru a menține suprafața scaunului în stare bună, aceasta trebuie curățată regulat. Nu uitați să curățați și să dezinfectați scaunul după fiecare utilizare. Se recomandă efectuarea unei dezinfectări temeinice o dată pe lună.

I Suprafețe metalice și din plastic

- Pentru a curăța suprafețele metalice și din plastic, precum și elementele de comandă, ștergeți-le cu o cârpă umedă. Pentru curățarea locurilor greu accesibile sau a colțurilor, o periuță mică este foarte utilă. Nu folosiți o cantitate prea mare de lichid de curățare. Apoi, dezinfectați aparatul cu un lichid adecvat.

II Suprafețe din oțel inoxidabil

- Cea mai bună metodă de curățare este utilizarea unei soluții ușoare de detergent. Amoniacul și majoritatea solvenților pot fi folosiți pentru îndepărtarea petelor dificile. Evitați soluțiile pe bază de clor.

III Suprafețe metalice vopsite sau cromate

- Nu utilizați jeturi de apă (dușuri, tunuri de apă de înaltă presiune) pentru curățare.
- Nu curățați aparatul la temperaturi ridicate și umiditate ridicată; nu expuneți aparatul la condiții care pot duce la contaminarea cu lichide.
- Nu utilizați solvenți și acizi pentru curățare.

IV Suprafața fotoliului

- Ștergeți suprafața fotoliului uniform cu un produs special de curățare a pielii, apoi ștergeți-o cu o cârpă curată și moale.

MĂSURI DE SIGURANĂȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Utilizarea aparatului exclusiv de către personal cosmetic calificat permite evitarea efectelor nedorite în timpul tratamentului.
2. Nu este permisă dezasamblarea aparatului sau încercarea de a-l utiliza în alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual de utilizare. Toate lucrările de service și reparațiile trebuie efectuate exclusiv de către un angajat al unui service autorizat (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu utilizați aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude, pentru a evita pătrunderea lichidelor în aparat.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați serviciul de service autorizat al firmei ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri:
 - a) lichidul a pătruns în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați obiecte pe cabluri. Nu instalați aparatul în locuri unde cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată după ce ați terminat de utilizat aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. În cazul în care un obiect străin pătrunde în orificiu, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. În cazul unei căderi, aparatul se poate deteriora.
9. Pentru a garanta durata de viață stabilită a aparatului, se recomandă să se respecte un interval de o minută înainte de a apăsa din nou butonul de pornire (între pornire și oprire și invers).
10. Alimentarea trebuie să fie conformă cu specificațiile indicate pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul ca funcționării incorecte a aparatului, a deteriorării acestuia și chiar a incendiului.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, vă rugăm să contactați un service autorizat – astfel veți evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice sau mentale reduse, precum și de persoane fără experiență și cunoștințe privind echipamentul, cu condiția să li se asigure supravegherea sau instruirea cu privire la utilizarea în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Aparatul nu este destinat jocului copiilor. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când copiii sau persoanele care nu au cunoștințe suficiente privind utilizarea acestuia se află în apropiere.

5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, de aceea aparatul trebuie utilizat și păstrat în afara razei de acțiune a copiilor.

RECICLAREA APARATULUI



Echipamentele electrice uzate, accesoriile și ambalajele trebuie predate la centrele de reciclare a materiilor prime, în conformitate cu normele de protecție a mediului. Echipamentele electrice nu trebuie aruncate în containere pentru deșeuri menajere. Trebuie

respecta regulile privind aruncarea acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediului natural, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE privind echipamentele electrice și electronice uzate, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare a echipamentelor electronice și electrice uzate. La sfârșitul duratei de viață, precum și echipamentele vechi conțin componente valoroase care pot fi reciclate, de aceea trebuie predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, dar pot fi predate și firmei ACTIVESHOP Sp. z o.o.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (–) 20 °C și (+) 50 °C, exclusiv în ambalajul original. Aparatul trebuie depozitat într-un spațiu bine ventilat, cu o umiditate relativă de maximum 75%. Temperatura de funcționare este cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul depozitării și transportului, nu aruncați și nu scăpați aparatul, nu-l expuneți la șocuri mecanice sau la factori atmosferici.