

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCCIONES DE USO

Sillón cosmético hidráulico Sillon 210



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polonia

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2025





Buscar
otros
idiomas




Dimensiones:





Montaje:

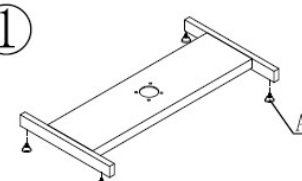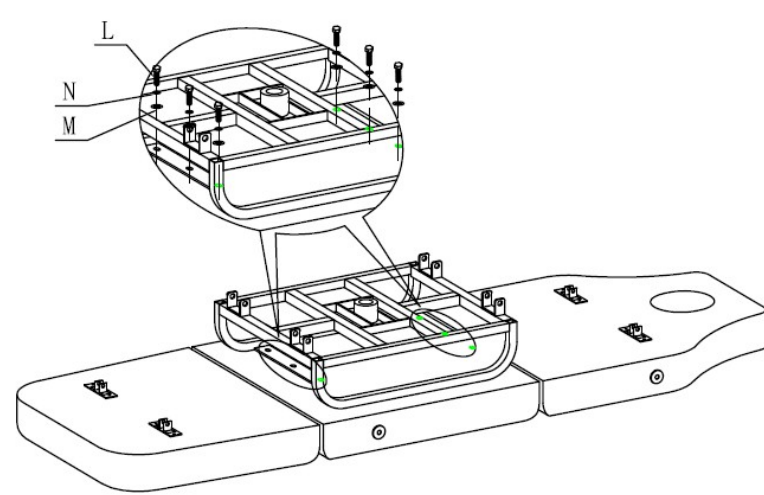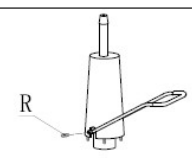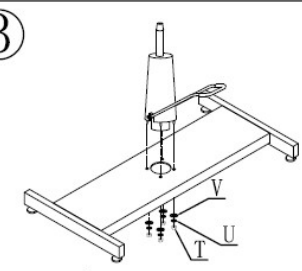A  4pcs	B  M6 4pcs	C  M6X35 4pcs	D  2pcs	E  M5X8 8pcs	F  4pcs	G  2pcs	H  M12X80 4pcs
I  φ12 4pcs	J  M12 4pcs	K  2pcs	L  M8X25 6pcs	M  φ8 6pcs	N  φ8 6pcs	O  M10X25 1pcs	P  φ10 1pcs
Q  φ10 1pcs	R  2pcs	S  1pcs	T  M6 4pcs	U  M6 4pcs	V  M6 4pcs	① 	
④ 						② 	
						③ 	
						CH-210	


1. Introduzca las arandelas en la base del sillón.
2. Monte la palanca de ajuste de altura en el cilindro utilizando el elemento R.
3. Coloque el cilindro en la base del sillón y apriételo con los elementos V, U y T.
4. Coloque el marco metálico del asiento en la parte inferior del sillón y fíjelo con los elementos L, M y N.

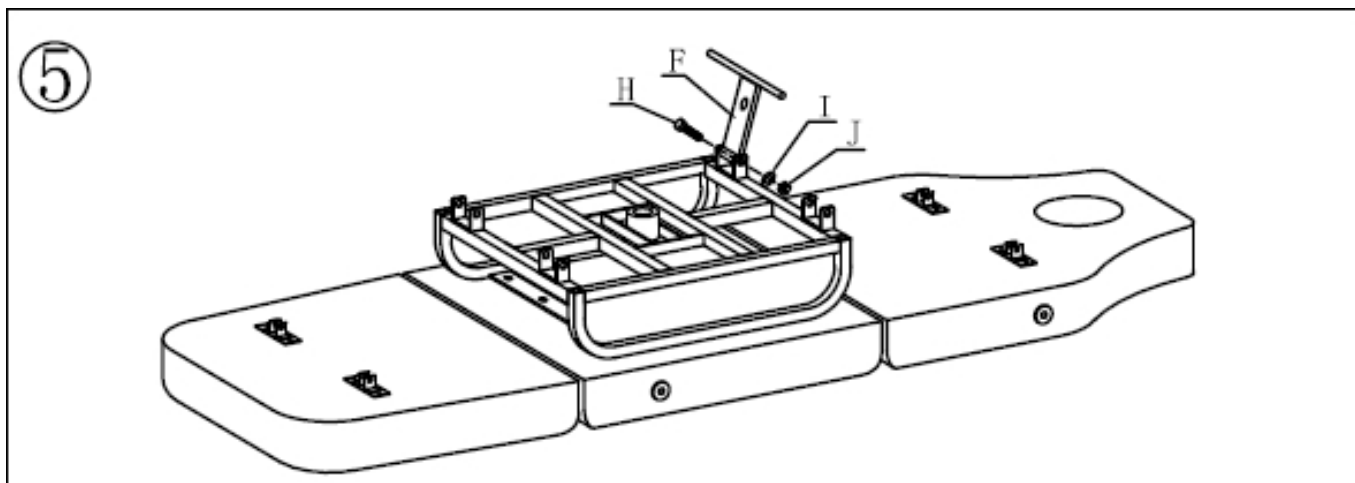


5. Monte el elemento F, apretándolo con los elementos I, J y H.

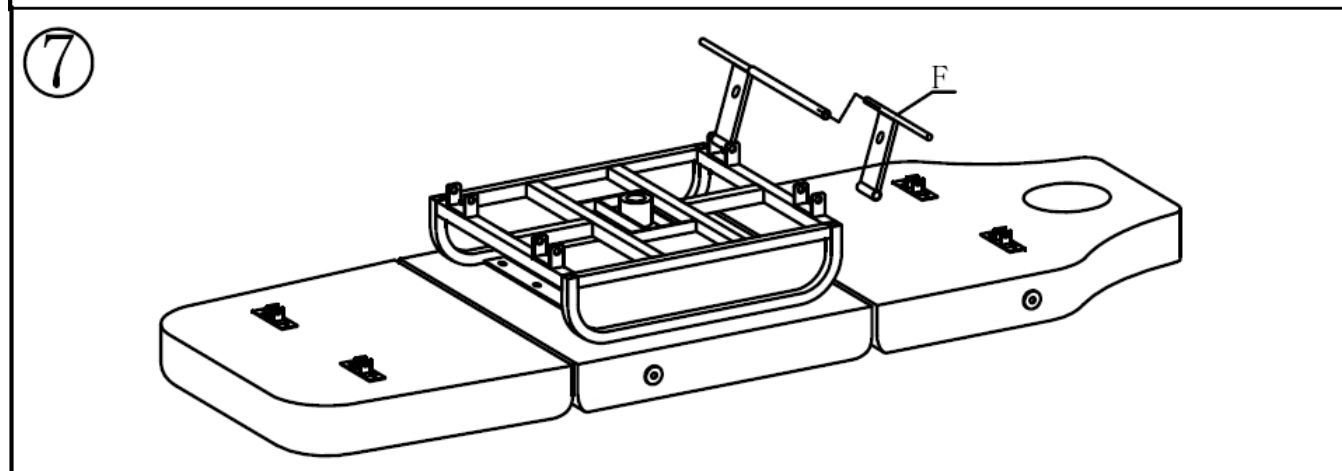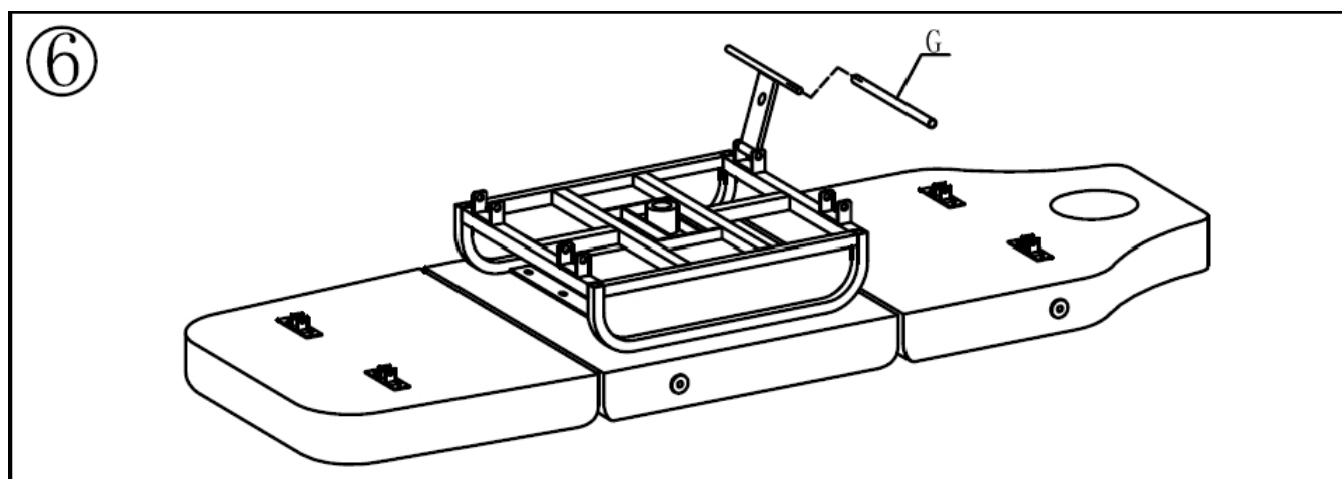


- 6,7. Utilice el elemento G para unir los dos elementos F.

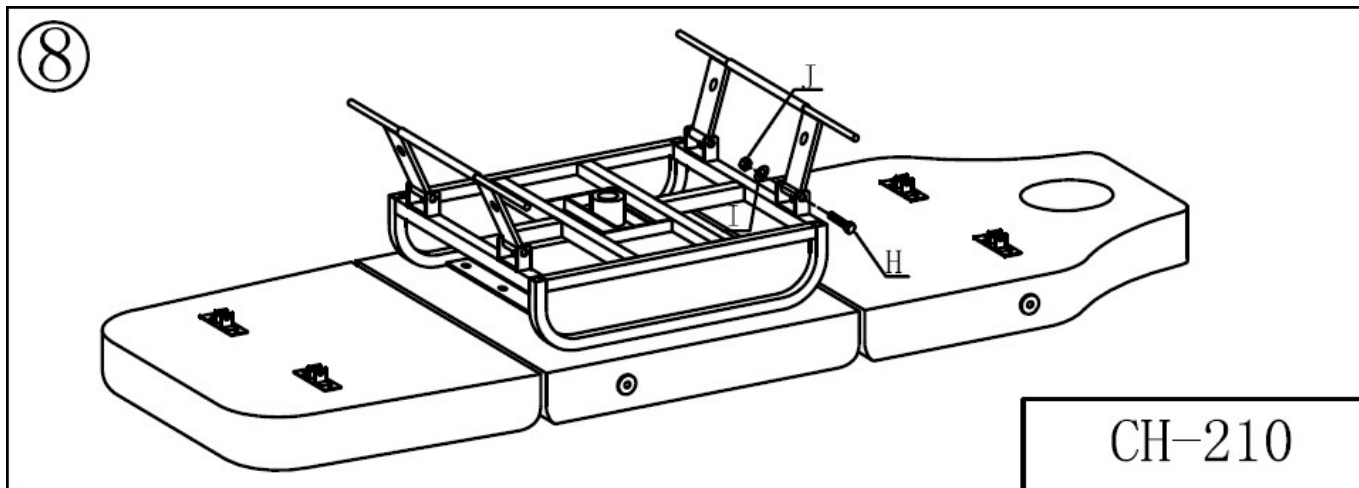


8. Apriete con los elementos J y H y repita la operación en el otro lado.

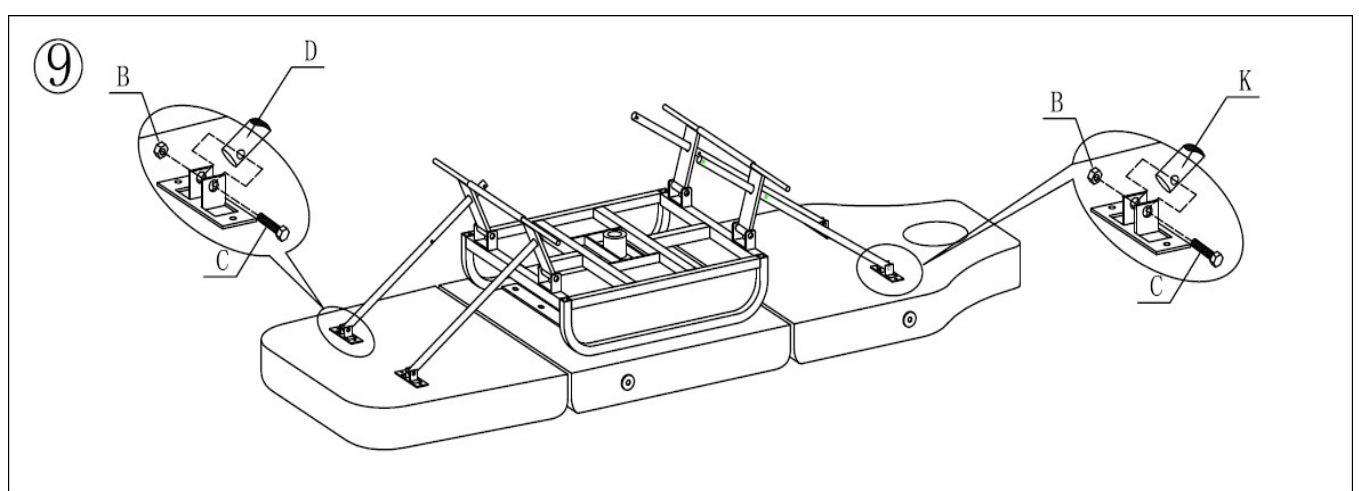

9. Inserte los elementos D y K y, a continuación, atorníllelos utilizando B y C.

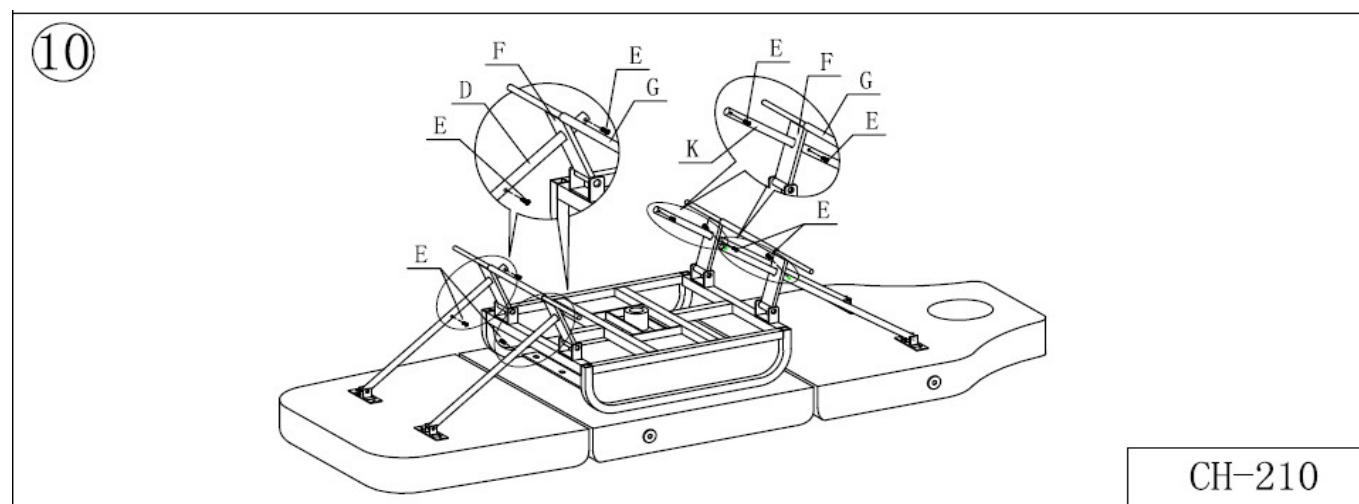

10. Fije los soportes con los elementos E.

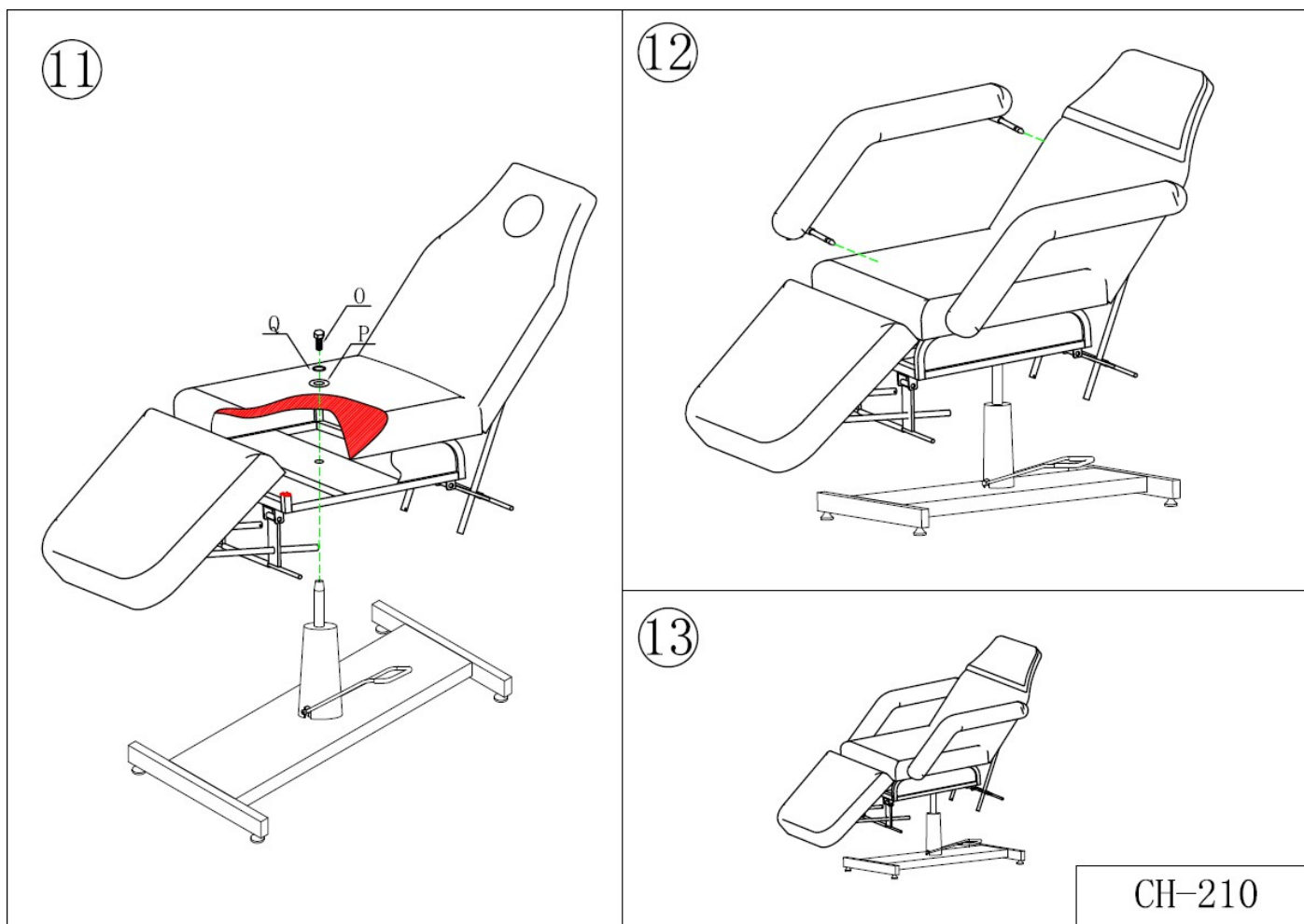

11. Coloque el asiento en el vástago del actuador y, a continuación, apriételo utilizando los elementos Q, P y O.

12. Inserte los reposabrazos como se muestra en la ilustración.

Funciones del sillón:

- Levantamiento del sillón: levante el sillón presionando la palanca
- Bajar el sillón: presione hacia abajo hasta que se baje completamente
- Bloqueo del giro del sillón: levante la palanca al máximo

¡Atención!

No se siente bruscamente ni tire peso sobre el sillón. Está prohibido mover o trasladar el sillón mientras haya personas u otros pesos sobre él. No se suba al sillón con los pies o las rodillas, no se balancee, no se siente en los reposabrazos y no se siente más de una persona.

Limpieza y desinfección del aparato:

Desconecte el dispositivo de la corriente eléctrica antes de comenzar la limpieza.

Para mantener la superficie del sillón en buen estado, es necesario limpiarla con regularidad. Recuerde limpiar y desinfectar el sillón después de cada uso. Se recomienda realizar una desinfección exhaustiva una vez al mes.

I Superficies metálicas y plásticas

Para limpiar las superficies metálicas y plásticas, así como los elementos de control, frótelos con un paño húmedo. Para limpiar las zonas o esquinas de difícil acceso, es recomendable utilizar un cepillo pequeño. No utilice una cantidad excesiva de líquido para limpiar el dispositivo. A continuación, desinfecte el dispositivo con un líquido adecuado.

II Superficies de acero inoxidable

Lo mejor es limpiarlas con una solución detergente suave. El amoníaco y la mayoría de los disolventes pueden utilizarse para eliminar manchas difíciles. Evite las soluciones a base de cloro.

III Superficies metálicas pintadas o cromadas

- No utilice chorros de agua (ducha, cañones de agua a alta presión) para limpiar.
- No limpie a altas temperaturas ni con alta humedad ambiental, no exponga el dispositivo a condiciones que puedan provocar la contaminación con líquidos.
- No utilice disolventes ni ácidos para la limpieza.

IV Superficie del asiento

- Limpie la superficie del sillón de manera uniforme con un producto especial para limpiar piel y, a continuación, frótela con un paño limpio y suave.

Mantenimiento:

- 1. Limpieza diaria**
Elimine el polvo con un paño suave y seco.
- 2. Eliminación de la suciedad persistente**
Como es sabido, es difícil eliminar la suciedad persistente con un paño seco normal. En tal caso, primero se debe utilizar un paño suave con detergente neutro diluido y, a continuación, frotar con un paño seco.
- 3. Está prohibido el uso de benceno, diluyentes, gasolina u otros disolventes.**
Estos productos pueden dañar la piel o corroer el producto.
- 4. Almacenamiento y condiciones de uso**
No exponga el producto a la luz solar intensa ni a la humedad. De lo contrario, podría dañar el producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El dispositivo es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del dispositivo solo por personal cosmético cualificado permite evitar efectos indeseados durante el tratamiento.

No se debe desmontar el dispositivo ni intentar utilizarlo para fines distintos a los indicados en este manual de instrucciones. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados exclusivamente por un empleado del servicio técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

No se debe instalar ni utilizar el dispositivo cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, para evitar que ningún líquido entre en contacto con el dispositivo.

Desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos:

a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite ruidos extraños,
c) el cable de alimentación está dañado, d) el dispositivo se ha volcado o su carcasa está dañada.

No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el dispositivo en lugares donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.

Por motivos de seguridad, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de utilizar el aparato.

No introduzca nada en la abertura del dispositivo. Si se introduce un objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.

No coloque el dispositivo en un carro, estante o vehículo inestable. Si se cae, el dispositivo puede sufrir daños.

Para garantizar la vida útil prevista del dispositivo, se recomienda esperar un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado, y viceversa).

La alimentación eléctrica debe cumplir con las especificaciones indicadas en la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el dispositivo funcione incorrectamente, se dañe o incluso se queme.

ATENCIÓN:

En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado para evitar cualquier peligro.

Este dispositivo puede ser utilizado por niños de al menos 8 años y por personas con capacidades físicas o mentales reducidas, así como por personas sin experiencia ni conocimientos sobre el equipo, siempre que se les supervise o se les instruya sobre el uso seguro del equipo, de modo que comprendan los riesgos que conlleva.

El dispositivo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No se debe permitir que los niños jueguen con el dispositivo.

No deje el aparato sin supervisión cuando haya niños o personas sin los conocimientos suficientes para utilizarlo cerca del mismo.

Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO



Los aparatos eléctricos, los instrumentos y los embalajes usados deben entregarse a centros de reciclaje de materias primas, de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse a los contenedores de basura doméstica. Se deben seguir las normas relativas al desecho de este tipo de equipos. Con el fin de proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los

deben recogerse por separado y entregarse a puntos

Recogida de aparatos eléctricos y electrónicos usados. Al final de su vida útil, los aparatos viejos contienen componentes valiosos que pueden reciclarse, por lo que deben entregarse para su reciclaje. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida correspondientes, aunque también pueden entregarse a la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El dispositivo debe transportarse a una temperatura comprendida entre (–) 20 °C y (+) 50 °C, exclusivamente en su embalaje original. El dispositivo debe almacenarse en un lugar bien ventilado y con una humedad relativa no superior al 75 %. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, no se debe golpear ni dejar caer el dispositivo, ni exponerlo a golpes mecánicos o a factores atmosféricos.

