

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Elektrické kosmetické křeslo Sillon Lux 273b se 3 motory
CH-273E/ 132718



Dovozce:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Vratislav, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2026



Naskenujte pro
jiný
jazyky



Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.

Před prvním použitím si prosím přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.

Elektrické kosmetické křeslo Lux 273B je vybaveno 3 pohony ovládanými pomocí dálkového ovladače na kabelu. Snadné ovládání a přizpůsobení individuálním potřebám výrazně usnadňují provádění různých procedur. Charakteristické, elegantní provedení při zachování jednoduchosti činí z tohoto křesla atraktivní prvek každého specializovaného salónu.

Technické údaje	
Vstupní napětí	~230 V
Elektrický příkon	150 W
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Materiál potahu	Umělá kůže
Ovládání	Kabelový ovladač
Maximální zatížení	140 kg

Konstrukce křesla

1. Opěrka hlavy
2. Otvor v opěrce hlavy
3. Opěradlo
4. Područka
5. Sedák
6. Opěrka nohou
7. Kabelový ovladač
8. Plastový kryt



Montáž

1. Namontujte opěrku hlavy podle níže uvedeného obrázku.




2. Namontujte loketní opěrky – sklopte opěradlo křesla do ležící (vodorovné) polohy, poté přišroubujte loketní opěrku na určené místo podle obrázků na fotografiích.

Krok 1



Krok 2

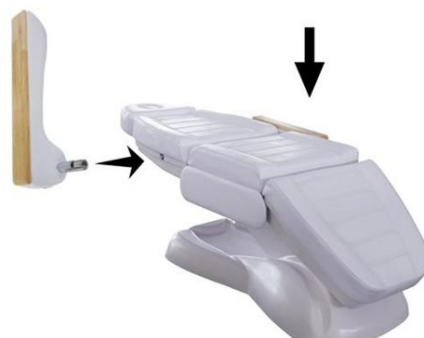

Krok 3



Krok 4



3. Připojte napájecí kabel k elektrické síti.

Funkce dálkového ovladače

Chcete-li nastavit křeslo do požadované polohy, podržte stisknuté příslušné tlačítko na dálkovém ovladači:



← Nastavení sklonu opěradla

← Nastavení sklonu opěrky nohou

← Nastavení výšky křesla (v rozmezí 65–82 cm)


Pro větší pohodlí lze dálkový ovladač zavěsit na kovový držák umístěný na pravé straně sedadla, aby byl vždy po ruce.



Funkce nastavení křesla:

- Konstrukce umožňuje sklopit křeslo do polohy lehátka.
- Praktický otvor v opěrce hlavy, diskrétně skrytý pod polštářem.
- Pohyblivé loketní opěrky v rozsahu 180°.
- Výsuvná opěrka hlavy

Rozměry zařízení

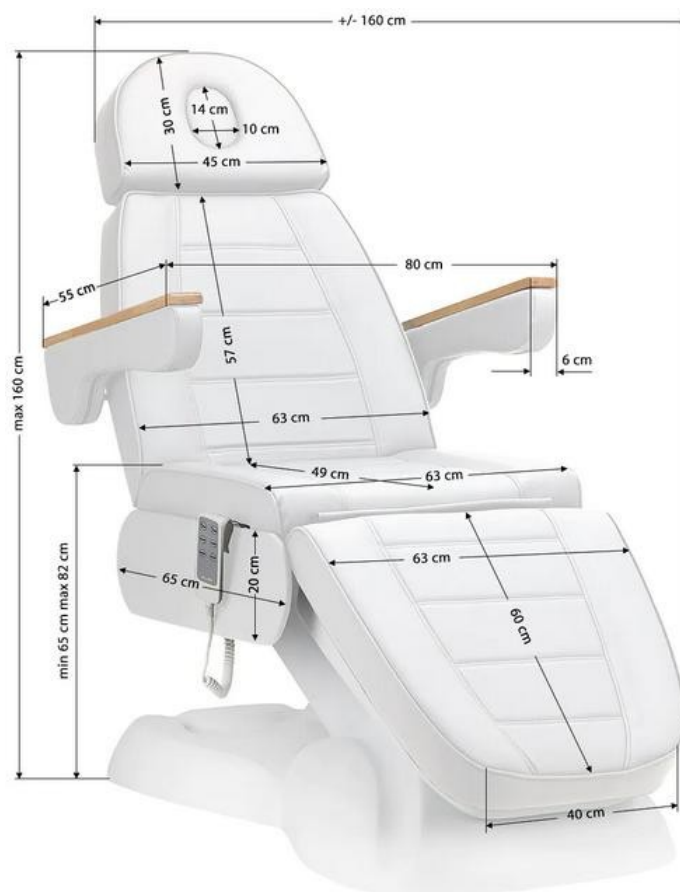

Křeslo v poloze zcela rozložené (lehátko) dosahuje délky 207 cm.

Upozornění

Maximální nosnost křesla: 140 kg.

Nepřekračujte maximální nosnost křesla a nesedejte si na područky.

Čištění a údržba

Aby bylo křeslo udržováno v dobrém technickém stavu, byla zajištěna jeho dlouhá životnost a správná funkce zařízení, doporučujeme pravidelnou údržbu a dodržování následujících zásad čištění.

Upozornění: Před zahájením jakýchkoli prací vždy vypněte zařízení hlavním vypínačem a vytáhněte zástrčku ze zásuvky

- Čištění povrchu syntetické kůže:
Kůži otřete měkkým, suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte silné čisticí prostředky, jako jsou

rozpouštědla, benzín a přípravky na bázi alkoholu. Můžete použít běžně dostupné přípravky na péči o umělou kůži a postupovat podle pokynů uvedených na obalu.

Nechte čalounění křesla přirozeně vyschnout. K vysušení povrchu nepoužívejte fén. K otírání zařízení nepoužívejte dřínovinu ani barevné látky, aby barvivo neproniklo do povrchu křesla.

- Čištění kovových a plastových povrchů
Povrchy otřete měkkým, suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. K čištění těžko přístupných míst nebo rohů se dobře hodí malý kartáček. Nepoužívejte příliš velké množství čisticího prostředku. Poté zařízení dezinfikujte vhodným dezinfekčním prostředkem.
- Povrchy z nerezové oceli
Nejlépe se osvědčí čištění jemným roztokem čisticího prostředku. K odstranění odolných skvrn lze použít amoniak a většinu rozpouštědel. Vyhněte se roztokům na bázi chlóru.
- Lakované nebo chromované kovové povrchy
 - K čištění nepoužívejte vodní trysky.
 - Nečistěte při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu. Nevystavujte zařízení podmínkám, které by mohly vést k znečištění kapalinou.
 - K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny.

Pokud je jakákoli část křesla poškozená, vypněte zařízení, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a informujte autorizovaný servis o závadě.

Doporučení

1. Ujistěte se, že jste zařízení nainstalovali na rovný a stabilní povrch, abyste omezili riziko pádu a poškození.
2. Nikdy nenechávejte připojené zařízení bez dozoru.
3. Používejte zařízení v souladu s účelem popsáním v návodu.
4. Nikdy nepoužívejte toto zařízení, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku.
5. Nepoužívejte zařízení, pokud nefunguje správně nebo pokud spadlo, bylo poškozeno nebo se dostalo do vody.
6. Netahejte přímo za kabel, abyste vyjmuli zástrčku ze zásuvky.
7. Produkt je určen výhradně pro použití v interiéru. Nevystavujte jej přímému působení povětrnostních vlivů.
8. Zařízení pravidelně čistěte, aby se na něm nehromadila špína. Nejlepší je čistit zařízení vlhkým hadříkem.
9. Neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení.

Bezpečnostní opatření

1. Zařízení je profesionální přístroj určený k použití v kosmetických salonech. Používání zařízení výhradně kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím účinkům během procedury.
2. Zařízení nesmíte rozebírat ani se pokoušet jej používat k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Veškeré servisní práce a opravy smí provádět pouze pracovník autorizovaného servisu (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zařízení nesmí být instalováno ani obsluhováno v blízkosti tekutin, na vlhkých místech nebo mokřýma rukama. Je třeba dbát na to, aby se do zařízení nedostaly žádné tekutiny.
4. V následujících případech je nutné okamžitě vytáhnout zástrčku ze zásuvky a kontaktovat autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) do zařízení vnikla kapalina, b) zařízení vydává podivný zápach, kouř nebo vydává podivné zvuky, c) napájecí kabel byl poškozen, d) zařízení bylo převráceno nebo bylo poškozeno jeho pouzdro.
5. Na kabely nesmí být kladeny žádné předměty. Zařízení by nemělo být instalováno na místech,

kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.

6. Z bezpečnostních důvodů je třeba po každém ukončení práce se zařízením vyjmout napájecí kabel ze zásuvky.
7. Do vnitřku zařízení nesmí být vkládány žádné cizí předměty. V případě, že se do vnitřku dostane nežádoucí předmět, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte prodejce nebo výrobce.
8. Zařízení nesmí být umístěno na nestabilním vozíku, polici nebo vozidle. V případě pádu může dojít k poškození zařízení.
9. Aby byla zaručena stanovená životnost zařízení, doporučuje se dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat specifikaci uvedené na typovém štítku. V opačném případě hrozí riziko nesprávné funkce zařízení, jeho poškození nebo dokonce vznícení.

UPOZORNĚNÍ

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizovaný servis – tím se vyhnete nebezpečí.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let, osoby s omezenými fyzickými a mentálními schopnostmi a také osobami, které nejsou seznámeny s fungováním tohoto zařízení, pokud jim bude zajištěn odpovídající dohled nebo poučení o správném a bezpečném používání a pokud jim budou srozumitelná související rizika.
3. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o používání zařízení.
4. Zařízení není určeno k hraní pro děti. Nedovolte dětem, aby si s tímto zařízením hrály.
5. Toto elektrické zařízení není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může představovat riziko poškození zdraví nebo vést ke smrti, proto je třeba zařízení používat a uchovávat mimo dosah dětí.

Likvidace zařízení



V zájmu ochrany životního prostředí je v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních nutné vyřazená elektrická zařízení sbírat odděleně a odevzdávat je do sběrných míst pro vyřazená elektronická a elektrická zařízení. Je nutné postupovat v souladu s pravidly pro likvidaci tohoto typu zařízení a nevhazujte je do kontejnerů na domácí odpad.

Na konci své životnosti obsahují tato zařízení stále plnohodnotné součásti vhodné k recyklaci, proto je třeba je předat k recyklaci do příslušných sběrných míst nebo společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Skladování a přeprava

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotě v rozmezí od (–)20 °C do (+)40 °C výhradně v originálním obalu. Skladujte jej v dobře větrané místnosti s relativní vlhkostí nejvýše 90 %. Provozní teplota je od (+)10 °C do (+)40 °C. Během skladování a přepravy se zařízení nesmí házet ani upouštět, nesmí být vystaveno mechanickým otřesům ani povětrnostním vlivům.