

ACTIVESHOP[®]

BEDIENUNGSANLEITUNG

Elektrischer Kosmetikstuhl Sillon Lux 273b mit 3 Motoren
CH-273E/ 132718



Importeur:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, Gebäude DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2026



Scannen Sie der
verschieden
Sprachen



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch durch und bewahren Sie sie für später auf.

Der elektrische Kosmetikstuhl Lux 273B ist mit 3 Antrieben ausgestattet, die über eine kabelgebundene Fernbedienung gesteuert werden.

Die einfache Bedienung und die Anpassung an individuelle Bedürfnisse erleichtern die Durchführung vielfältiger Behandlungen erheblich. Das charakteristische, elegante Design bei gleichzeitiger Schlichtheit macht diesen Stuhl zu einem attraktiven Element jeder Fachpraxis.

Technische Daten	
Eingangsspannung	~230 V
Leistung	150 W
Nennfrequenz	50 Hz
Bezugsmaterial	Kunstleder
Steuerung	Kabelfernbedienung
Maximale Belastung	140 kg

Aufbau des Sessels

1. Kopfstütze
2. Öffnung in der Kopfstütze
3. Rückenlehne
4. Armlehne
5. Sitzfläche
6. Fußstütze
7. Kabelfernbedienung
8. Kunststoffabdeckung



Montage

1. Montieren Sie die Kopfstütze wie auf dem folgenden Bild gezeigt.




2. Montieren Sie die Armlehnen – klappen Sie die Rückenlehne des Sessels in die Liegeposition (horizontal) und schrauben Sie dann die Armlehne an der markierten Stelle fest, wobei Sie den Abbildungen auf den Fotos folgen.

Schritt 1



Schritt 2

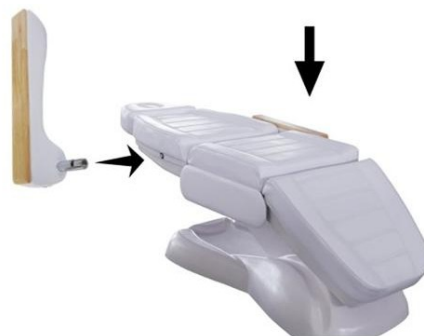

Schritt 3



Schritt 4



3. Schließen Sie das Netzkabel an die Stromversorgung an.

Funktionen der Fernbedienung

Um den Sessel in die gewünschte Position zu bringen, halten Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung gedrückt:



- ← Neigungsverstellung der Rückenlehne
- ← Neigungsverstellung der Fußstütze
- ← Höhenverstellung des Stuhls (im Bereich von 65–82 cm)


Für mehr Komfort kann die Fernbedienung an einer Metallhalterung auf der rechten Seite des Sitzes aufgehängt werden, damit sie immer griffbereit ist.



Einstellfunktionen des Sessels:

- Die Konstruktion ermöglicht es, den Sessel in eine Liegeposition zu bringen.
- Praktische Öffnung in der Kopfstütze, diskret unter dem Polster versteckt.
- Bewegliche Armlehnen im Bereich von 180°.
- Ausziehbare Kopfstütze

Abmessungen des Geräts

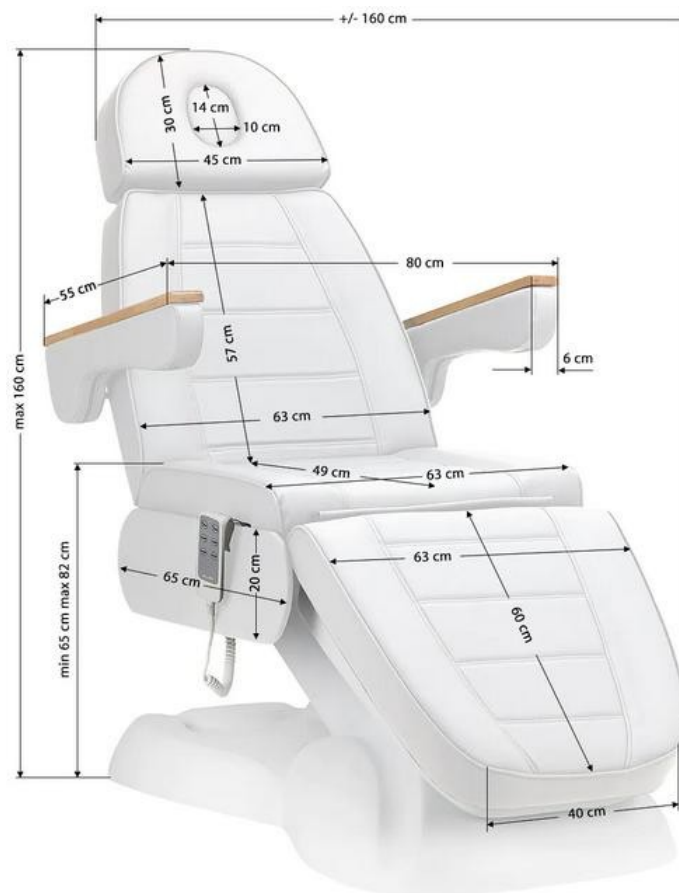

Der Sessel erreicht in der flach ausgeklappten Position (Liegeposition) eine Länge von 207 cm.

Hinweis

Maximale Belastbarkeit des Sessels: 140 kg.

Die maximale Belastbarkeit des Sessels darf nicht überschritten werden, und es darf nicht auf den Armlehnen gesessen werden.

Reinigung und Pflege

Um den Sessel in einem guten technischen Zustand zu halten, seine lange Lebensdauer zu gewährleisten und die ordnungsgemäße Funktion des Geräts sicherzustellen, empfehlen wir eine regelmäßige Wartung sowie die Einhaltung der folgenden Reinigungsvorschriften.

Achtung: Schalten Sie das Gerät vor Beginn jeglicher Arbeiten immer am Hauptschalter aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose

- Reinigung von Kunstlederoberflächen:
Wischen Sie das Kunstleder mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie

Lösungsmittel, Benzin und alkoholhaltige Mittel. Sie können handelsübliche Pflegeprodukte für Kunstleder verwenden und die Anweisungen auf der Verpackung befolgen.

Lassen Sie den Sitzbezug an der Luft trocknen. Verwenden Sie keine Gebläse zum Trocknen der Oberfläche. Verwenden Sie zum Abwischen des Geräts keine Jeans oder farbige Stoffe, damit deren Farbstoff nicht in die Oberfläche des Sitzes eindringt.

- **Reinigung von Metall- und Kunststoffoberflächen**
Wischen Sie die Oberflächen mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch ab. Zum Reinigen schwer zugänglicher Stellen oder Ecken eignet sich eine kleine Bürste gut. Verwenden Sie nicht zu viel Reinigungsflüssigkeit. Desinfizieren Sie das Gerät anschließend mit einem geeigneten Desinfektionsmittel.
- **Edelstahloberflächen**
Am besten eignet sich eine milde Reinigungslösung. Ammoniak und die meisten Lösungsmittel können zur Entfernung hartnäckiger Flecken verwendet werden. Vermeiden Sie chlorhaltige Lösungen.
- **Lackierte oder verchromte Metalloberflächen**
 - Verwenden Sie zur Reinigung keine Wasserstrahldüsen.
 - Reinigen Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Setzen Sie das Gerät keinen Bedingungen aus, die zu einer Verschmutzung durch Flüssigkeiten führen können.
 - Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel oder Säuren.

Sollte ein Teil des Sessels beschädigt sein, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und melden Sie den Defekt einem autorisierten Kundendienst.

Empfehlungen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche aufgestellt haben, um die Gefahr eines Umkippen und einer Beschädigung zu verringern.
2. Lassen Sie das angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt.
3. Verwenden Sie das Gerät gemäß der in der Anleitung beschriebenen Bestimmung.
4. Verwenden Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist.
6. Ziehen Sie nicht direkt am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
7. Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Setzen Sie es keinen direkten Witterungseinflüssen aus.
8. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Schmutzansammlungen zu vermeiden. Verwenden Sie zur Reinigung am besten ein feuchtes Tuch.
9. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

Sicherheitshinweise

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetiksalons. Die Bedienung des Geräts ausschließlich durch qualifiziertes Kosmetikpersonal verhindert unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt werden und es dürfen keine Versuche unternommen werden, es für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke zu verwenden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von einem Mitarbeiter des autorisierten Kundendienstes (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an feuchten Orten oder mit nassen Händen aufgestellt oder bedient werden. Es ist darauf zu achten, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) Flüssigkeit ist in das Gerät gelangt, b) das Gerät einen seltsamen Geruch oder Rauch abgibt oder seltsame Geräusche macht, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestürzt ist oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
5. Es dürfen keine Gegenstände auf die Kabel gelegt werden. Das Gerät darf nicht an Orten aufgestellt werden,

an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.

6. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jedem Gebrauch des Geräts aus der Steckdose ziehen.
7. Es dürfen keine Fremdkörper in das Gerät gelangen. Sollte ein Fremdkörper ins Innere gelangen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die angegebene Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, vor dem erneuten Drücken des Netzschalters eine Minute zu warten (zwischen dem Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion des Geräts, einer Beschädigung oder sogar eines Brandes.

ACHTUNG

1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst – so vermeiden Sie Gefahren.
2. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen, die mit der Bedienung dieses Geräts nicht vertraut sind, verwendet werden, sofern eine angemessene Aufsicht oder Einweisung in die sichere und ordnungsgemäße Nutzung gewährleistet ist und die damit verbundenen Gefahren verstanden werden.
3. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht über ausreichende Kenntnisse zur Bedienung des Geräts verfügen, in dessen Nähe aufhalten.
4. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Eine unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem Elektrogerät kann zu Gesundheitsschäden oder zum Tod führen; daher muss das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und aufbewahrt werden.

Entsorgung des Geräts



Zum Schutz der Umwelt sind gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte ausgediente Elektrogeräte getrennt zu sammeln und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abzugeben. Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung dieser

Gerätetyps zu befolgen und es nicht in den Hausmüll zu werfen.

Am Ende ihrer Nutzungsdauer enthalten diese Geräte noch vollwertige, recycelbare Bestandteile; daher sollten sie zur Wiederverwertung an entsprechende Sammelstellen oder an die Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. übergeben werden.

Lagerung und Transport

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen $(-20\text{ }^{\circ}\text{C})$ und $(+40\text{ }^{\circ}\text{C})$ ausschließlich in der Originalverpackung transportiert werden. Es ist in einem gut belüfteten Raum bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 90 % zu lagern. Betriebstemperatur von $(+10\text{ }^{\circ}\text{C})$ bis $(+40\text{ }^{\circ}\text{C})$. Während der Lagerung und Transport darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und es darf keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.