

ACTIVESHOP[®]

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Fotel kosmetyczny elektryczny Sillon Lux 273b 3 silniki
CH-273E/ 132718



Importer:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2026



Scan for
different
languages



Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem i zachować ją na później.

Elektryczny fotel kosmetyczny Lux 273B wyposażony jest w 3 siłowniki sterowane za pomocą pilota na przewodzie. Łatwość obsługi i dostosowania do indywidualnych potrzeb znacząco ułatwiają wykonywanie różnorodnych zabiegów. Charakterystyczne, eleganckie wykończenie przy jednocześnie zachowanej prostocie sprawia, że fotel ten stanie się atrakcyjnym elementem każdego specjalistycznego gabinetu.

Dane techniczne	
Napięcie wejściowe	~230 V
Moc elektryczna	150 W
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Materiał obicia	Skóra syntetyczna
Sterowanie	Pilot przewodowy
Maksymalne obciążenie	140 kg

Budowa fotela

1. Zagłówek
2. Otwór w zagłówku
3. Oparcie
4. Podłokietnik
5. Siedzisko
6. Podnóżek
7. Pilot przewodowy
8. Pokrywa plastikowa



Montaż

1. Zamontuj zagłówek jak na poniższym zdjęciu.




2. Zamontuj podłokietniki - rozłóż oparcie fotela do pozycji leżącej (poziomej), następnie przykręć podłokietnik w wyznaczonym miejscu, postępując zgodnie z ilustracjami na zdjęciach.

Krok 1



Krok 2

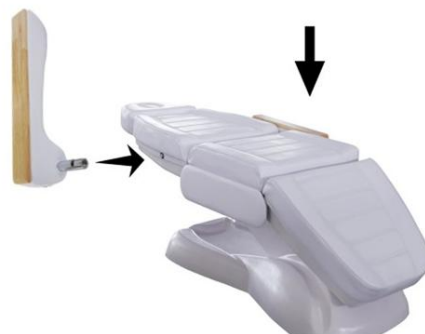

Krok 3



Krok 4



3. Podłącz przewód zasilający do prądu.

Funkcje pilota sterującego

Aby ustawić fotel w wybranej pozycji, należy przytrzymać wybrany przycisk na pilocie:



← Regulacja nachylenia oparcia

← Regulacja nachylenia podnóżka

← Regulacja wysokości fotela (w zakresie 65-82cm)


Dla większej wygody pilot można odwiesić na metalowym uchwycie umieszczonym po prawej stronie siedziska, aby zawsze mieć go pod ręką.



Funkcje regulacji fotela:

- Konstrukcja umożliwia rozłożenie fotela do pozycji leżanki.
- Praktyczny otwór w zagłówku, dyskretnie ukryty pod poduszką.
- Ruchome podłokietniki w zakresie 180°.
- Wysuwany zagłówek

Wymiary urządzenia

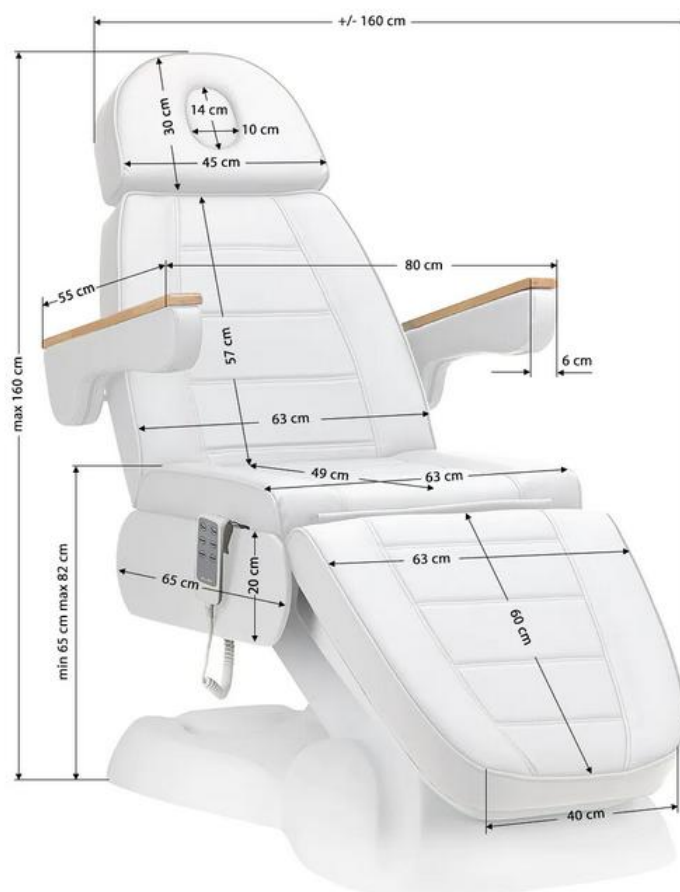

Fotel w pozycji rozłożonej na płasko (leżanki) osiąga długość 207cm.

Uwaga

Maksymalne obciążenie fotela: 140kg.

Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia fotela ani siadać na podłokietnikach.

Czyszczenie i konserwacja

Aby utrzymać fotel w dobrym stanie technicznym, zapewnić jego długą żywotność i właściwe działanie urządzenia, zalecamy regularną konserwację oraz przestrzeganie poniższych zasad czyszczenia.

Uwaga: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac zawsze wyłącz urządzenie głównym przetącnikiem i wyjmij wtyczkę z kontaktu

- Czyszczenie powierzchni skór syntetycznych:
Wytrzyj skórę miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj silnych detergentów takich jak

rozpuszczalnik, benzyna i preparaty na bazie alkoholu. Możesz użyć dostępnych na rynku produktów do pielęgnacji sztucznej skóry i postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na ich opakowaniu.

Pozwól tapicerce fotela wyschnąć naturalnie. Nie używaj urządzeń nadmuchowych do wysuszenia powierzchni. Nie używaj jeansu ani kolorowych tkanin do wycierania urządzenia, by ich barwnik nie przeniknął w powierzchnię fotela.

- Czyszczenie powierzchni metalowych i plastikowych
Wytrzyj powierzchnie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Do wyczyszczenia trudno dostępnych miejsc lub rogów dobrze sprawdzi się mała szczoteczka. Nie używaj zbyt dużej ilości płynu do czyszczenia urządzenia. Następnie zdezynfekuj urządzenie odpowiednim płynem.
- Powierzchnie ze stali nierdzewnej
Najlepiej sprawdzi się czyszczenie łagodnym roztworem detergentu. Amoniak i większość rozpuszczalników mogą być stosowane do usuwania trudnych plam. Unikaj roztworów na bazie chloru.
- Malowane lub chromowane powierzchnie metalowe
 - Nie używaj dysz wodnych do czyszczenia.
 - Nie czyść w wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności powietrza. Nie wystawiaj urządzenia na warunki, które mogą prowadzić do zanieczyszczenia cieczą.
 - Nie używaj rozpuszczalników oraz kwasów do czyszczenia.

Jeśli jakakolwiek część fotela jest uszkodzona, wyłącz urządzenie, odłącz przewód zasilający z gniazdka i powiadom autoryzowany serwis o usterce.

Zalecenia

1. Upewnij się, że zainstalowałeś urządzenie na powierzchni płaskiej i stabilnej, by ograniczyć ryzyko upadku i uszkodzenia.
2. Nigdy nie pozostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.
3. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisany w instrukcji.
4. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę.
5. Nie używaj urządzenia, jeżeli nie działa prawidłowo lub jeżeli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody.
6. Nie ciągnij bezpośrednio za kabel by wyjąć wtyczkę z gniazdka.
7. Produkt do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.
8. Należy okresowo czyścić urządzenie, aby zapobiec akumulacji brudu. Najlepiej czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki.
9. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.

Środki bezpieczeństwa

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania go do innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami. Należy zadbać o to, by żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach,

w których ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.

6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowym zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno umieszczać obcych elementów wewnątrz urządzenia. W przypadku, gdy niepożądany element dostanie się do środka, należy wyjąć przewód z gniazdka zasilania i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórным naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia, jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych i umysłowych, a także przez osoby niezaznajomione ze sposobem działania tego sprzętu, jeżeli zostanie im zapewniony odpowiedni nadzór lub instruktaż na temat prawidłowego korzystania w sposób bezpieczny i by związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja urządzenia



W celu ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie i przekazywać je do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu i nie wrzucać go do pojemników z odpadami domowymi.

Pod koniec użyteczności urządzenia te nadal zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazywać je do ponownego przetworzenia do odpowiednich punktów zbiórki lub do firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Przechowywanie i transport

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (-20°C) do $(+40^{\circ}\text{C})$ wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać je w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i wilgotności względnej nie większej niż 90%. Temperatura eksploatacji od $(+10^{\circ}\text{C})$ do $(+40^{\circ}\text{C})$. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać go na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.