

ACTIVESHOP[®]

MODE D'EMPLOI

Fauteuil de beauté électrique Sillon Lux 273b à 3 moteurs
CH-273E/ 144069



Importateur :
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
8b, rue Graniczna, bâtiment DC2A
54-610 Wrocław, Pologne
www.activeshop.com.pl
Rév. A/05/2026



Scan pour
différent
langues



Merci d'avoir choisi notre produit.

Veuillez lire le mode d'emploi avant la première utilisation et le conserver pour référence ultérieure.

Le fauteuil de beauté électrique Lux 273B est équipé de 3 vérins commandés par une télécommande filaire.

Sa facilité d'utilisation et son adaptation aux besoins individuels facilitent considérablement la réalisation de divers soins. Sa finition caractéristique et élégante, tout en conservant sa simplicité, fait de ce fauteuil un élément attrayant dans tout cabinet spécialisé.

Caractéristiques techniques	
Tension d'entrée	~230 V
Puissance électrique	150 W
Fréquence nominale	50 Hz
Matériau de revêtement	Cuir synthétique
Commande	Télécommande filaire
Charge maximale	140 kg

Structure du fauteuil

1. Appuie-tête
2. Ouverture dans l'appui-tête
3. Dossier
4. Accoudoir
5. Assise
6. Repose-pieds
7. Télécommande filaire
8. Couvercle en plastique



Montage

1. Installez l'appui-tête comme indiqué sur la photo ci-dessous.




2. Installez les accoudoirs : inclinez le dossier du siège en position allongée (horizontale), puis vissez l'accoudoir à l'emplacement prévu, en suivant les illustrations sur les photos.

Étape 1



Étape 2

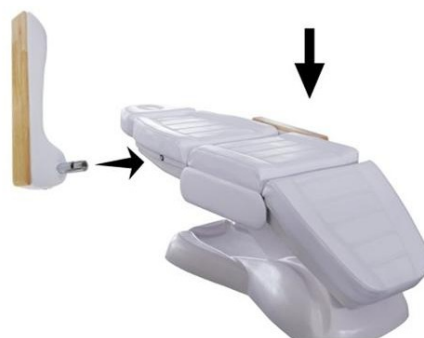

Étape 3



Étape 4



3. Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique.

Fonctions de la télécommande

Pour régler le fauteuil dans la position souhaitée, maintenez enfoncée la touche correspondante sur la télécommande :



- ← Réglage de l'inclinaison du dossier
- ← Réglage de l'inclinaison du repose-pieds
- ← Réglage de la hauteur du fauteuil (dans une plage de 65 à 82 cm)


Pour plus de commodité, la télécommande peut être accrochée au support métallique situé à droite du siège afin de l'avoir toujours à portée de main.



Fonctions de réglage du fauteuil :

- La conception permet de mettre le fauteuil en position allongée.
- Une ouverture pratique dans l'appuie-tête, discrètement dissimulée sous le coussin.
- Accoudoirs mobiles dans une plage de 180°.
- Appuie-tête coulissant

Dimensions de l'appareil

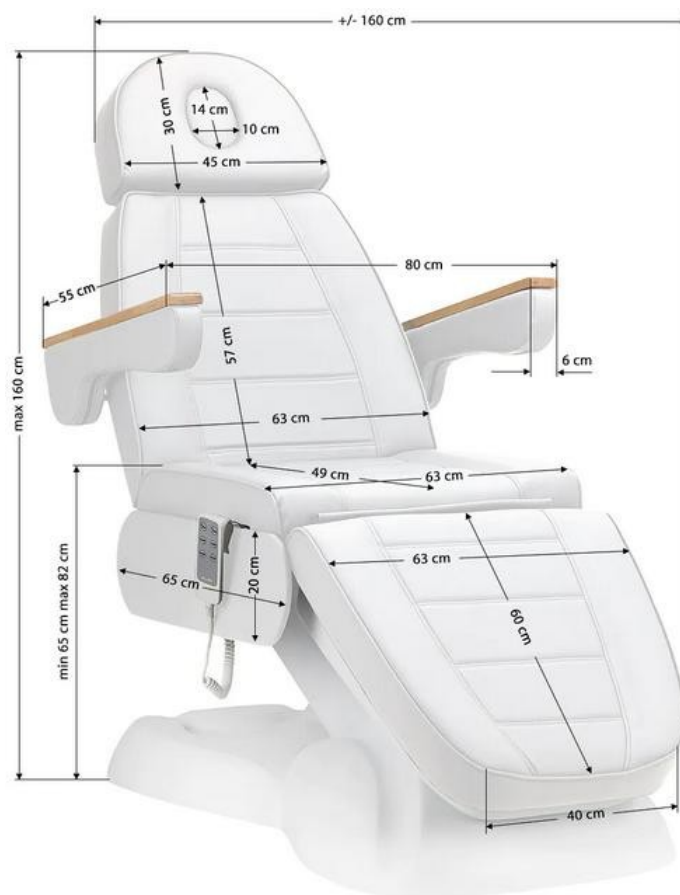

Le fauteuil, une fois rabattu à plat (position allongée), atteint une longueur de 207 cm.

Remarque

Charge maximale du fauteuil : 140 kg.

Ne pas dépasser la charge maximale du fauteuil ni s'asseoir sur les accoudoirs.

Nettoyage et entretien

Afin de maintenir le fauteuil en bon état technique, d'assurer sa longue durée de vie et le bon fonctionnement de l'appareil, nous recommandons un entretien régulier et le respect des consignes de nettoyage suivantes.

Attention : avant d'effectuer toute intervention, éteignez toujours l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal et débranchez la fiche de la prise

- Nettoyage des surfaces en cuir synthétique :
Essuyez le cuir avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de détergents puissants tels que

les solvants, l'essence et les produits à base d'alcool. Vous pouvez utiliser des produits d'entretien pour cuir synthétique disponibles dans le commerce et suivre les instructions figurant sur leur emballage.

Laissez le revêtement du fauteuil sécher naturellement. N'utilisez pas d'appareils à air comprimé pour sécher la surface. N'utilisez pas de jeans ni de tissus colorés pour essuyer l'appareil, afin que leur colorant ne pénètre pas dans la surface du fauteuil.

- **Nettoyage des surfaces métalliques et plastiques**
Essuyez les surfaces avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide. Une petite brosse est idéale pour nettoyer les endroits difficiles d'accès ou les coins. N'utilisez pas une quantité excessive de liquide de nettoyage. Désinfectez ensuite l'appareil avec un liquide approprié.
- **Surfaces en acier inoxydable**
Il est préférable de les nettoyer avec une solution détergente douce. L'ammoniaque et la plupart des solvants peuvent être utilisés pour éliminer les taches tenaces. Évitez les solutions à base de chlore.
- **Surfaces métalliques peintes ou chromées**
 - N'utilisez pas de jets d'eau pour le nettoyage.
 - Ne nettoyez pas l'appareil dans des conditions de température élevée et d'humidité élevée. N'exposez pas l'appareil à des conditions susceptibles d'entraîner une contamination par des liquides.
 - N'utilisez pas de solvants ni d'acides pour le nettoyage.

Si une partie quelconque du fauteuil est endommagée, éteignez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et signalez le dysfonctionnement à un service après-vente agréé.

Recommandations

1. Assurez-vous d'installer l'appareil sur une surface plane et stable afin de limiter les risques de chute et de dommages.
2. Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance.
3. Utilisez l'appareil conformément à l'usage prévu décrit dans le mode d'emploi.
4. N'utilisez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.
5. N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé, a été endommagé ou a été immergé dans l'eau.
6. Ne tirez pas directement sur le câble pour débrancher la fiche de la prise.
7. Produit destiné à un usage exclusivement intérieur. Ne l'exposez pas directement aux intempéries.
8. Nettoyez régulièrement l'appareil pour éviter l'accumulation de saleté. Il est préférable de nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
9. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

Mesures de sécurité

1. Cet appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. Son utilisation exclusive par du personnel de beauté qualifié permet d'éviter tout effet indésirable pendant le soin.
2. Il est interdit de démonter l'appareil ou de tenter de l'utiliser à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués exclusivement par un technicien du service après-vente agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Il est interdit d'installer ou d'utiliser l'appareil à proximité de liquides, dans des endroits humides ou avec les mains mouillées. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise et contactez le service après-vente agréé de la société ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants : a) un liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée ou émet des bruits inhabituels, c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans des endroits

où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.

6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise après chaque utilisation de l'appareil.
7. Il est interdit d'introduire des objets étrangers à l'intérieur de l'appareil. Si un objet indésirable pénètre à l'intérieur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. En cas de chute, l'appareil pourrait être endommagé.
9. Afin de garantir la durée de vie prévue de l'appareil, il est recommandé d'attendre une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et inversement).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique. Dans le cas contraire, il existe un risque de dysfonctionnement de l'appareil, de détérioration, voire d'incendie.

ATTENTION

1. En cas de détérioration du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, veuillez contacter un service après-vente agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, par des personnes aux capacités physiques et mentales réduites, ainsi que par des personnes non familiarisées avec le fonctionnement de cet équipement, à condition qu'une surveillance appropriée ou des instructions sur l'utilisation correcte et sûre leur soient fournies et que les risques associés soient compris.
3. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes ne disposant pas de connaissances suffisantes sur son utilisation se trouvent à proximité.
4. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé comme jouet par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort ; c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et conservé hors de portée des enfants.

Mise au rebut de l'appareil



Afin de protéger l'environnement, conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et remis à des points de collecte de déchets d'équipements électriques et électroniques. Il convient de respecter les règles relatives à l'élimination de ce type d'équipement et ne pas le jeter dans les poubelles ménagères.

À la fin de leur durée de vie, ces appareils contiennent encore des composants valables et recyclables ; il convient donc de les remettre pour recyclage aux points de collecte appropriés ou à la société ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Stockage et transport

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-)20 °C et (+)40 °C, exclusivement dans son emballage d'origine. Il doit être stocké dans un local bien ventilé et à une humidité relative ne dépassant pas 90 %. Température de fonctionnement comprise entre (+)10 °C et (+)40 °C. Pendant les processus de stockage et de transport, il est interdit de jeter ou de laisser tomber l'appareil, de l'exposer à des chocs mécaniques ou aux intempéries.