

ACTIVESHOP[®]

ISTRUZIONI PER L'USO

Lampada d'ingrandimento S4+ treppiede



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2024



Una lampada d'ingrandimento su un treppiede a quattro bracci consente di osservare da vicino la pelle e le lesioni cutanee e illumina l'area di trattamento. Utilizzata anche per trattamenti di manicure e pedicure e per il trucco permanente. I LED emettono una luce intensa che aumenta il comfort di lavoro.

Dati tecnici:

Tensione	220-240V
Potenza	22W
Frequenza	50/60Hz
Ingrandimento	5 diottrie

Dimensioni del dispositivo:




Precauzioni:

1. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, lavandini o altri specchi d'acqua.
2. Quando si collega la spina, non toccare le sue parti metalliche.
3. Pulire periodicamente l'apparecchio per evitare l'accumulo di sporco. È preferibile pulire l'apparecchio con un panno umido.
4. Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio.
5. Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato alla fonte di alimentazione corretta e che la spina sia inserita correttamente nella presa.
6. Non inserire l'apparecchio con le mani bagnate o umide.
7. Non utilizzare l'apparecchio se la spina è calda o danneggiata.
8. Non conservare l'apparecchio in bagno o in altri locali con elevata umidità.
9. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di sostanze infiammabili.
10. Non urtare o lanciare l'apparecchio.


Specifiche dell'apparecchio:

1. Spina di alimentazione
2. Braccio dell'apparecchio
3. Lampada
4. Interruttore di accensione/spegnimento
5. Regolazione della lampada
6. Treppiede
7. Base
8. Ruota

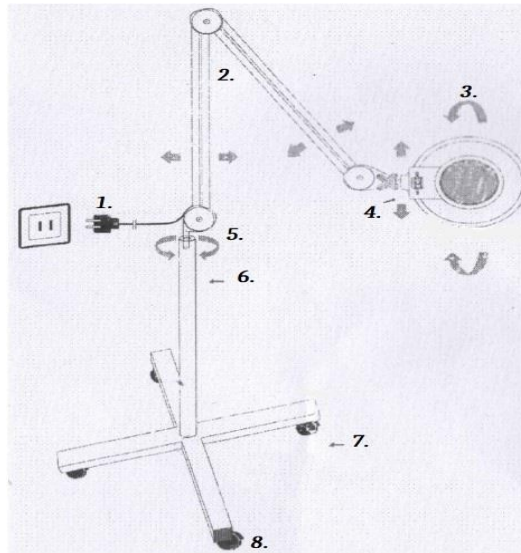

Montaggio:

1. Per prima cosa assemblare la base e il treppiede. Collegare le due gambe e il treppiede con una rondella e una vite, come nella figura 1. Quindi collegare la lampada al treppiede (figura 2).

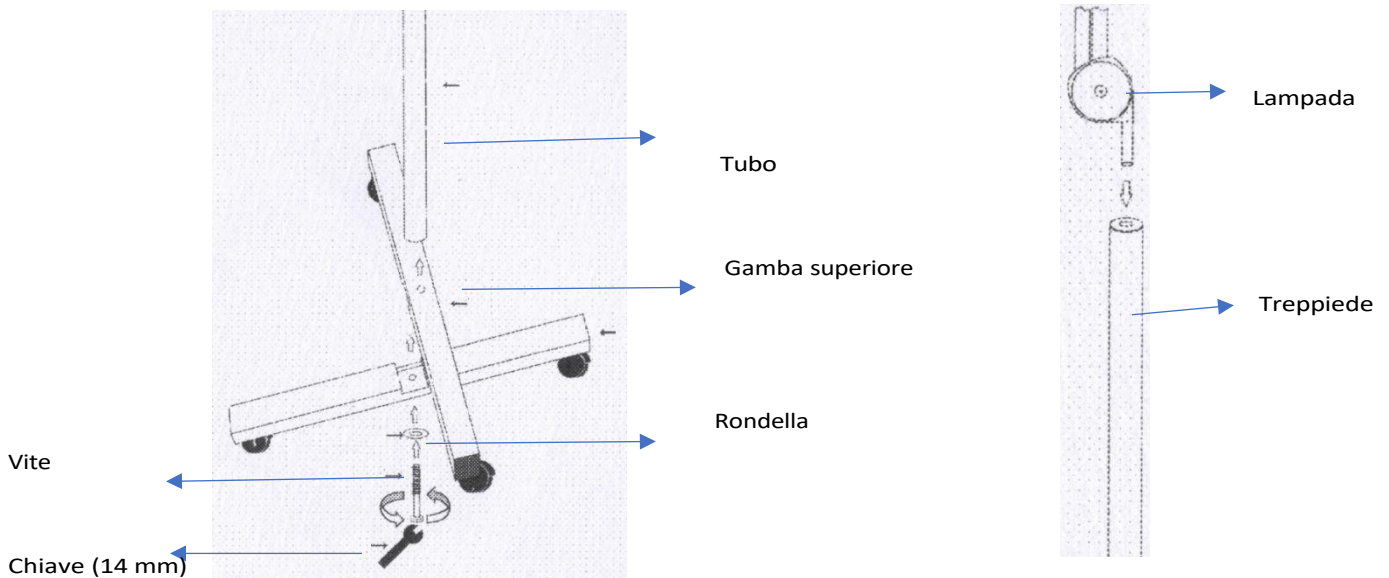

Istruzioni per l'uso:

1. Assemblare l'unità.
2. Collegarlo a una fonte di alimentazione adeguata.
3. Avviare la lampada.
4. Regolare la posizione della lampada come richiesto.
5. Ricordarsi di staccare la spina al termine dell'operazione.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi:
 - a) un liquido è penetrato nell'apparecchio, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani rumori,
 - c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per sicurezza, togliere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e prive di esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito nelle vicinanze di bambini o di persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con un apparecchio elettrico può rappresentare un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente, in conformità con la Direttiva 2012/19/CE relativa ai rifiuti elettrici usati e elettronici usati elettrici, le apparecchiature elettriche devono essere raccolte separatamente e consegnate ai centri di riciclaggio.

le apparecchiature elettriche devono essere raccolte separatamente e consegnate ai seguenti punti di raccolta

raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Al termine della loro vita utile, i vecchi apparecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il trattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, nonché alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare l'apparecchio in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.