

ACTIVESHOP[®]

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Förstoringslampa S4+ stativ



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen

www.activeshop.com.pl

Rev. A/07/2024



En förstoringslampa på ett fyrarmat stativ gör det möjligt att se huden och hudförändringar på nära håll och belyser behandlingsområdet. Används även för manikyr- och pedikyrbehandlingar samt permanent makeup. LED-lamporna lyser med ett starkt ljus, vilket ökar arbetskomforten.

Tekniska data:

Spänning	220-240V
Effekt	22W
Frekvens	50/60 Hz
Förstoring	5 dioptrier

Enhetens mått:




Försiktighetsåtgärder:

1. Använd inte apparaten i närheten av badkar, tvättställ eller andra vattensamlingar.
2. Rör inte vid metalldelarna när du ansluter stickkontakten.
3. Rengör apparaten med jämna mellanrum för att förhindra att smuts ansamlas. Det är bäst att rengöra apparaten med en fuktig trasa.
4. Vira inte nätsladden runt apparaten.
5. Se till att apparaten är ansluten till rätt strömkälla och att stickkontakten är korrekt isatt i vägguttaget.
6. Anslut inte apparaten till eluttaget med våta eller fuktiga händer.
7. Använd inte apparaten om stickkontakten är varm eller skadad.
8. Förvara inte apparaten i badrummet eller i andra rum med hög luftfuktighet.
9. Använd inte enheten i närheten av brandfarliga ämnen.
10. Stöt inte till eller kasta enheten.


Specifikationer för enheten:

1. Strömkontakt
2. Enhetens arm
3. Lampa
4. På/Av-strömbrytare
5. Justering av lampa
6. Stativ
7. Bas
8. Hjul

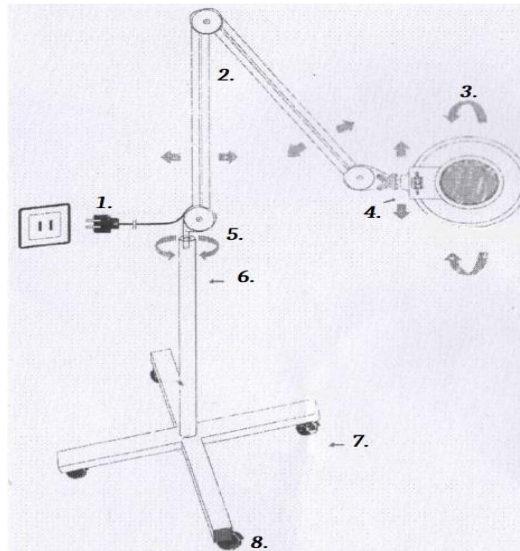

Montering av stativ:

1. Montera först ihop basen och stativet. Koppla ihop de två benen och stativet med hjälp av en bricka och skruv, se bild 1. Koppla sedan ihop lampan med stativet (bild 2).

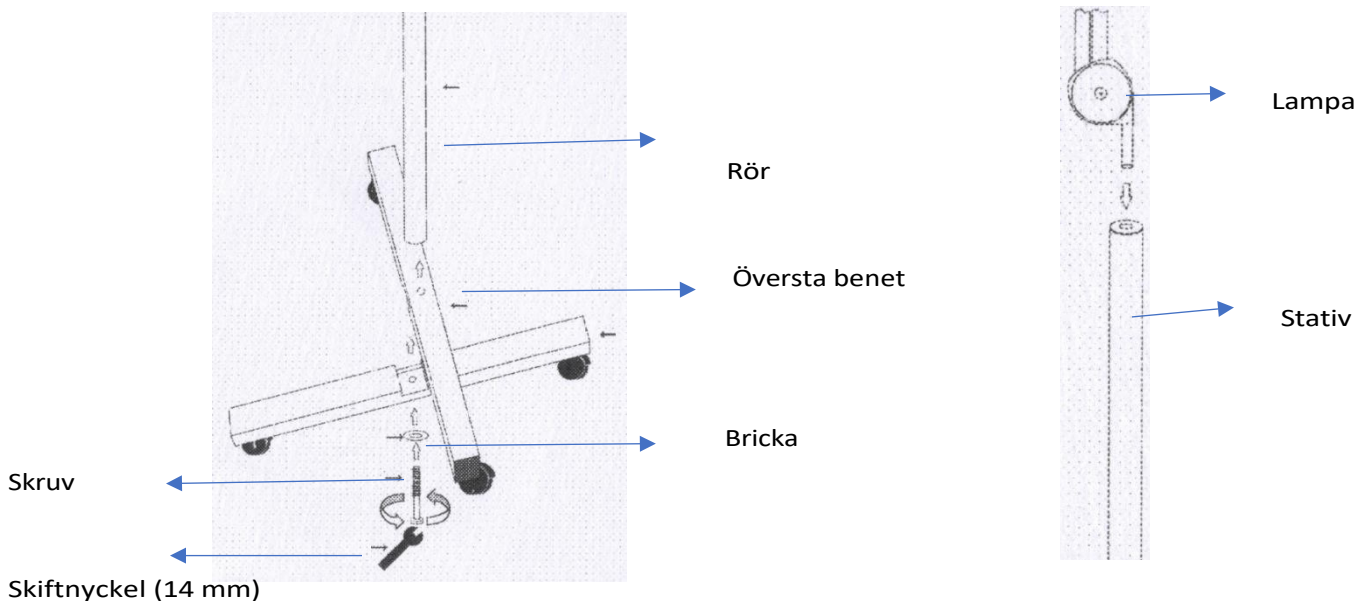

Instruktioner för användning:

1. Montera ihop enheten.
2. Anslut den till en lämplig strömkälla.
3. Starta lampan.
4. Justera lampans position efter behov.
5. Kom ihåg att dra ur kontakten när du är klar.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta den auktoriserade serviceverkstaden som tillhandahålls av ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,
 - c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Apparaten kan skadas om den faller.
9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och förtrogenhet med utrustningen, om de övervakas eller instrueras i hur utrustningen används på ett säkert sätt så att de risker som är förknippade med den förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med en elektrisk apparat kan innebära hälsorisker eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

BORTSKAFFANDE AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall begagnade elektriska och elektroniska begagnade elektriska apparater

måste elektrisk utrustning samlas in separat och lämnas till följande insamlingsställen

Insamling av avfall som utgörs av eller innehåller elektronisk eller elektrisk utrustning. Gamla apparater som är uttjänta innehåller komponenter som kan återvinnas helt och hållet och bör därför lämnas in för upparbetning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i sin originalförpackning vid en temperatur på (-) 20 °C till (+) 50 °C. Förvara apparaten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.