

ACTIVESHOP[®]

GEBRUIKSAANWIJZING

Merc 2000 Freesmachine
Model: BM1602



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polen

www.activeshop.com.pl

Rev. A 03/2024



Technische gegevens

Basis	
Uitgangsspanning	DC 3~12V
Nominale frequentie	50/60HZ
Nominale spanning	220-240V


Hoofd	
Omwenteling	Max. 20000 rpm
Diameter snijder	2,35 mm
Vermogen	12W

Installatie en bediening

- De stekker van de motorkabel moet goed worden aangesloten op de behuizing van het apparaat
- De kabelstekker van de voetschakelaar moet goed worden aangesloten op de behuizing van het apparaat
- De stekker van het apparaat mag alleen op het stopcontact worden aangesloten als alle kabels correct en veilig zijn geïnstalleerd.

Opgelet

- Gebruik onze producten alleen met originele accessoires en onderdelen.
- Raak de metalen onderdelen van de stekker niet aan wanneer u deze aansluit.
- Het is verboden om olie te gebruiken om de kop schoon te maken.
- De kop mag niet worden blootgesteld aan schade. Door het ontwerp van het apparaat kan het beschadigd raken als het valt of wordt gestoten. Als de kop valt, controleer dan of alles correct functioneert voordat u het apparaat start.
- Gebruik de door de fabrikant aanbevolen frezen. Gebruik geen gebogen frezen.
- Gebruik alle onderdelen voorzichtig en voorzichtig.
- Houd het werkgebied en de machine schoon, vooral de kop.
- Gebruik het apparaat met veiligheidsmaatregelen.
- Als de kop, kabel, stekker of het stopcontact beschadigd is, moet u het beschadigde onderdeel vervangen voordat u het verder gebruikt.
- Trek niet aan de kabel als u aan de stekker trekt.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van ontvlambare stoffen.
- Laat het apparaat niet door kinderen gebruiken.
- Gebruik een stofmasker en een veiligheidsbril en zorg voor een goede ventilatie van de ruimte waarin u werkt.
- Wanneer u de kop op hoge snelheid gebruikt, controleer dan eerst de werking en het trillingsniveau op lagere snelheid.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Voordat u de stroom uitschakelt, draait u de potentiometer linksom naar de minimumpositie en schakelt u het apparaat uit door de aan/uit-schakelaar in de stand "0".
- Haal de stekker niet uit het stopcontact als het apparaat in werking is.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact als het apparaat in werking is.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u de snijplotter langere tijd niet gebruikt.
- Het is alleen mogelijk om de snijplotter te verwisselen als het apparaat uitgeschakeld is.

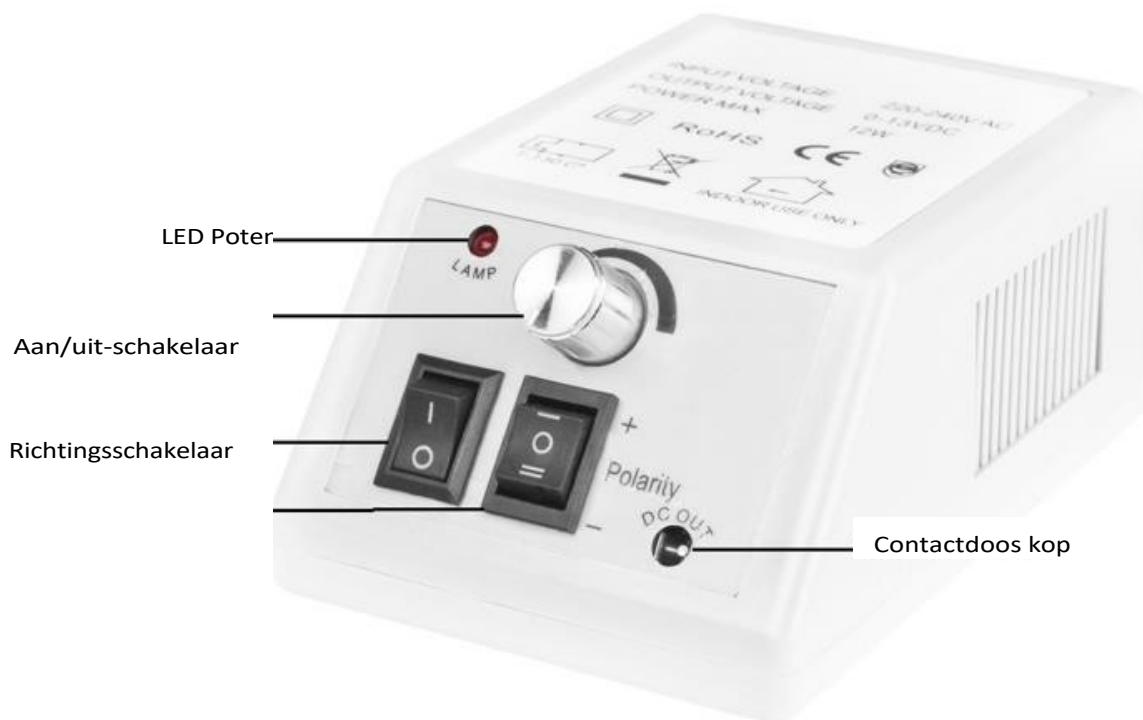

Instructies voor gebruik

1. Sluit de kop aan op de kopcontactdoos.
2. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
3. Stel de potentiometer in op het minimumniveau door tegen de klok in te draaien.
4. Selecteer het gewenste type frees en plaats deze in de kop door deze in te drukken.
5. Zet de aan/uit-schakelaar in stand I. De LED die de werking van het apparaat aangeeft, gaat branden.
6. Zet de schakelaar op de kop in stand I.



7. Pas de werksnelheid van het apparaat aan met de potentiometer.
8. De draairichting kan alleen worden gewijzigd met de richtingsschakelaar als het apparaat is uitgeschakeld en de potentiometer in de minimumstand staat.
9. Schakel de machine uit na gebruik

Cutter plaatsen/uitnemen

- Om het mes te verwijderen, draait u de klem met de klok mee tot u een karakteristieke "klik" hoort en trekt u het mes eruit.

- Om de snijder te plaatsen, draait u de klem tegen de klok in totdat u een klik hoort.
- Zorg ervoor dat de klem schoon is voordat u de snijkop verwisselt

Zorg ervoor dat de frees die u wilt gebruiken niet verbogen, asymmetrisch of beschadigd is. Gebruik altijd standaardfrezen.


Toegestane snelheid

- De toegestane snelheid kan enigszins variëren, afhankelijk van de materialen van de frees of het type frees.

LET OP

- Gebruik alleen de aanbevolen frezen.
- Verwijder altijd vuil voordat u frezen vervangt.

Grootte	Snelheid max
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

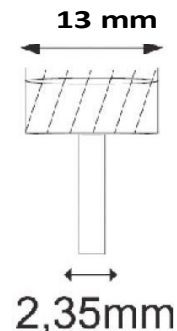

- Zorg ervoor dat u de maximumsnelheid die door de fabrikant of distributeur is opgegeven voor de snijplotter die u gebruikt, niet overschrijdt.
- Grote frezen kunnen gaan trillen, zelfs als ze onder de maximale nominale snelheid werken. Verminder de snelheid onmiddellijk om schade aan de frees, het bit of de gebruiker te voorkomen.
- Gebruik altijd standaardfrezen.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Actie
Hoewel de snijplotter is ingeschakeld, werkt de kop niet	Verkeerde aansluiting van behuizing met de kabel van de kop	Sluit de kabel van de kop correct aan op het apparaat
	Beschadiging van de motorkabel	Vervang de kabel
	Versleten koolborstels	Vervang de borstels
	Probleem met de kop	Neem contact op met service
De kop werkt plotseling niet meer	Apparaat oververhit of overbelast	Controlepunt 5.
De kop werkt niet in de modus voetschakelaar	Voetschakelaar werkt niet	Druk op voetschakelaar controle

Tips om de levensduur van de kop te maximaliseren:

- Gebruik geen ingedeukte of beschadigde frezen.
- Overmatige belasting door beschadigde frezen zal de kogellagers snel vernielen.
- Was freesschachten voor gebruik, als vet of andere stoffen ervoor zorgen dat een vuile frees vast komt te zitten op de spindel, kan dit trillingen, slecht spindelvermogen of andere onregelmatigheden veroorzaken.
- Steek de frees altijd helemaal in de klem.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze handleiding. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een door ACTIVESHOP Ltd. erkend servicecentrum:
(a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, (b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, (c) het netsnoer is beschadigd, (d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal voor de veiligheid het netsnoer uit het stopcontact telkens als u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele trolley, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een interval van een minuut in acht te nemen voordat u opnieuw op de aan/uit-knop drukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - zo voorkomt u elk gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over hoe de apparatuur veilig te gebruiken, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG

betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en worden afgegeven bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de aangewezen inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.