

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Lampă de mărire S4+ trepied



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polonia

www.activeshop.com.pl

Rev. A/07/2024



O lampă de mărire pe un trepied cu patru brațe permite vizualizarea de aproape a pielii și a leziunilor cutanate și iluminează zona de tratament. Utilizată, de asemenea, pentru tratamente de manichiură și pedichiură și machiaj permanent. LED-urile strălucesc cu o l u m i n ă puternică, ceea ce sporește confortul de lucru.

Date tehnice:

Tensiune	220-240V
Putere	22W
Frecvență	50/60Hz
Mărire	5 dioptrii

Dimensiunile dispozitivului:




Precauții:

1. Nu utilizați aparatul în apropierea unei căzi de baie, a unui lavoar sau a altui corp de apă.
2. Atunci când conectați ștecherul, nu atingeți părțile metalice ale acestuia.
3. Curățați aparatul periodic pentru a preveni acumularea de murdărie. Cel mai bine este să curățați aparatul cu o cârpă umedă.
4. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
5. Asigurați-vă că aparatul este conectat la sursa de alimentare corectă și că ștecherul e s t e introdus corect în priză.
6. Nu conectați aparatul la priză cu mâinile ude sau umede.
7. Nu utilizați aparatul dacă ștecherul este fierbinte sau deteriorat.
8. Nu depozitați aparatul în baie sau în alte încăperi cu umiditate ridicată.
9. Nu utilizați aparatul în apropierea substanțelor inflamabile.
10. Nu loviți sau aruncați aparatul.


Specificațiile aparatului:

1. Mufa de alimentare
2. Brațul dispozitivului
3. Lampă
4. Comutator pornit/oprit
5. Reglarea lămpii
6. Trepied
7. Bază
8. Roată

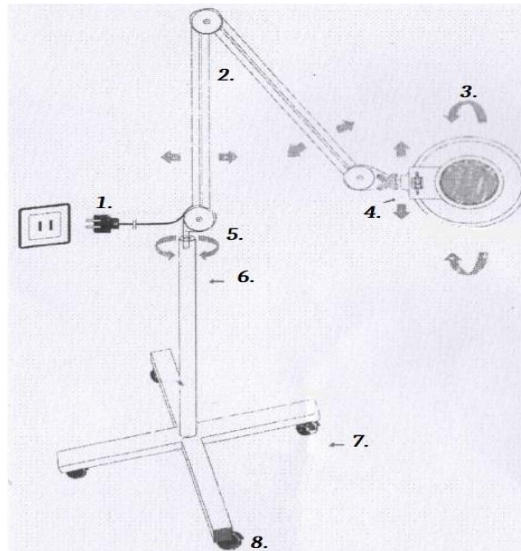

Asamblare:

1. Mai întâi asamblați baza și trepiedul. Conectați cele două picioare și trepiedul împreună folosind o șaibă și un șurub, ca în figura 1. Apoi conectați lampa la trepied (figura 2).

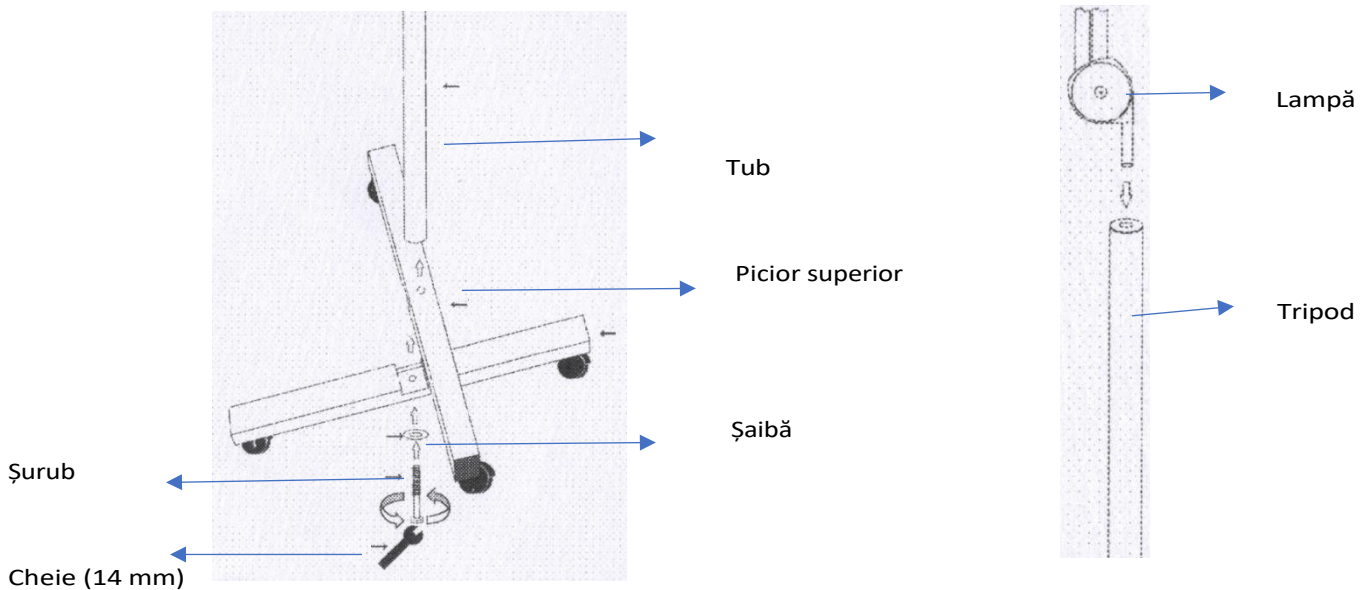

Instrucțiuni de utilizare:

1. Asamblați unitatea.
2. Conectați-o la o sursă de alimentare adecvată.
3. Porniți lampa.
4. Reglați poziția lămpii după cum este necesar.
5. Nu uitați să scoateți unitatea din priză când ați terminat.

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat sau încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat furnizat de compania ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri:
 - a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate,
 - c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolele.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale diminuate și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare a echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu un aparat electric poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul înconjurător în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile electrice folosite și electronice electrice folosite

echipamentele electrice trebuie colectate separat și predate la următoarele puncte de colectare

colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. La sfârșitul duratei lor de viață utilă, aparatele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie predate pentru prelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.