

ACTIVESHOP®


INSTRUCCIONES DE USO

Limpiador ultrasónico UC-002



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

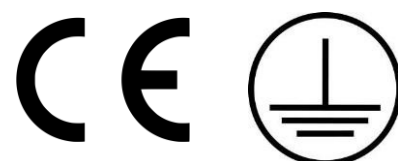

Datos técnicos:

Tensión	220V - 240V 50Hz
Potencia	65W
Frecuencia de vibración	40kHz
Dimensiones	295 x 230 x 207 mm
Dimensiones del contenedor	245 x 147 x 77 mm
Capacidad del depósito	2,5 l
Nivel mínimo de líquido	1 l
Nivel máximo de líquido	2 l
Temporizador	90-480 s

- Desenchufe el aparato antes de llenar el depósito. No sobrepase la línea "MAX" para evitar un llenado excesivo.
- No llene el depósito con productos químicos abrasivos o corrosivos. Esto puede provocar fugas en la lavadora y ocasionar daños.
- No utilice la lavadora si el cable o el enchufe están dañados. Si está dañado, póngase en contacto con un centro de servicio para su inspección y reparación.
- Guarde la lavadora en un lugar seguro.
- No deje nunca la lavadora desatendida cuando esté enchufada.
- No la utilice mientras se baña.
- Desenchufe la lavadora inmediatamente después de usarla.
- No sumerja la lavadora en agua para evitar electrocuciones.
- No vierta agua por la parte frontal de la lavadora, podría dañar la pantalla.

Construcción de la lavadora y accesorios:



1. Nivel máximo de fluido
2. Nivel mínimo de líquido
3. Depósito
4. Pantalla
5. Indicador de temperatura
6. Botón de control de temperatura
7. Botón de encendido/apagado
8. Botón para encender el ultrasonido
9. Botón para la función de desaireación
10. Botón de ajuste del tiempo

Panel de control y funciones:

- 1. Botón de encendido/apagado.** Permite encender y apagar la lavadora.
- 2. Botón de ultrasonidos.** Permite activar la función de ultrasonidos. Primero debe ajustarse el tiempo de funcionamiento. De lo contrario, la función no se activará.
- 3. Pantalla.** Indica la temperatura actual. Cuando la función de ultrasonidos está activada, indica el tiempo de funcionamiento restante.
- 4. Ajuste de la temperatura.** Al pulsar el botón de control de temperatura, el lavaparabrisas calentará automáticamente el agua y mantendrá la temperatura del fluido a unos 60 °C. El color azul del indicador de temperatura indica que el fluido se está calentando. El color rojo indica que se ha alcanzado la temperatura deseada. **Nota:** el lavavajillas recalienta automáticamente el líquido para mantener su temperatura. El indicador se vuelve azul automáticamente mientras dura el recalentamiento.
- 5. Botón de desgasificación.** Permite activar la función de desgasificación. Cuando se enciende, la lavadora ajusta automáticamente el tiempo de funcionamiento a 90 segundos y la luz de funcionamiento de la lavadora parpadea en verde. En algunos casos, pueden aparecer burbujas de aire (gas) en la solución de la lavadora debido a reacciones químicas. Las burbujas de gas impiden el funcionamiento normal de la lavadora. La activación de la función de desgasificación ayuda a eliminar las burbujas de gas y, por lo tanto, mejora el rendimiento de la lavadora.
- 6. Control del tiempo de funcionamiento de la solución.** Permite ajustar el tiempo de funcionamiento de la lavadora. Posibles ajustes: 90s, 180s, 280s, 380s y 480s.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

1. No encienda la lavadora sin agua en su interior. Encender la lavadora sin agua puede dañarla.
2. No sobrecargue la lavadora con un funcionamiento continuo. Después de 30 minutos de funcionamiento continuo, deje la lavadora inactiva durante otros 10 minutos.
3. No deje agua en la lavadora de forma permanente. Vierta el agua o la solución fuera de la lavadora después de usarla. Dejar agua o solución en la lavadora durante mucho tiempo puede dañarla.
4. Cuide el exterior de la lavadora. Limpie inmediatamente cualquier residuo de agua o solución. Utilice una toalla húmeda para limpiar la lavadora. Séquela después del lavado.
5. No conecte el aparato a la electricidad con las manos mojadas o húmedas.
6. Guárdelo en un lugar seco y fresco, protegido de la luz solar.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Retire la tapa, coloque los productos en el depósito y llénelo de agua. El agua debe limpiar los objetos a limpiar, pero no debe superar el nivel máximo de líquido.
2. Coloque la tapa y conecte la lavadora a la red eléctrica. Pulse el botón "Encendido/Apagado" para poner en marcha la lavadora. La pantalla mostrará la temperatura del agua.
3. Pulse el botón de ajuste de tiempo para seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. La pantalla mostrará 90s, pulse el botón de nuevo para cambiar el tiempo a 180 segundos. Cada pulsación posterior cambia el tiempo en 100 segundos.
4. Pulse el botón Ultrasonic para activar la función ultrasónica. El LED se iluminará en verde. Si desea detener el ultrasonido pulse de nuevo el botón, el LED se apagará.
5. Pulse el botón de control de temperatura para seleccionar la temperatura de limpieza deseada. El LED se iluminará en azul. Si vuelve a pulsar el botón, el aparato dejará de calentarse y el LED se apagará. La temperatura máxima de limpieza es de 60 °C.
6. Cuando termine de trabajar, desenchufe el aparato, vierta el agua restante y séquelo con un paño.

MÉTODOS DE LIMPIEZA



Limpieza normal

Utilice agua de acuerdo con las instrucciones de uso. Vierta el agua cuando termine.



Lavado en solución

Prepare la solución de limpieza según las recomendaciones del fabricante. Tenga cuidado de no superar la concentración de la solución. Esto podría dañar las juntas de la lavadora, con el consiguiente riesgo de inundación de los componentes electrónicos. Cuando haya terminado, llene la lavadora con agua, enciéndala durante 90 segundos y, a continuación, vierta los residuos fuera de la lavadora. Esto evitará que la lavadora se dañe por el contacto prolongado con productos químicos.



Lavado por lotes

Cuando lave objetos que no quepan en el bol, puede sumergir una parte del objeto en la colada y luego limpiar la otra parte. Deje la tapa abierta durante la limpieza, pero recuerde no tocar el agua de la cubeta.



Limpieza avanzada (para equipos muy sucios)

Proceda como con el lavado con solución. A continuación, sustituya el agua por agua limpia y repita el proceso.

Artículos no aptos para limpieza en el limpiador ultrasónico:

- Joyería fina (perlas, esmeraldas, artículos de marfil, abalorios, conchas marinas, ágatas).
- Artículos soldados, recubiertos y pegados.
- Otros artículos como madera, vidrio recubierto, cerámica, filtros de cámara.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos:
 - a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños, c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato ha sufrido un golpe o su carcasa está dañada.
5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque la unidad sobre un carro, estantería o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará situaciones de peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucción sobre el uso del equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El aparato no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en los centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse al cubo de la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Para proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben enviarse para su reprocesamiento. Por lo tanto, deben entregarse a los puntos de recogida adecuados, así como a ACTIVSHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a una temperatura de (-) 20 °C a (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el aparato en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.