

ACTIVESHOP®


MODE D'EMPLOI

Nettoyeur à ultrasons UC-002



Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl Rev.
A/04/2024

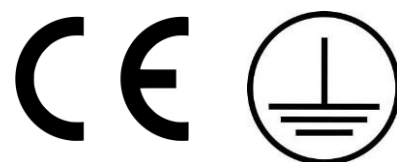

Données techniques :

Tension	220V - 240V 50Hz
Puissance	65W
Fréquence de vibration	40kHz
Dimensions de l'appareil	295 x 230 x 207 mm
Dimensions du conteneur	245 x 147 x 77 mm
Capacité du réservoir	2,5 l
Niveau minimum de liquide	1 l
Niveau maximum de liquide	2 l
Minuterie	90-480 s

- Débranchez l'appareil avant de remplir le réservoir. Ne dépassez pas la ligne "MAX" afin d'éviter tout débordement.
- Ne remplissez pas le réservoir avec des produits chimiques abrasifs ou corrosifs. Cela pourrait provoquer une fuite du laveur et l'endommager.
- N'utilisez pas le lave-linge si le câble ou la fiche est endommagé(e). S'il est endommagé, contactez un centre de service pour qu'il l'examine et le répare.
- Conservez le lave-linge dans un endroit sûr.
- Le lave-linge ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne l'utilisez pas lorsque vous vous baignez.
- Débranchez le lave-linge immédiatement après l'avoir utilisé.
- Ne pas immerger le lave-linge dans l'eau afin d'éviter toute électrocution.
- Ne versez pas d'eau par l'avant du lave-linge, vous risqueriez d'endommager l'écran.

Construction du lave-linge et accessoires :



1. Niveau maximum de liquide
2. Niveau minimum de liquide
3. Réservoir
4. Afficheur
5. Indicateur de température
6. Bouton de réglage de la température
7. Bouton marche/arrêt
8. Bouton de mise en marche des ultrasons
9. Bouton pour la fonction de désaération
10. Bouton de réglage de l'heure

Panneau de commande et fonctions :

- 1. Bouton marche/arrêt.** Permet d'allumer et d'éteindre le lave-linge.
- 2. Bouton ultrasons.** Permet d'activer la fonction ultrasonique. La durée de fonctionnement doit d'abord être réglée. Sinon, la fonction ne sera pas activée.
- 3. Afficheur.** Indique la température actuelle. Lorsque la fonction ultrasons est activée, indique le temps de fonctionnement restant.
- 4. Réglage de la température.** Lorsque l'on appuie sur le bouton de contrôle de la température, le lave-glasse chauffe automatiquement l'eau et maintient la température du liquide à environ 60 °C. La couleur bleue de l'indicateur de température indique que le liquide est en train d'être chauffé. La couleur rouge indique que la température requise est atteinte. **Remarque :** le lave-linge réchauffe automatiquement le liquide pour en maintenir la température. L'indicateur devient automatiquement bleu pendant la durée du réchauffage.
- 5. Bouton de dégazage.** Permet d'activer la fonction de dégazage. Lorsqu'il est mis en marche, le lave-linge règle automatiquement la durée de fonctionnement sur 90 secondes et le voyant de fonctionnement du lave-linge clignote en vert. Dans certains cas, des bulles d'air (gaz) peuvent apparaître dans la solution du lave-linge en raison de réactions chimiques. Les bulles de gaz entravent le fonctionnement normal du lave-linge. L'activation de la fonction de dégazage permet d'éliminer les bulles de gaz et d'améliorer ainsi les performances du lave-linge.
- 6. Contrôle de la durée de fonctionnement de la solution.** Permet de régler la durée de fonctionnement du lave-linge. Réglages possibles : 90s, 180s, 280s, 380s et 480s.

STOCKAGE ET MANIPULATION

1. Ne mettez pas le lave-linge en marche s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur. La mise en marche du lave-linge sans eau peut endommager le lave-linge.
2. Ne surchargez pas le lave-linge en le faisant fonctionner en continu. Après 30 minutes de fonctionnement continu, laissez le lave-linge à l'arrêt pendant 10 minutes supplémentaires.
3. Ne laissez pas d'eau dans le lave-linge en permanence. Videz l'eau ou la solution du lave-linge après utilisation. Laisser de l'eau ou une solution dans le lave-linge pendant une longue période peut l'endommager.
4. Prenez soin de l'extérieur du lave-linge. Essuyez immédiatement tout résidu d'eau ou de solution. Utilisez une serviette humide pour nettoyer le lave-linge. Essuyez-le après le lavage.
5. Ne pas connecter l'appareil à l'électricité avec des mains mouillées ou humides.
6. Conservez l'appareil dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière du soleil.

MODE D'EMPLOI

1. Retirer le couvercle, placer les produits dans le réservoir et le remplir d'eau. L'eau doit nettoyer les objets à nettoyer, mais ne doit pas dépasser le niveau maximum de liquide.
2. Remettez le couvercle en place, puis branchez le lave-linge sur l'alimentation électrique. Appuyez sur le bouton "On/off" pour démarrer la machine. L'écran affiche la température de l'eau.
3. Appuyez sur la touche de réglage du temps pour sélectionner la durée de fonctionnement souhaitée. L'écran affiche 90s, appuyez à nouveau sur le bouton pour passer à 180 secondes. Chaque clic suivant modifie la durée de 100 secondes.
4. Appuyez sur le bouton Ultrason pour activer la fonction ultrasonique. Le voyant s'allume en vert. Si vous souhaitez arrêter les ultrasons, appuyez à nouveau sur le bouton, le voyant s'éteint.
5. Appuyez sur le bouton de contrôle de la température pour sélectionner la température de nettoyage souhaitée. Le voyant s'allume en bleu. Si vous appuyez à nouveau sur la touche, l'appareil s'arrête de chauffer et le voyant s'éteint. La température maximale de nettoyage est de 60 °C.
6. Une fois le travail terminé, débranchez l'appareil, versez l'eau restante et essuyez l'appareil.

MÉTHODES DE NETTOYAGE



Nettoyage ordinaire

Utilisez de l'eau conformément au mode d'emploi. Videz l'eau lorsque vous avez terminé.



Lavage en solution

Préparez la solution de nettoyage en suivant les recommandations du fabricant. Veillez à ne pas dépasser la concentration de la solution. Cela pourrait endommager les joints du laveur et entraîner un risque d'inondation des composants électroniques. Lorsque vous avez terminé, remplissez le lave-linge d'eau, mettez-le en marche pendant 90 secondes, puis versez les résidus hors du lave-linge. Vous éviterez ainsi que le lave-linge ne soit endommagé par un contact prolongé avec des produits chimiques.



Lavage par lots

Lorsque vous lavez des articles qui ne tiennent pas dans la cuve, vous pouvez plonger une partie de l'article dans la lessive, puis nettoyer l'autre partie. Laissez le couvercle ouvert pendant le nettoyage, mais n'oubliez pas de ne pas toucher l'eau de la cuve.



Nettoyage avancé (pour le matériel très sale)

Procédez de la même manière que pour le lavage en solution. Remplacez ensuite l'eau par de l'eau propre et répétez le processus.

Articles ne convenant pas au nettoyage dans le nettoyeur à ultrasons :

- Bijouterie fine (perles, émeraude, objets en ivoire, perles, coquillages, agate).
- Articles soudés, enduits et collés
- Autres objets tels que le bois, le verre enduit, la céramique, les filtres d'appareil photo.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des conséquences indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués uniquement par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez le service agréé par ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants :
a) du liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des bruits bizarres, c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'introduisez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un corps étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne pas placer l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil pourrait être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient fournies concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.
3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être envoyés au retraitement. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVSHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. Stockez l'appareil dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement de (+) 10 °C à (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.