

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Fotoliu cosmetic hid. A 210D cu leagăn




Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/11/2024

Dimensiunile dispozitivului:

- Scaun în poziție culcată cu tetieră 63 x 180cm
- Înălțime min. 64cm
- Înălțime max. 80cm
- Bază 55 x 106,5 cm
- Capacitatea maximă de încărcare a scaunului 150kg

Construcția unității:

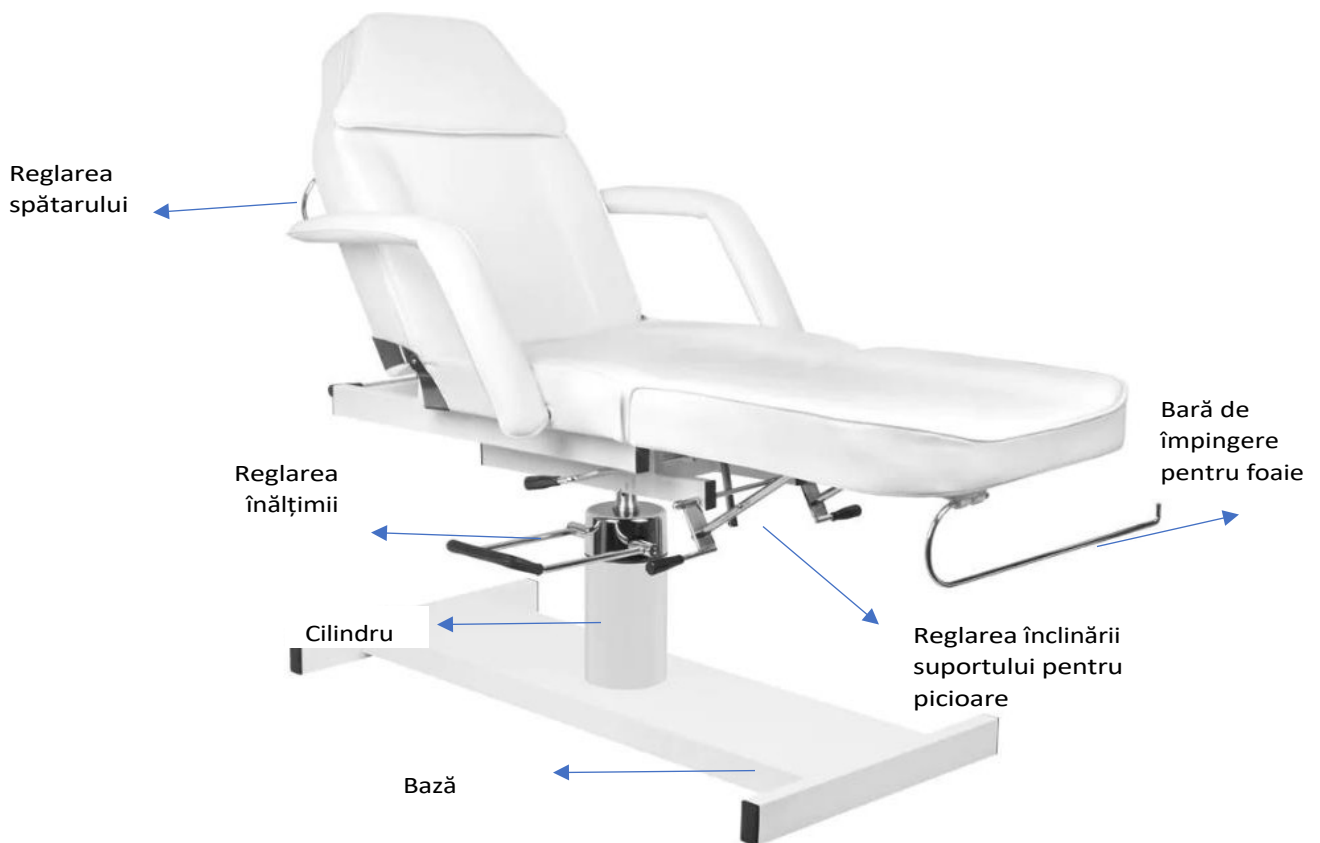


Înălțimea scaunului poate fi reglată cu ajutorul mânerului situat sub scaun. Reglarea înălțimii de la 64-80 cm.


Poziția suportului pentru picioare poate fi reglată în unghi (cunoscută sub denumirea de funcție de leagăn) prin intermediul unui control situat sub suportul pentru picioare.

Montarea unității

1. Atașați picioarele la baza scaunului. Apoi atașați actuatorul (conform imaginii).

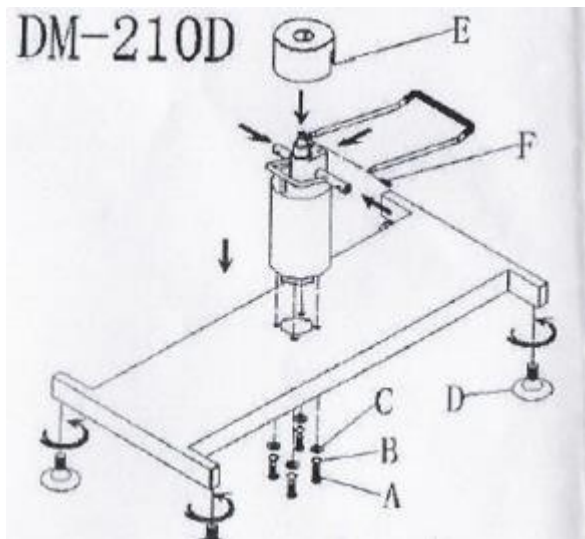

2. Apoi conectați baza la scaun.
3. Montați cotierele în orificiile din părțile laterale ale scaunului.
4. Montați ghidajele de reglare a spătarului

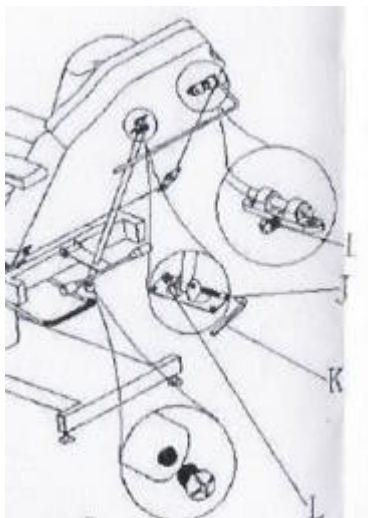

Curățarea și dezinfectarea unității:

Pentru a menține suprafața scaunului în stare bună, curățați-o în mod regulat. Nu uitați să curățați și să dezinfectați scaunul după fiecare utilizare. Este recomandat să efectuați o dezinfecție completă o dată pe lună.

I Suprafețe metalice și din plastic

Pentru a curăța suprafețele și comenzile din metal și plastic, ștergeți-le cu o cârpă umedă. Pentru a curăța zonele greu accesibile sau colțurile, o perie mică va funcționa bine. Nu utilizați prea mult lichid pentru a curăța aparatul. Apoi dezinfectați aparatul cu un lichid adecvat.

II Suprafețe din oțel inoxidabil

Cel mai bine funcționează cel mai bine curățare curățare cu o soluție soluție
detergent. Amoniac i majoritatea solvenților pot fi utilizați pentru a

îndepărta petele dificile. Evitați soluțiile pe bază de clor. **III Suprafețe metalice vopsite sau cromate**

Nu utilizați jeturi de apă (dușuri, tunuri de apă de înaltă presiune) pentru curățare.

Nu curățați la temperaturi ridicate și umiditate ridicată și nu expuneți unitatea la condiții care pot duce la contaminarea cu lichide.

Nu utilizați solvenți sau acizi pentru curățare.

IV Suprafața scaunului

Ștergeți uniform suprafața scaunului cu un detergent special pentru piele și apoi ștergeți-o cu o cârpă curată și moale.

Întreținere

- Reparațiile trebuie să fie efectuate de personal experimentat și autorizat de producător. Reparațiile efectuate de personal neautorizat pot cauza răniri sau deteriorări ale unității pentru care producătorul nu este responsabil.
- Utilizați numai piese de schimb originale aprobate de producător.
- Nu utilizați scaunul cosmetic sau accesoriile dacă acestea nu funcționează corespunzător.
- Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie să fie documentate.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloane de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal calificat în cosmetică evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.
2. Dispozitivul nu trebuie dezasamblat sau încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIVESHOP Ltd.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de compania ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri
(a) a intrat lichid în aparat; b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați unitatea într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu unitatea.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.

5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul înconjurător în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile electrocasnice folosite electrice și electronice electrocasnice folosite echipamentele electrice trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare a echipamentelor electronice și electrice uzate. Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.