

ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Sillon Classic 4 motoros elektromos kozmetikai szék bölcsővel

Modell: C501A



Importőr: CSCA 5010101

z o.o.


Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław,

Lengyelország

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024

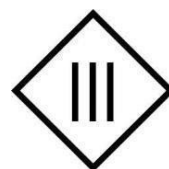

***A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT*.**


Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz a készülék működésével és karbantartásával kapcsolatban. A készülék használata előtt olvassa el a mellékelt használati utasítást. Használja a készüléket a leírtak szerint. Őrizze meg ezt a kézikönyvet, és gondoskodjon arról, hogy minden személy, aki a készüléket használhatja, megismerje azt.

A Sillon elektromos kozmetikai szék egy professzionális berendezés, amely tökéletes bármely szépségszalonba. Ideális masszázshoz, kozmetikai és fizioterápiás kezelésekhez. A fotel úgy lett kialakítva, hogy teljes kényelmet biztosítson, amikor kezelés közben ráfekszik. A szék négy részből és egy kivehető párnából áll. Az ülés két oldalán fogantyúk találhatók, ahová a távirányítót fel lehet akasztani, hogy mindig kéznél legyen.

A termék terhelhetősége: 150 kg


Az üléstest maximális terhelhetősége 150 kg. Ne emeljen többet a megadott súlynál, mint amit az ülés elbír.

Ne ugráljon a háttámlán, és ne gyakoroljon nagy nyomást a kartámaszra, hogy elkerülje a termék szerkezetének sérülését.

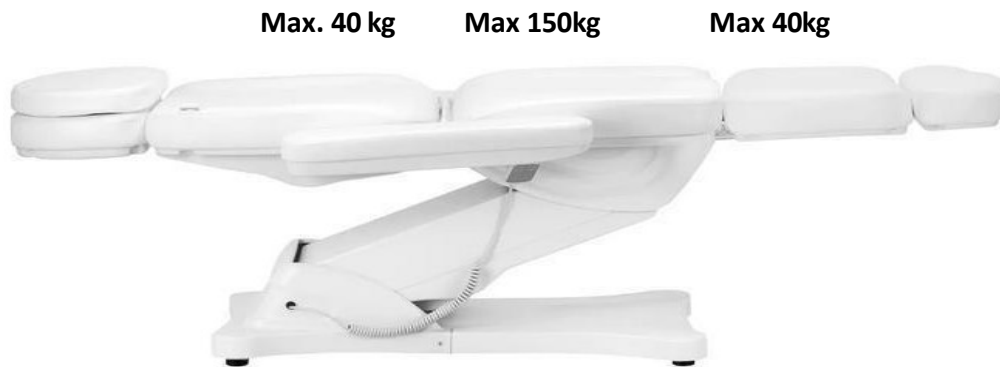

Megjegyzés

A csomagoláshoz kartont és külső kartondobozokat használunk, összesen 10 réteg papírral, hogy biztosítsuk a termékek védelmét. Javasoljuk az eredeti csomagolás megőrzését a későbbi használatra, különösen a garanciaidő alatti visszaküldések esetén. Biztonsági okokból a szék kartondobozból való kiemeléséhez két emberre van szükség. Emeléskor álljon a szék fejtámlájának és lábtartójának mindkét oldalára. Ne feledje, hogy a széket csak a fejtámla és a lábtartó pozíciójából lehet felemelni, a karfák egyik oldaláról sem.

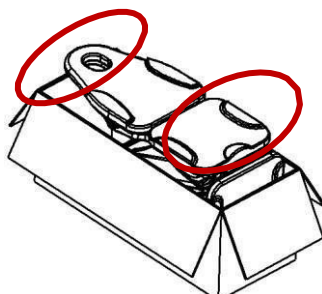

A szék használata előtt ellenőrizze, hogy a csomagolás sértetlen-e és nem sérült-e meg a szállítás során. Ha bármilyen probléma merül fel, kérjük, a készülék átvételétől számított 2 napon belül értesítse a szállító céget vagy az értékesítés utáni személyzetet. Győződjön meg arról, hogy a szállításkor minden tartozék teljes. Ha a szállításkor hiányzó tartozékokat talál, kérjük, időben lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni munkatársakkal.


Az elektromos kozmetikai szék zárt, száraz helyiségben kell használni. A helyiség hőmérsékletének $+10^{\circ}$ és -40° között kell lennie, a relatív páratartalomnak pedig 30% és 75% között. Ha az elektromos kozmetikai szék 0° alatti hőmérsékletnek volt kitéve, várjon legalább 5 órát a használat előtt, hogy a készüléknek legyen ideje elérni a szobahőmérsékletet.

Az elektromos kozmetikai szék használata előtt olvassa el a használati utasítást, és végezze el a következő lépéseket:

1. Győződjön meg róla, hogy minden csomagolóanyagot eltávolított.
2. Győződjön meg arról, hogy a szék működőképes.
3. Helyezze az elektromos kozmetikai szék arra a helyre, ahol használni fogja.
4. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy megfelelő konnektorba.

Tipp! Gyermekek és tapasztalatlan személyek nem használhatják ezt a készüléket. A gyermekeket felügyelni kell, és nem szabad az elektromos kozmetikai szék közelében játszani. Biztonsági okokból húzza ki a készüléket a konnektorból, és ne hagyja felügyelet nélkül. Húzza ki a hálózati kábelt is.

A készülék méretei:

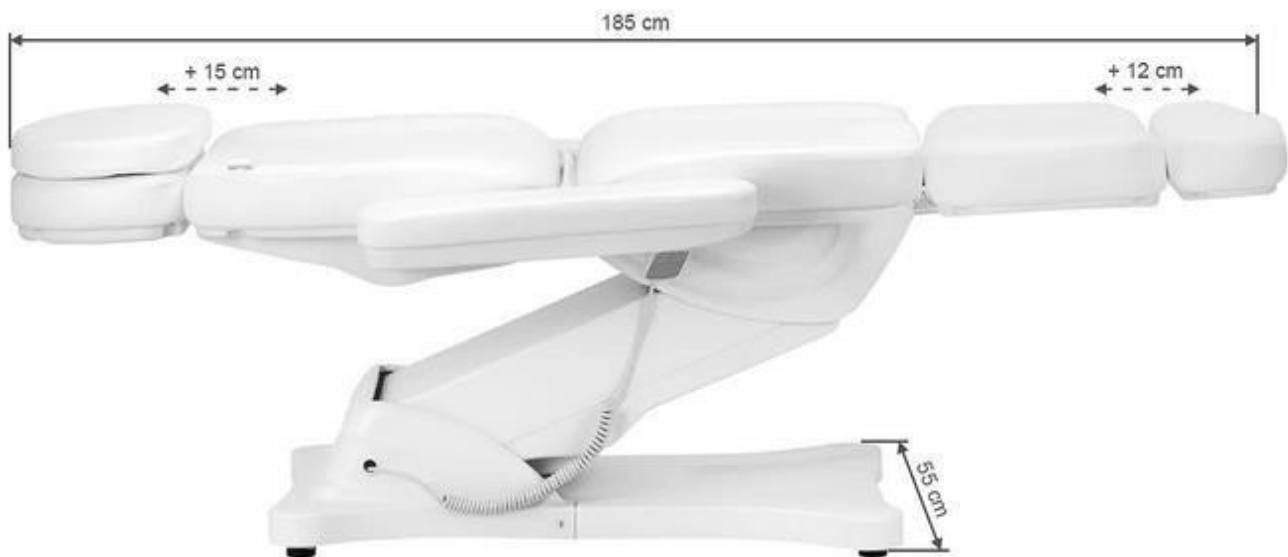



A készülék felépítése:

Párna

Fejtámla

Háttámla

Karfa

Ülés

Lábtartó

Emelőszervezet

Műanyag alap



Figyelmeztetés

1. A lábtartót nem úgy tervezték, hogy egy felnőtt teljes súlyát elbírja.
2. Ne üljön közvetlenül a karfára és a lábtartóra.
3. Ne használja az elektromos nőgyógyászati vizsgálószéket gyúlékony gázok közelében.
4. Ne emeljen nagyobb súlyt, mint amennyit a szék elbír.
5. Ügyeljen arra, hogy a konnektorok közötti távolság ne haladja meg a 2 métert.

Figyelmeztetés

1. Biztonsági okokból a hálózati kábelt mindig földelt konnektorba dugja be.
2. Ne kösse a tápkábelt a készülékhez. A tápkábel megemelése vagy meghúzása károsíthatja azt. Gondoskodjon arról, hogy a tápkábel vészhelyzetben könnyen eltávolítható legyen.
3. Az elektromos kozmetikai szék mozgatása előtt távolítsa el a tápkábelt, hogy az ne akadjon be a szék egyes részei közé.
4. Ha a tápkábel megsérült, azonnal húzza ki a kábelt, ne használja a széket, és forduljon hivatalos szervizközponthoz. Csak az eredeti tápkábelt használja.
5. Ne engedje, hogy a kezelést nem végző személy irányítsa a kezelő távirányítót.
6. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szék alá.
7. Ügyeljen arra, hogy a szék körül elegendő szabad tér legyen, hogy szabadon össze- és széthajtható legyen.
8. Győződjön meg róla, hogy az ülés körül nincsenek éles vagy veszélyes tárgyak, amelyek károsíthatják a készüléket.
9. Ne módosítsa a készüléket saját maga. Ha a szék nem működik megfelelően, hagyja abba a használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz.


A készülék használata:

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a 110V~240V-os külső tápegységhez.


A karfa felszerelésének módja:

Az ülésnek vízszintes helyzetben kell lennie ahhoz, hogy a kartámaszokat rá lehessen szerelni. Csúsztassa a kartámaszt a háttámla oldalán található furatba. A kartámasznak szilárdan kell rögzülnie. Csavarja el jobbra vagy balra, hogy megfelelően a helyére kerüljön. Ugyanígy járjon el a másik kartámasszal is.


A kartámasz merőleges a talajra (függetlenül az ülés szögétől). 180°-kal elforgatható.

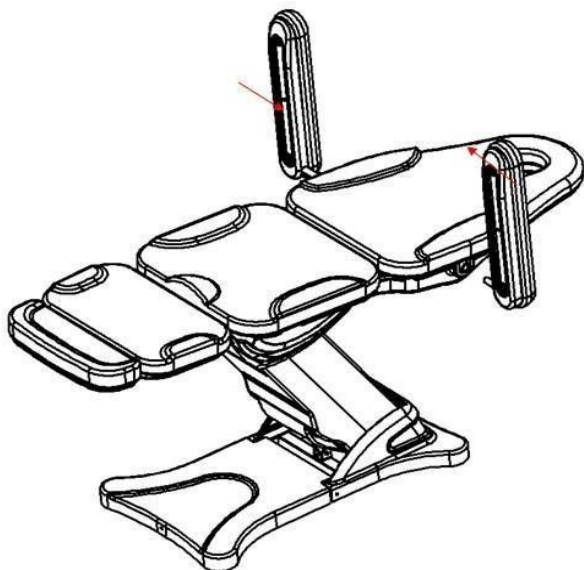


2. Kézi vezérlési funkció (emelési magasság: az ágy 58~ 82 cm-re van a talajtól).

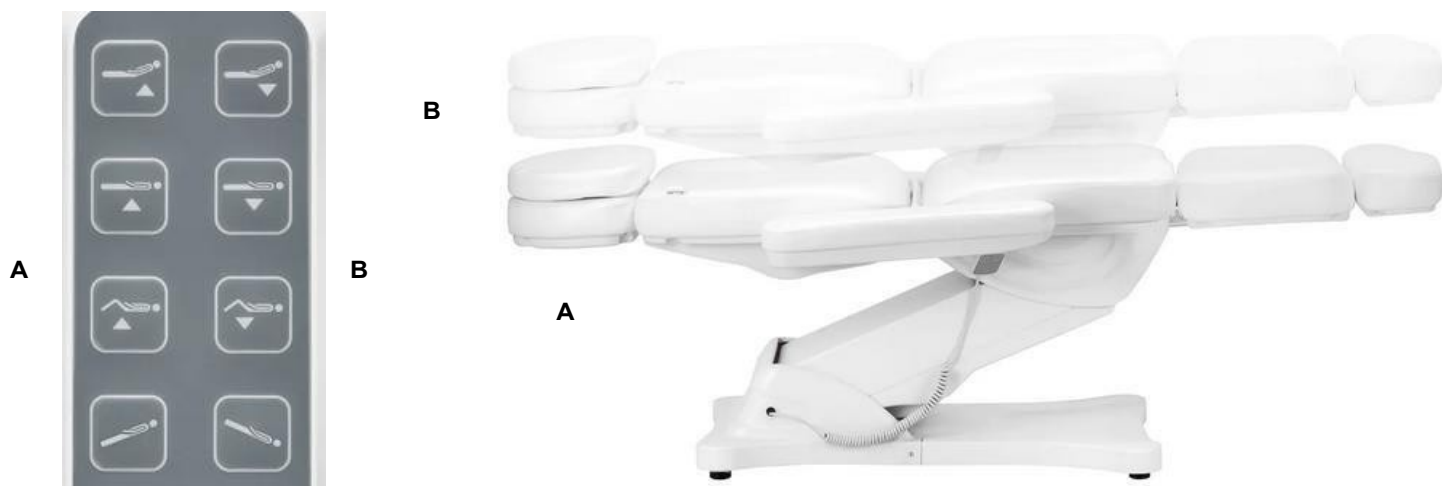

3. Kézi vezérlési funkció (hátemelési szög 0-80 °, lábemelési szög 0-90 °)

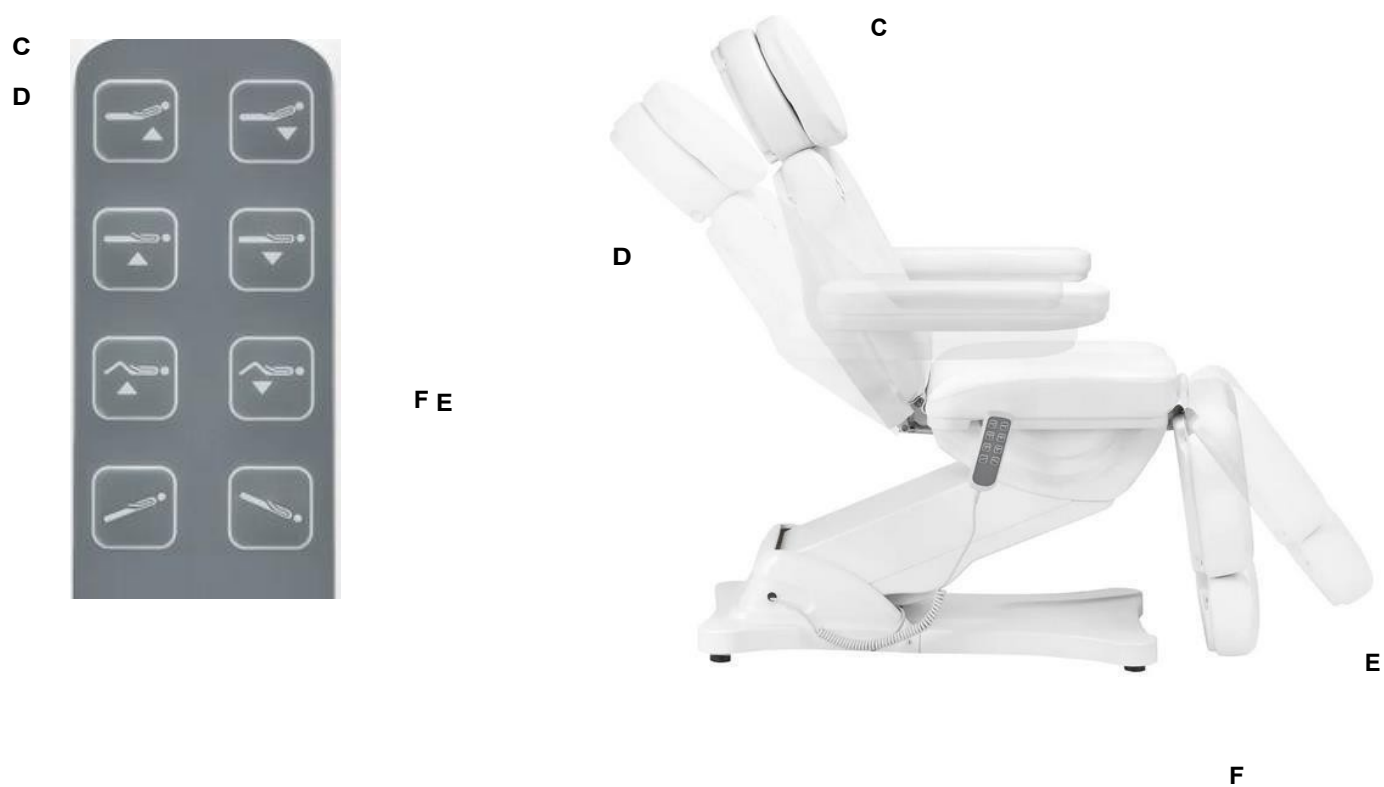

4. Lábtartó behúzható funkció (lábtartó, hossza: 0~ 12cm)

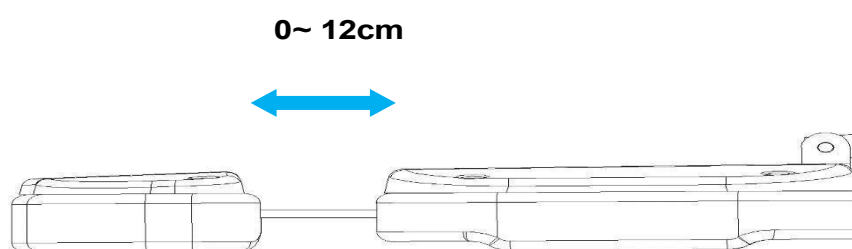

5. Bölcső funkció (a szék ülése szögben dönthető - úgynevezett bölcső. Ha a háttámlát leengedjük és a lábtartót felemeljük, sík felület jön létre).



A készülék tisztítása és fertőtlenítése:

- Tisztítás előtt válassza le a készüléket az áramforrásról.
- A szék felületének jó állapotban tartása érdekében rendszeresen tisztítsa meg. Ne feledje, hogy minden használat után tisztítsa és fertőtlenítse a széket. Javasoljuk, hogy havonta egyszer végezzen alapos fertőtlenítést.

I Fém és műanyag felületek

- A fém- és műanyag felületek és kezelőszervek tisztításához törölje át azokat nedves ruhával. A nehezen hozzáférhető területek vagy sarkok tisztításához egy kis

kefe. Ne használjon túl sok folyadékot a készülék tisztításához. Ezután fertőtlenítse a készüléket megfelelő folyadékkal.

II Rozsdamentes acélfelületek

- A tisztítás enyhe tisztítószeres oldattal a leghatékonyabb. A kemény foltok eltávolítására ammónia és a legtöbb oldószer használható. Kerülje a klór alapú oldatokat.

III Festett vagy krómozott fémfelületek

- Ne használjon vízsugarakat (zuhany, nagynyomású vízágyú) a tisztításhoz.
- Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett, ne tegye ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadékszennyezéshez vezethetnek.
- Ne használjon oldószereket vagy savakat a tisztításhoz.
- Törölje át egyenletesen az ülés felületét speciális bőrtisztítóval, majd tiszta, puha ruhával törölje át.

Karbantartás

A készüléket karbantartás előtt le kell választani az elektromos hálózatról.

1. A javításokat tapasztalt és a gyártó által felhatalmazott személyzetnek kell elvégeznie. Az illetéktelen személyek által végzett javítások sérülést vagy kárt okozhatnak a készülékben, amelyért a gyártó nem vállal felelősséget.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott eredeti pótalkatrészeket használjon.
3. Ne használja az elektromos kozmetikai széket vagy a tartozékokat, ha azok nem működnek megfelelően.
4. Minden karbantartási és javítási munkát dokumentálni kell.

Karbantartási intézkedések

Hetente egyszer ellenőrizze a kezelőszerveket és azok kábelezését. Hat havonta legalább egyszer ellenőrizze a következő elemek állapotát és működését:

1. tápkábel és annak rögzítése
2. a motor vezetékei
3. Vezérlődoboz és kábelezése
4. A tartozékok rögzítve vannak-e
5. A zárrendszer normál működése

Ha bármilyen hibát talál, hagyja abba a berendezés használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz. A működtető/vezérlőegységet csak tapasztalt vagy felhatalmazott személyzet nyithatja ki vagy cserélheti ki.

Ha a berendezés bármelyik része megsérült, húzza ki a tápkábelt és hagyja abba a használatot. Ezután értesítse a szervizt.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldási módszerek
A kézi vezérlés nem reagál	Ellenőrizze, hogy a kézi vezérlés vezetékeit összekötő interfész laza-e. (Ellenőrizze, hogy nincs-e probléma az áramköri lapon) ne felejtse el megjelölni a dugó eredeti helyét.
A motor nem reagál	Változtassa meg a motor dugójának helyzetét

A vezérlődoboz cseréjéhez és egyéb pótalkatrészek megrendeléséhez forduljon a szervizhez, a kapcsolatfelvétel előtt írja le a problémát:

1. Modell

2. A vásárlás dátuma

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. A készülék kizárólag képzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.

2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen kézikönyvben megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Kft. cég) végezhet.

3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - így nem kerülhet folyadék a készülékbe.

4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:

(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.

5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.

7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a vezetéket a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.

8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.

9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.

10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a hiba a készülék helytelen működése, károsodása vagy akár a leégés veszélye.

FIGYELEM!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető minden veszély.

2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.

3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.

5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékekkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvnek megfelelően

az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait elkülönítve kell gyűjteni és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein átadni. Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell átadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.