

ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

Sillon Classic 4-motorige elektrische cosmetische stoel met wieg

Model: C501A



Importeur:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polen

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024

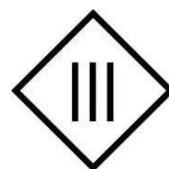

***LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT*.**


Deze handleiding bevat gedetailleerde informatie over de bediening en het onderhoud van het apparaat. Lees de bijgeleverde instructies voordat u het apparaat gebruikt. Gebruik het apparaat zoals beschreven. Bewaar deze handleiding en zorg ervoor dat alle personen die het apparaat kunnen gebruiken er vertrouwd mee zijn.

De Sillon elektrische cosmetische stoel is een professioneel apparaat dat perfect is voor elke schoonheidssalon. Hij is ideaal voor massages, cosmetische en ook fysiotherapeutische behandelingen. De fauteuil is ontworpen om volledig comfort te garanderen wanneer je erop ligt tijdens de behandeling. De stoel bestaat uit vier delen en een afneembaar kussen. Aan beide kanten van de stoel zitten handgrepen waar de afstandsbediening aan gehangen kan worden zodat deze altijd bij de hand is.

Belastbaarheid van het product: 150 kg


Het maximale draagvermogen van de zitting is 150 kg. Til niet meer dan het aangegeven gewicht dat de stoel kan dragen.

Spring niet op de rugleuning en oefen niet veel druk uit op de armleuningen om schade aan de structuur van het product te voorkomen.

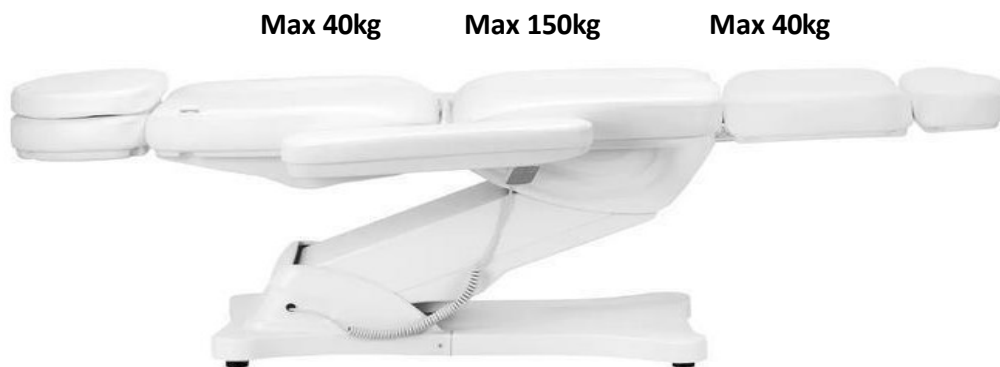

Opmerking

Karton en kartonnen dozen worden gebruikt voor de verpakking, met in totaal 10 lagen papier om de bescherming van je producten te garanderen. We raden aan om de originele verpakking te bewaren voor toekomstig gebruik, vooral voor retourzendingen tijdens de garantieperiode. Om veiligheidsredenen zijn er twee personen nodig om de stoel uit de kartonnen doos te tillen. Ga bij het optillen aan beide zijden van de hoofdsteen en voetensteun van de stoel staan. Denk eraan dat de stoel alleen kan worden opgetild aan de hoofdsteen en voetensteun, niet aan beide kanten van de armleuningen.

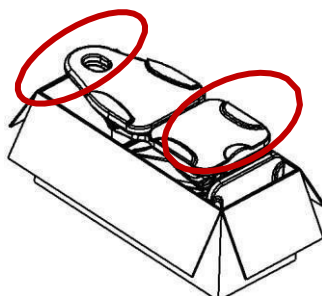

Controleer voordat u de stoel gebruikt of de verpakking intact is en niet is beschadigd tijdens het transport. Als er een probleem is, meld dit dan binnen 2 dagen na ontvangst aan het transportbedrijf of de aftersalesmedewerker. Controleer of alle accessoires compleet zijn op het moment van levering. Als accessoires ontbreken op het moment van levering, neem dan tijdig contact op met de klantenservice.


De elektrische cosmeticastoel moet gebruikt worden in een gesloten, droge ruimte. De temperatuur in de ruimte moet tussen +10° en -40 ° liggen en de relatieve luchtvochtigheid tussen 30% en 75%. Als de elektrische cosmeticastoel blootgesteld is geweest aan temperaturen onder 0°, wacht dan minstens 5 uur voordat u hem gebruikt, zodat het apparaat de tijd heeft om op kamertemperatuur te komen.

Lees voor gebruik van de elektrische cosmeticastoel de instructies en voer de volgende stappen uit:

1. Zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen verwijderd zijn.
2. Controleer of de stoel in orde is.
3. Plaats de elektrische cosmeticastoel in de ruimte waar hij gebruikt gaat worden.
4. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.

Tip! Kinderen en onervaren personen mogen dit apparaat niet gebruiken. Kinderen moeten onder toezicht staan en mogen niet in de buurt van de elektrische cosmeticastoel spelen. Haal uit veiligheidsoverwegingen de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat niet onbeheerd achter. Trek ook de stekker uit het stopcontact.

Afmetingen van het apparaat:

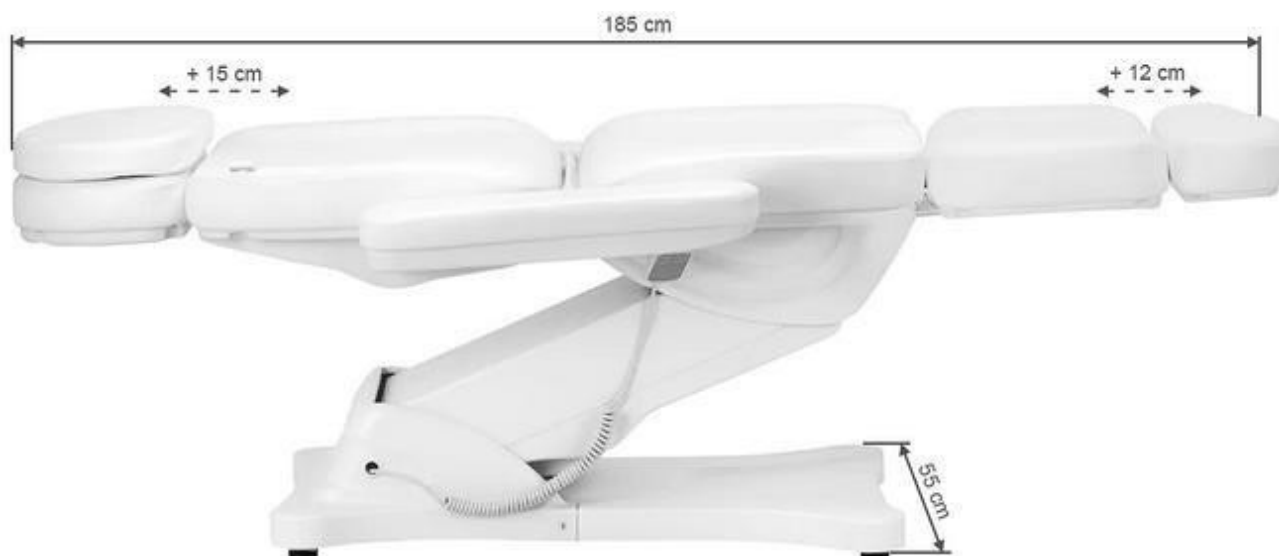



Constructie van het apparaat:

Kussen

Hoofdstun

Rugleuning

Armleuning

Zitting

Voetsteun

Hefactuator

Plastic basis



Waarschuwing

1. De voetsteun is niet ontworpen om het volledige gewicht van een volwassene te dragen.
2. Ga niet direct op de arm- en voetsteun zitten.
3. Gebruik de elektrische gynaecologische onderzoeksstoel niet in de buurt van ontvlambare gassen.
4. Til niet meer gewicht dan de stoel kan dragen.
5. Zorg ervoor dat de afstand tussen stopcontacten niet meer dan 2 meter bedraagt.

Let op

1. Steek om veiligheidsredenen het netsnoer altijd in een geaard stopcontact.
2. Bind het netsnoer niet vast aan het apparaat. Als u het netsnoer optilt of eraan trekt, kan het beschadigd raken. Zorg ervoor dat het netsnoer in geval van nood gemakkelijk kan worden verwijderd.
3. Verwijder het netsnoer voordat u de elektrische cosmeticastoel verplaatst, zodat het niet klem komt te zitten tussen bepaalde delen van de stoel.
4. Als het netsnoer beschadigd is, haal het dan onmiddellijk uit het stopcontact, gebruik de stoel niet en neem contact op met een erkend servicecentrum. Gebruik alleen het originele netsnoer.
5. Laat de afstandsbediening niet bedienen door iemand die de behandeling niet uitvoert.
6. Plaats geen voorwerpen onder de stoel.
7. Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de stoel, zodat deze vrij in- en uitgeklapt kan worden.
8. Zorg ervoor dat er geen scherpe of schadelijke voorwerpen in de buurt van de stoel zijn die het apparaat kunnen beschadigen.
9. Pas het apparaat niet zelf aan. Als de stoel niet goed werkt, gebruik hem dan niet meer en neem contact op met een erkend servicecentrum.

Het apparaat gebruiken:

1. Sluit het netsnoer aan op de externe voeding 110V~240V.


Installatiemethode armleuning:

De stoel moet in een horizontale positie staan om de armleuningen erop te installeren. Schuif de armleuning in het gat aan de zijkant van de rugleuning. De armleuning moet stevig vastzitten. Draai hem naar rechts of links zodat hij goed vast zit. Doe hetzelfde met de andere armsteun.


De armleuning staat loodrecht op de grond (ongeacht de hoek van de stoel). Hij kan 180° gedraaid worden.




2. Handmatige bedieningsfunctie (hefhoogte: het bed is 58~ 82 cm van de grond).

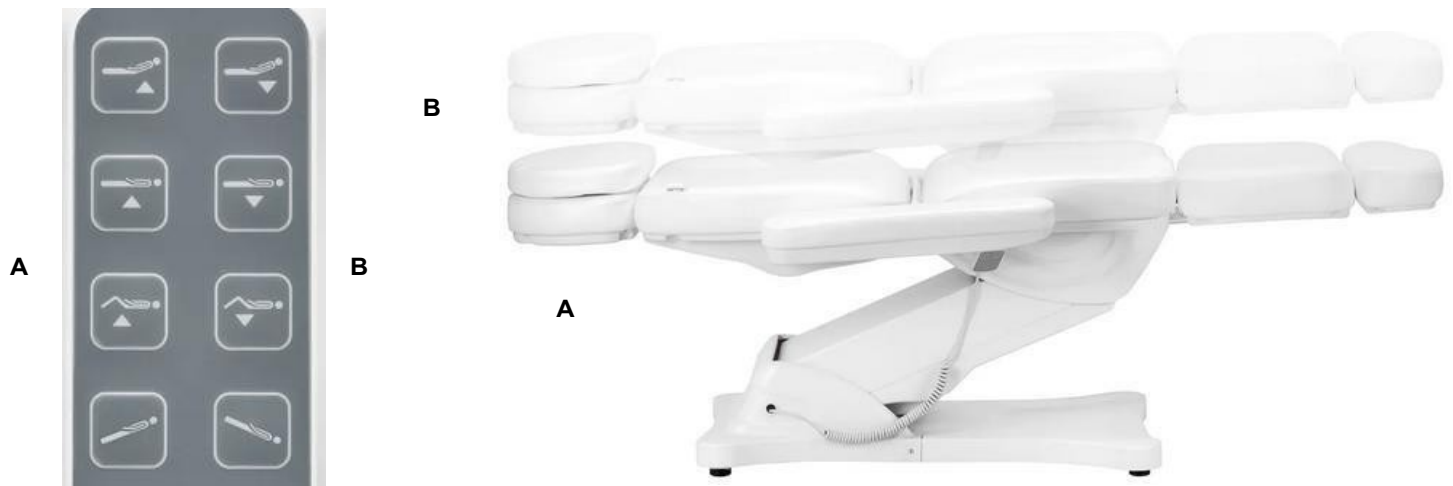

3. Handmatige bedieningsfunctie (rughefhoek 0-80 °, beenhefhoek 0-90 °)

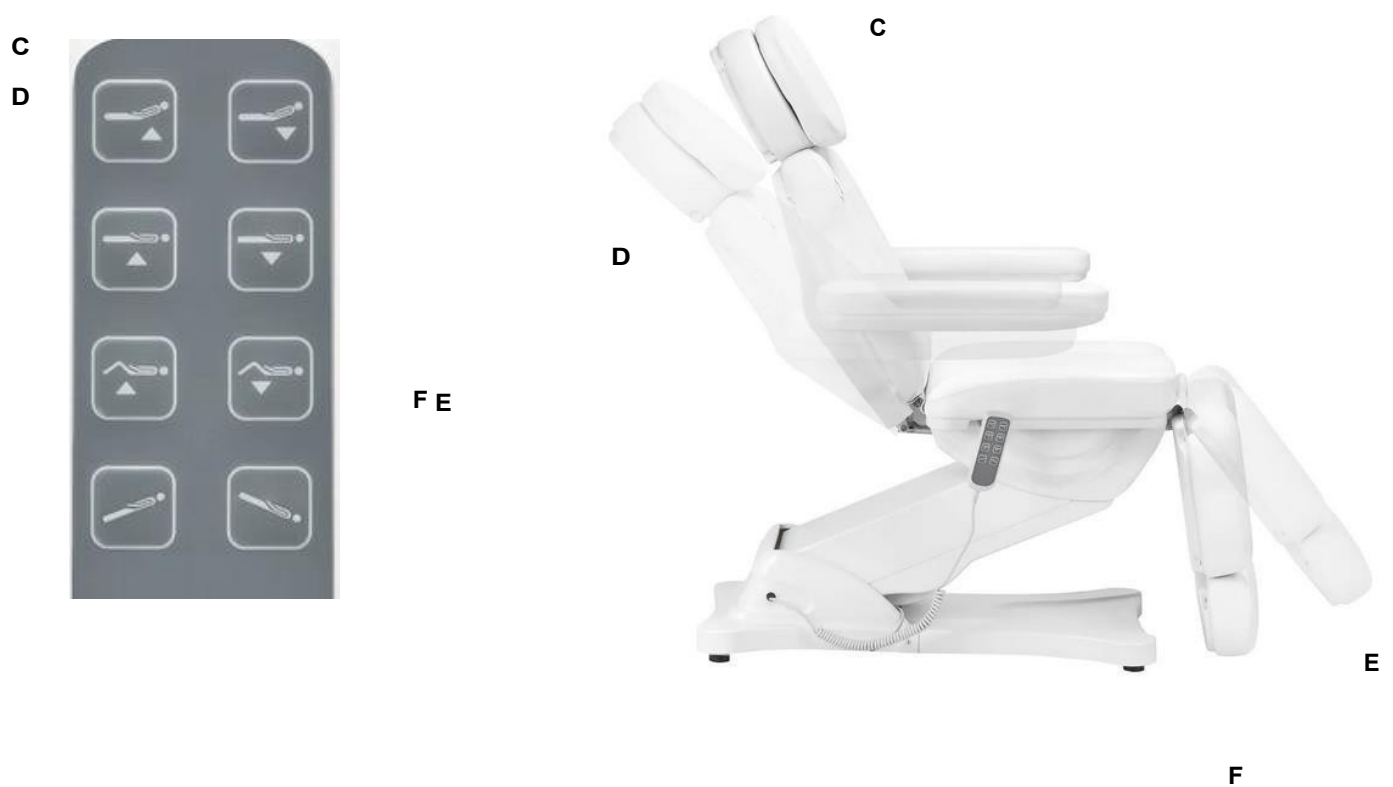

4. Inschuifbare voetsteun (lengte voetsteun: 0~ 12cm)

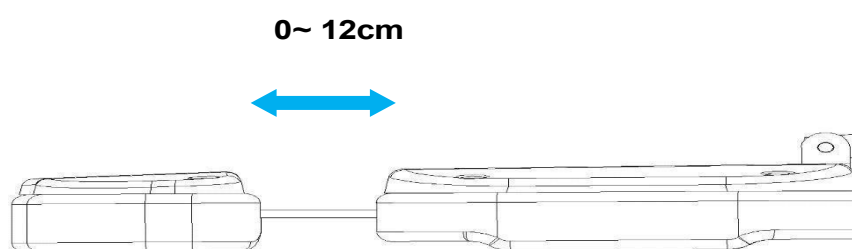

5. Wiegfunctie (de zitting van de stoel kan schuin worden gezet - een zogenaamde wieg. Als de rugleuning omlaag en de voetensteun omhoog wordt gezet, ontstaat er een plat oppervlak.



Het apparaat reinigen en desinfecteren

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Maak de stoel regelmatig schoon om het oppervlak in goede staat te houden. Vergeet niet om de stoel na elk gebruik te reinigen en te desinfecteren. Wij raden aan de stoel één keer per maand grondig te desinfecteren.

I Metalen en kunststof oppervlakken

- Veeg metalen en kunststof oppervlakken en bedieningselementen schoon met een vochtige doek. Om moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken schoon te maken, kunt u een kleine doek gebruiken.

borstel. Gebruik niet te veel vloeistof om het apparaat schoon te maken. Desinfecteer het apparaat vervolgens met een geschikte vloeistof.

II Oppervlakken van roestvrij staal

- Schoonmaken met een mild schoonmaakmiddel werkt het beste. Ammoniak en de meeste oplosmiddelen kunnen worden gebruikt om hardnekkige vlekken te verwijderen. Vermijd chloorhoudende oplossingen.

III Geverfde of verchromde metalen oppervlakken

- Gebruik geen waterstralen (douches, hogedrukwaterkanonnen) voor het reinigen.
- Reinig niet bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid en stel het apparaat niet bloot aan omstandigheden die kunnen leiden tot verontreiniging door vloeistoffen.
- Gebruik geen oplosmiddelen of zuren voor het reinigen.
- Neem het stoeloppervlak gelijkmatig af met een speciale leerreiniger en veeg het vervolgens af met een schone, zachte doek.

Onderhoud

Voor onderhoud moet het apparaat worden losgekoppeld van de netvoeding.

1. Reparaties moeten worden uitgevoerd door ervaren en door de fabrikant geautoriseerd personeel. Reparaties door onbevoegd personeel kunnen letsel of schade aan het apparaat veroorzaken waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk is.
2. Gebruik alleen originele reserveonderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
3. Gebruik de elektrische schoonheidsstoel of accessoires niet als ze niet goed werken.
4. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten worden gedocumenteerd.

Onderhoudsmaatregelen

Controleer de bedieningselementen en hun bedrading eenmaal per week. Controleer de toestand en werking van de volgende onderdelen minstens één keer per zes maanden:

1. Stroomkabel en de bevestiging ervan
2. Bedrading van de motor
3. Besturingskast en bijbehorende bekabeling
4. Zijn de accessoires bevestigd
5. Normale werking van het sluitsysteem

Als u defecten vaststelt, stop dan met het gebruik van de apparatuur en neem contact op met een erkend servicecentrum. Alleen ervaren of bevoegd personeel mag de actuator/bedieningseenheid openen of vervangen.

Als een onderdeel van de apparatuur beschadigd is, trekt u de stekker uit het stopcontact en stopt u het gebruik. Breng vervolgens de servicedienst op de hoogte.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossingsmethoden
Handbediening reageert niet	Controleer of de interface die de lijn voor handbediening verbindt los zit (controleer of er geen probleem is met de printplaat) en vergeet niet de oorspronkelijke positie van de stekker te markeren.
Motor reageert niet	Verander de positie van de motorstekker

Neem contact op met de serviceafdeling om de besturingskast te vervangen en andere reserveonderdelen te bestellen. Beschrijf het probleem voordat u contact opneemt:

1. Model

2. Datum van aankoop

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.

2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Ltd.).

3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.

4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Ltd:

(a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden,

c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.

5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.

6. Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.

7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of fabrikant.

8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.

9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut in acht te nemen voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico van werking van het apparaat zijn schade of zelfs verbranding. **LET OP:**

1. Neem in geval van beschadiging van het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt elk gevaar.

2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door mensen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.

3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en opgeborgen.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG

betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet apart worden ingezameld en worden afgegeven bij inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor recycling. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de aangewezen inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het toestel mag enkel in zijn originele verpakking vervoerd worden bij temperaturen tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.