

ACTIVESHOP[®]

NAVODILA ZA UPORABO

Električni kozmetični stol Sillon Classic s 4 motorji in zibelko

Model: C501A



Uvoznik:

z o.o.


Ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,

Poljska

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024

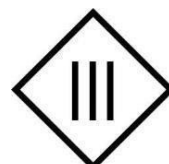

***PRED UPORABO TEGA IZDELKA PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO*.**

Ta priročnik vsebuje podrobne informacije o delovanju in vzdrževanju enote. Pred uporabo enote preberite priložena navodila. Napravo uporabljajte v skladu z opisom. Shranite ta priročnik in poskrbite, da bodo z njim seznanjene vse osebe, ki lahko uporabljajo napravo.

Električni kozmetični stol Sillon je profesionalen kos opreme, ki je kot nalašč za vsak kozmetični salon. Idealen je za masaže, kozmetične in fizioterapevtske tretmaje. Fotelj je zasnovan tako, da zagotavlja popolno udobje, ko med zdravljenjem ležite na njem. Fotelj je sestavljen iz štirih delov in odstranljive blazine. Na obeh straneh sedeža so ročaji, na katere lahko obesite daljinski upravljalnik, da ga imate vedno pri roki.

Nosilnost izdelka: 150 kg


Največja nosilnost telesa sedeža je 150 kg. Ne dvigujte večje teže, kot je navedena teža, ki jo sedež lahko prenese.

Ne skačite po naslonjalu ali močno pritiskajte na naslonjala za roke, da ne poškodujete strukture izdelka.



Opomba:

Za pakiranje uporabljamo karton in zunanje škatle s skupno 10 plastmi papirja, ki zagotavljajo zaščito vaših izdelkov. Priporočamo, da originalno embalažo shranite za nadaljnjo uporabo, zlasti za vračilo v garancijskem roku. Iz varnostnih razlogov sta za dvig stola iz kartonske škatle potrebni dve osebi. Pri dvigovanju stojte na obeh straneh naslona za glavo in naslona za noge stola. Ne pozabite, da lahko stol dvignete le s položajev naslona za glavo in noge, ne pa tudi z obeh strani naslonjal za roke.

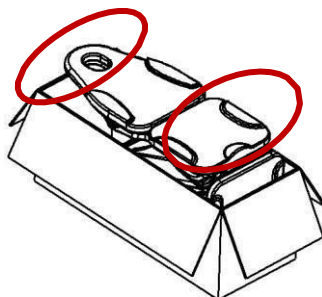

Pred uporabo fotelja preverite, ali je embalaža nepoškodovana in ali ni bila poškodovana med prevozom. Če se pojavijo kakršne koli težave, o tem obvestite prevozno podjetje ali poprodajno osebje v 2 dneh po prejemu enote. Prepričajte se, da je ob dostavi vsa dodatna oprema popolna. Če ob dostavi ugotovite, da dodatna oprema manjka, se pravočasno obrnite na poprodajno osebje.


Električni kozmetični stol je treba uporabljati v zaprtih in suhih prostorih. Temperatura v prostoru mora biti med $+10^{\circ}$ in -40° , relativna vlažnost pa med 30 % in 75 %. Če je bil električni kozmetični stol izpostavljen temperaturi pod 0° , pred uporabo počakajte vsaj 5 ur, da ima naprava čas doseči sobno temperaturo.

Pred uporabo električnega kozmetičnega stola preberite navodila in izvedite naslednje korake:

1. Prepričajte se, da ste odstranili vse embalažne materiale.
2. Prepričajte se, da stol deluje brezhibno.
3. Postavite električni kozmetični stol na mesto, kjer ga boste uporabljali.
4. Vtič za električno omrežje vtaknite v ustrezno vtičnico.

Opomba! Otroci in neizkušene osebe tega aparata ne smejo uporabljati. Otroci morajo biti pod nadzorom in se ne smejo igrati v bližini električnega kozmetičnega stola. Iz varnostnih razlogov aparat izključite iz električnega omrežja in ga ne puščajte brez nadzora. Izklopite tudi napajalni kabel.

Dimenzije naprave:

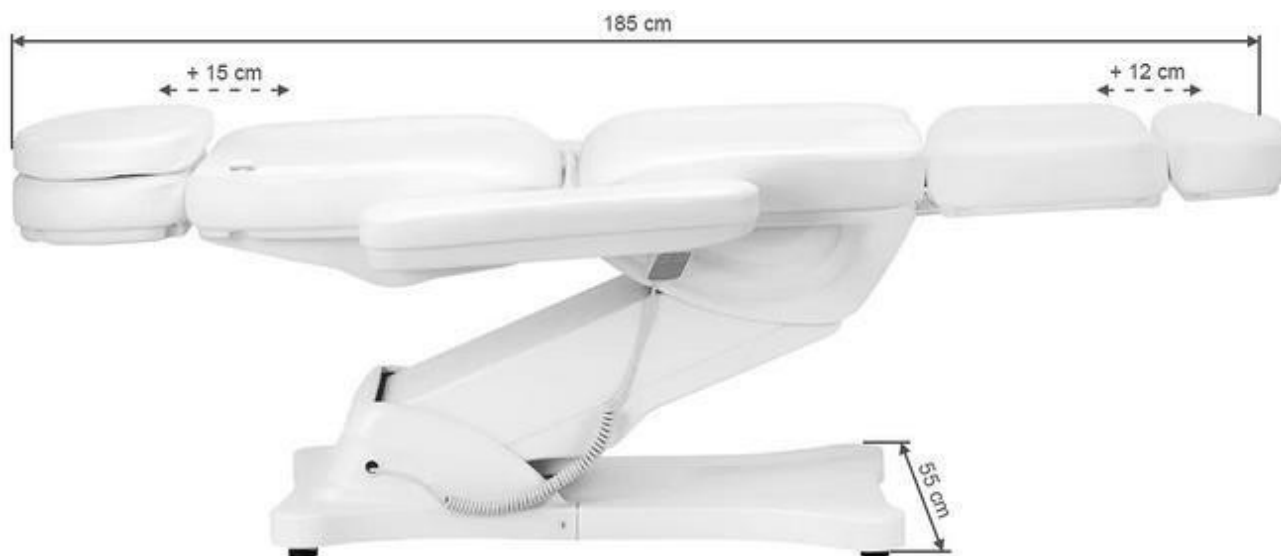



Konstrukcija naprave:

Blazina

**Naslon
za glavo**

**Naslonjalo
za hrbet**

**Naslon za
roke**

Sedež

Odstavek za noge

**Pogon za
dvigovanje**

Plastična podlaga



Opozorilo

1. Naslon za noge ni zasnovan tako, da bi prenesel celotno težo odrasle osebe.
2. Ne sedite neposredno na naslon za roke in stopala.
3. Električnega ginekološkega preiskovalnega stola ne uporabljajte v bližini vnetljivih plinov.
4. Ne dvigujte večje teže, kot jo stol prenese.
5. Poskrbite, da razdalja med vtičnicami ne bo večja od 2 metrov.

Opozorilo

1. Iz varnostnih razlogov napajalni kabel vedno priključite v ozemljeno vtičnico.
2. Napajalnega kabla ne privezujte na enoto. Dvigovanje ali vlečenje za napajalni kabel ga lahko poškoduje. Prepričajte se, da lahko napajalni kabel v nujnih primerih enostavno odstranite.
3. Pred premikanjem električnega kozmetičnega stola odstranite napajalni kabel, da se ne zatakne med nekatere dele stola.
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga takoj odklopite, stola ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščen servisni center. Uporabljajte samo originalni napajalni kabel.
5. Osebi, ki ne izvaja tretmaja, ne dovolite, da bi upravljala daljinski upravljalnik.
6. Pod sedež ne postavljajte nobenih predmetov.
7. Prepričajte se, da je okoli sedeža dovolj prostora, da ga je mogoče prosto zložiti in razložiti.
8. Prepričajte se, da okoli sedeža ni ostrih ali škodljivih predmetov, ki bi lahko poškodovali enoto.
9. Enote ne spreminjajte sami. Če stol ne deluje pravilno, ga prenehajte uporabljati in se obrnite na pooblaščen servisni center.

Uporaba naprave:

1. Priključite napajalni kabel na zunanji vir napajanja 110 V ~ 240 V.


Način namestitve naslona za roke:

Sedež mora biti v vodoravnem položaju, da nanj namestite naslonjala za roke. Naslonjalo za roke potisnite v odprtino na strani naslona. Naslon za roko mora biti trdno pritrjen. Zavrtite ga v desno ali levo, da se pravilno namesti na svoje mesto. Enako naredite z drugim naslonom za roke.


Naslon za roko je pravokoten na tla (ne glede na naklon sedeža). Lahko ga obrnete za 180°.




2. Funkcija ročnega upravljanja (višina dviga: postelja je 58~ 82 cm od tal)

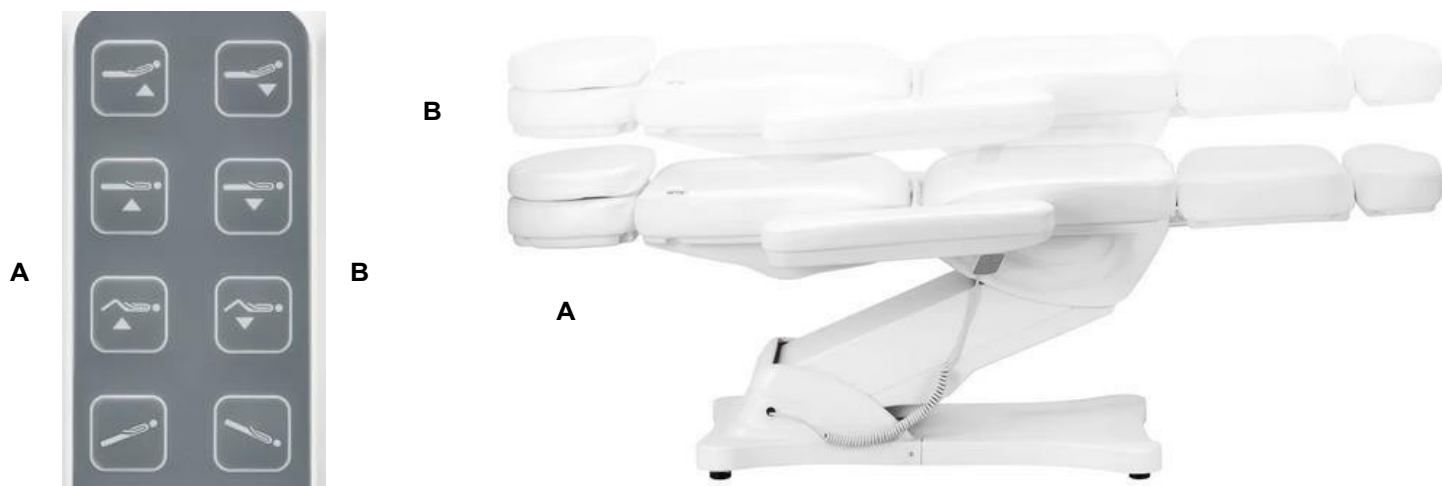

3. Funkcija ročnega upravljanja (kot dviga hrbta 0-80 °, kot dviga nog 0-90 °)

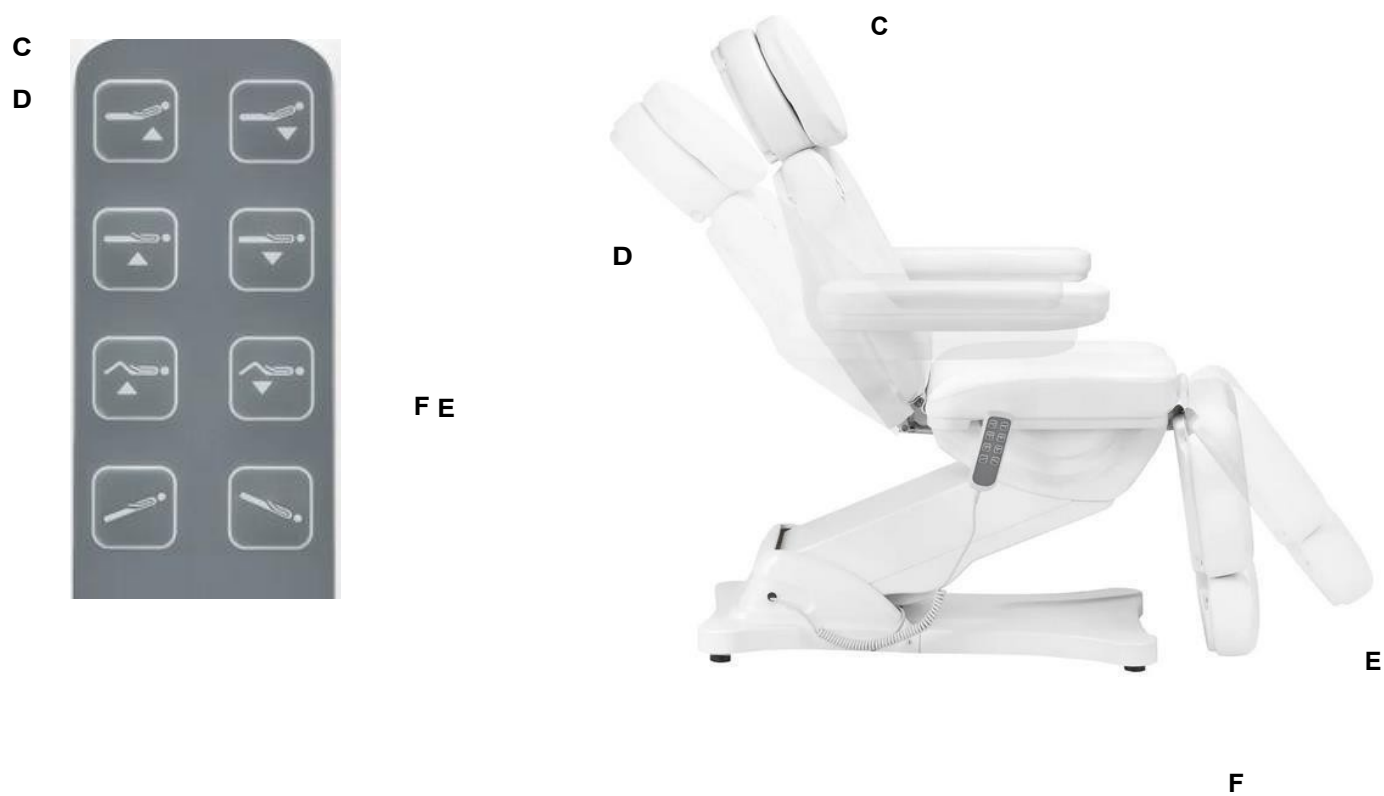

4. Funkcija izvlečnega podnožja (podnožje, dolžina: 0~ 12 cm)

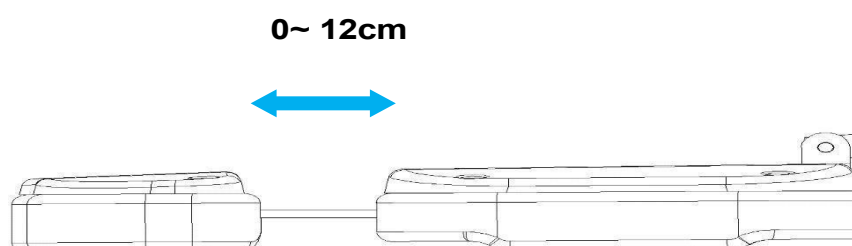

5. Funkcija zibelke (sedež stola je lahko nagnjen pod kotom - tako imenovana zibelka. Ko je naslonjalo za hrbet spuščeno in naslon za noge dvignjen, nastane ravna površina.



Čiščenje in razkuževanje naprave:

- Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja.
- Če želite ohraniti površino stola v dobrem stanju, jo redno čistite. Ne pozabite očistiti in razkužiti stola po vsaki uporabi. Priporočamo, da temeljito razkuževanje opravite enkrat na mesec.

I Kovinske in plastične površine

- Kovinske in plastične površine ter upravljalne elemente očistite tako, da jih obrišete z vlažno krpo. Za težko dostopna območja ali vogale se dobro obnese majhna krtačka.

krtača se dobro obnese. Za čiščenje aparata ne uporabljajte preveč tekočine. Nato aparat razkužite z ustrezno tekočino.

II Površine iz nerjavečega jekla

- Najbolje se obnese čiščenje z blago raztopino čistilnega sredstva. Za odstranjevanje težkih madežev lahko uporabite amoniak in večino topil. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora.

III Lakirane ali kromirane kovinske površine

- Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (prhe, visokotlačni vodni topovi).
 - Ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti ter enote ne izpostavljajte pogojem, ki bi lahko povzročili onesnaženje s tekočino.
 - Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.
- ## IV Površina stola
- Površino sedeža enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje in jo nato obrišite s čisto, mehko krpo.

Vzdrževanje

Pred vzdrževanjem izklopite napravo iz električnega omrežja.

1. Popravila naj izvaja izkušeno in od proizvajalca pooblaščen osebje. Popravila, ki jih izvaja nepooblaščen osebje, lahko povzročijo poškodbe ali škodo na napravi, za katero proizvajalec ni odgovoren.
2. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
3. Električnega kozmetičnega stola ali dodatne opreme ne uporabljajte, če ne delujejo pravilno.
4. Vsa vzdrževalna dela in popravila je treba dokumentirati.

Ukrepi za vzdrževanje

Enkrat tedensko preverite krmilnike in njihovo ožičenje. Vsaj enkrat na šest mesecev preverite stanje in delovanje naslednjih elementov:

1. napajalni kabel in njegovo pritrditev
2. ožičenje motorja
3. krmilno omarico in njeno ožičenje
4. ali je pritrjena dodatna oprema
5. normalno delovanje sistema za zaklepanje

Če odkrijete kakršne koli napake, prenehajte uporabljati opremo in se obrnite na pooblaščen servisni center. Pogon/krmilno enoto lahko odpre ali zamenja samo izkušeno ali pooblaščen osebje.

Če je kateri koli del opreme poškodovan, izključite napajalni kabel in jo prenehajte uporabljati. Nato obvestite servisno službo.

Odpravljanje težav

Težava	Metode rešitve
Ročno upravljanje se ne odziva	Preverite, ali je vmesnik, ki povezuje linijo za ročno upravljanje, zrahljan (Preverite, ali ni težav s ploščo tiskanega vezja), ne pozabite označiti prvotnega položaja vtiča.
Motor se ne odziva	Preklopite položaj vtiča motorja

Če želite zamenjati krmilno enoto in naročiti druge nadomestne dele, se obrnite na servisno službo, pred tem pa opišite težavo:

1. Model

2. Datum nakupa

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z upravljanjem naprave samo s strani usposobljenega kozmetičnega osebja se izognete neželenim posledicam med zdravljenjem.

2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servisier (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne pride tekočina.

4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.:

(a) v napravo je vstopila tekočina, (b) naprava oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke, c) je poškodovan napajalni kabel, d) se je naprava prevrnila ali je bilo poškodovano njeno ohišje.

5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.

6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.

7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, izvlecite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.

8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.

9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.

10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja naprave, poškodbe ali celo požar. **POZOR:**

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih napak v delovanju se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili morebitni nevarnosti.

2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi ter brez izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.

3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.

4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.

5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE APARATA



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjne odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES

o odpadni električni in elektronski opremi je treba rabljene električne naprave zbirati ločeno in jih oddati na zbirnih mestih za odpadno električno in elektronsko opremo. Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba poslati v ponovno predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.