

ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Elektrické kozmetické kreslo Sillon Classic so 4 motormi a
kolískou Model: C501A



Dovozca:


z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024

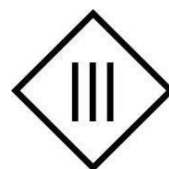

***PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE*.**


Tento návod obsahuje podrobné informácie o prevádzke a údržbe zariadenia. Pred použitím jednotky si prečítajte priložený návod na obsluhu. Spotrebič používajte tak, ako je popísané. Uschovajte tento návod a zabezpečte, aby sa s ním oboznámili všetky osoby, ktoré môžu spotrebič používať.

Elektrické kozmetické kreslo Sillon je profesionálne zariadenie, ktoré je ideálne pre každý kozmetický salón. Je ideálne na masáže, kozmetické a fyzioterapeutické ošetrenia. Kreslo bolo navrhnuté tak, aby zabezpečilo úplné pohodlie pri ležaní na ňom počas ošetrenia. Kreslo sa skladá zo štyroch častí a odnímateľného vankúša. Na oboch stranách kresla sú úchyty, na ktoré možno zavesiť diaľkové ovládanie, aby bolo vždy po ruke.

Nosnosť výrobku: 150 kg


Maximálna nosnosť tela kresla je 150 kg. Nezdvíhajte väčšiu hmotnosť, ako je uvedená hmotnosť, ktorú sedačka unesie.

Neskáčte po operadle ani nevyvíjajte veľký tlak na opierky rúk, aby ste nepoškodili konštrukciu výrobku.

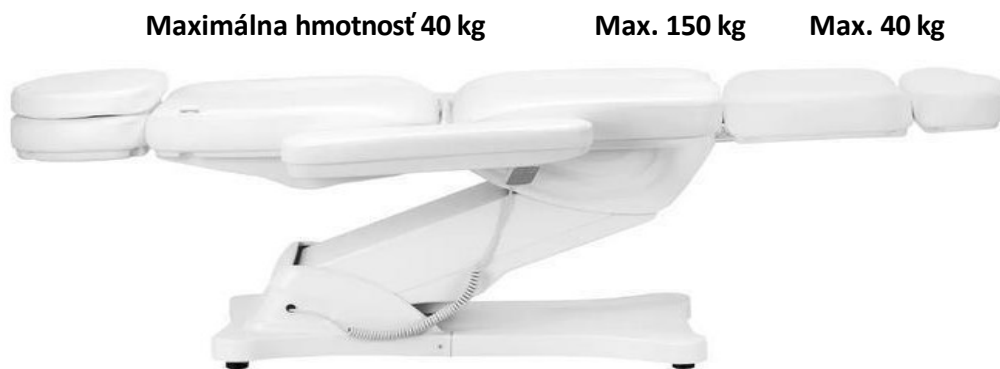

Poznámka

Na balenie sa používa kartón a vonkajší kartón s celkovo 10 vrstvami papiera, ktoré zabezpečujú ochranu vašich výrobkov. Odporúčame uschovať pôvodný obal na ďalšie použitie, najmä na vrátenie počas záručnej doby. Z bezpečnostných dôvodov sú na zdvihnutie stoličky z kartónovej škatule potrebné dve osoby. Pri zdvíhaní stojte na oboch stranách opierky hlavy a opierky nôh kresla. Nezabudnite, že stoličku možno zdvíhať len z pozícií opierky hlavy a opierky nôh, nie z oboch strán podrúčk.

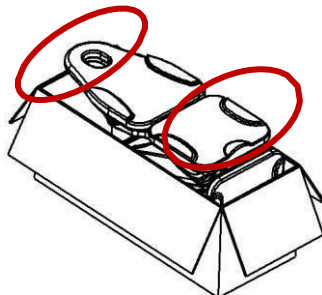

Pred použitím stoličky skontrolujte, či je obal neporušený a či nebol poškodený pri preprave. Ak sa vyskytne akýkoľvek problém, oznámte to prepravnej spoločnosti alebo popredajnému personálu do 2 dní od prevzatia zariadenia. Uistite sa, či je všetko príslušenstvo v čase doručenia kompletne. Ak zistíte, že príslušenstvo v čase doručenia chýba, včas kontaktujte popredajný personál.


Elektrické kozmetické kreslo sa musí používať v uzavretej, suchej miestnosti. Teplota v miestnosti by mala byť v rozmedzí od +10° do -40° a relatívna vlhkosť vzduchu od 30 % do 75 %. Ak bolo elektrické kozmetické kreslo vystavené teplotám nižším ako 0°, počkajte pred jeho použitím aspoň 5 hodín, aby zariadenie malo čas dosiahnuť izbovú teplotu.

Pred použitím elektrického kozmetického kresla si prečítajte návod na použitie a vykonajte nasledujúce kroky:

1. Uistite sa, že ste odstránili všetky obalové materiály.
2. Uistite sa, že je kreslo v prevádzkyschopnom stave.
3. Umiestnite elektrické kozmetické kreslo na miesto, kde sa bude používať.
4. Zapojte sieťovú zástrčku do vhodnej zásuvky.

Tip! Tento spotrebič nesmú používať deti a neskúsené osoby. Deti musia byť pod dohľadom a nesmú sa hrať v blízkosti elektrického kozmetického kresla. Z bezpečnostných dôvodov spotrebič odpojte zo zásuvky a nenechávajte ho bez dozoru. Odpojte aj napájací kábel.

Rozmery zariadenia:

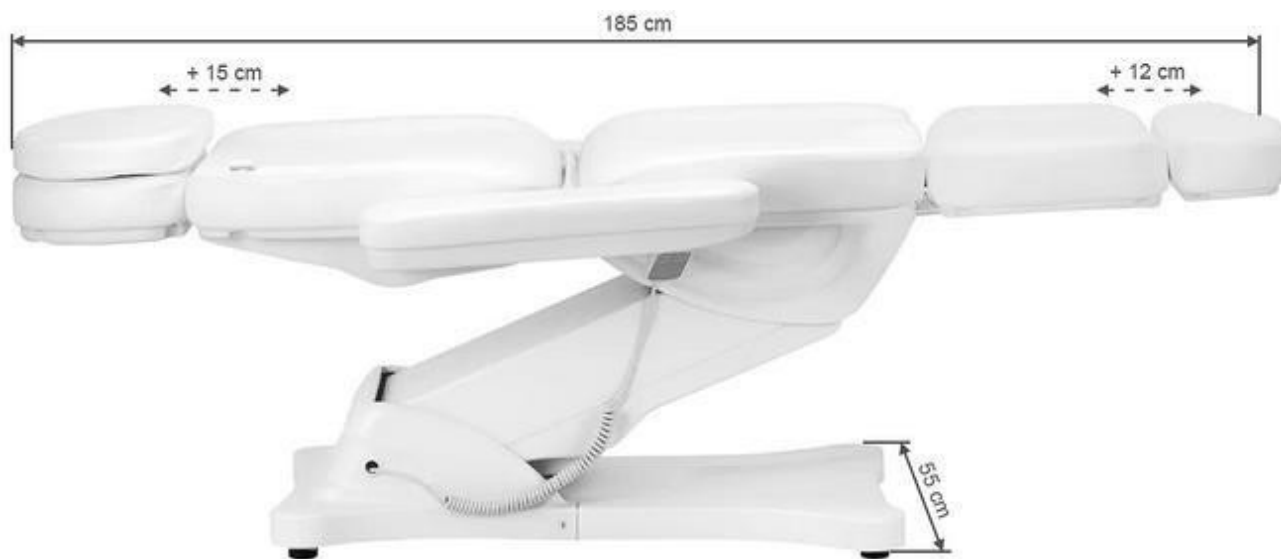



Konštrukcia spotrebiča:

Vankúš

Opierka hlavy

Opierka chrbta

Podrúčka

Sedadlo

Podnožka na nohy

Ovládač zdvíhania

Plastová základňa



Upozornenie

1. Opierka nôh nie je navrhnutá tak, aby uniesla plnú hmotnosť dospelého človeka.
2. Nesedajte si priamo na opierku rúk a nôh.
3. Elektrické gynekologické vyšetrovacie kreslo nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov.
4. Nezdvíhajte väčšiu hmotnosť, ako je stolička schopná uniesť.
5. Uistite sa, že vzdialenosť medzi zásuvkami nepresahuje 2 metre.

Upozornenie

1. Z bezpečnostných dôvodov vždy zapájajte napájací kábel do uzemnenej zásuvky.
2. Napájací kábel nepripájajte k prístroju. Zdvíhanie alebo ťahanie za napájací kábel ho môže poškodiť. Zabezpečte, aby sa napájací kábel dal v prípade núdze ľahko odpojiť.
3. Pred premiestňovaním elektrického kozmetického kresla odpojte napájací kábel, aby sa nezasekol medzi niektorými časťami kresla.
4. Ak je napájací kábel poškodený, okamžite ho odpojte, kreslo nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálny napájací kábel.
5. Nedovoľte, aby osoba, ktorá nevykonáva ošetrovanie, ovládala diaľkový ovládač.
6. Pod kreslo neumiestňujte žiadne predmety.
7. Uistite sa, že okolo kresla je dostatočný voľný priestor, aby sa dalo voľne skladať a rozkladať.
8. Uistite sa, že v okolí sedadla nie sú žiadne ostré alebo škodlivé predmety, ktoré by mohli zariadenie poškodiť.
9. Zariadenie sami neupravujte. Ak kreslo nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Používanie zariadenia:

1. Pripojte napájací kábel k externému zdroju napájania 110V~240V.


Spôsob inštalácie podrúčky:

Na inštaláciu podrúčiek k sedadlu musí byť sedadlo vo vodorovnej polohe. Zasuňte podrúčku do otvoru umiestneného na boku operadla. Podrúčka by mala byť pevne pripevnená. Otočte ju doprava alebo doľava, aby správne zapadla na svoje miesto. To isté urobte aj s druhou lakťovou opierkou.


Opierka na ruky je kolmo k zemi (bez ohľadu na uhol sedadla). Možno ju otočiť o 180°.




2. Funkcia manuálneho ovládania (výška zdvihu: lôžko je 58~ 82 cm od zeme).

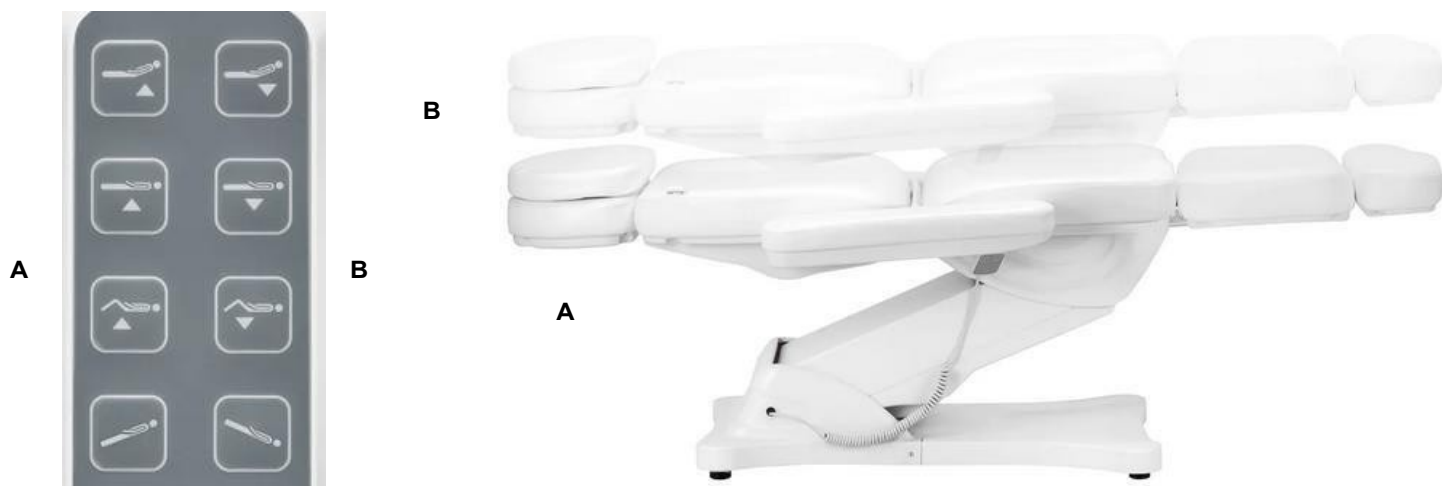

3. Funkcia manuálneho ovládania (uhol zdvihu chrbta 0-80°, uhol zdvihu nôh 0-90°)

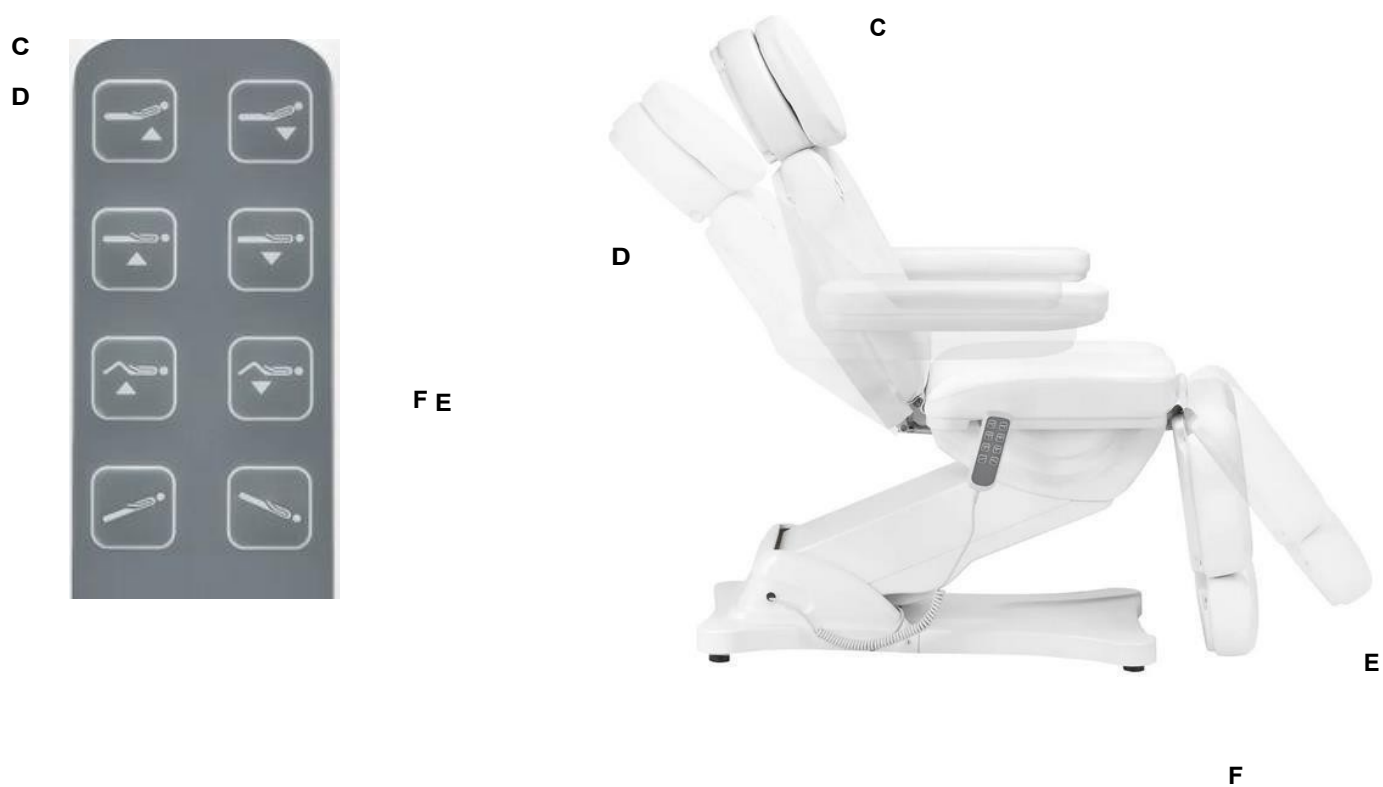

4. Funkcia zasúvania opierky nôh (opierka nôh, dĺžka: 0~ 12 cm)

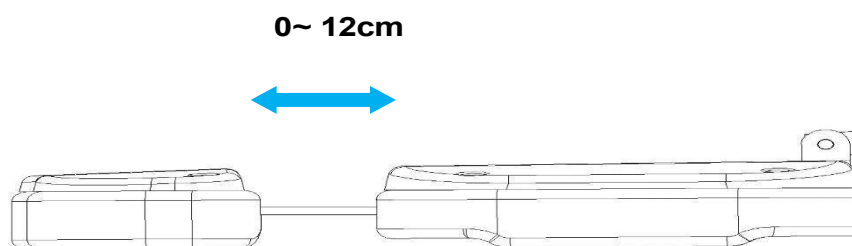

5. Funkcia kolísky (sedadlo stoličky môže byť naklonené - tzv. kolíska. Keď je operadlo spustené a opierka nôh zdvihnutá, vytvorí sa rovná plocha.



Čistenie a dezinfekcia spotrebiča:

- Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Aby ste udržali povrch stoličky v dobrom stave, pravidelne ho čistite. Nezapodniete stoličku vyčistiť a vydezinfikovať po každom použití. Dôkladnú dezinfekciu odporúčame vykonávať raz za mesiac.

I Kovové a plastové povrchy

- Ak chcete čistiť kovové a plastové povrchy a ovládacie prvky, utrite ich vlhkou handričkou. Na čistenie ťažko prístupných miest alebo rohov použite malú

štetec. Na čistenie zariadenia nepoužívajte príliš veľa tekutiny. Potom prístroj vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nehrdzavejúcej ocele

- Najlepšie bude fungovať čistenie jemným roztokom čistiaceho prostriedku. Na odstránenie odolných škvŕn možno použiť čpavok a väčšinu rozpúšťadiel. Vyhnite sa roztokom na báze chlóru.

III Lakované alebo pochrómované kovové povrchy

- Na čistenie nepoužívajte vodné prúdy (sprchy, vysokotlakové vodné delá).
- Nečistite pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti, nevystavujte prístroj podmienkam, ktoré môžu viesť ku kontaminácii tekutinou.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyseliny.
- Povrch sedadla rovnomerne utrite špeciálnym čistiacim prostriedkom na kožu a potom ho utrite čistou, mäkkou handričkou.

IV Povrch stoličky

Údržba

Pred údržbou musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.

- Opravy by mal vykonávať skúsený a výrobcom autorizovaný personál. Opravy vykonávané neautorizovaným personálom môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie spotrebiča, za ktoré výrobca nezodpovedá.
- Používajte len originálne náhradné diely schválené výrobcom.
- Elektrické kozmetické kreslo ani príslušenstvo nepoužívajte, ak nefungujú správne.
- Všetky práce na údržbe a opravách musia byť zdokumentované.

Opatrenia na údržbu

Raz týždenne skontrolujte ovládacie prvky a ich zapojenie. Najmenej raz za šesť mesiacov skontrolujte stav a funkčnosť nasledujúcich položiek:

- napájací kábel a jeho upevnenie
- zapojenie motora
- Ovládacia skrinka a jej kabeláž
- Je príslušenstvo upevnené
- Normálna činnosť uzamykacieho systému

Ak zistíte akékoľvek závady, prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pohon/riadiacu jednotku môže otvoriť alebo vymeniť len skúsený alebo autorizovaný personál.

Ak je niektorá časť zariadenia poškodená, odpojte napájací kábel a prestaňte ho používať. Potom to oznámte servisnému oddeleniu.

Riešenie problémov

Problém	Metódy riešenia
Manuálne ovládanie nereaguje	Skontrolujte, či je rozhranie pripájajúce linku ručného ovládania uvoľnené (Skontrolujte, či nie je problém s doskou plošných spojov), nezabudnite označiť pôvodnú polohu zástrčky.
Motor nereaguje	Prepnite polohu zástrčky motora

Ak chcete vymeniť riadiacu skrinku a objednať iné náhradné diely, obráťte sa na servisné oddelenie, pred kontaktovaním opíšte problém:

1. Model

2. Dátum nákupu

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Spotrebič je profesionálne zariadenie určené na použitie v kozmetických salónoch. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim účinkom počas ošetrovania.

2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tejto príručke. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP s.r.o.).

3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.

4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a obráťte sa na autorizovaný servis poskytnutý spoločnosťou ACTIVESHOP Ltd:

(a) do spotrebiča sa dostala tekutina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) došlo k prevrhnutiu prístroja alebo k poškodeniu jeho krytu.

5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.

6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s jednotkou.

7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vytiahnite kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.

8. Spotrebič neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.

9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).

10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na v ý r o b n o m š t í t k u . V opačnom prípade hrozí riziko nesprávneho prevádzky spotrebiča jeho poškodenie alebo dokonca popálenie.

UPOZORNENIE:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.

2. Tento prístroj môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami s týmto zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukcia o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.

3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.

4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.

5. Tento elektrický spotřebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení Odpad z elektrických a elektronických zariadení by sa mal zbierať oddelene a odovzdávať na zberných miestach pre odpad z elektrických a elektronických zariadení. Vyraďené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Spotrebič by sa mal prepravovať pri teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.