

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD K POUŽITÍ

Elektrické kosmetické křeslo Sillon Classic se 4 motory a
kolébkou Model: C501A



Dovozce:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,

Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024



***PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ*.**


Tento návod obsahuje podrobné informace o provozu a údržbě přístroje. Před použitím jednotky si přečtěte přiložený návod. Přístroj používejte tak, jak je popsáno. Tento návod si uschovejte a zajistěte, aby se s ním seznámily všechny osoby, které mohou spotřebič používat.

Elektrické kosmetické křeslo Sillon je profesionální zařízení, které je ideální pro každý kosmetický salon. Je ideální pro masáže, kosmetické a fyzioterapeutické procedury. Křeslo bylo navrženo tak, aby zajistilo naprosté pohodlí při ležení na něm během ošetření. Křeslo se skládá ze čtyř částí a odnímatelného polštáře. Na obou stranách křesla jsou úchyty, na které lze zavěsit dálkové ovládání, aby bylo vždy po ruce.

Nosnost výrobku: 150 kg


Maximální nosnost těla křesla je 150 kg. Nezvedejte větší váhu, než je uvedená hmotnost, kterou křeslo unese.

Neskákejte po opěradle ani nevyvíjejte velký tlak na područky, aby nedošlo k poškození konstrukce výrobku.

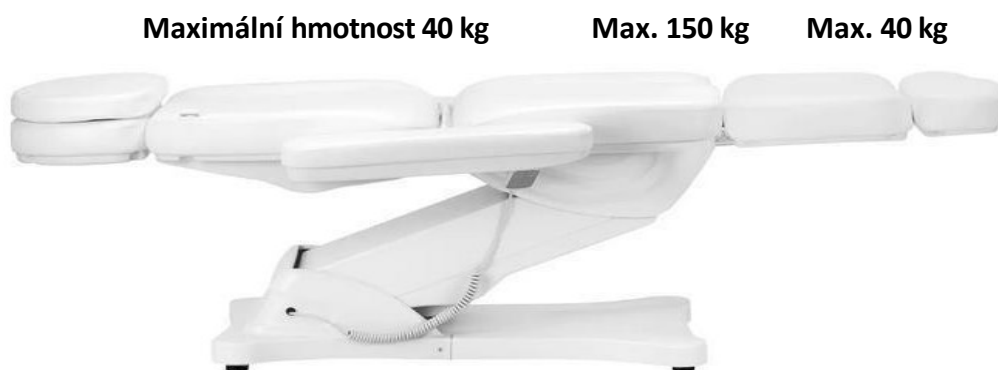

Poznámka

K balení se používá karton a vnější krabice s celkem 10 vrstvami papíru, které zajišťují ochranu vašich výrobků. Doporučujeme ponechat si původní obal pro budoucí použití, zejména pro případ vrácení v záruční době. Z bezpečnostních důvodů jsou ke zvednutí židle z kartonu potřeba dvě osoby. Při zvedání se postavte na obě strany opěrky hlavy a opěrky nohou židle. Nezapomeňte, že židli lze zvedat pouze z polohy opěrky hlavy a podnožky, nikoli z obou stran područek.

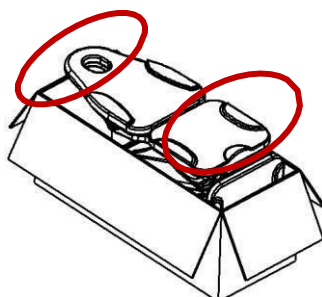

Před použitím křesla zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda nebyl během přepravy poškozen. V případě jakéhokoli problému informujte přepravní společnost nebo poprodejní personál do 2 dnů od převzetí zařízení. Ujistěte se, že veškeré příslušenství je v době dodání kompletní. Pokud zjistíte, že příslušenství v době dodání chybí, kontaktujte včas poprodejní personál.


Elektrické kosmetické křeslo se musí používat v uzavřených, suchých místnostech. Teplota v místnosti by se měla pohybovat mezi $+10^{\circ}$ a -40° a relativní vlhkost mezi 30 % a 75 %. Pokud bylo elektrické kosmetické křeslo vystaveno teplotám pod 0° , počkejte před použitím alespoň 5 hodin, aby měl přístroj čas dosáhnout pokojové teploty.

Před použitím elektrického kosmetického křesla si přečtěte návod a proveďte následující kroky:

1. Ujistěte se, že byly odstraněny všechny obalové materiály.
2. Ujistěte se, že je křeslo v provozuschopném stavu.
3. Umístěte elektrické kosmetické křeslo na místo, kde bude používáno.
4. Zapojte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky.

Poznámka! Tento spotřebič nesmí používat děti a nezkušené osoby. Děti musí být pod dohledem a nesmí si hrát v blízkosti elektrického kosmetického křesla. Z bezpečnostních důvodů spotřebič odpojte ze sítě a nenechávejte jej bez dozoru. Odpojte také napájecí kabel.

Rozměry přístroje:

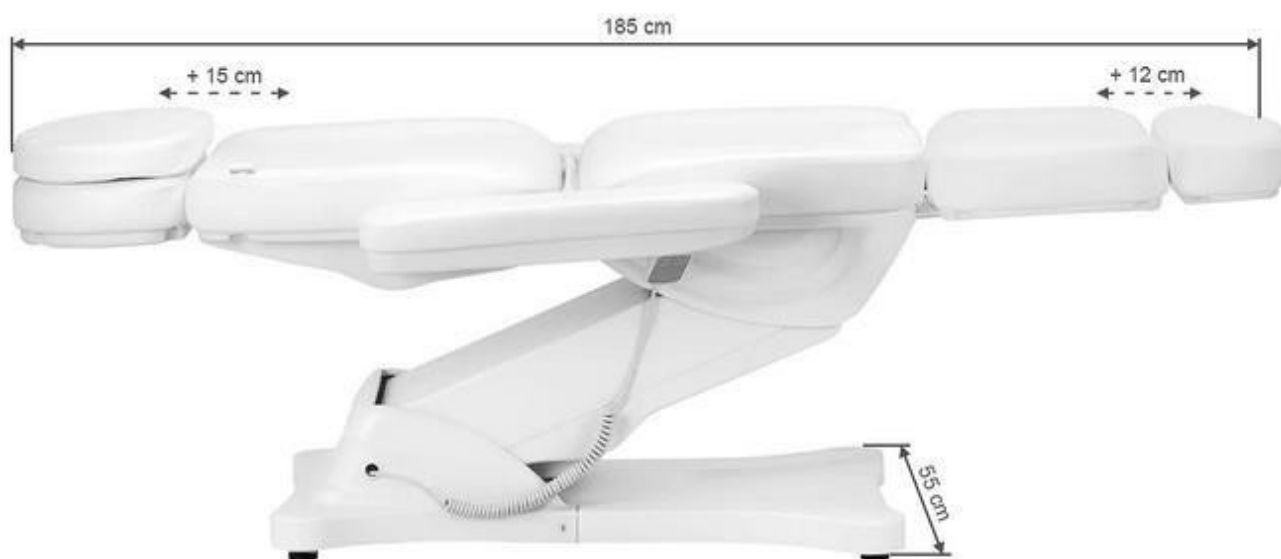



Konstrukce spotřebiče:

Polštářek

Opěrka hlavy

Opěradlo

Područka

Sedadlo

Opěrka nohou

Ovladač zvedání

Plastová základna



Upozornění

1. Opěrka nohou není určena k udržení plné hmotnosti dospělého člověka.
2. Nesedějte si přímo na opěrku rukou a nohou.
3. Elektrické gynekologické vyšetřovací křeslo nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů.
4. Nezvedejte větší váhu, než jakou židle unese.
5. Ujistěte se, že vzdálenost mezi zásuvkami nepřesahuje 2 metry.

Upozornění

1. Z bezpečnostních důvodů vždy zapojujte napájecí kabel do uzemněné zásuvky.
2. Napájecí kabel nepřivazujte k přístroji. Zvedání nebo tahání za napájecí kabel jej může poškodit. Zajistěte, aby bylo možné napájecí kabel v nouzové situaci snadno odpojit.
3. Před přemístěním elektrického kosmetického křesla odpojte napájecí kabel, aby se nezasekl mezi některými částmi křesla.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě jej odpojte, křeslo nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální napájecí kabel.
5. Nedovolte, aby osoba, která neprovádí ošetření, ovládala dálkový ovladač.
6. Pod sedadlo neumisťujte žádné předměty.
7. Ujistěte se, že je kolem sedadla dostatečný volný prostor, aby bylo možné sedadlo volně skládat a rozkládat.
8. Ujistěte se, že v okolí sedadla nejsou žádné ostré nebo škodlivé předměty, které by mohly přístroj poškodit.
9. Jednotku sami neupravujte. Pokud židle nefunguje správně, přestaňte ji používat a obraťte se na autorizované servisní středisko.


Používání zařízení:

1. Připojte napájecí kabel k externímu zdroji napájení 110V~240V.


Způsob instalace područky: Křeslo se instaluje na područku:

Sedadlo musí být ve vodorovné poloze, aby na něj bylo možné připevnit područky. Zasuňte područku do otvoru umístěného na boku opěradla. Područka by měla být pevně připevněna. Otočte ji doprava nebo doleva, aby správně zapadla na své místo. Totéž proveďte s druhou loketní opěrkou.


Loketní opěrka je kolmá k zemi (bez ohledu na úhel sedadla). Lze ji otočit o 180°.

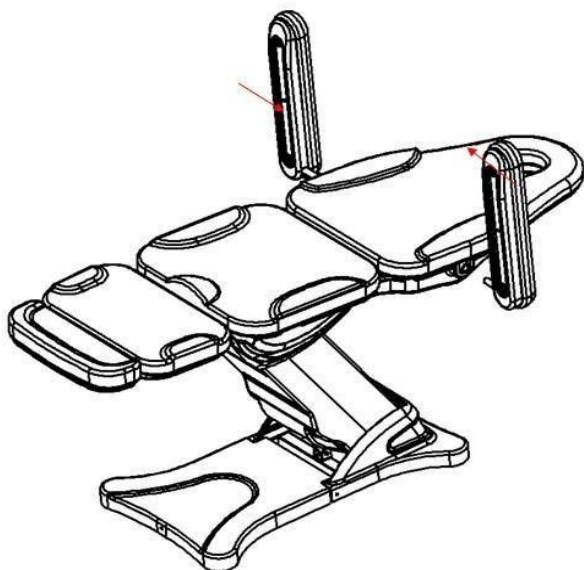


2. Funkce ručního ovládání (výška zvednutí: lůžko je 58~ 82 cm od země).

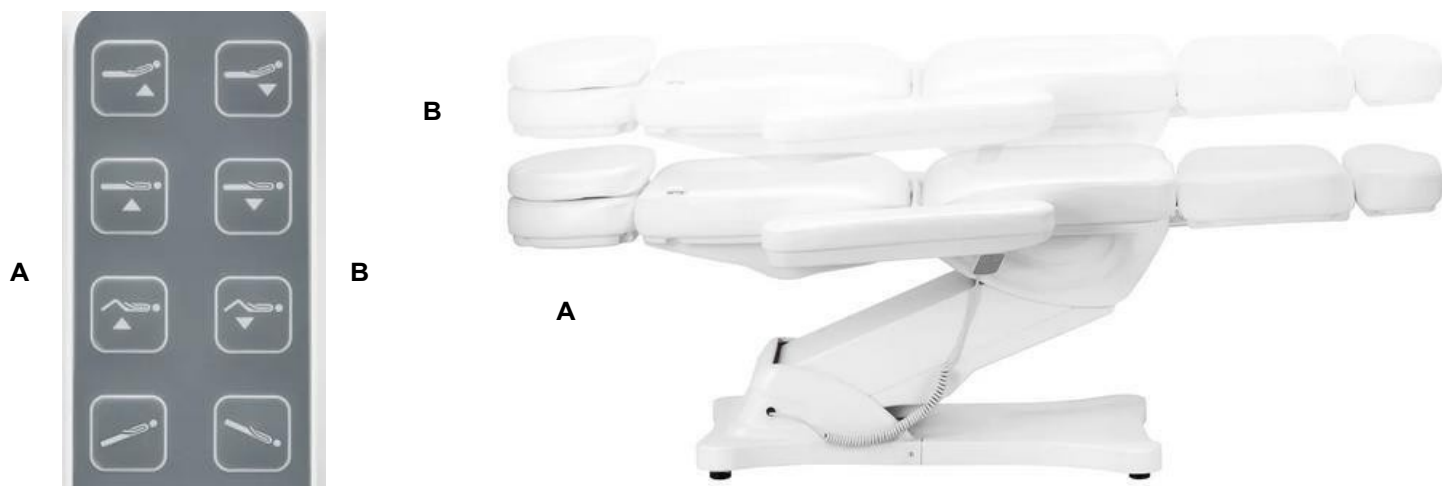

3. Funkce ručního ovládání (úhel zdvihu zad 0-80°, úhel zdvihu nohou 0-90°)

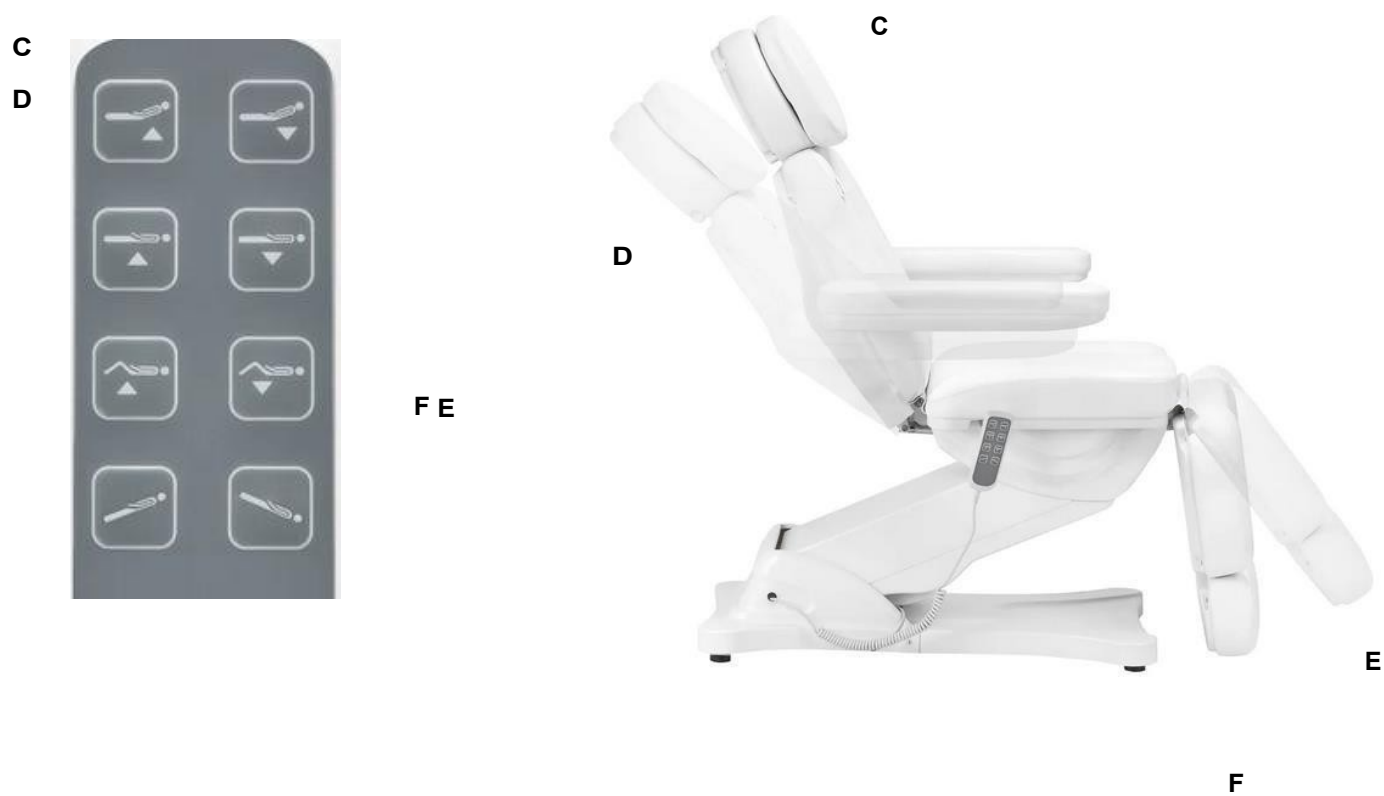

4. Funkce zatahování opěrky nohou (opěrka nohou, délka: 0~ 12 cm)

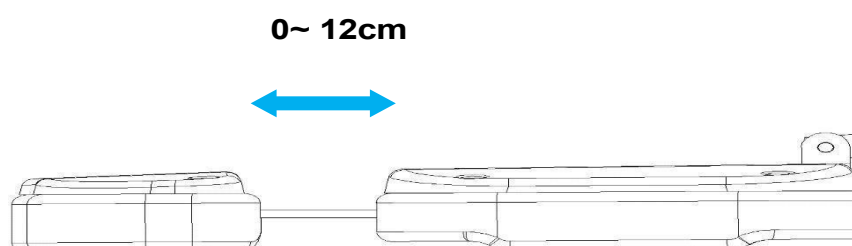

5. Funkce kolébky (sedák židle lze sklopit - tzv. kolébka. Při sklopení opěradla a zvednutí podnožky vznikne rovná plocha.



Čištění a dezinfekce spotřebiče:

- Před čištěním odpojte spotřebič od napájení.
- Chcete-li udržet povrch židle v dobrém stavu, pravidelně jej čistěte. Nezapomeňte židli po každém použití vyčistit a vydezinfikovat. Doporučujeme provádět důkladnou dezinfekci jednou měsíčně.

I Kovové a plastové povrchy

- Kovové a plastové povrchy a ovládací prvky otřete vlhkým hadříkem. Na těžko přístupná místa nebo rohy dobře poslouží malý kartáček.

Kartáček funguje dobře. K čištění spotřebiče nepoužívejte příliš mnoho tekutiny. Poté spotřebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nerezové oceli

- Nejlépe funguje čištění jemným roztokem čisticího prostředku. K odstranění odolných skvrn lze použít čpavek a většinu rozpouštědel. Vyhněte se roztokům na bázi chlóru.

III Lakované nebo chromované kovové povrchy

- K čištění nepoužívejte vodní trysky (sprchy, vysokotlaká vodní děla).
 - Nečistěte při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti a nevystavujte přístroj podmínkám, které by mohly vést ke kontaminaci kapalinou.
 - K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny.
- ## **IV Povrch židle**
- Povrch židle rovnoměrně otřete speciálním čisticím prostředkem na kůži a poté jej otřete čistým měkkým hadříkem.

Údržba

Před zahájením údržby odpojte přístroj ze sítě.

1. Opravy by měl provádět zkušený a výrobcem autorizovaný personál. Opravy prováděné neautorizovaným personálem mohou způsobit zranění nebo poškození přístroje, za které výrobce nenese odpovědnost.
2. Používejte pouze originální náhradní díly schválené výrobcem.
3. Nepoužívejte elektrické kosmetické křeslo ani příslušenství, pokud nefunguje správně.
4. Veškerá údržba a opravy musí být zdokumentovány.

Opatření pro údržbu

Jednou týdně zkontrolujte ovládací prvky a jejich zapojení. Nejméně jednou za šest měsíců zkontrolujte stav a funkci následujících položek:

1. Napájecí kabel a jeho upevnění
2. kabeláž motoru
3. ovládací skříň a její zapojení
4. zda je připojeno příslušenství
5. normální fungování uzamykacího systému

Pokud zjistíte jakékoli závady, přestaňte zařízení používat a obraťte se na autorizované servisní středisko. Otevřít nebo vyměnit pohon/řídící jednotku může pouze zkušený nebo autorizovaný personál.

Pokud je některá část zařízení poškozena, odpojte napájecí kabel a přestaňte zařízení používat. Poté informujte servisní oddělení.

Řešení problémů

Problém	Způsoby řešení
Ruční ovládání nereaguje	Zkontrolujte, zda rozhraní připojující linku ručního ovládání není uvolněné (Zkontrolujte, zda není problém s deskou plošných spojů), nezapomeňte označit původní polohu zástrčky.
Motor nereaguje	Přepněte polohu zástrčky motoru

Chcete-li vyměnit ovládací skříňku a objednat další náhradní díly, obraťte se na servisní oddělení a před kontaktováním popište problém:

1. Model

2. Datum nákupu

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.

2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřýma rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.

4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:

(a) do spotřebiče se dostala kapalina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,

c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení přístroje nebo poškození jeho krytu.

5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.

6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když se spotřebičem skončíte.

7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.

8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.

9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).

10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na výrobním štítku. V opačném případě hrozí riziko nesprávného provozu spotřebiče jeho poškození nebo dokonce popálení.

UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ, ŽE JE SPOTŘEBIČ VYPNUTÝ, JE NUTNÉ JEJ VYPNOUT:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak případnému nebezpečí.

2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.

3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.

4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.

5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES

o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je nutné použité elektrické spotřebiče sbírat odděleně a odevzdávat je na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení. Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k přepracování. Proto by měly být odevzdávány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.