

# ACTIVESHOP®

## NÁVOD K POUŽITÍ

Elektrické kosmetické křeslo Sillon Classic 3 motory

Model: C501A




### Dovozce:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud.  
DC2A 54-610 Wrocław,  
Polsko

[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)

Rev. A/04/2024

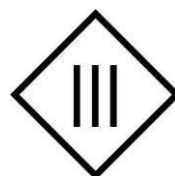

**\*PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ\*.**


Tento návod obsahuje podrobné informace o provozu a údržbě přístroje. Před použitím jednotky si přečtete přiložený návod. Přístroj používejte tak, jak je popsáno. Tento návod si uschovejte a zajistěte, aby se s ním seznámily všechny osoby, které mohou spotřebič používat.

Elektrické kosmetické křeslo Sillon je profesionální zařízení, které je ideální pro každý kosmetický salon. Je ideální pro masáže, kosmetické a fyzioterapeutické procedury. Křeslo bylo navrženo tak, aby zajistilo naprosté pohodlí při ležení na něm během ošetření. Křeslo se skládá ze čtyř částí a odnímatelného polštáře. Na obou stranách křesla jsou úchyty, na které lze zavěsit dálkové ovládání, aby bylo vždy po ruce.

**Nosnost výrobku: 150 kg**


Maximální nosnost těla křesla je 150 kg. Nezvedejte větší váhu, než je uvedená hmotnost, kterou křeslo unese.

Neskákejte po opěradle ani nevyvíjejte velký tlak na područky, aby nedošlo k poškození konstrukce výrobku.

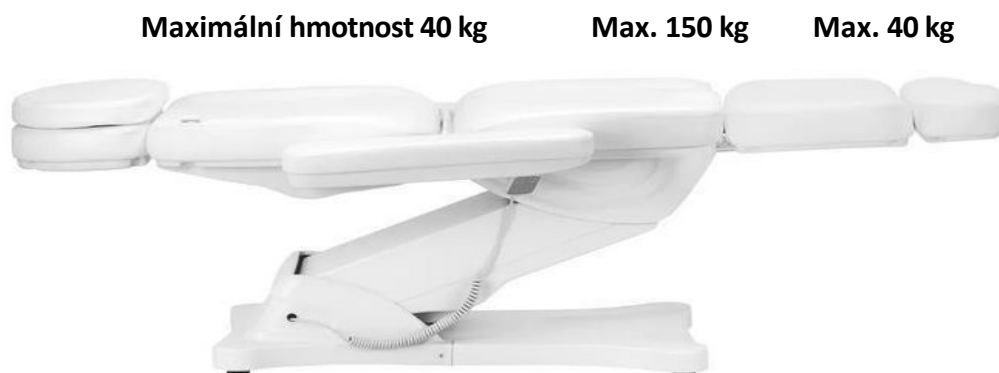

**Poznámka**

K balení se používá karton a vnější krabice s celkem 10 vrstvami papíru, které zajišťují ochranu vašich výrobků. Doporučujeme ponechat si původní obal pro budoucí použití, zejména pro případ vrácení v záruční době. Z bezpečnostních důvodů jsou ke zvednutí židle z kartonu potřeba dvě osoby. Při zvedání se postavte na obě strany opěrky hlavy a opěrky nohou židle. Nezapomeňte, že židli lze zvedat pouze z polohy opěrky hlavy a podnožky, nikoli z obou stran područek.

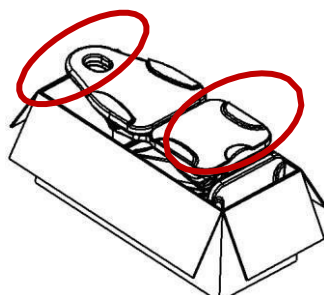

Před použitím křesla zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda nebyl během přepravy poškozen. Pokud se vyskytne jakýkoli problém, informujte o tom přepravní společnost nebo

Poprodejní personál do 2 dnů od obdržení jednotky. Ujistěte se, že veškeré příslušenství je v době dodání kompletní. Pokud zjistíte, že příslušenství v době dodání chybí, kontaktujte včas poprodejní servis.


Elektrické kosmetické křeslo musí být používáno v uzavřené, suché místnosti. Teplota v místnosti by se měla pohybovat mezi  $+10^{\circ}$  a  $-40^{\circ}$  a relativní vlhkost mezi 30 % a 75 %. Pokud bylo elektrické kosmetické křeslo vystaveno teplotám pod  $0^{\circ}$ , počkejte před použitím alespoň 5 hodin, aby měl přístroj čas dosáhnout pokojové teploty.

Před použitím elektrického kosmetického křesla si přečtěte návod a proveďte následující kroky:

- (1) Zkontrolujte, zda byly odstraněny všechny obalové materiály.
- (2) Zkontrolujte, zda je židle v provozuschopném stavu.
- (3) Umístěte elektrické kosmetické křeslo na místo, kde bude používáno.
- (4) Zapojte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky.

**Tip!** Tento spotřebič nesmí používat děti a nezkušené osoby. Děti musí být pod dohledem a nesmí si hrát v blízkosti elektrického kosmetického křesla. Z bezpečnostních důvodů spotřebič odpojte ze zásuvky a nenechávejte jej bez dozoru. Odpojte také napájecí kabel.

### Rozměry přístroje:

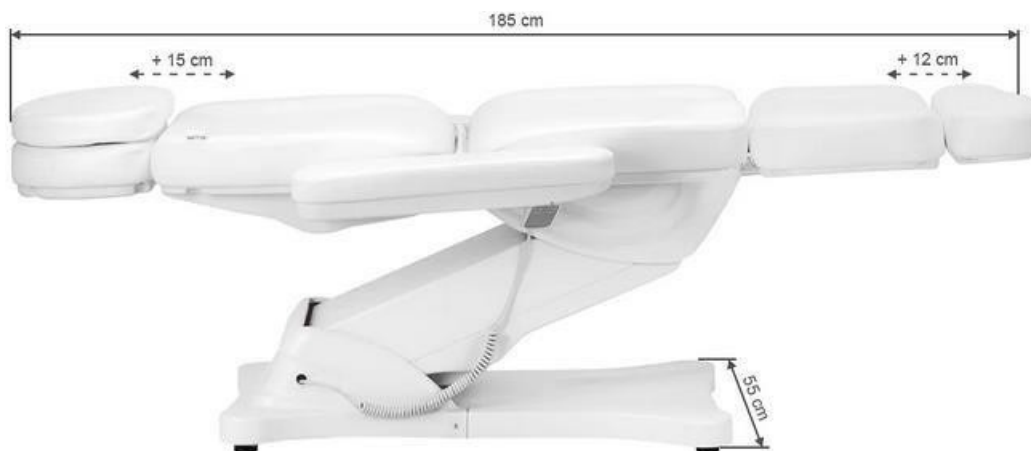



### Konstrukce spotřebiče:



## Upozornění

1. Opěrka nohou není určena k udržení plné hmotnosti dospělého člověka.
2. Nesedejte si přímo na opěrku rukou a nohou.
3. Nepoužívejte elektrické gynekologické vyšetřovací křeslo v blízkosti hořlavých plynů.
4. Nezvedejte větší váhu, než křeslo unese.
5. Dbejte na to, aby vzdálenost mezi zásuvkami nebyla větší než 2 metry.

## Upozornění

1. Z bezpečnostních důvodů vždy zapojujte napájecí kabel do uzemněné zásuvky.
2. Napájecí kabel nepřivazujte k přístroji. Zvedání nebo tahání za napájecí kabel jej může poškodit. Ujistěte se, že napájecí kabel lze v nouzové situaci snadno odpojit.
3. Před přemístěním elektrického kosmetického křesla odpojte napájecí kabel, aby se nezasekl mezi některými částmi křesla.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě jej odpojte, židli nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální napájecí kabel.
5. Nedovolte, aby osoba, která neprovádí ošetření, ovládala dálkový ovladač.
6. Pod křeslo neumísťujte žádné předměty.
7. Ujistěte se, že je kolem křesla dostatečný volný prostor, aby bylo možné křeslo volně skládat a rozkládat.
8. Ujistěte se, že v okolí křesla nejsou žádné ostré nebo škodlivé předměty, které by mohly přístroj poškodit.
9. Neprovádějte na jednotce žádné vlastní úpravy. Pokud židle nefunguje správně, přestaňte ji používat a obraťte se na autorizované servisní středisko.


## Používání zařízení:

1. Připojte napájecí kabel k externímu zdroji napájení 110V~240V.

## Způsob instalace opěrky:

Pro instalaci loketní opěrky na sedadlo musí být sedadlo ve vodorovné poloze. Zasuňte loketní opěrku do otvoru umístěného na boku opěradla. Opěrka by měla být pevně připevněna. Otočte ji doprava nebo doleva, aby správně zapadla na své místo. Totéž proveďte s druhou loketní opěrkou.


Loketní opěrka je kolmá k zemi (bez ohledu na úhel sedadla). Lze ji otočit o 180°.

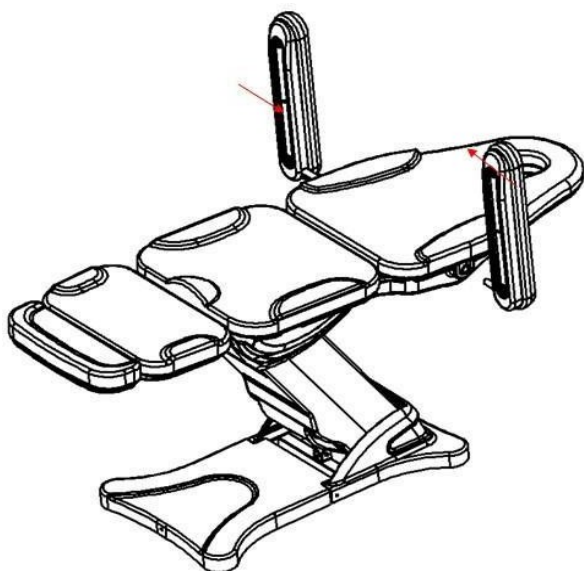

1. Funkce ručního ovládání (výška zvednutí: lůžko je 58~ 82 cm od země).




2. Funkce ručního ovládání (úhel elevace zad 0-80°, úhel elevace nohou 0-90°)

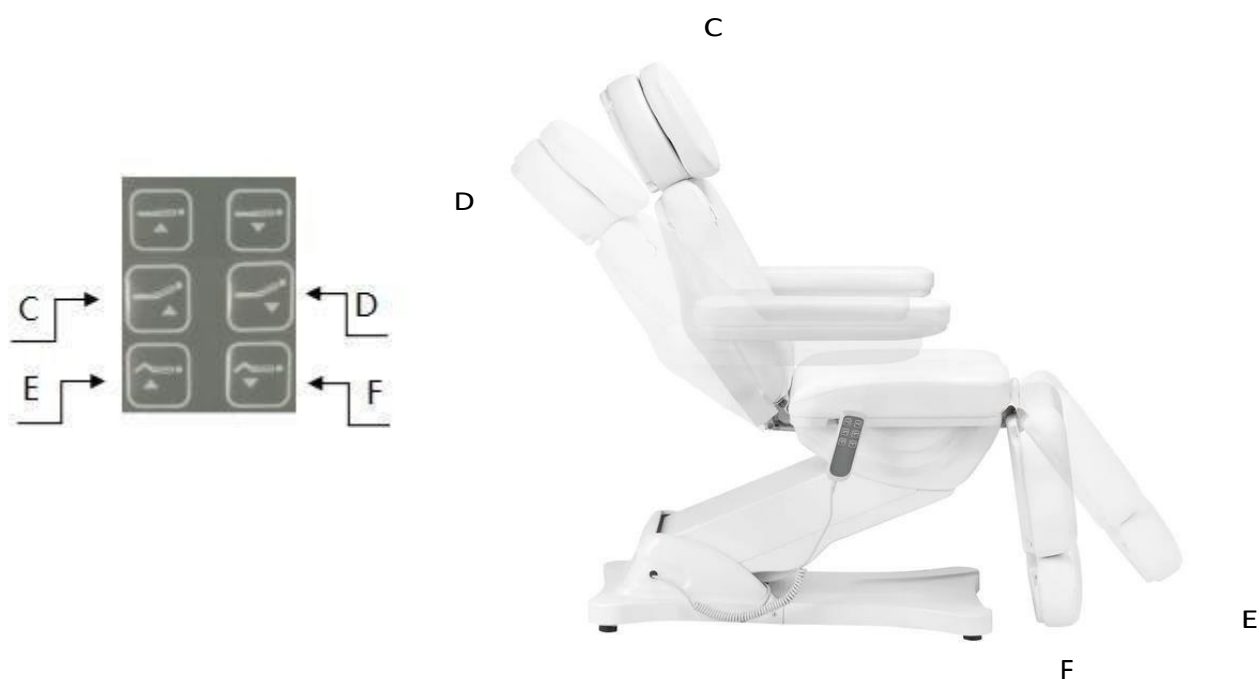

3. Funkce zasunutí opěrky nohou (opěrka nohou, délka: 0~ 12 cm)

**0~ 12cm**

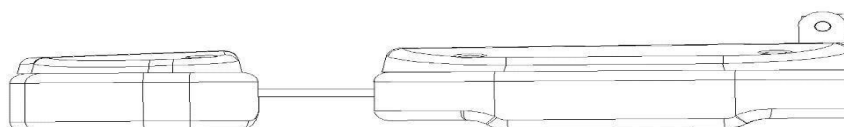

## **Čištění a dezinfekce spotřebiče:**

- Před čištěním odpojte přístroj od sítě.
- Chcete-li udržet povrch židle v dobrém stavu, pravidelně jej čistěte. Nezapomeňte židli po každém použití vyčistit a vydezinfikovat. Doporučujeme provádět důkladnou dezinfekci jednou měsíčně.

### **I Kovové a plastové povrchy**

- Kovové a plastové povrchy a ovládací prvky otřete vlhkým hadříkem. K čištění těžko přístupných míst nebo rohů dobře poslouží malý kartáček. K čištění spotřebiče nepoužívejte příliš mnoho tekutiny. Poté spotřebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

### **II Povrchy z nerezové oceli**

- Nejlépe funguje čištění jemným roztokem čisticího prostředku. K odstranění odolných skvrn lze použít čpavek a většinu rozpouštědel. Vyhněte se roztokům na bázi chlóru.

### **III Lakované nebo chromované kovové povrchy**

- K čištění nepoužívejte vodní trysky (sprchy, vysokotlaká vodní děla).
- Nečistěte při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti, nevystavujte přístroj podmínkám, které mohou vést ke kontaminaci kapalinou.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny.

#### **IV Povrch sedadla**

- Povrch sedadla rovnoměrně otřete speciálním čisticím prostředkem na kůži a poté jej otřete čistým měkkým hadříkem.

## **Údržba**

### **Před zahájením údržby odpojte přístroj ze sítě.**

1. Opravy by měl provádět zkušený a výrobcem autorizovaný personál. Opravy prováděné neautorizovaným personálem mohou způsobit zranění nebo poškození přístroje, za které výrobce nenese odpovědnost.
2. Používejte pouze originální náhradní díly schválené výrobcem.
3. Nepoužívejte elektrické kosmetické křeslo ani příslušenství, pokud nefunguje správně.
4. Veškerá údržba a opravy musí být zdokumentovány.

### **Opatření pro údržbu**

Jednou týdně zkontrolujte ovládací prvky a jejich zapojení. Nejméně jednou za šest měsíců zkontrolujte stav a funkci následujících položek:

1. Napájecí kabel a jeho upevnění
2. kabeláž motoru
3. ovládací skříň a její zapojení
4. zda je připojeno příslušenství
5. normální fungování uzamykacího systému

Pokud zjistíte jakékoli závady, přestaňte zařízení používat a obraťte se na autorizované servisní středisko. Otevřít nebo vyměnit pohon/řídící jednotku může pouze zkušený nebo autorizovaný personál.

Pokud je některá část zařízení poškozena, odpojte napájecí kabel a přestaňte zařízení používat. Poté informujte servisní oddělení.

## Řešení problémů

| Problém                  | Způsoby řešení                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruční ovládání nereaguje | Zkontrolujte, zda rozhraní připojující linku ručního ovládání není uvolněné (Zkontrolujte, zda není problém s deskou plošných spojů), nezapomeňte označit původní polohu zástrčky. |
| Motor nereaguje          | Přepněte polohu zástrčky motoru                                                                                                                                                    |

Chcete-li vyměnit ovládací skříňku a objednat další náhradní díly, obraťte se na servisní oddělení a před kontaktováním popište problém:

1. Model
2. Datum nákupu

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřýma rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
  - a) do spotřebiče vnikla kapalina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) spotřebič byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte práci.
7. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. V případě, že se do zásuvky dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky.
8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce shoření spotřebiče.

## UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

## LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro

pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí

Podle směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být elektroodpad sbírán odděleně a předáván do sběrných míst pro elektroodpad. Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k recyklaci. Proto by měly být odevzdávány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

## SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.

