

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD K POUŽITÍ

Kosmetické křeslo hyd. Sillon 210



Dovozce:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2025

Skenován
í pro
různé
jazyky




Rozměry:





Montáž:

A 4pcs	B M6 4pcs	C M6X35 4pcs	D 2pcs	E M5X8 8pcs	F 4pcs	G 2pcs	H M12X80 4pcs
I ø12 4pcs	J M12 4pcs	K 2pcs	L M8X25 6pcs	M ø8 6pcs	N ø8 6pcs	O M10X25 1pcs	P ø10 1pcs
Q ø10 1pcs	R 2pcs	S 1pcs	T M6 4pcs	U M6 4pcs	V M6 4pcs	①	
④						②	
						③	
						CH-210	


1. Zasuňte podložky do základny sedadla.
2. Pomocí prvku R nasadíte páčku pro nastavení výšky na pohon.
3. Nasadíte aktuátor na základnu sedadla a utáhnete jej pomocí prvků V, U a T.
4. Umístíte kovový rám sedadla na základnu sedadla a upevníte jej pomocí prvků L, M a N.

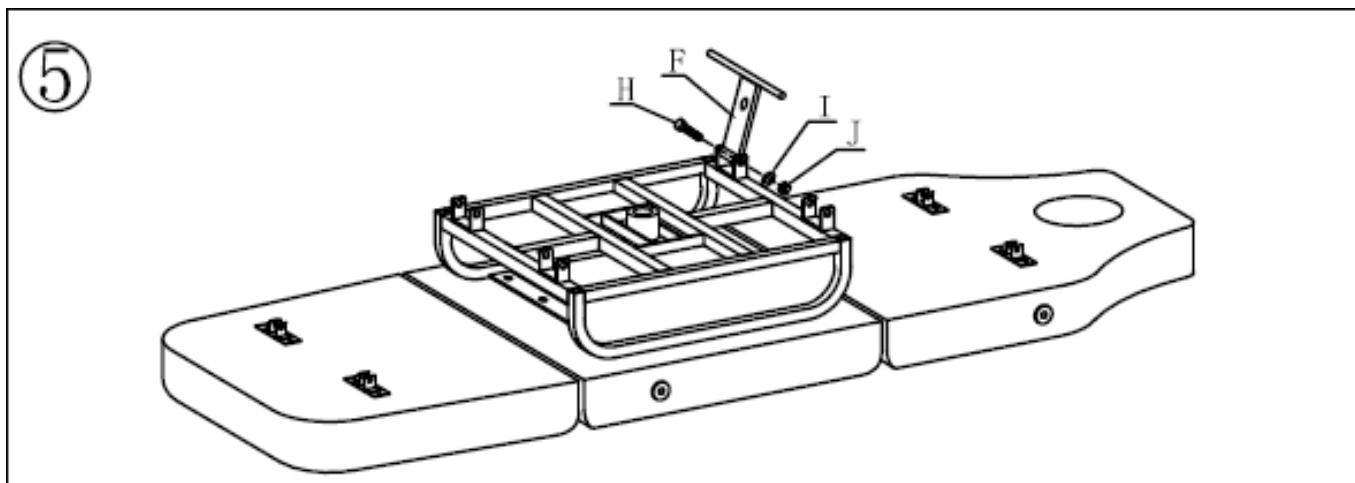


5. Namontujte prvek F tak, že jej utáhnete pomocí prvků I, J a H.

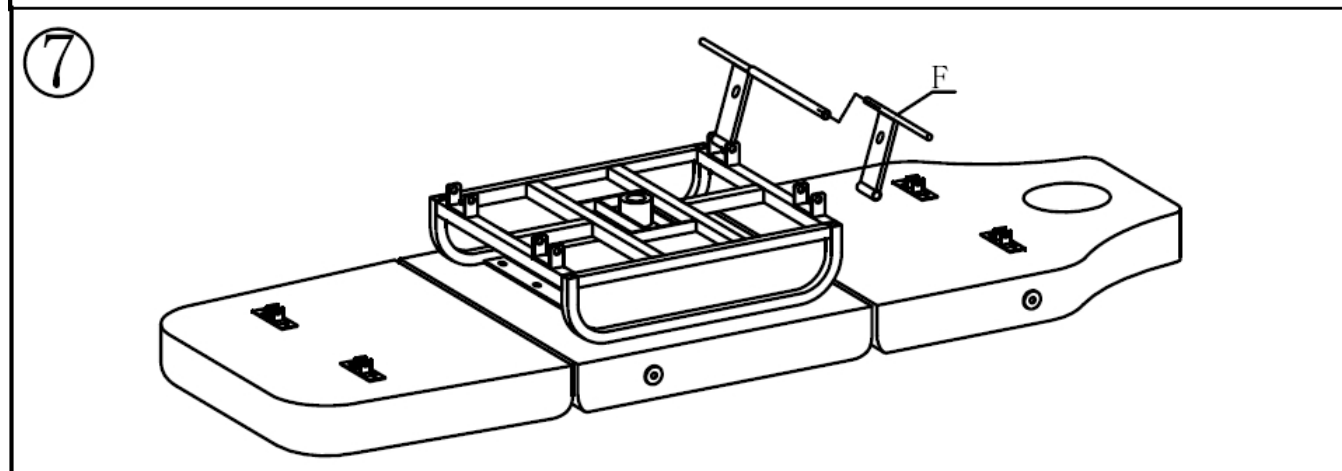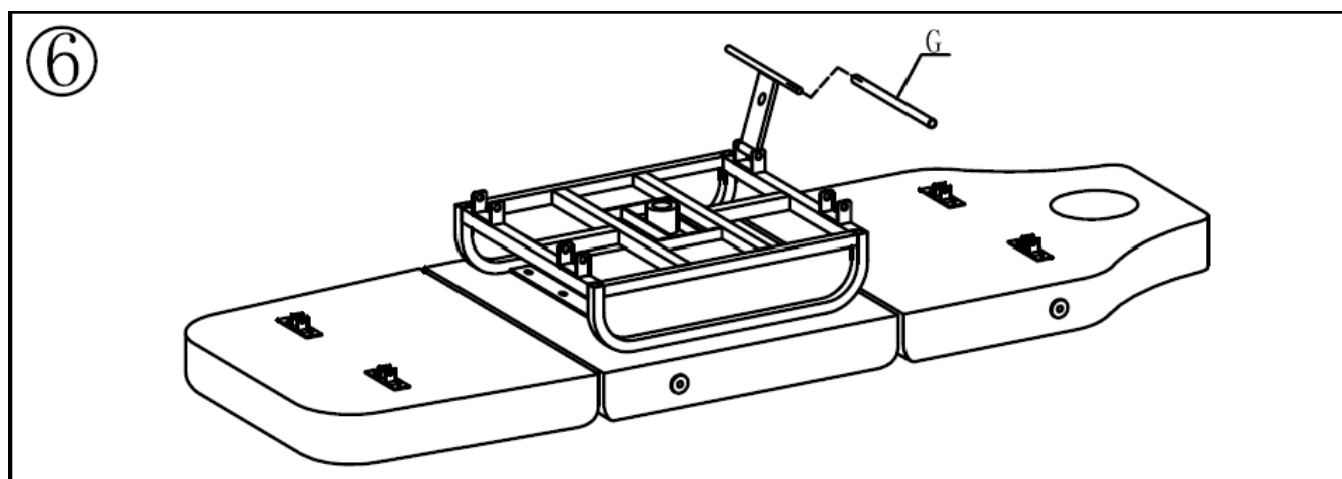


- 6.7 Pomocí prvku G spojte oba prvky F.

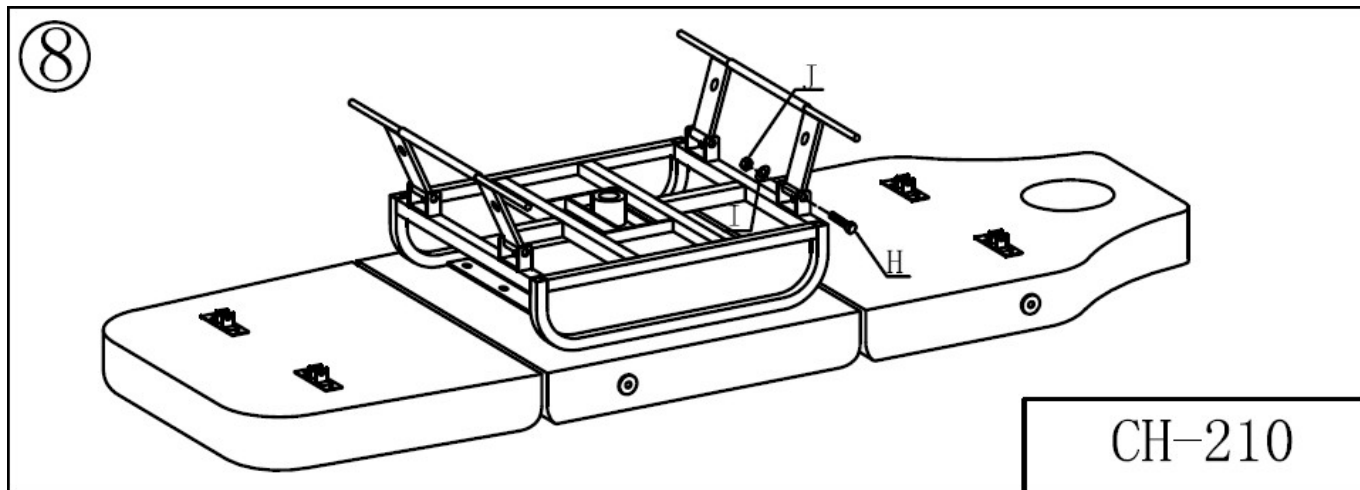

8. Utáhněte pomocí prvků J a H a opakujte na druhé straně.

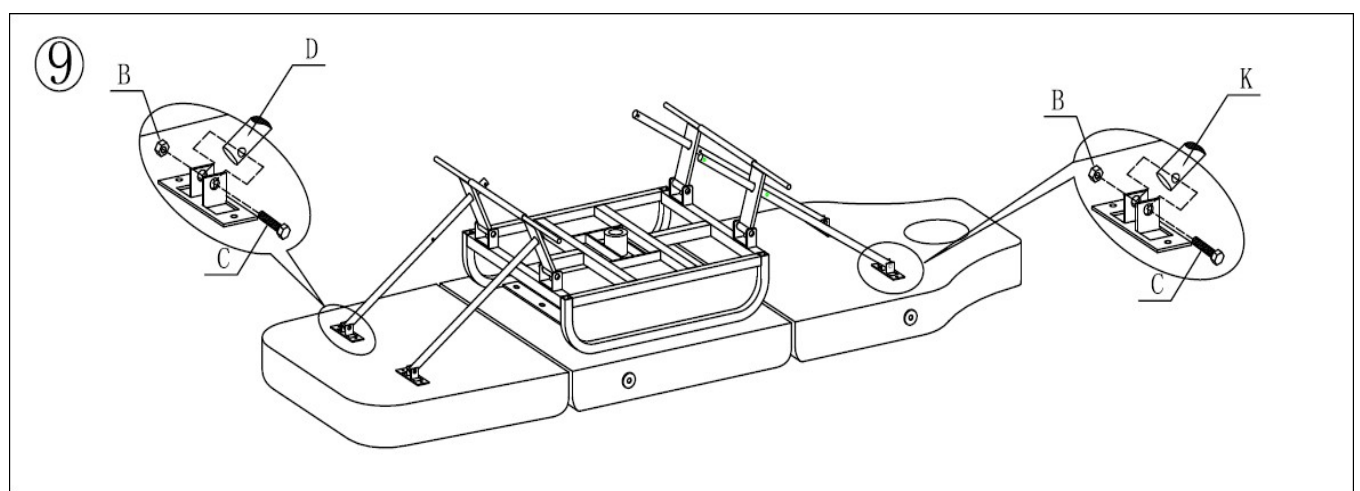


9. Vložte prvky D a K a přišroubujte je pomocí prvků B a C.

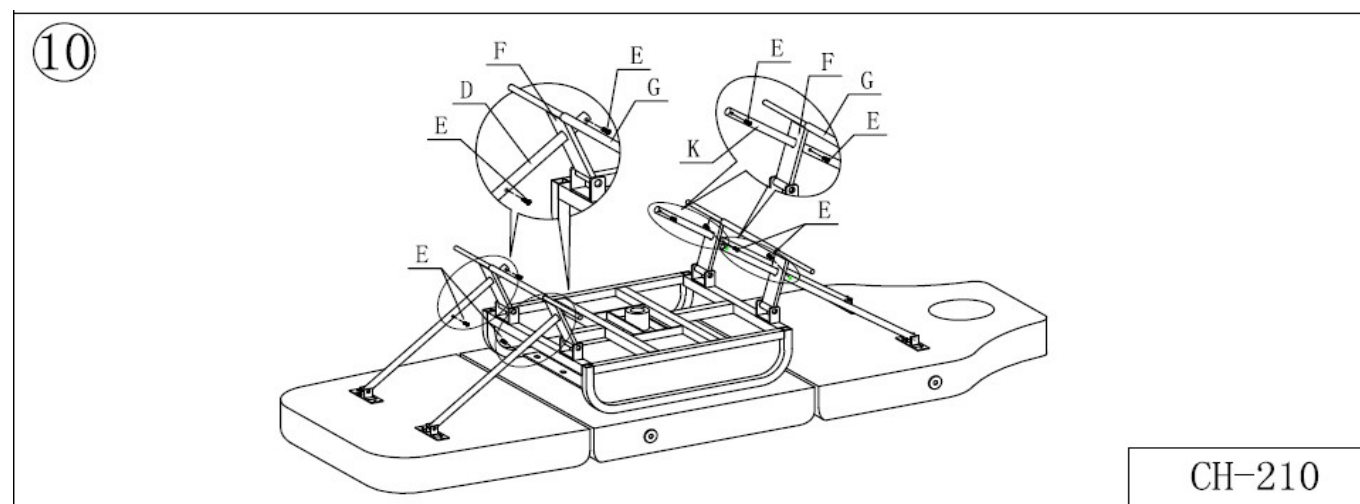


10. Pomocí prvku E zajistěte podpěry.


11

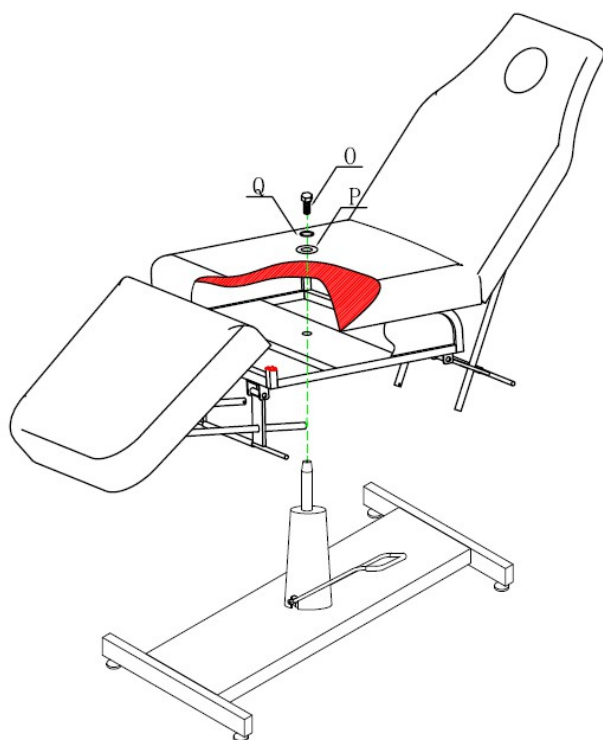

12

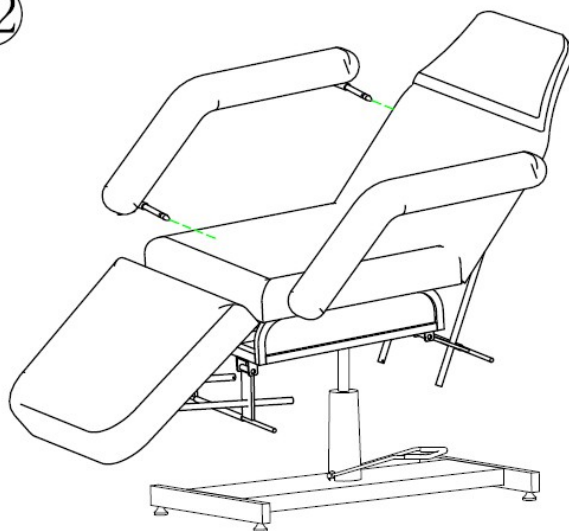

13

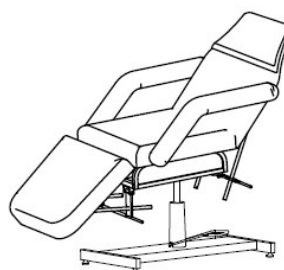

CH-210

11. Nasadíte sedadlo na dřík pohonu a utáhněte je pomocí Q, P a O.

12. Zasuňte područky podle obrázku.

Funkce sedadla:

-Zvedání sedadla: zvedněte sedadlo stisknutím páčky.

-Snížení sedadla: zatlačte na sedadlo, dokud zcela neklesne.

-zajištění otáčení sedadla: zvedněte páčku co nejvíce nahoru.

Pozor!

Nesedejte si prudce a nevrhejte se na sedadlo. Nepřemísťujte ani nepřenášejte sedadlo s osobami nebo břemeny na něm. Nestavte se na židli nohama nebo koleny, nehoupejte se, nesedejte si na područky a nesedejte si na více než jednu osobu.

Čištění a dezinfekce přístroje:

Před čištěním jednotku odpojte od sítě.

Aby byl povrch židle v dobrém stavu, je třeba jej pravidelně čistit. Nezapomeňte židli po každém použití vyčistit a vydezinfikovat. Doporučuje se provádět důkladnou dezinfekci jednou měsíčně.

I Kovové a plastové povrchy

Chcete-li vyčistit kovové a plastové povrchy a ovládací prvky, otřete je vlhkým hadříkem. K čištění těžko přístupných míst nebo rohů se dobře hodí malý kartáček. K čištění spotřebiče nepoužívejte příliš velké množství tekutiny. Poté spotřebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nerezové oceli

Nejlépe funguje čištění jemným roztokem čisticího prostředku. K odstranění odolných skvrn lze použít čpavek a většinu rozpouštědel. Vyhněte se roztokům na bázi chlóru.

III Lakované nebo chromované kovové povrchy

- K čištění nepoužívejte vodní proudy (sprchy, vysokotlaká vodní děla).
- Nečistěte při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti a n e v y s t a v u j t e přístroj podmínkám, které by mohly vést ke kontaminaci kapalinou.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny.

IV Povrch židle

- Povrch židle rovnoměrně otřete speciálním čisticím prostředkem na kůži a poté jej otřete čistým, měkkým hadříkem.

Provádějte údržbu:

1. **Denní čištění**
Odstraňování prachu měkkým, suchým hadříkem.
2. **Odstraňování odolných nečistot**
Jak víte, odolné nečistoty se běžným suchým hadříkem odstraňují obtížně. V takovém případě nejprve použijte měkký hadřík se zředěným neutrálním čisticím prostředkem a poté jej otřete suchým hadříkem.
3. **Je zakázáno používat benzen, ředidla, benzín nebo jiná rozpouštědla.**
Tyto látky mohou poškodit pokožku nebo způsobit korozi výrobku.
4. **Skladovací a provozní podmínky**
Výrobek nevystavujte silnému slunečnímu záření ani vlhkosti. V opačném případě může dojít k poškození výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.

Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k p o u ž í t í . Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

Spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřýma rukama - aby se do spotřebiče nedostaly žádné kapaliny.

V následujících případech okamžitě odpojte spotřebič ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP s.r.o.:

(a) do spotřebiče se dostala tekutina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení přístroje nebo poškození jeho krytu.

Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.

Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.

Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.

Spotřebič nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.

Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a n a o p a k).

Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.

Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.

Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.

Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních se použité

elektrozařízení by měla být shromažďována odděleně a poté odvážena do sběrných míst pro

sběrných zařízení pro odpadní elektronická a elektrická zařízení. Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k přepracování. Proto by měly být odevzdávány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.

