

ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Kozmetické kreslo Azzurro Special 152



Dovozca:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610
Wrocław, Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

PREČÍTAJTE SI NÁVOD NA POUŽITIE PRED POUŽITÍM VÝROBKU

Tento návod obsahuje podrobné informácie o prevádzke a údržbe zariadenia. Pred použitím zariadenia si prečítajte priložený návod. Zariadenie používajte podľa pokynov. Tento návod si uchovajte a zabezpečte, aby sa s ním oboznámili všetky osoby, ktoré môžu zariadenie používať.

Technické údaje:

Rozmery: 119 x 60 x 53 cm

Hmotnosť: 14 kg


Maximálne zaťaženie: 150 kg Nastavenie

výšky: 55–75 cm Nastavenie operadla:

0–5 cm Nastavenie uhla: 10°

Konštrukcia:

1. Operadlo a sedadlo stoličky
2. Plynová pružina
3. Podstavec stoličky
4. Koleska

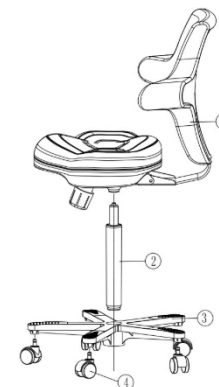

Montáž:

1. V niektorých modeloch nie sú operadlo a sedadlo stoličky zmontované dohromady. V takomto prípade zasuňte operadlo do úchytu sedadla a utiahnite ho pomocou 3 priložených skrutiek.
2. Pripevnite koleska k podstavcu zatlačením.
3. Hrubšiu stranu pohonu vložte do základne.
4. Umiestnite sedadlo na valec.

Poznámka: V niektorých modeloch je valec chránený plastovým krytom.

(v mieste spojenia so sedadlom). Pred pripevnením sedadla skontrolujte, či bol odstránený plastový kryt. V opačnom prípade nebude možné po montáži zmeniť vertikálnu polohu.

Ovládanie:

Vertikálne nastavenie:

Na zníženie sedadla stlačte páčku označenú na obrázku, pričom sedíte na sedadle alebo inak ho zaťažujete.


Ak chcete sedadlo zdvihnúť, stlačte páčku označenú na obrázku bez toho, aby ste na sedadlo vyvíjali tlak.



Nastavenie sklonu operadla:


Potiahnite koniec páky smerom von, aby ste odomkli nastavenie sklonu. Stlačte operadlo a nastavte ho do požadovanej polohy. Potom zatlačte koniec páky dovnútra, aby ste zablokovali polohu operadla. Upozorňujeme, že vzhľadom na typ použitého uzamykacieho

mechanizmu je potrebné, aby ste mohli operadlo posunúť bližšie k sedadlu, najprv ho posunúť v opačnom smere (ako je znázornené šípkou v obrázku).

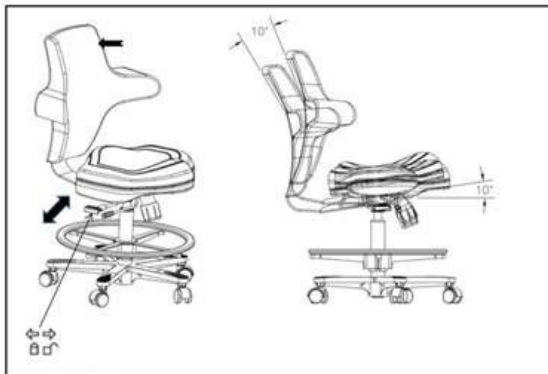

Nastavenie sedadla do vodorovnej polohy:

Ak chcete posunúť sedadlo dopredu alebo dozadu, zdvihnite označené v a potom posuňte sedadlo do požadovanej polohy. Keď uvoľníte páku, sedadlo zostane v zvolenej polohe.

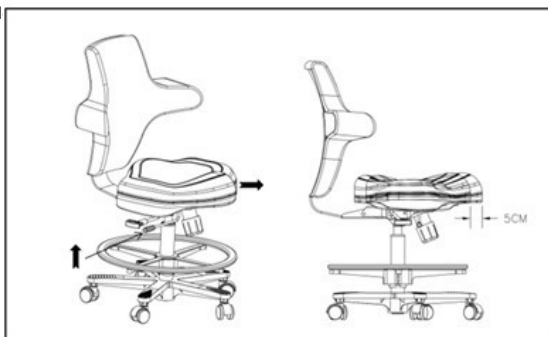

Odporúčania:

1. Neprekračujte odporúčanú nosnosť stoličky, pretože prekročenie odporúčanej hmotnosti môže spôsobiť trvalé poškodenie (max. 150 kg).
2. Na čistenie stoličky nepoužívajte produkty obsahujúce korozívne látky a farbivá, ako aj olejové čistiace prostriedky.
3. Nevhodné čistiace prostriedky môžu spôsobiť poškodenie materiálu, koróziu alebo iné javy.
4. Sedadlo pravidelne čistite, aby sa nečistoty trvalo neusadzovali. Ak sa čalúnenie zašpiní, najbezpečnejšie je použiť vlažnú vodu a mydlo.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C, výlučne v pôvodnom obale. Zariadenie skladujte na dobre vetranom mieste s relatívnou vlhkosťou nepresahujúcou 75 %. Rozsah prevádzkovej teploty: (+) 10 °C až (+) 40 °C. Počas skladovania a prepravy zariadenie nehádzajte, neupúšťajte, nevystavujte mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Zariadenie je profesionálny prístroj určený na použitie v kozmetických salónoch. Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný kozmetický personál, aby sa predišlo nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Zariadenie nerozoberajte a nepoužívajte na iné účely, ako sú uvedené v tejto používateľskej príručke. Všetky servisné a opravárske práce smie vykonávať výlučne autorizovaný servisný technik (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Neinštalujte ani neprevádzkujte zariadenie v blízkosti tekutín, vlhkých miest alebo s mokрыmi rukami, aby sa do zariadenia nemohli dostať žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch ihneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky a kontaktujte autorizované servisné stredisko spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
a) do zariadenia sa dostala tekutina, b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo podivné zvuky, c) napájací kábel je poškodený, d) zariadenie bolo prevrátené alebo je poškodený jeho kryt.
5. Na káble nekladte žiadne predmety. Neinštalujte zariadenie na miesta, kde by niekto mohol šliapnúť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov po každom použití zariadenia odpojte napájací kábel zo zásuvky.
7. Do otvoru v zariadení nekladajte žiadne predmety. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, odpojte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu. 8. Neumiestňujte zariadenie na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Zariadenie sa môže poškodiť, ak spadne.
9. Aby bola zaručená stanovená životnosť zariadenia, odporúča sa počkať jednu minútu pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájanie musí zodpovedať špecifikáciami uvedeným na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko nesprávnej funkcie, poškodenia alebo dokonca spálenia zariadenia.

POZNÁMKA:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte autorizované servisné stredisko, aby ste predišli nebezpečenstvu.
2. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo poučené o bezpečnom používaní zariadenia, aby pochopili súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na používanie deťmi. Deti nesmú hrať sa so zariadením.
4. Nenechávajte zariadenie bez dozoru, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné znalosti o používaní zariadenia.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko pre zdravie alebo viesť k smrti, preto musí byť spotrebič používaný a skladovaný mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA



Použitý elektrický spotrebič, zariadenia a obaly by sa mali odovzdať do recyklačných centier v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia. Elektrický spotrebič sa nesmú likvidovať v kontajneroch na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá týkajúce sa likvidácie tohto typu zariadenia. V záujme ochrany životného prostredia

v súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení, odpad z elektrických zariadení sa musí zbierať oddelene a potom sa odovzdať do zberných miest pre odpad z elektrických a elektronických zariadení. Na konci svojej životnosti obsahujú staré spotrebiče cenné recyklovateľné komponenty, preto by mali byť odoslané na recykláciu. Preto by mali byť odovzdané na príslušných zberných miestach alebo môžu byť odoslané spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.