

ACTIVESHOP®


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aparat de curățat cu ultrasunete UC-002



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

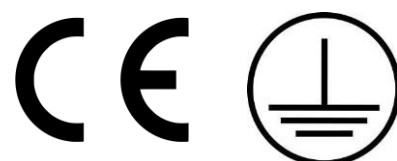

Date tehnice:

Tensiune	220V - 240V 50Hz
Putere	65W
Frecvența vibrațiilor	40kHz
Dimensiuni	295 x 230 x 207 mm
Dimensiunile containerului	245 x 147 x 77 mm
Capacitatea rezervorului	2,5 l
Nivel minim de lichid	1 l
Nivelul maxim al lichidului	2 l
Cronometru	90-480 s

- Deconectați unitatea înainte de a umple rezervorul. Nu depășiți linia "MAX" pentru a evita umplerea excesivă.
- Nu umpleți rezervorul cu substanțe chimice abrazive sau corozive. Acest lucru poate cauza scurgerea spălătorului și poate duce la deteriorări.
- Nu utilizați mașina de spălat dacă cablul sau fișa sunt deteriorate. Dacă sunt deteriorate, contactați un centru de service pentru inspecție și reparații.
- Păstrați mașina de spălat într-un loc sigur.
- Spălătorul nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat atunci când este conectat la priză.
- Nu utilizați în timp ce faceți baie.
- Deconectați mașina de spălat imediat după utilizare.
- Nu scufundați mașina de spălat în apă pentru a evita electrocutarea.
- Nu turnați apă din partea din față a spălătorului, puteți deteriora afișajul.

Construcția și accesoriile spălătorului:



1. Nivelul maxim al lichidului
2. Nivelul minim al lichidului
3. Rezervor
4. Afișaj
5. Indicator de temperatură
6. Buton de control al temperaturii
7. Buton de pornire/oprire
8. Buton pentru pornirea ultrasunetelor
9. Buton pentru funcția de dezaerare
10. Buton de reglare a timpului

Panou de comandă și funcții:

- 1. Buton de pornire/oprire.** Utilizat pentru pornirea și oprirea spălătorului.
- 2. Buton pentru ultrasunete.** Utilizat pentru a activa funcția cu ultrasunete. Mai întâi trebuie setat timpul de funcționare. În caz contrar, funcția nu va fi activată.
- 3. Afișaj.** Indică temperatura curentă. Când funcția cu ultrasunete este activată, indică timpul de funcționare rămas.
- 4. Setarea temperaturii.** Când se apasă butonul de control al temperaturii, spălătorul va încălzi automat apa și apoi va menține temperatura lichidului la aproximativ 60 °C. Culoarea albastră a indicatorului de temperatură indică faptul că lichidul este încălzit. Culoarea roșie indică faptul că temperatura necesară a fost atinsă. **Notă:** mașina de spălat reîncălzește automat lichidul pentru a-i menține temperatura. Indicatorul devine automat albastru pe durata reîncălzirii.
- 5. Buton de degazare.** Utilizat pentru a activa funcția de degazare. Când este pornită, mașina de spălat setează automat timpul de funcționare la 90 de secunde, iar lumina de funcționare a mașinii de spălat clipește în verde. În unele cazuri, în soluția din mașina de spălat pot apărea bule de aer (gaz) din cauza reacțiilor chimice. Bulele de gaz împiedică funcționarea normală a mașinii de spălat. Activarea funcției de degazare ajută la eliminarea bulelor de gaz și, prin urmare, îmbunătățește performanța mașinii de spălat.
- 6. Controlul timpului de funcționare a soluției.** Utilizat pentru a seta timpul de funcționare a mașinii de spălat. Setări posibile: 90s, 180s, 280s, 380s și 480s.

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE

1. Nu porniți mașina de spălat fără apă în interior. Pornirea spălătorului fără apă poate deteriora spălătorul.
2. Nu supraîncărcați mașina de spălat cu funcționare continuă. După 30 de minute de funcționare continuă, lăsați mașina de spălat în gol pentru încă 10 minute.
3. Nu lăsați apă în spălător în permanență. Turnați apa sau soluția din mașina de spălat după utilizare. Lăsarea apei sau a soluției în mașina de spălat pentru o perioadă lungă de timp o poate deteriora.
4. Aveți grijă de exteriorul mașinii de spălat. Ștergeți imediat orice rest de apă sau soluție. Utilizați un prosop umed pentru a curăța mașina de spălat. Ștergeți după spălare.
5. Nu conectați dispozitivul la electricitate cu mâinile ude sau umede.
6. Depozitați într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina soarelui.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Scoateți capacul, puneți produsele în rezervor și umpleți-l cu apă. Apa trebuie să curețe obiectele care urmează să fie curățate, dar nu trebuie să depășească nivelul maxim al lichidului.
2. Puneți capacul la loc și apoi conectați mașina de spălat la sursa de alimentare. Apăsăți butonul "On/off" pentru a porni mașina. Afișajul va indica temperatura apei.
3. Apăsăți butonul de reglare a timpului pentru a selecta timpul de funcționare dorit. Afișajul va indica 90s, apăsăți din nou butonul pentru a modifica timpul la 180 de secunde. Fiecare apăsare ulterioară modifică timpul cu 100 de secunde.
4. Apăsăți butonul Ultrasonic pentru a activa funcția ultrasonică. LED-ul se va aprinde în verde. Dacă doriți să opriți ultrasunetele, apăsăți din nou butonul, LED-ul se va stinge.
5. Apăsăți butonul de control al temperaturii pentru a selecta temperatura de curățare dorită. LED-ul se va aprinde în albastru. Dacă apăsăți din nou butonul, aparatul se va opri din încălzire și LED-ul se va stinge. Temperatura maximă de curățare este de 60 °C.
6. Când ați terminat lucrul, scoateți aparatul din priză, turnați apa rămasă și ștergeți aparatul.

METODE DE CURĂȚARE



Curățare obișnuită

Utilizați apă în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Turnați apa când ați terminat.



Spălare în soluție

Pregătiți soluția de curățare în conformitate cu recomandările producătorului. Aveți grijă să nu depășiți concentrația soluției. Acest lucru poate deteriora etanșările din spălător, rezultând riscul de inundare a componentelor electronice. Când ați terminat, umpleți mașina de spălat cu apă, porniți-o timp de 90 de secunde și apoi turnați reziduurile din mașină. Acest lucru va preveni deteriorarea mașinii de spălat din cauza contactului prelungit cu substanțele chimice.



Spălarea în loturi

Atunci când spălați articole care nu încap în vas, puteți înmuia o parte din articol în detergent și apoi să curățați cealaltă parte.

Lăsați capacul deschis atunci când spălați, dar nu uitați să nu atingeți apa din bazin.



Curățare avansată (pentru echipamente foarte murdare)

Procedați ca la spălarea cu soluție. Apoi înlocuiți apa cu apă curată și repetați procesul.

Articole care nu sunt potrivite pentru curățarea în curățătorul cu ultrasunete:

- Bijuterii fine (perle, smarald, articole din fildeș, mărgel, scoici, agat).
- Articole sudate, acoperite și lipite
- Alte articole, cum ar fi lemn, sticlă acoperită, ceramică, filtre pentru aparate foto.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal calificat în cosmetică evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat furnizat de compania ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri:
 - a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate,
 - c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați unitatea pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolele.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe privind echipamentul, dacă se asigură supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Aparatul nu este destinat să fie folosit de copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI

Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați normele de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electronice și electrice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie trimise spre reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVSHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.