

ACTIVESHOP®

Instrukcja użytkowania

Fotel kosmetyczny Azzurro Lux 3m



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2025



Scan for
different
languages




Uwaga!

1. Podnóżek nie jest przeznaczony do podtrzymywania pełnego ciężaru osoby dorosłej.
2. Nie wolno siedzieć bezpośrednio na podłokietniku oraz podnóżku.
3. Nie unieś większego ciężaru niż ten, który fotel może wytrzymać.
4. Ze względów bezpieczeństwa zawsze podłączaj przewód zasilający do gniazdka z uziemieniem.
5. Nie przywiązuj przewodu zasilającego do urządzenia. Podnoszenie lub pociągnięcie za przewód zasilający może spowodować jego zniszczenie. Upewnij się, że przewód zasilający można łatwo wyjąć w sytuacji awaryjnej.
6. Przed przeniesieniem elektrycznego fotela kosmetycznego należy wyjąć przewód zasilający, aby nie utknął on pomiędzy częściami fotela.
7. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, natychmiast odłącz przewód, nie używaj fotela i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Używaj tylko oryginalnego przewodu zasilającego.
8. Nie pozwól, aby osoba, która nie wykonuje zabiegu sterowała pilotem sterującym.
9. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów pod fotelem.
10. Upewnij się, że wokół fotela jest wystarczająca ilość wolnej przestrzeni, aby można było go swobodnie składać i rozkładać.
11. Upewnij się, że wokół fotela nie znajdują się żadne ostre lub szkodliwe przedmioty, które mogłyby zniszczyć urządzenie.
12. Nie modyfikuj samodzielnie urządzenia. Jeśli fotel nie działa prawidłowo, przestań go używać i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
13. Nie wrzucaj na fotel żadnych ciężkich przedmiotów ani nie skacz na niego.

Montaż

1. Włóż zagłówek do otworu znajdującego się na górze oparcia (rys.1).
2. Ustaw i połącz lewy oraz prawy podłokietnik z bolcem w fotelu, a następnie obróć o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys2.).

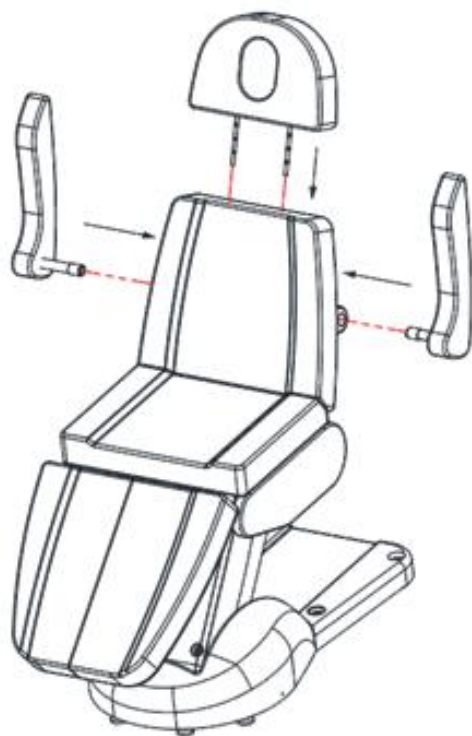

Rys.1



Rys.2


Pilot sterujący




1. Naciśnij przycisk , aby podnieść fotel.
2. Naciśnij przycisk , aby opuścić fotel.
3. Naciśnij przycisk , aby zwiększyć kąt nachylenia oparcia.
4. Naciśnij przycisk , aby zmniejszyć kąt nachylenia oparcia.
5. Naciśnij przycisk , aby zwiększyć kąt nachylenia podnóżka.
6. Naciśnij przycisk , aby zmniejszyć kąt nachylenia podnóżka.
7. Naciśnij przycisk  lub , aby włączyć podgrzewanie siedziska/oparcia

Dodatkowe funkcje

- Pociągnij uchwyt do tyłu i przytrzymaj, aby dostosować kąt nachylenia podnóżka.

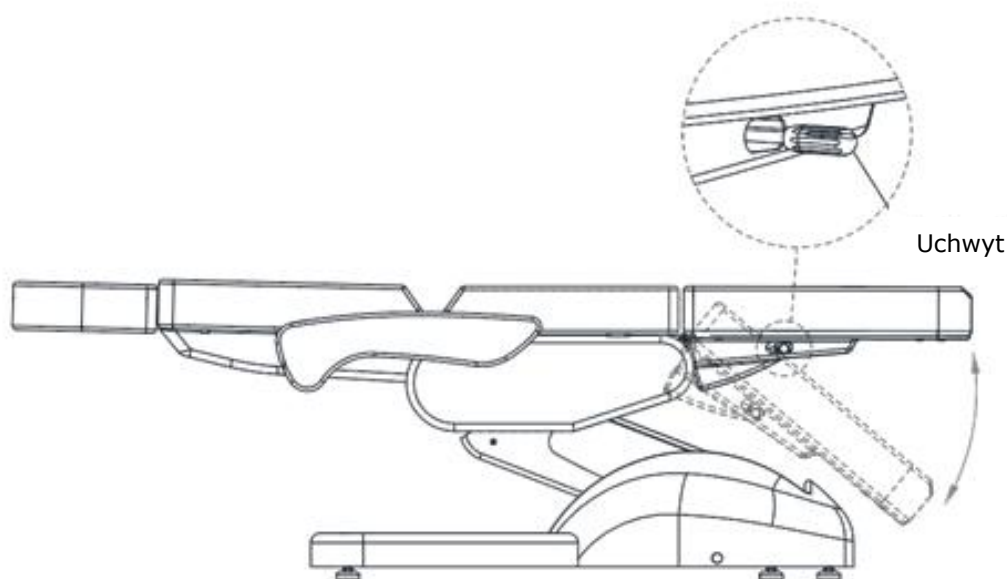

- Wysokość zagłówka można regulować, podciągając go do góry lub naciskając w dół.

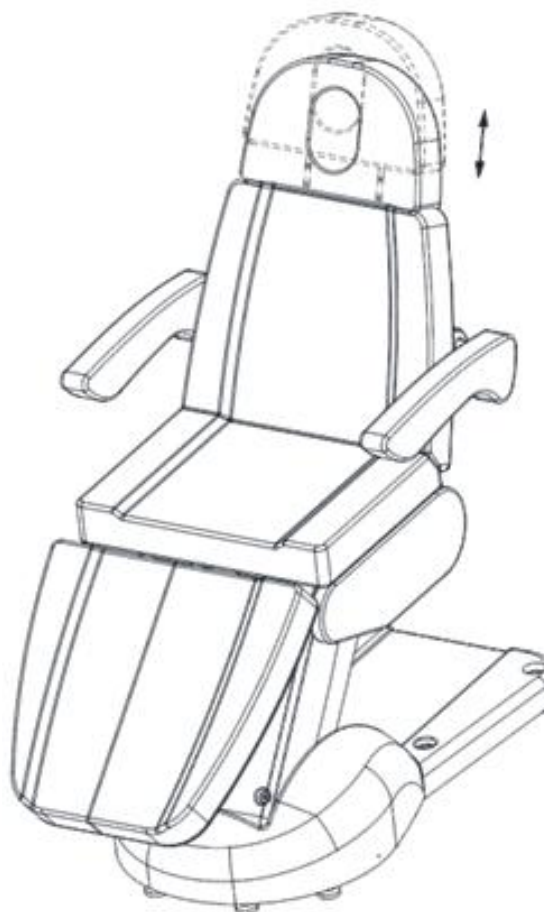

Środki utrzymania:

Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia:

- Odłącz urządzenie do prądu przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Aby utrzymać powierzchnię fotela w dobrym stanie, należy ją regularnie czyścić. Pamiętaj, aby czyścić i dezynfekować fotel po każdym użyciu. Zaleca się wykonać dokładną dezynfekcję raz w miesiącu.

I Powierzchnie metalowe i plastikowe

- Aby wyczyścić metalowe i plastikowe powierzchnie oraz elementy sterujące przetrzyj je wilgotną szmatką. Do wyczyszczenia trudno dostępnych miejsc lub rogów dobrze sprawdzi się mała szczoteczka. Nie używaj zbyt dużej ilości płynu do czyszczenia urządzenia. Następnie zdezynfekuj urządzenie odpowiednim płynem.

II Powierzchnie ze stali nierdzewnej

- Najlepiej sprawdzi się czyszczenie łagodnym roztworem detergentu. Amoniak i większość rozpuszczalników mogą być stosowane do usuwania trudnych plam. Unikaj roztworów na bazie chloru.

III Malowane lub chromowane powierzchnie metalowe

- Nie używaj dysz wodnych (prysznic, wysokociśnieniowe armatki wodne) do czyszczenia.
- Nie czyść w wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności powietrza, nie wystawiaj urządzenia na warunki, które mogą prowadzić do zalania cieczą.
- Nie używaj rozpuszczalników oraz kwasów do czyszczenia.

IV Powierzchnia fotela

- Wytrzyj powierzchnię fotela równomiernie specjalnym środkiem do czyszczenia skóry, a następnie przetrzyj ją czystą, miękką szmatką.

Przed konserwacją urządzenia należy odłączyć je od prądu.

- Naprawy powinny być wykonywane przez doświadczony i upoważniony przez producenta personel.
- Naprawa przez nieautoryzowany personel może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych zatwierdzonych przez producenta.
- Nie używaj elektrycznego fotela kosmetycznego ani akcesoriów, jeśli nie działają prawidłowo.
- Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze muszą być udokumentowane.

Uwaga!

- Jeśli znajdziesz jakiegokolwiek wady, przestań używać sprzęt i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Tylko doświadczony lub autoryzowany personel może otworzyć lub wymienić siłownik / jednostkę sterującą.
- Jeśli jakakolwiek część urządzenia jest uszkodzona, odłącz przewód zasilający i przestań go używać. Następnie powiadom serwis.

Rozwiązywanie problemów:

Problem	Rozpoznanie	Rozwiązanie
Przyciski nie reagują	- Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest podłączona - Sprawdź, czy wszystkie wtyczki łączące transformator są prawidłowo podłączone	- Odłącz wtyczkę zasilania i podłącz ją ponownie - Odłącz wszystkie wtyczki łączące i podłącz je ponownie
Podczas podnoszenia fotela występują hałasy i drgania	- Poluzowane śruby	- Dokręć śruby
Kontrolka się nie świeci	- Kabel pilota sterującego nie jest dobrze podłączony lub pilot jest uszkodzony	- Podłącz kabel ponownie, jeśli nadal nie działa, wymień pilot

Dane techniczne:

Wymiary: 2000 x 810 x 610–910 mm

Maksymalne obciążenie: 140 kg

Waga netto: 76 kg

Regulowany zakres wysokości: 610–910 mm

Napięcie wejściowe: AC 100–130 V / 220–240 V, 50/60 Hz

Napięcie wyjściowe: DC 24 V

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.

2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIV Tomasz Pacholczyk w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórным naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIV Tomasz Pacholczyk.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.

