

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD NA POUŽITIE

Elektrické kozmetické kreslo Sillon Classic 3 motory

Model: C501A



Dovozca:


z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024

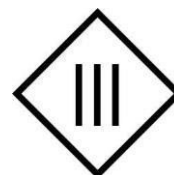

***PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE*.**


Tento návod obsahuje podrobné informácie o prevádzke a údržbe zariadenia. Pred použitím jednotky si prečítajte priložený návod na obsluhu. Spotrebič používajte tak, ako je popísané. Uchovajte tento návod a zabezpečte, aby sa s ním oboznámili všetky osoby, ktoré môžu spotrebič používať.

Elektrické kozmetické kreslo Sillon je profesionálne zariadenie, ktoré je ideálne pre každý kozmetický salón. Je ideálne na masáže, kozmetické a fyzioterapeutické ošetrenia. Kreslo bolo navrhnuté tak, aby zabezpečilo úplné pohodlie pri ležaní na ňom počas ošetrenia. Kreslo sa skladá zo štyroch častí a odnímateľného vankúša. Na oboch stranách kresla sú úchyty, na ktoré možno zavesiť diaľkové ovládanie, aby bolo vždy po ruke.

Nosnosť výrobku: 150 kg


Maximálna nosnosť tela kresla je 150 kg. Nezdvíhajte väčšiu hmotnosť, ako je uvedená hmotnosť, ktorú sedačka unesie.

Neskáčte po operadle ani nevyvíjajte veľký tlak na opierky rúk, aby ste nepoškodili konštrukciu výrobku.

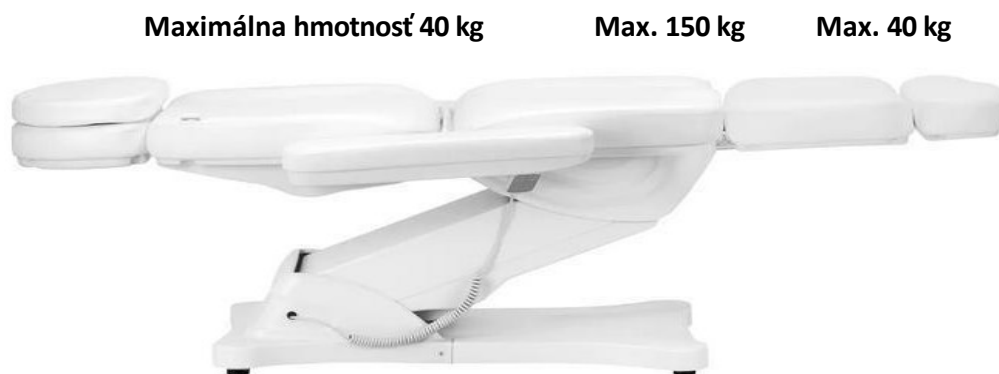

Poznámka

Na balenie sa používa kartón a vonkajší kartón s celkovo 10 vrstvami papiera, ktoré zabezpečujú ochranu vašich výrobkov. Odporúčame uchovať pôvodný obal na ďalšie použitie, najmä na vrátenie počas záručnej doby. Z bezpečnostných dôvodov sú na zdvihnutie stoličky z kartónovej škatule potrebné dve osoby. Pri zdvíhaní stojte na oboch stranách opierky hlavy a opierky nôh kresla. Nezabudnite, že stoličku možno zdvíhať len z pozícií opierky hlavy a opierky nôh, nie z oboch strán podrúčk.

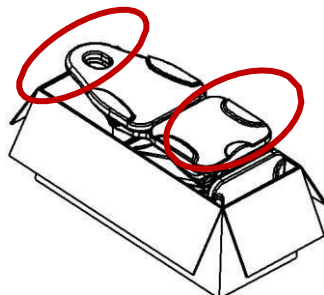

Pred použitím kresla skontrolujte, či je obal neporušený a či sa nepoškodil počas prepravy. Ak sa vyskytne akýkoľvek problém, oznámte to prepravnej spoločnosti alebo

Popredajný personál do 2 dní od prevzatia jednotky. Uistite sa, že všetko príslušenstvo je v čase dodania kompletne. Ak zistíte, že príslušenstvo v čase dodania chýba, včas kontaktujte popredajný personál.

Elektrické kozmetické kreslo sa musí používať v uzavretej, suchej miestnosti. Teplota v miestnosti by mala byť v rozmedzí od +10° do -40° a relatívna vlhkosť vzduchu od 30 % do 75 %. Ak bolo elektrické kozmetické kreslo vystavené teplotám nižším ako 0°, pred použitím počkajte aspoň 5 hodín, aby mal prístroj čas dosiahnuť izbovú teplotu.

Pred použitím elektrického kozmetického kresla si prečítajte návod na použitie a vykonajte nasledujúce kroky:

- (1) Skontrolujte, či boli odstránené všetky obalové materiály.
- (2) Skontrolujte, či je stolička v prevádzkyschopnom stave.
- (3) Elektrické kozmetické kreslo umiestnite na miesto, kde sa bude používať.
- (4) Zapojte sieťovú zástrčku do vhodnej zásuvky.


Tip! Tento spotrebič nesmú používať deti a neskúsené osoby. Deti musia byť pod dohľadom a nesmú sa hrať v blízkosti elektrického kozmetického kresla. Z bezpečnostných dôvodov spotrebič odpojte zo zásuvky a nenechávajte ho bez dozoru. Odpojte aj napájací kábel.

Rozmery zariadenia:





Konštrukcia spotrebiča:

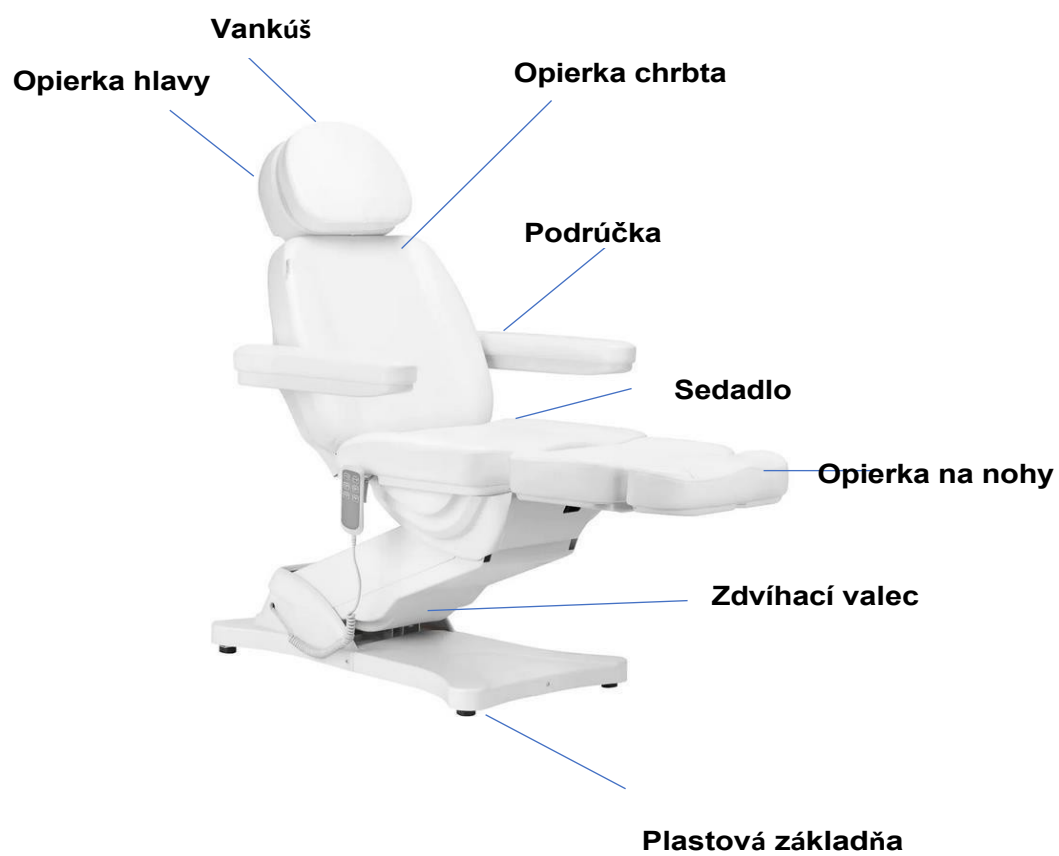

Upozornenie

1. Opierka nôh nie je navrhnutá tak, aby uniesla plnú hmotnosť dospelého človeka.
2. Nesadajte si priamo na opierku rúk a nôh.
3. Elektrické gynekologické vyšetrovacie kreslo nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov.
4. Nezdvíhajte väčšiu váhu, ako je stolička schopná uniesť.
5. Uistite sa, že vzdialenosť medzi zásuvkami nepresahuje 2 metre.

Upozornenie

1. Z bezpečnostných dôvodov vždy zapájajte napájací kábel do uzemnenej zásuvky.
2. Napájací kábel nepripájajte k prístroju. Zdvíhanie alebo ťahanie za napájací kábel ho môže poškodiť. Uistite sa, že napájací kábel sa dá v núdzovej situácii ľahko odpojiť.
3. Pred premiestňovaním elektrického kozmetického kresla odpojte napájací kábel, aby sa nezasekol medzi niektorými časťami kresla.
4. Ak je napájací kábel poškodený, okamžite ho odpojte, stoličku nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálny napájací kábel.
5. Nedovoľte, aby osoba, ktorá nevykonáva ošetrovanie, ovládala diaľkový ovládač.
6. Pod kreslo neumiestňujte žiadne predmety.
7. Uistite sa, že okolo kresla je dostatočný voľný priestor, aby sa dalo voľne skladať a rozkladať.
8. Uistite sa, že v okolí kresla nie sú žiadne ostré alebo škodlivé predmety, ktoré by mohli zariadenie poškodiť.
9. Jednotku sami neupravujte. Ak stolička nefunguje správne, prestaňte ju používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.


Používanie zariadenia:

1. Napájací kábel pripojte k externému zdroju napájania 110 V~240 V.

Spôsob inštalácie opierky rúk:

Aby ste naň mohli namontovať opierku na ruky, musí byť sedadlo vo vodorovnej polohe. Zasuňte laktóvu opierku do otvoru umiestneného na boku operadla. Opierka na ruku by mala byť pevne pripevnená. Otočte ju doprava alebo doľava, aby správne zapadla na miesto. To isté urobte aj s druhou laktóvou opierkou.


Opierka na ruku je kolmo k zemi (bez ohľadu na uhol sedadla). Možno ju otočiť o 180°.

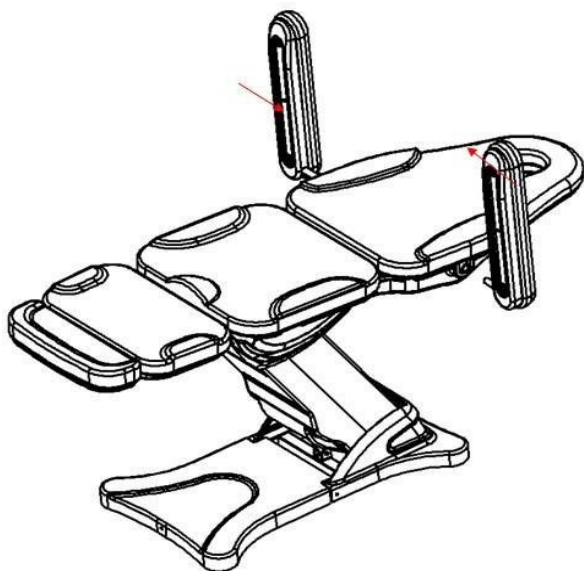

1. Funkcia manuálneho ovládania (výška zdvihu: lôžko je vo výške 58~ 82 cm od zeme)




2. Funkcia manuálneho ovládania (uhol zdvihu chrbta 0-80°, uhol zdvihu nôh 0-90°)

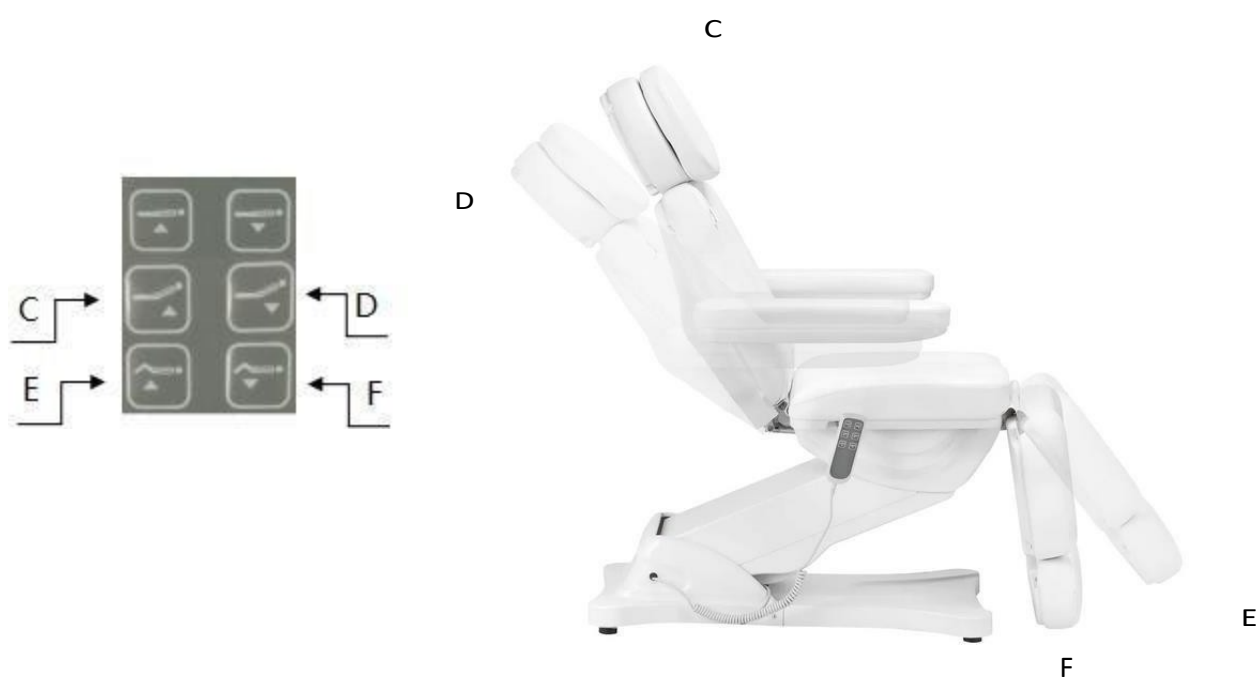

3. Funkcia zasúvania opierky nôh (opierka nôh, dĺžka: 0~ 12 cm)

0~ 12cm

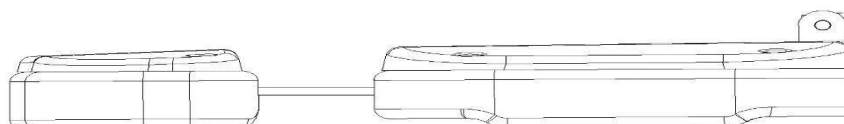

Čistenie a dezinfekcia spotrebiča:

- Pred čistením odpojte prístroj od elektrickej siete.
- Aby ste udržali povrch stoličky v dobrom stave, pravidelne ho čistite. Nezabudnite stoličku vyčistiť a vydezinfikovať po každom použití. Odporúčame vykonávať dôkladnú dezinfekciu raz za mesiac.

I Kovové a plastové povrchy

- Kovové a plastové povrchy a ovládacie prvky čistite vlhkou handričkou. Na čistenie ťažko prístupných miest alebo rohov dobre poslúži malá kefka. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte príliš veľa tekutiny. Potom spotrebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nehrdzavejúcej ocele

- Najlepšie funguje čistenie jemným roztokom čistiaceho prostriedku. Na odstránenie odolných škvŕn možno použiť čpavok a väčšinu rozpúšťadiel. Vyhnite sa roztokom na báze chlóru.

III Lakované alebo pochrómované kovové povrchy

- Na čistenie nepoužívajte vodné prúdy (sprchy, vysokotlakové vodné delá).
- Nečistite pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti, nevystavujte prístroj podmienkam, ktoré môžu viesť ku kontaminácii tekutinou.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyseliny.

IV Povrch sedadla

- Povrch sedadla rovnomerne utrite špeciálnym čistiacim prostriedkom na kožu a potom ho utrite čistou, mäkkou handričkou.

Údržba

Pred údržbou odpojte zariadenie od elektrickej siete.

1. Opravy by mal vykonávať skúsený a výrobcom autorizovaný personál. Opravy vykonávané neautorizovaným personálom môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie prístroja, za ktoré výrobca nezodpovedá.
2. Používajte len originálne náhradné diely schválené výrobcom.
3. Elektrické kozmetické kreslo ani príslušenstvo nepoužívajte, ak nefungujú správne.
4. Všetky práce na údržbe a opravách musia byť zdokumentované.

Opatrenia na údržbu

Raz týždenne skontrolujte ovládacie prvky a ich zapojenie. Aspoň raz za šesť mesiacov skontrolujte stav a funkčnosť nasledujúcich položiek:

1. Napájací kábel a jeho upevnenie
2. zapojenie motora
3. ovládacia skrinka a jej zapojenie
4. či je pripojené príslušenstvo
5. normálnu činnosť uzamykacieho systému

Ak zistíte akékoľvek závady, prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pohon/riadiacu jednotku môže otvoriť alebo vymeniť len skúsený alebo autorizovaný personál.

Ak je niektorá časť zariadenia poškodená, odpojte napájací kábel a prestaňte ho používať. Potom to oznámte servisnému oddeleniu.

Riešenie problémov

Problém	Metódy riešenia
Manuálne ovládanie nereaguje	Skontrolujte, či je rozhranie pripájajúce linku ručného ovládania uvoľnené (Skontrolujte, či nie je problém s doskou plošných spojov), nezabudnite označiť pôvodnú polohu zástrčky.
Motor nereaguje	Prepnite polohu zástrčky motora

Ak chcete vymeniť riadiacu skrinku a objednať ďalšie náhradné diely, obráťte sa na servisné oddelenie a pred kontaktovaním opíšte problém:

1. Model
2. Dátum nákupu

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Spotrebič je profesionálne zariadenie určené na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne kvapaliny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a kontaktujte autorizované servisné stredisko spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o:
(a) do zariadenia sa dostala kvapalina, (b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, (c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, (d) zariadenie bolo prevrátené alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Zariadenie neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nekladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a obráťte sa na distribútora alebo výrobcu.
8. V prípade, že sa do zásuvky dostane cudzí predmet, odstráňte ho.
8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento prístroj môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami s týmto zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukciá o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre

likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia

Podľa smernice 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa elektroodpad musí zbierať oddelene a odovzdávať na zberných miestach pre elektroodpad. Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Jednotku skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.

