

ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Kosmeetiline tugitool hyd. Sillon 210



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Poola

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2025







Erinevate
keelte
skaneeri
mine




Mõõtmed:





Kokkupanek:

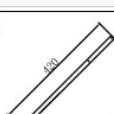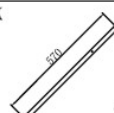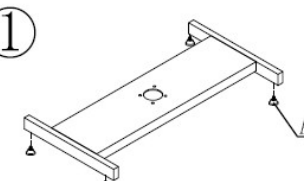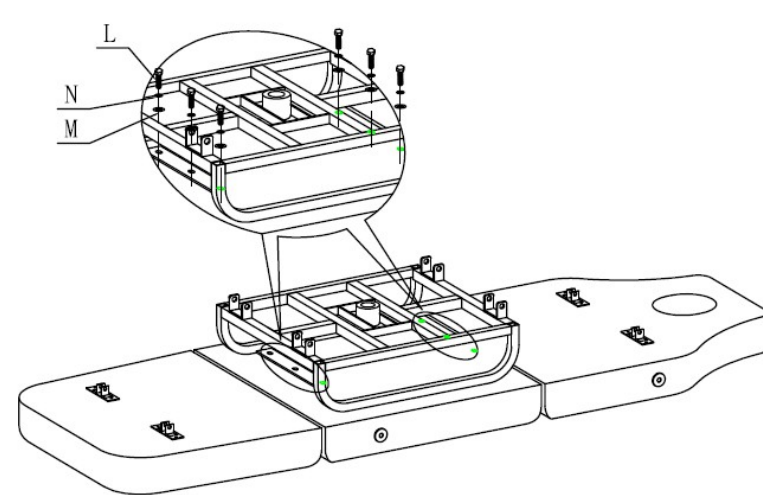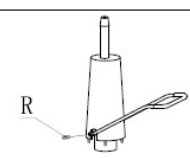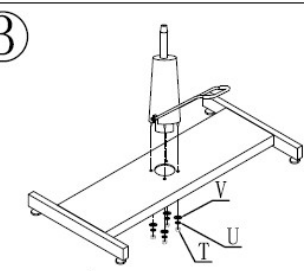A  4pcs	B  M6 4pcs	C  M6X35 4pcs	D  2pcs	E  M5X8 8pcs	F  4pcs	G  2pcs	H  M12X80 4pcs
I  φ12 4pcs	J  M12 4pcs	K  2pcs	L  M8X25 6pcs	M  φ8 6pcs	N  φ8 6pcs	O  M10X25 1pcs	P  φ10 1pcs
Q  φ10 1pcs	R  2pcs	S  1pcs	T  M6 4pcs	U  M6 4pcs	V  M6 4pcs	① 	
<div>④</div> 						② 	
						③ 	
						CH-210	


1. Paigaldage padjad istmealusele.
2. Paigaldage kõrguse reguleerimise hoob R-elementi abil käivitusseadme külge.
3. Paigaldage käivitusseade istme alusele, seejärel pingutage seda V, U ja T elemendi abil.
4. Asetage metallist istme raam istme alusele ja kinnitage see L, M ja N elementide abil.

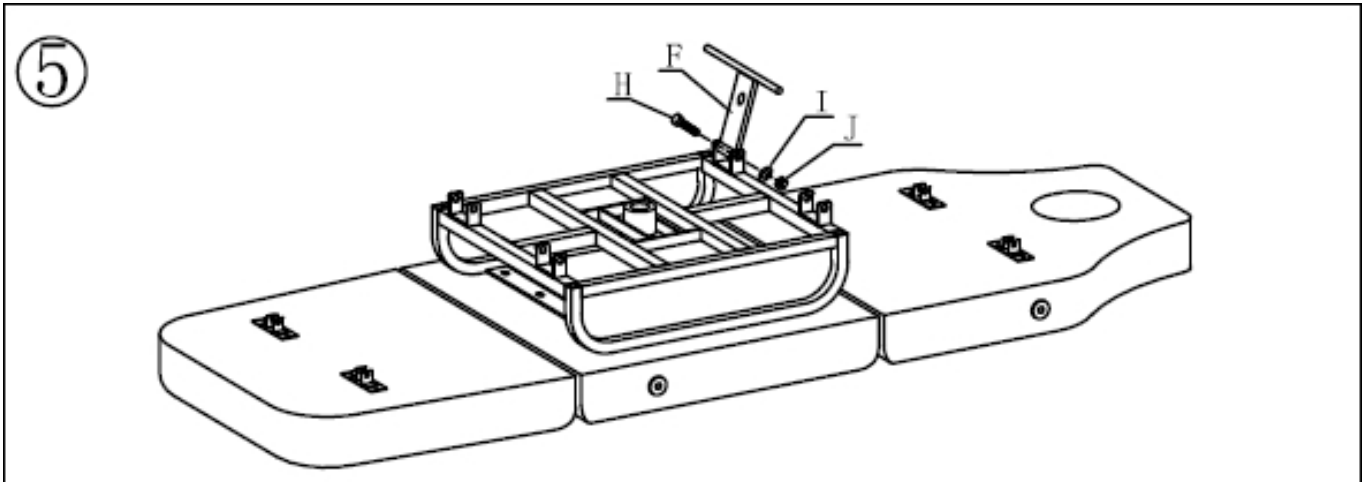


5. Paigaldage element F, pingutades seda koos elementidega I, J ja H.

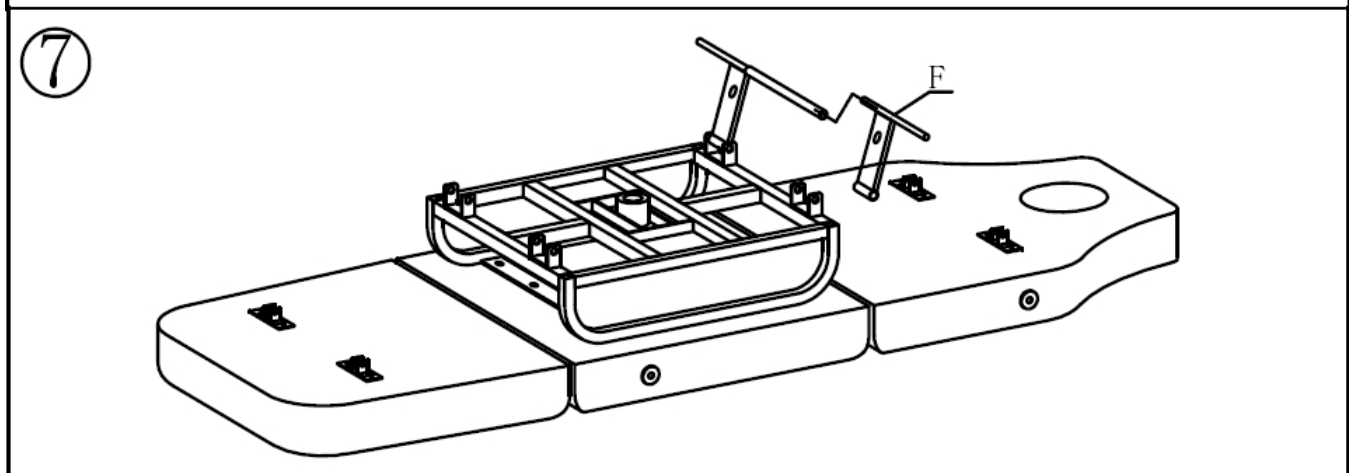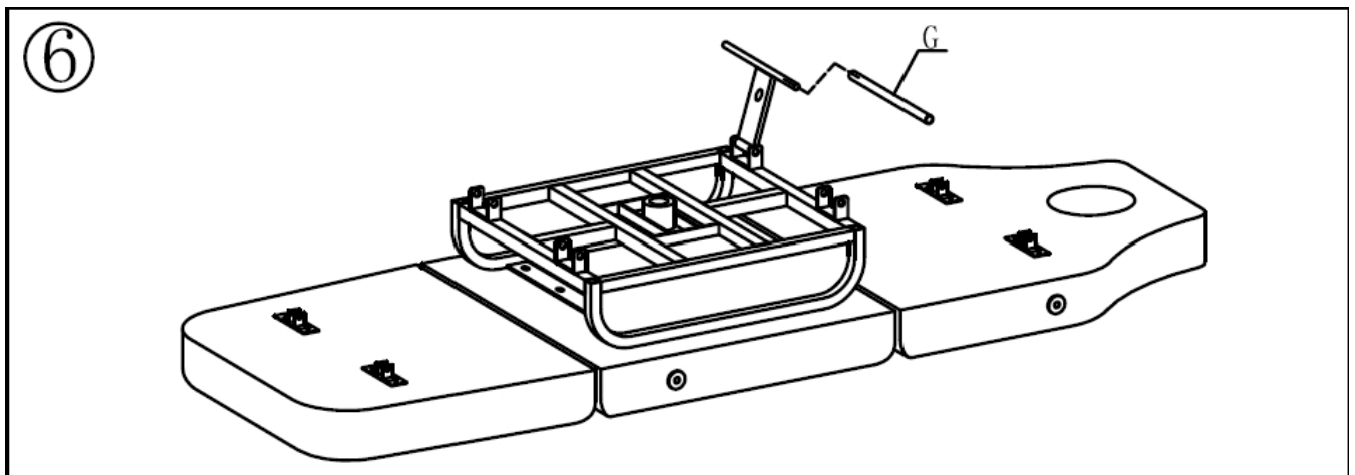


- 6.7 Kasutage elementi G, et ühendada kaks elementi F omavahel.

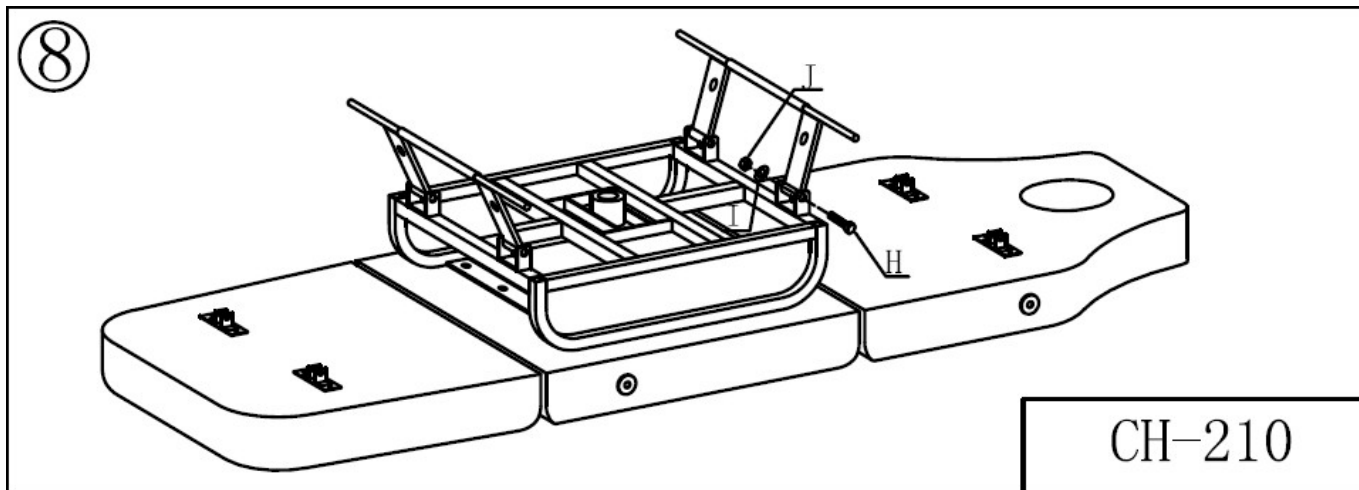


8. Pingutage J ja H abil ning korrake teisel poolel.

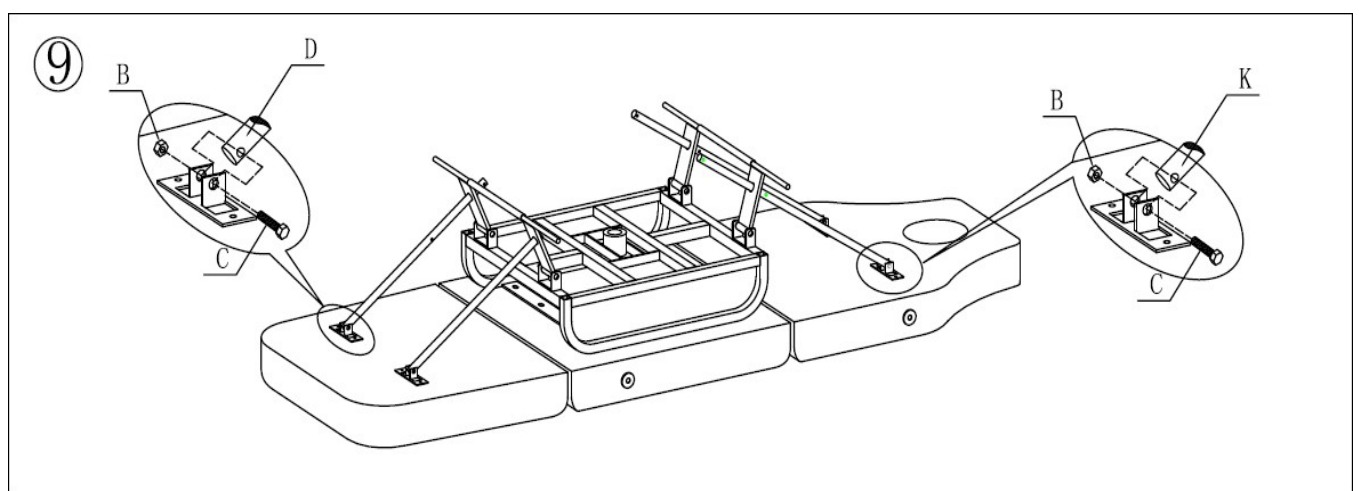

9. Paigaldage elemendid D ja K ning kruvige need B ja C abil kinni.

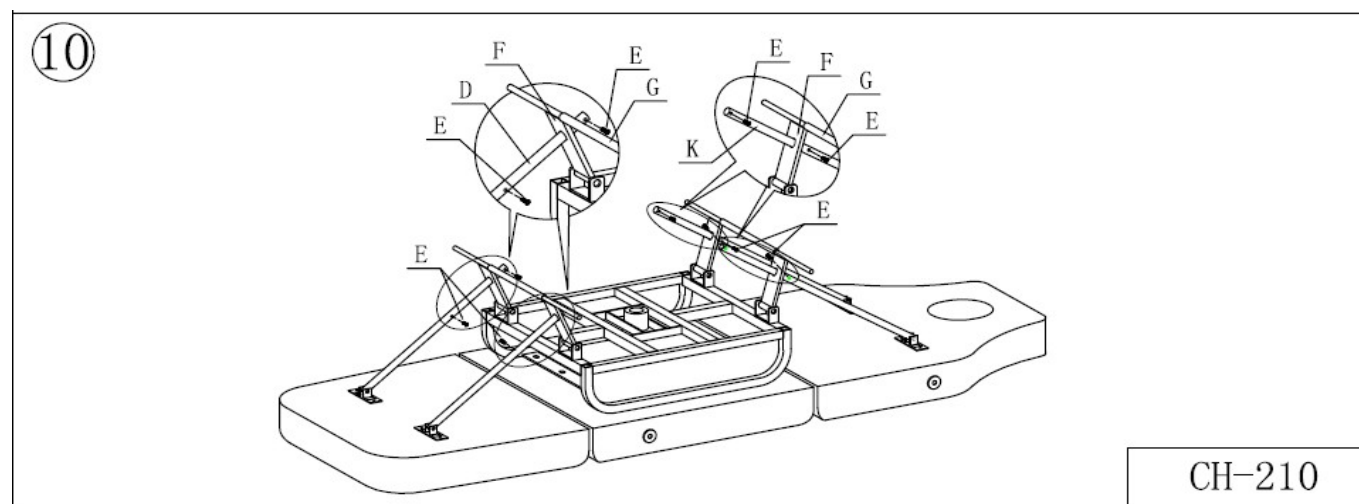

10. Kinnitage tugijalad, kasutades E.

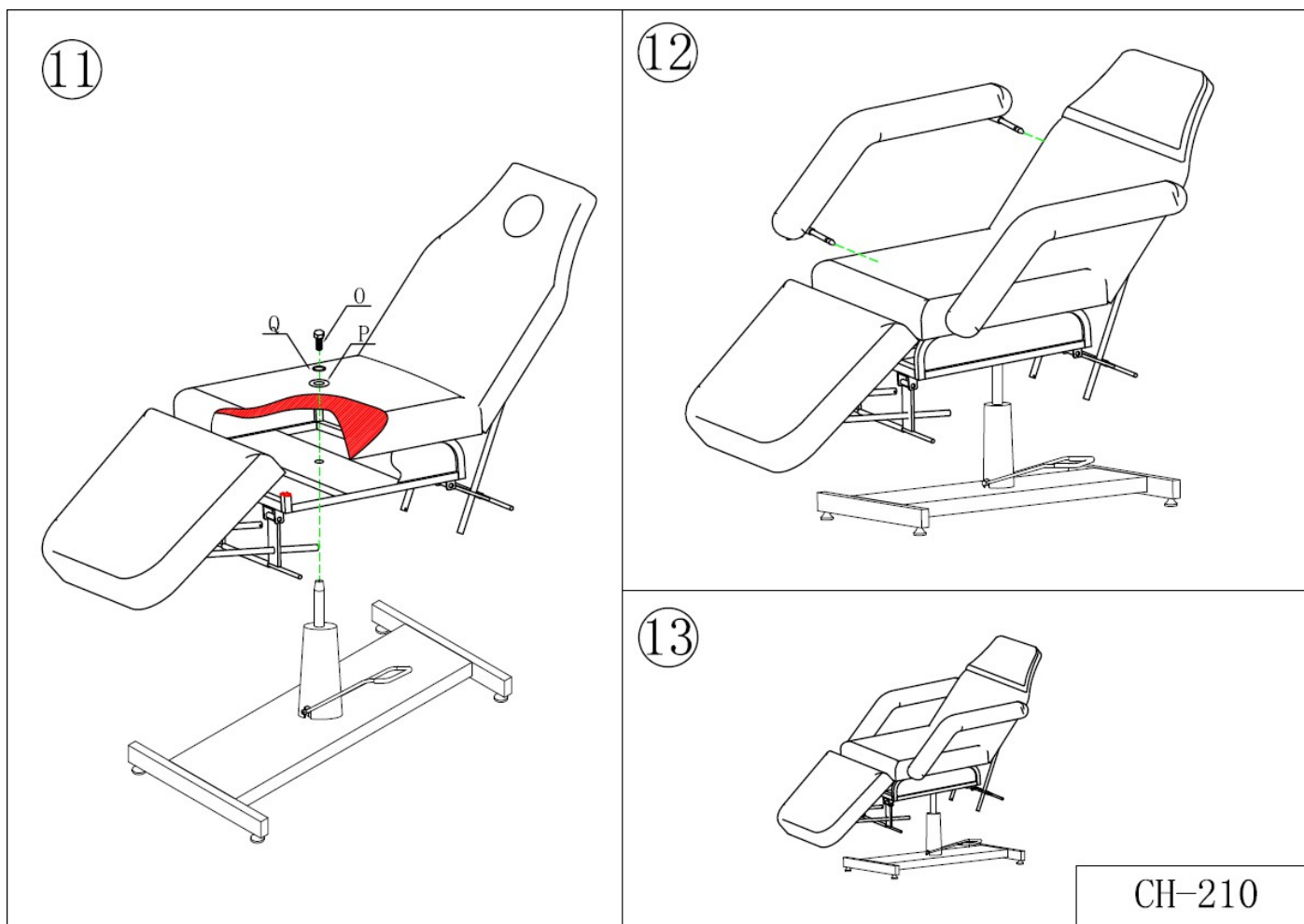

11. Paigaldage iste käivitusdetaili varre ja pingutage seda, kasutades Q, P ja O.

12. Lükake käetoed sisse nagu joonisel näidatud.

Istme funktsioonid:

- Istme tõstmine: tõstke istet, vajutades hooba.
- Istme langetamine: vajutage alla, kuni iste langeb täielikult alla.
- Istme pöörde lukustamine: tõstke kangi nii kaugele kui võimalik üles.

Ettevaatust!

Ärge istuge järsult maha ega visake oma raskust istmele. Ärge liigutage ega teisaldage istet, kui sellel on inimesed või koormus. Ärge seiske toolile jalgade või põlvedega, ärge kiigutage, ärge istuge käetoole ega istuge rohkem kui ühe inimese peale.

Seadme puhastamine ja desinfitseerimine:

Enne puhastamist tõmmake seade vooluvõrgust välja.

Et tooli pind oleks heas seisukorras, tuleb seda regulaarselt puhastada. Ärge unustage tooli pärast iga kasutamist puhastada ja desinfitseerida. Soovitav on teostada põhjalik desinfitseerimine kord kuus.

I Metallist ja plastist pinnad

Metall- ja plastpindade ning juhtelementide puhastamiseks pühkige neid niiske lapiga. Väike harja sobib hästi raskesti ligipääsetavate kohtade või nurkade puhastamiseks. Ärge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju vedelikku. Seejärel desinfitseerige seade sobiva vedelikuga.

II Roostevabast terasest pinnad

Puhastamine maheda pesuvahendi lahusega toimib kõige paremini. Tugevate plekkide eemaldamiseks võib kasutada ammoniaaki ja enamikku lahuseid. Vältige klooripõhiseid lahuseid.

III Värvitud või kroomitud metallpinnad

- Ärge kasutage puhastamiseks veejugasid (duššid, kõrgsurvevee püstolid).
- Ärge puhastage kõrge temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse korral ning ärge pange seadet kokku tingimustega, mis võivad põhjustada vedeliku saastumist.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahuseid ega happeid.

IV Tooli pind

- Pühkige istme pind ühtlaselt spetsiaalse nahapuhastusvahendiga ja seejärel pühkige seda puhta pehme lapiga.

Hooldus:

- 1. Igapäevane puhastamine**
Tolmu eemaldamine pehme, kuiva lapiga.
- 2. Kangekaelse mustuse eemaldamine**
Nagu te teate, on kangekaelse mustuse eemaldamine tavalise kuiva lapiga keeruline. Sellisel juhul kasutage esmalt pehmet lappi lahjendatud neutraalse pesuvahendiga ja seejärel pühkige kuiva lapiga.
- 3. Benseeni, lahjendite, bensiini või muude lahustite kasutamine on keelatud.**
Need ained võivad kahjustada nahka või söövitada toodet.
- 4. Ladustamis- ja kasutustingimused**
Ärge pange toodet tugeva päikesevalguse või niiskuse kätte. Vastasel juhul võib toode kahjustada.

OHUTUSMEETMED

Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.

Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab teostama ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.

Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:

(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid,

c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.

Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.

Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.

Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.

Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.

Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja v a s t u p i d i) säilitada üheminutilise intervall.

Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.

Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised ja vaimsed võimed ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, et sellega seotud riske mõistetakse.

Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.

Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.

See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjätmete konteinerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta, kasutatud

elektriseadmed tuleks eraldi koguda ja seejärel viia kogumispunktidest, kus kogutakse

elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidest. Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need üle anda ümbertöötlemiseks. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastele kogumispunktidest ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.

