

ACTIVESHOP®


ISTRUZIONI PER L'USO

Sedia estetica elettrica Azzurro 891



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

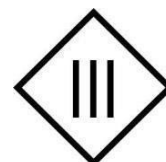


Prima di utilizzare la poltrona cosmetica, leggere le istruzioni ed eseguire le seguenti operazioni:

1. Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano stati rimossi.
2. Assicurarsi che la poltrona sia funzionante.
3. Posizionare la poltrona cosmetica nell'area in cui verrà utilizzata.
4. Inserire la spina di rete in una presa adeguata.

Nota! I bambini e le persone inesperte non devono utilizzare questo apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati e non devono giocare vicino alla poltrona estetica.

Dimensioni dell'apparecchio:

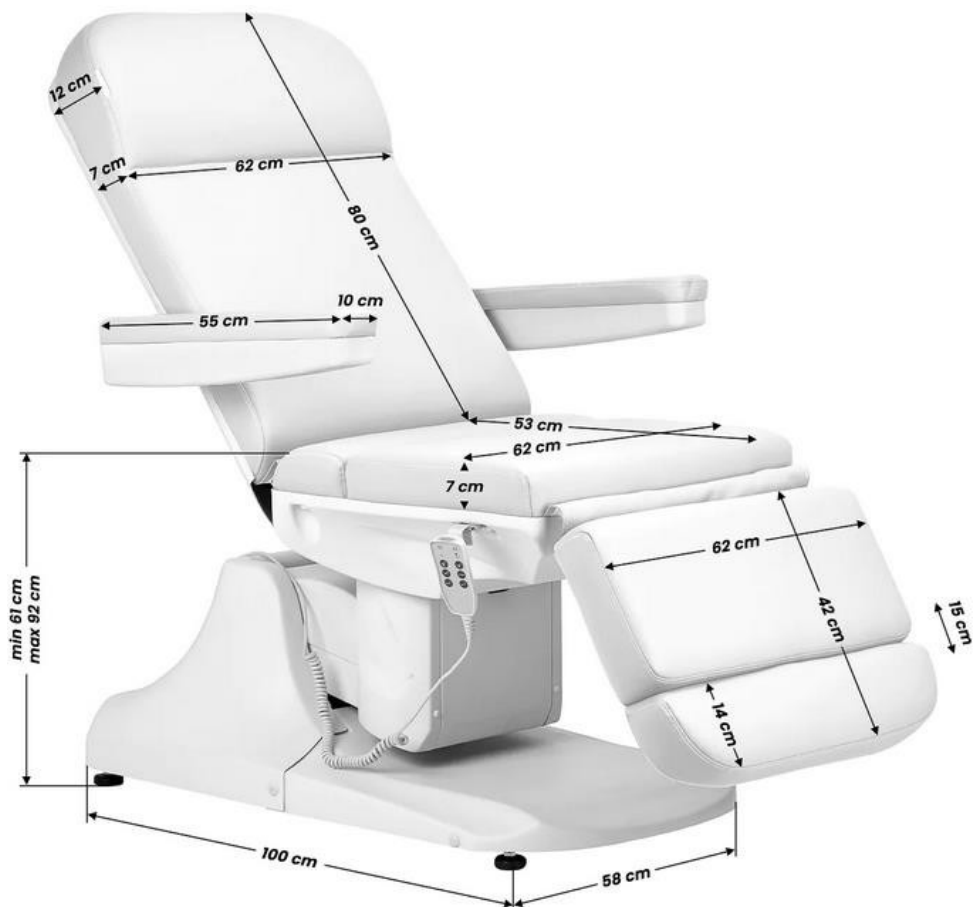

L'apparecchio è controllato da un telecomando.

Funzioni del telecomando:



1. Regolazione dell'altezza del sedile da 61-92 cm (premere per alzare o abbassare il sedile).

2. Regolazione dell'angolo dello schienale

3. Regolazione del poggiatesta
(premere per cambiare la posizione del poggiatesta).

Regolazione del poggiatesta:

Il poggiatesta ha un'opzione di regolazione e può essere esteso da 0 a 15 cm. Per estendere il poggiatesta, ruotare la manopola sul fondo ed estendere il poggiatesta alla lunghezza desiderata.



Pulizia e disinfezione della macchina

Scollegare l'unità prima di pulirla.

Per mantenere la superficie della poltrona in buone condizioni, pulirla regolarmente. Ricordarsi di pulire e disinfettare la poltrona dopo ogni utilizzo. Si consiglia di eseguire una disinfezione accurata una volta al mese.

I Superfici in metallo e plastica

Per pulire le superfici e i comandi in metallo e plastica, passare un panno umido. Per pulire le aree o gli angoli più difficili da raggiungere, è sufficiente una piccola spazzola. Non usare troppo liquido per pulire l'apparecchio. Disinfettare poi l'apparecchio con un liquido adatto.

II Superfici in acciaio inox

Il meglio funziona meglio è la pulizia con una soluzione delicata soluzione detergente. Ammoniaca i la maggior parte dei solventi possono essere utilizzati per rimuovere le macchie più resistenti. Evitare le soluzioni a base di cloro.

III Superfici metalliche verniciate o cromate

- Non utilizzare getti d'acqua (docce, cannoni a d alta pressione) per la pulizia.
- Non pulire a temperature e umidità elevate e non esporre l'unità a condizioni che potrebbero causare la contaminazione da parte di liquidi.
- Non utilizzare solventi o acidi per la pulizia.

IV Superficie del sedile

- Pulire uniformemente la superficie del sedile con un detergente speciale per la pelle e poi passarlo con un panno pulito e morbido.

Manutenzione

Prima di effettuare la manutenzione, scollegare l'unità.

1. Le riparazioni devono essere effettuate da personale esperto e autorizzato dal produttore. Le riparazioni effettuate da personale non autorizzato possono causare lesioni o danni all'apparecchio per i quali il produttore non è responsabile.
2. Utilizzare solo ricambi originali approvati dal produttore.
3. Non utilizzare la poltrona elettrica o gli accessori se non funzionano correttamente.
4. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere documentati.

Misure di manutenzione

Controllare i comandi e il loro cablaggio una volta alla settimana. Controllare lo stato e il funzionamento dei seguenti elementi almeno una volta ogni sei mesi:

1. Cavo di alimentazione e relativo attacco
2. Cablaggio del motore
3. La centralina di controllo e il suo cablaggio
4. se gli accessori sono montati
5. Il normale funzionamento del sistema di chiusura

Se si riscontrano difetti, interrompere l'uso dell'apparecchiatura e contattare un centro di assistenza autorizzato. Solo personale esperto o autorizzato può aprire o sostituire l'attuatore/unità di comando.

Se una parte dell'apparecchiatura è danneggiata, scollegare il cavo di alimentazione e interrompere l'utilizzo. Avvisare quindi il servizio di assistenza.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Metodo di soluzione
Quando si preme un tasto del telecomando, il telecomando non reagisce.	La funzione del pulsante in questione ha già raggiunto il massimo.	1. provare a premere un altro tasto
L'apparecchio emette strani rumori quando si regola l'altezza del altezza	Vite allentata	Serrare tutte le viti