

ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Azzurro F-18A pediküüri tolmuimeja




Importija

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC
2A 54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rew. A/05/2024



Mõõtmed

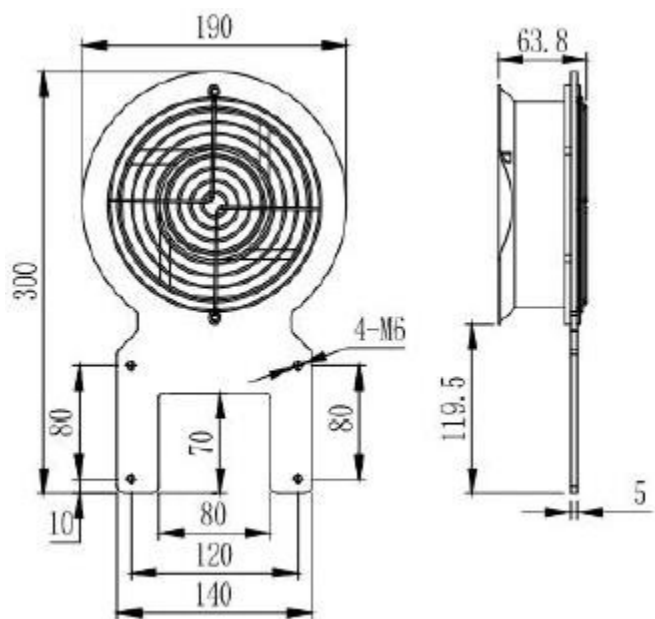

Absorberi konstruktsioon võimaldab seda paigaldada jalapealsele või otse ravitoolile.

Tehnilised andmed

Nimipinge	220-240 V, 50/60 Hz
Võimsus	38 W
Turbiini kiirus	2800/3200 RPM
Filtreeritud õhu maht	345/406 m3 tunnis
Müratase	51/58 dB
Mõõtmed	13,5 cm (sisse) 19 cm (välja)

Kasutamine

Neelduri konstruktsioon võimaldab seda paigaldada jalatoele või otse ravitoolile.

Vajutage lülitusnuppu, ventilaator hakkab tööle. Vajutage uuesti lülitusnuppu, ventilaator lõpetab töötamise.



Kott

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud otstarbel. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgnevatel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP OÜ poolt pakutava volitatud teenindusega:
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber pööratud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage kaablitele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohta, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge pange midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb ära.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisel, kui seadme ohutuks kasutamiseks on tagatud järelevalve või juhendamine, nii et sellega seotud riskid oleksid mõistetavad.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjäätmete konteinerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonnakaitse eesmärgil vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ, mis käsitleb jäätmeid kasutatud elektrilised ja elektroonilised kasutatud elektriseadmed

tuleb elektriseadmed eraldi koguda ja anda kasutatud elektroonika- ja elektriseadmete kogumispunktidesse.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seepärast tuleks need anda üle asjakohastes kogumispunktides ja ka ACTIVESHOP Ltd. aadressil.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.