

ACTIVESHOP®

Manual de instrucciones

Esterilizador UV-C Germix individual HQ YM9001A



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, edif. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/04/2026



El esterilizador Germix es una forma segura de desinfectar de manera eficaz sin utilizar soluciones químicas ni altas temperaturas. El funcionamiento del dispositivo se basa en la acción bactericida de la radiación UV — luz ultravioleta con una longitud de onda de 100-280 nm, especialmente 254 nm, es decir, UV-C—, que al incidir directamente sobre superficie, destruye eficazmente las formas vivas de los microorganismos. Permite una desinfección en seco eficaz, durante la cual el equipo no se ve expuesto a daños mecánicos ni al desgaste. Limpia perfectamente las superficies de utensilios como tijeras, peines, cepillos, cortauñas, pinzas o cuchillas para máquinas.

Datos técnicos	
Potencia	220 W
Voltaje	220-240 V 50 Hz
Tiempo de esterilización	30-45 min

Aplicación

1. El esterilizador UV se utiliza para desinfectar instrumentos de metal, plástico, madera y materiales compuestos (tijeras, peines, pinzas, etc.)
2. La desinfección se lleva a cabo mediante rayos UV, por lo que el equipo no se ve expuesto a daños mecánicos. La esterilización UV consiste en la exposición del material a la radiación ultravioleta.
3. Esta radiación altera la estructura de los ácidos nucleicos, por lo que actúa con mayor eficacia sobre las formas vegetativas de los microorganismos.
4. El dispositivo es ideal para centros de estética, spas, medicina estética y peluquerías.

Modo de empleo

1. Coloque el dispositivo sobre una superficie estable, introduzca los instrumentos y cierre el esterilizador UV.
Los instrumentos que se coloquen en el cajón del esterilizador deben estar limpios, secos y previamente lavados. Además, no deben solaparse entre sí.
2. Conecta el esterilizador a la corriente. Enciende el aparato con el botón de encendido/apagado.
3. El tiempo de esterilización es de unos 30 a 45 minutos.
4. Una vez transcurrido el tiempo deseado, apague el esterilizador con el botón de encendido/apagado.
5. Abra el esterilizador y saque los objetos (esto no es obligatorio; también se pueden dejar en el recipiente).
6. Los instrumentos están listos para su uso.

Importante

1. La tapa del esterilizador debe estar siempre cerrada cuando esté encendido.
2. Está prohibido abrir el aparato antes de que finalice el proceso de esterilización y se apaguen las luces LED.
3. No se debe permitir el contacto con agua o sustancias químicas corrosivas.
4. Los elementos de estructura compleja deben abrirse y desmontarse al máximo para que la esterilización de los instrumentos se realice de la forma más eficaz posible.


Recomendaciones

1. Asegúrate de instalar el dispositivo sobre una superficie plana y estable para reducir el riesgo de caídas y daños.
2. Nunca deje el dispositivo enchufado sin supervisión.
3. Utilice el dispositivo de acuerdo con el uso previsto descrito en el manual.
4. Nunca utilices este aparato si el cable o el enchufe están dañados.
5. No utilice el aparato si no funciona correctamente o si se ha caído, se ha dañado o se ha mojado

al agua.

6. No tire directamente del cable para desenchufarlo de la toma de corriente.
7. Producto para uso exclusivamente en interiores. No lo exponga a la intemperie.
8. Limpia el dispositivo periódicamente para evitar la acumulación de suciedad. Lo mejor es limpiarlo con un paño húmedo.
9. No enrolle el cable de alimentación alrededor del dispositivo.

Dimensiones

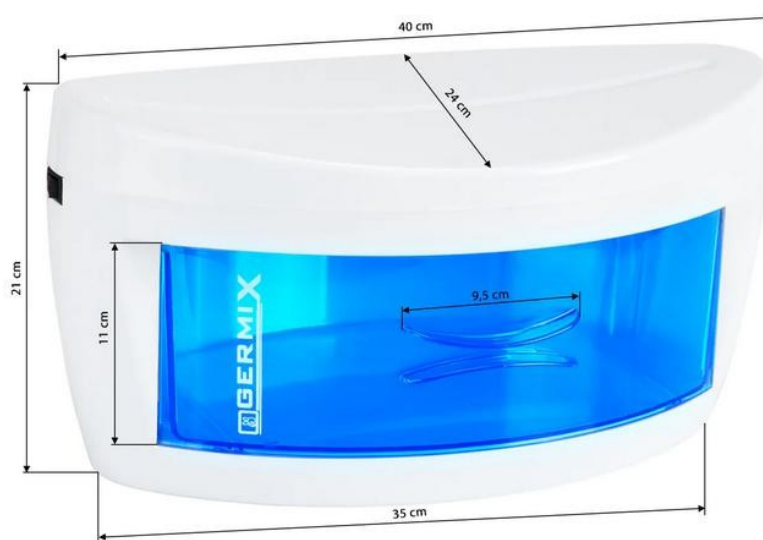

Medidas de seguridad

1. Este aparato es un equipo profesional destinado al uso en centros de estética. Su manejo exclusivo por parte de personal de estética cualificado permite evitar efectos indeseados durante el tratamiento.
2. No se debe desmontar el dispositivo ni intentar utilizarlo para fines distintos a los indicados en este manual de instrucciones. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados exclusivamente por un técnico del servicio técnico autorizado (la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No se debe instalar ni utilizar el dispositivo cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas. Se debe procurar que no entre ningún líquido en el dispositivo.
4. Desenchufe inmediatamente el dispositivo y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos: a) ha entrado líquido en el dispositivo, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite ruidos extraños, c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato se ha volcado o se ha dañado su carcasa.
5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato en lugares donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por motivos de seguridad, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de utilizar el aparato.
7. No introduzca objetos extraños en el interior del dispositivo. En caso de que un objeto extraño entre en el interior, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el dispositivo sobre un carrito, una estantería o un vehículo inestable. En caso de caída, el dispositivo podría sufrir daños.

9. Para garantizar la vida útil prevista del dispositivo, se recomienda esperar un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La alimentación eléctrica debe cumplir con las especificaciones indicadas en la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el dispositivo funcione incorrectamente, se dañe o incluso se queme.

ATENCIÓN

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado; así se evitarán riesgos.
2. Este dispositivo puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad, por personas con capacidades físicas y mentales reducidas, así como por personas que no estén familiarizadas con el funcionamiento de este equipo, siempre que se les proporcione la supervisión o la formación adecuadas sobre su uso correcto y seguro, y que comprendan los riesgos asociados.
3. No deje el dispositivo sin supervisión cuando haya niños o personas que no tengan los conocimientos suficientes para utilizarlo cerca del mismo.
4. El dispositivo no está diseñado para que lo utilicen los niños. No permita que los niños jueguen con el dispositivo.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el dispositivo debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

Eliminación del dispositivo



Con el fin de proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Se deben seguir las normas relativas a la eliminación de este tipo de aparatos y no tirarlos a los contenedores de residuos domésticos.

Al final de su vida útil, estos aparatos siguen conteniendo componentes valiosos aptos para el reciclaje, por lo que deben entregarse para su reciclaje en los puntos de recogida correspondientes o a la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Almacenamiento y transporte

El dispositivo debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-20°C) y $(+40^{\circ}\text{C})$, exclusivamente en su embalaje original. Debe almacenarse en una sala bien ventilada y con una humedad relativa no superior al 90 %. Temperatura de funcionamiento de $(+10^{\circ}\text{C})$ a $(+40^{\circ}\text{C})$. Durante los procesos Durante el almacenamiento y el transporte, no se debe lanzar ni dejar caer el dispositivo, ni exponerlo a golpes mecánicos o a la intemperie.