

ACTIVESHOP[®]

Mode d'emploi

Stérilisateur UV-C Germix simple HQ YM9001A



Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, b timent
DC2A 54-610 Wroc aw,
Pologne
www.activeshop.com.pl R v.
A/04/2026



Le stérilisateur Germix est un moyen sûr d'assurer une désinfection sûre et efficace sans recourir à des solutions chimiques ou de températures élevées. Le fonctionnement de l'appareil repose sur l'action bactéricide du rayonnement UV – lumière ultraviolette d'une longueur d'onde de 100 à 280 nm, en particulier 254 nm, c'est-à-dire les UV-C, qui, en frappant directement la surface, détruit efficacement les formes vivantes de micro-organismes. Il permet une désinfection à sec efficace, au cours de laquelle le matériel n'est pas exposé à des dommages mécaniques ou à l'usure. Il nettoie parfaitement les surfaces d'ustensiles tels que ciseaux, peignes, brosses, pinces, pinces à épiler ou lames de tondeuses.

Caractéristiques techniques	
Puissance	220 W
Tension	220-240 V 50 Hz
Durée de stérilisation	30-45 min

Utilisation

1. Le stérilisateur UV sert à désinfecter les outils en métal, en plastique, en bois et en matériaux composites (ciseaux, peignes, pinces à épiler, etc.)
2. La désinfection est effectuée par rayons UV, ce qui évite tout risque de dommages mécaniques au matériel. La stérilisation UV consiste à exposer le matériau à un rayonnement ultraviolet.
3. Ce rayonnement modifie la structure des acides nucléiques, c'est pourquoi il agit le plus efficacement sur les formes végétatives des micro-organismes.
4. Cet appareil est idéal pour les instituts de beauté, les spas, la médecine esthétique et les salons de coiffure.

Mode d'emploi

1. Placez l'appareil sur une surface stable, puis insérez les instruments et fermez le stérilisateur UV.
Les instruments placés dans le tiroir du stérilisateur doivent être propres, secs et préalablement lavés. Ils ne doivent pas non plus se chevaucher.
2. Branchez le stérilisateur sur le secteur. Allumez l'appareil à l'aide du bouton marche/arrêt.
3. La durée de stérilisation est d'environ 30 à 45 minutes.
4. Une fois le temps écoulé, éteignez le stérilisateur à l'aide du bouton marche/arrêt.
5. Ouvrez le stérilisateur et retirez les objets (ce n'est pas obligatoire, vous pouvez également les laisser dans le récipient).
6. Les instruments sont prêts à l'emploi.

Important

1. Le couvercle du stérilisateur doit toujours être fermé lorsque celui-ci est en marche.
2. Il est interdit d'ouvrir l'appareil avant la fin du processus de stérilisation et l'extinction des voyants LED.
3. Évitez tout contact avec l'eau ou des produits chimiques corrosifs.
4. Les éléments de conception complexe doivent être ouverts et démontés autant que possible afin que la stérilisation des instruments soit effectuée de la manière la plus efficace possible.


Recommandations

1. Assurez-vous d'installer l'appareil sur une surface plane et stable afin de limiter les risques de chute et de dommages.
2. Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance.
3. Utilisez l'appareil conformément à l'usage prévu décrit dans le mode d'emploi.
4. N'utilisez jamais cet appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé.
5. N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé, a été endommagé ou a été immergé

dans l'eau.

6. Ne tirez pas directement sur le câble pour débrancher la fiche de la prise.
7. Produit destiné à un usage exclusivement intérieur. Ne l'exposez pas directement aux intempéries.
8. Nettoyez régulièrement l'appareil pour éviter l'accumulation de saleté. Il est préférable de nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
9. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

Dimensions

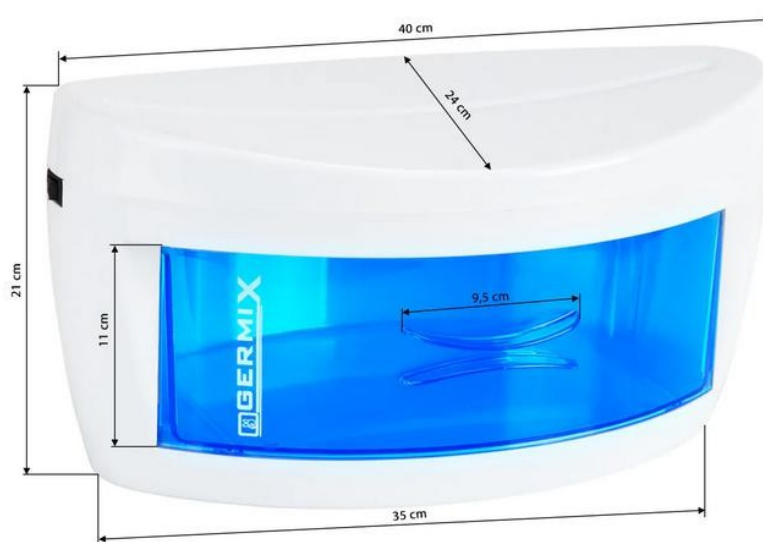

Mesures de sécurité

1. Cet appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. Son utilisation exclusive par du personnel de beauté qualifié permet d'éviter tout effet indésirable pendant le soin.
2. Il est interdit de démonter l'appareil ou de tenter de l'utiliser à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués exclusivement par un technicien du service après-vente agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Il est interdit d'installer ou d'utiliser l'appareil à proximité de liquides, dans des endroits humides ou avec les mains mouillées. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise et contactez le service après-vente agréé de la société ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants : a) un liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur inhabituelle, de la fumée ou émet des bruits étranges, c) le cordon d'alimentation est endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier est endommagé.
5. Ne posez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans des endroits où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise après chaque utilisation de l'appareil.
7. Il est interdit d'introduire des corps étrangers à l'intérieur de l'appareil. Si un corps étranger pénètre à l'intérieur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. En cas de chute, l'appareil pourrait être endommagé.

9. Afin de garantir la durée de vie prévue de l'appareil, il est recommandé d'attendre une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et inversement).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique. Dans le cas contraire, il existe un risque de dysfonctionnement de l'appareil, de détérioration, voire d'incendie.

ATTENTION

1. En cas de détérioration du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, veuillez contacter un service après-vente agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, par des personnes aux personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites, ainsi qu'aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec le fonctionnement de cet équipement, à condition qu'une surveillance appropriée leur soit assurée ou qu'elles reçoivent des instructions sur son utilisation correcte et en toute sécurité, et que les risques associés soient bien compris.
3. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes ne disposant pas des connaissances suffisantes pour l'utiliser se trouvent à proximité.
4. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé comme jouet par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort ; c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et conservé hors de portée des enfants.

Mise au rebut de l'appareil



Afin de protéger l'environnement, conformément à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et déposés dans des points de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques. Il convient de respecter les règles relatives à l'élimination de ce

type d'équipement et ne pas les jeter dans les poubelles ménagères.

À la fin de leur durée de vie, ces appareils contiennent encore des composants de grande valeur pouvant être recyclés ; c'est pourquoi il convient de les remettre pour recyclage aux points de collecte appropriés ou à la société ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Stockage et transport

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-)20 °C et (+)40 °C, exclusivement dans son emballage d'origine. Il doit être stocké dans un local bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 90 %. Température de fonctionnement comprise entre (+)10 °C et (+)40 °C. Pendant les processus Lors du stockage et du transport, il ne faut pas jeter ni laisser tomber l'appareil, ni l'exposer à des chocs mécaniques ou aux intempéries.