

ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Namizna svetilka za zdravljenje Glow MX6 / MX3



Uvoznik:

Z o.o.
Ulica Graniczna 8b, stavba
DC 2a 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl




Tehnični podatki:

Model	HD-M3X	HD-M6X
Vhodna napetost	220-240 V 50 Hz	220-240V 50Hz
Vhodna napetost	12V 2A	24V 1,5A
Največja moč	20W	36W
Barva	3000/4500/6000K	3200-5600K
CRI	RA>90	RA>90
Svetlobni tok	1800LM	2800LM
Dimenzije	400 x 200 x 40 mm	580 x 190 x 445 mm
Teža	1,4 kg	4,6 kg

Konstrukcija in namestitev svetilke HD-M6X


1. Spodnji del stativa (del D) privijte v podstavek. Nato privijte zgornji del stativa (del C) v spodnji del (del D).

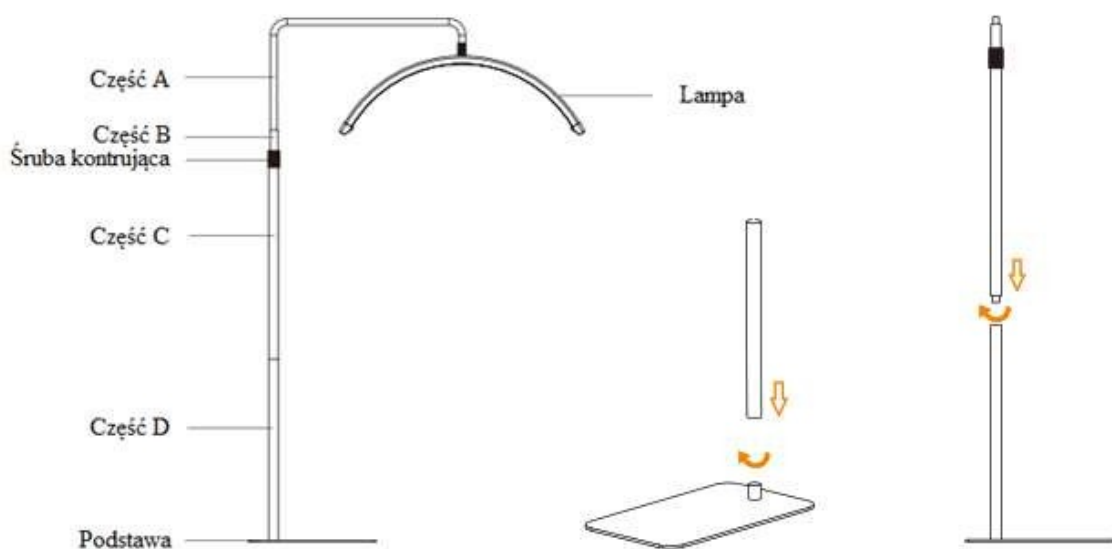


2. Pritrditev svetilke na stativ

- Odvijte pritrdilni vijak.
- Potegnite del B iz dela C.
- Zavrtite del A z delom B.
- Vstavite del B v del C.
- Privijte pritrdilni vijak.
- Priključite kable za napajanje.

Opomba: Položaj doku svetilke lepo nad nogo stativa zagotavlja največjo stabilnost svetilke.

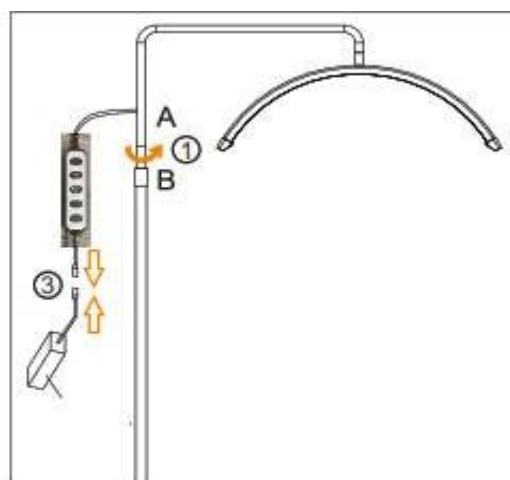

Konstrukcija in namestitev svetilke HD-M3X

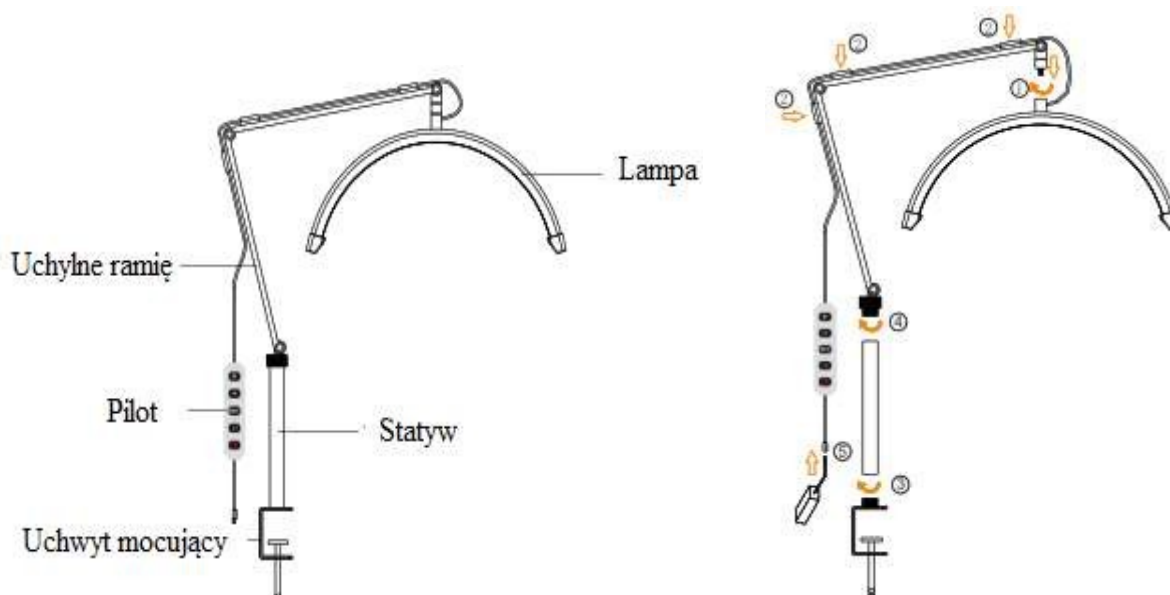


1. Svetilko privijte v zgornji del nagibne roke.
2. Kabel namestite v posebna vodilna držala
3. Podstavek za svetilko pritrdite na montažni nosilec
4. Priključitev svetilke na stativ
5. Priključite napajalni kabel na napajalnik

Opomba: Togost sklepov vrtljivih rok je mogoče prilagoditi z imbusnim ključem.

Po daljši ali intenzivni uporabi roke svetilke se lahko pojavi prevelika zračnost sklepov. Z zategovanjem pritrdilnih vijakov izboljšajte togost sklepov.

Pozor! Vijakov ne zategujte preveč. Če pritrdilne vijake preveč zategnete, obstaja nevarnost, da poškodujete ročico svetilke.

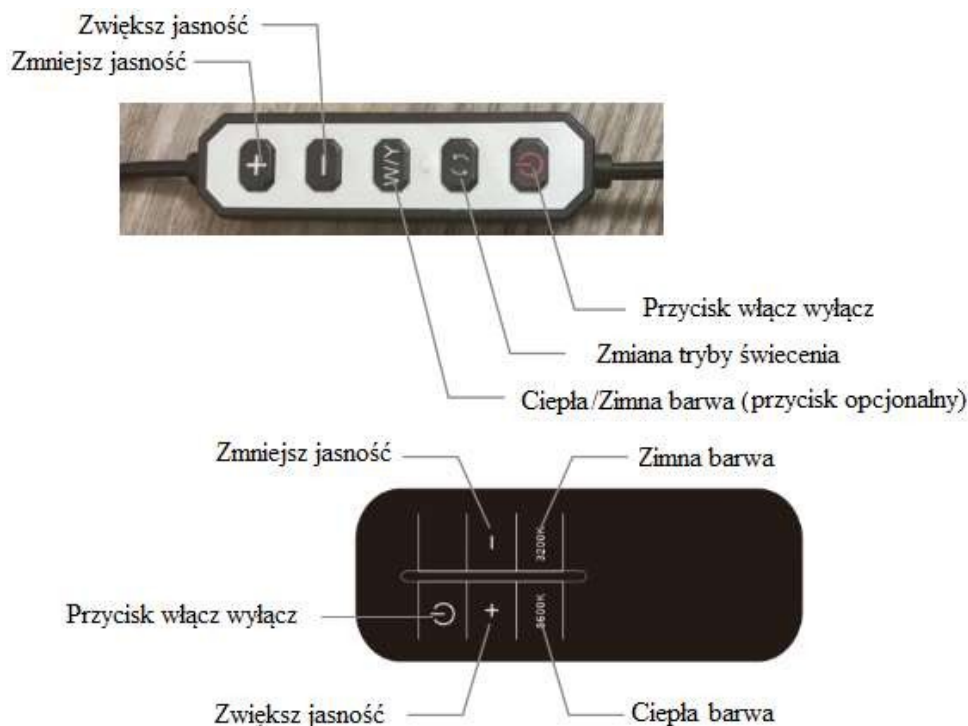

Uporaba svetilke HD-M3X/ HD-M6X

Opomba: Daljinski upravljalnik je na svetilki neobvezen (nekateri modeli ne vključujejo daljinskega upravljalnika).

Opomba: Gumb za spreminjanje načina osvetlitve je na upravljalniku svetilke neobvezen (nekateri modeli tega gumba nimajo).

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne vstopajo tekočine.
4. Napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servisni center, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP SP. Z O.O.). v naslednjih primerih:
(a) je v aparat vstopila tekočina, (b) aparat oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, (c) je poškodovan napajalni kabel, (d) je aparat prevrnjen ali je poškodovano njegovo ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate z delom z aparatom.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, izvlecite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo požara naprave.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo naprave, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi

je treba izrabljeno električno in elektronsko opremo zbirati ločeno in jo odnesti na zbirna mesta za izrabljeno elektronsko in električno opremo.

Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba poslati v ponovno predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in tudi družbi ACTIVESHOP SP. Z O.O.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.