

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Scaun cosmetic Sillon cu tăvițe



Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024



Înainte de a utiliza scaunul cosmetic, citiți conținutul instrucțiunilor anexate și efectuați următorii pași:

1. Asigurați-vă că toate elementele de ambalare au fost îndepărtate.
2. Asigurați-vă că scaunul este în stare de funcționare.
3. Așezați scaunul cosmetic în zona în care va fi utilizat.
4. Conectați ștecherul la o priză adecvată.

Atenție!

Copiii și persoanele neexperimentate nu trebuie să utilizeze acest aparat. Copiii trebuie supravegheați și nu trebuie să se joace în apropierea scaunului cosmetic.

Dimensiunile aparatului:



- Scaunul este controlat manual cu ajutorul pârghiilor de dedesubt. În acest fel, unghiul spătarului și al suportului pentru picioare poate fi reglat. Scaunul poate fi desfășurat într-o poziție de înclinare, în care ajunge la 180 cm lungime.
- În plus, cotierele sunt detașabile pentru a facilita accesul la zonele tratate în prezent.
- Sub scaun, există tăvi detașabile în care pot fi depozitate cele mai necesare instrumente și preparate necesare pentru tratament.

Reglarea spătarului:

- Pentru a regla poziția spătarului, trageți maneta situată sub spătar și înclinați spătarul în poziția corectă. Astfel, plasați maneta în filele negre.

Reglarea suportului pentru picioare

- Pentru a regla poziționarea suportului pentru picioare, trageți maneta de sub suportul pentru picioare și înclinați suportul pentru picioare în poziție. Așezați astfel maneta în filele negre pentru a menține poziționarea suportului pentru picioare.

Curățarea și întreținerea:

- Deconectați unitatea înainte de curățare.
- Pentru a menține suprafața scaunului în stare bună, aceasta trebuie curățată în mod regulat. Nu uitați să curățați și să dezinfectați scaunul după fiecare utilizare. Vă recomandăm să efectuați o dezinfecție completă o dată pe lună

I Suprafețe metalice și din plastic

- Pentru a curăța suprafețele și comenzile din metal și plastic, ștergeți-le cu o cârpă umedă. Pentru a curăța zonele greu accesibile sau colțurile, o perie mică va funcționa cel mai bine.
- Nu utilizați prea mult lichid pentru a curăța aparatul. Apoi dezinfectați aparatul cu un lichid adecvat.

II Suprafețe din oțel inoxidabil

- Cel mai bine funcționează cel mai bine curățare curățare cu un detergent blând tip detergent. Amoniac i majoritatea solvenților pot fi utilizați pentru a îndepărta petele dificile. Evitați soluțiile pe bază de clor.

III Suprafețe metalice vopsite sau cromate

- Nu utilizați jeturi de apă (dușuri, tunuri de apă de înaltă presiune) pentru curățare.
- Nu curățați la temperaturi ridicate și umiditate ridicată. Nu expuneți unitatea la condiții care pot duce la contaminarea cu lichide.
- Nu utilizați solvenți sau acizi pentru curățare.

IV Suprafața scaunului

- Ștergeți uniform suprafața scaunului cu un detergent special pentru piele și apoi ștergeți-o cu o cârpă curată și moale.

Întreținere

Deconectați unitatea înainte de întreținere.

1. Reparațiile trebuie să fie efectuate de personal experimentat și autorizat de producător. Reparațiile efectuate de personal neautorizat pot cauza răni sau deteriorări ale aparatului pentru care producătorul nu este responsabil.
2. Utilizați numai piese de schimb originale aprobate de producător.
3. Nu utilizați scaunul electric de înfrumusețare sau accesoriile dacă acestea nu funcționează corect.
4. Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie să fie documentate.

Măsuri de întreținere

Verificați comenzile și cablajul acestora o dată pe săptămână. Verificați starea și funcționarea următoarelor elemente cel puțin o dată la șase luni:

1. Cablul de alimentare și atașamentul acestuia

2. Cablajul motorului

3. Cutia de comandă și cablajul acesteia
4. Dacă accesoriile sunt atașate
5. Funcționarea normală a sistemului de închidere

Dacă observați defecte, nu mai utilizați echipamentul și contactați un centru de service autorizat. Numai personalul cu experiență sau autorizat poate deschide sau înlocui actuatorul / unitatea de comandă.

Dacă orice parte a unității este deteriorată, deconectați cablul de alimentare și nu o mai utilizați. Apoi anunțați service-ul.

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.

2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.

4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri

(a) a intrat lichid în aparat, b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate,

c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.

5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.

6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.

7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.

8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.

9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).

10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel se va evita orice pericol.


2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe despre echipament, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.

3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.

5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI

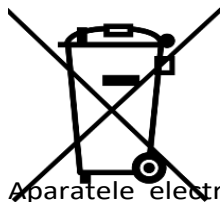

Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul înconjurător în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile folosite electrice și electronice folosite

Aparatele electrice trebuie colectate separat și duse la punctele de colectare a deșeurilor electrice și electronice. Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru prelucrare. Prin urmare, acestea ar trebui predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.