

ACTIVESHOP[®]

GEBRAUCHSANWEISUNG

Lupenleuchte S4+ Stativ



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polen

www.activeshop.com.pl

Rev. A/07/2024



Eine Lupenleuchte auf einem vierarmigen Stativ ermöglicht die Betrachtung der Haut und der Hautläsionen aus der Nähe und beleuchtet den Behandlungsbereich. Sie wird auch für Maniküre- und Pediküre-Behandlungen und Permanent Make-up verwendet. Die LEDs strahlen ein helles Licht aus, was den Arbeitskomfort erhöht.

Technische Daten:

Spannung	220-240V
Leistung	22W
Frequenz	50/60Hz
Vergrößerung	5 Dioptrien

Abmessungen des Geräts:




Vorsichtsmaßnahmen:

1. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens oder eines anderen Gewässers.
2. Berühren Sie beim Anschließen des Steckers nicht dessen Metallteile.
3. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Schmutzansammlungen zu vermeiden. Reinigen Sie das Gerät am besten mit einem feuchten Tuch.
4. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
5. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an das richtige Stromnetz angeschlossen ist und dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
6. Stecken Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen ein.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker heiß oder beschädigt ist.
8. Lagern Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen.
10. Stoßen Sie das Gerät nicht an und werfen Sie es nicht.


Technische Daten des Geräts:

1. Netzstecker
2. Gerätearm
3. Lampe
4. Ein/Aus-Schalter
5. Einstellung der Lampe
6. Stativ
7. Sockel
8. Rad

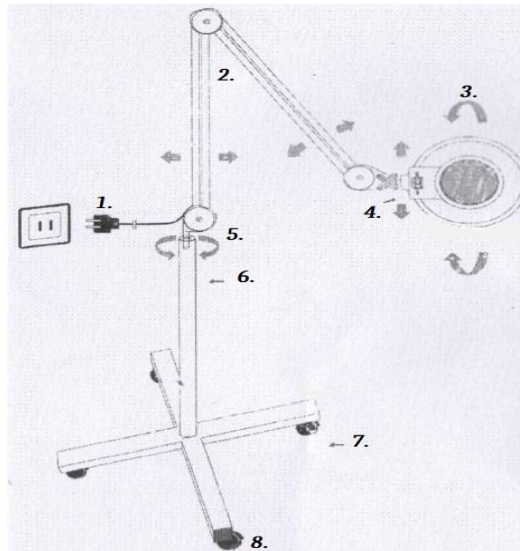

Zusammenbau:

1. Bauen Sie zunächst den Sockel und das Stativ zusammen. Verbinden Sie die beiden Beine und das Stativ mit einer Unterlegscheibe und einer Schraube, wie in Abbildung 1 dargestellt. Verbinden Sie dann die Lampe mit dem Stativ (Abbildung 2).

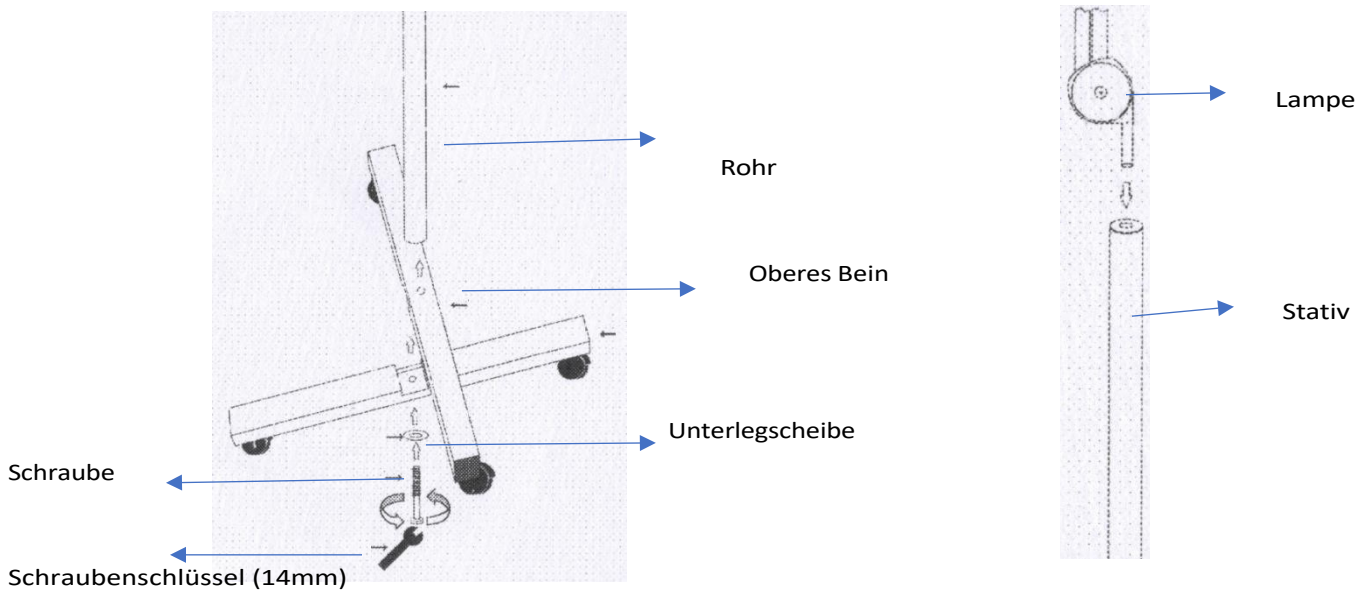

Gebrauchsanweisung:

1. Bauen Sie das Gerät zusammen.
2. Schließen Sie es an eine geeignete Stromquelle an.
3. Zünden Sie die Lampe.
4. Passen Sie die Position der Lampe nach Bedarf an.
5. Vergessen Sie nicht, den Stecker des Geräts zu ziehen, wenn Sie fertig sind.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Gebrauch in Schönheitssalons. Das Gerät darf nur von qualifiziertem Kosmetikpersonal bedient werden, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Installieren und bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das G e r ä t gelangen.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den von ACTIVESHOP Sp. z o.o. autorisierten Kundendienst:
 - a) Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, b) das Gerät einen seltsamen Geruch oder Rauch abgibt oder seltsame Geräusche macht,
 - c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an einen autorisierten Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten, so dass sie die damit verbundenen Risiken verstehen.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe befinden.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Die unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit einem Elektrogerät kann ein Gesundheitsrisiko darstellen oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen umweltgerecht bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt müssen gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Abfall gebrauchte elektrische und elektronische gebrauchte Elektrogeräte müssen Elektrogeräte getrennt gesammelt und bei den folgenden Sammelstellen abgegeben werden

Sammlung von Elektronik- und Elektroaltgeräten. Altgeräte enthalten am Ende ihrer Nutzungsdauer vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher der Wiederaufbereitung zugeführt werden. Daher sollten sie bei entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur von (-) 20 °C bis (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.