

ACTIVESHOP®

MODE D'EMPLOI

Fauteuil de soins Azzurro Special 152



Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
8b, rue Graniczna, bâtiment DC2A 54-
610 Wrocław, Pologne
www.activeshop.com.pl
Rév. A/02/2026

VEUILLEZ LIRE LE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Ce manuel contient des informations détaillées concernant l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le contenu du manuel joint. Utilisez l'appareil conformément aux instructions. Conservez ce manuel et assurez-vous que toutes les personnes susceptibles d'utiliser l'appareil en aient pris connaissance.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 119 x 60 x 53 cm
Poids : 14 kg
Charge maximale : 150 kg Réglage de la hauteur : 55 - 75 cm Réglage de l'inclinaison du dossier (avant/arrière) : 0 - 5 cm Réglage de l'angle d'inclinaison : 10°

Structure :

1. Dossier et assise de la chaise
2. Vérin à gaz
3. Piètement de la chaise
4. Roulettes



Montage :

1. Sur certains modèles, le dossier et l'assise de la chaise ne sont pas assemblés. Dans ce cas, insérez le dossier dans la fixation de l'assise et serrez à l'aide des 3 vis fournies.
2. Fixez les roulettes au piètement en les enfonçant.
3. Insérez le vérin, côté épais, dans le piètement.
4. Placez l'assise sur le vérin

Remarque : sur certains modèles, le vérin est protégé par un capuchon en plastique (au niveau du raccord avec l'assise). Avant de mettre l'assise en place, vérifiez que le cache en plastique a bien été retiré. Sinon, une fois le montage terminé, il ne sera pas possible de régler la position verticale.

Utilisation :

Réglage vertical :

Pour abaisser le siège, appuyez sur le levier indiqué sur l'image tout en étant assis sur le siège ou en exerçant une pression sur celui-ci.

Pour relever le siège, appuyez sur le levier indiqué sur l'image sans exercer de pression sur le siège.




Réglage de l'inclinaison du dossier :

Tirez l'extrémité du levier vers l'extérieur pour débloquer le réglage de l'inclinaison. Appuyez sur le dossier et réglez-le dans la position souhaitée.


Puis, repoussez l'extrémité du levier pour verrouiller la position du dossier.

Attention : en raison du type de , pour rapprocher le dossier de l'assise, il faut d'abord le pousser dans le sens opposé (dans le sens de la flèche sur illustration ci-jointe.)

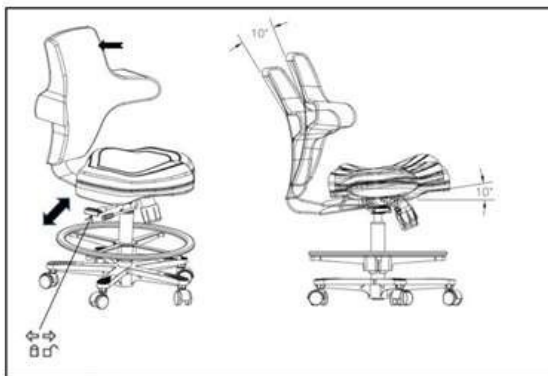

Réglage horizontal de l'assise :

Pour déplacer l'assise vers l'avant ou vers l'arrière, soulevez la partie marquée sur image, puis de déplacer le siège jusqu'à la position souhaitée. Une fois le levier relâché, le siège restera dans la position choisie.

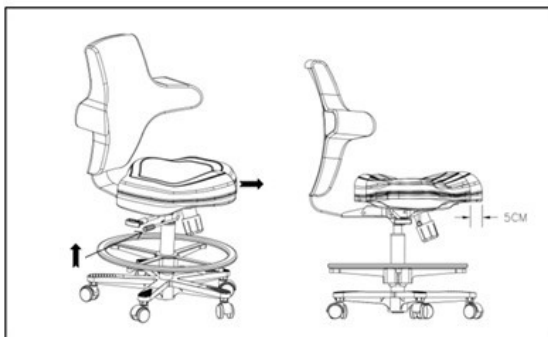

Recommandations :

1. Ne dépassez pas la charge maximale recommandée pour le fauteuil, car cela pourrait causer des dommages irréversibles (max. 150 kg).
2. N'utilisez pas de produits contenant des agents corrosifs ou des colorants, ni de produits de nettoyage huileux pour nettoyer le siège.
3. Des produits de nettoyage inadaptés peuvent endommager le tissu, provoquer de la corrosion ou d'autres phénomènes.
4. Il convient de nettoyer régulièrement le siège afin d'éviter que les salissures ne s'incrustent. En cas de salissures sur le revêtement, il est préférable d'utiliser de l'eau tiède savonneuse.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, exclusivement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement : de (+) 10 °C à (+) 40 °C. Pendant le stockage et le transport, il est interdit de jeter ou de faire tomber l'appareil, de l'exposer à des chocs mécaniques ou aux intempéries.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. Cet appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. Son utilisation exclusive par du personnel de beauté qualifié permet d'éviter tout effet indésirable pendant le soin.
2. Il est interdit de démonter l'appareil ou de tenter de l'utiliser à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués exclusivement par un technicien du service après-vente agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Il est interdit d'installer ou d'utiliser l'appareil à proximité de liquides, dans des endroits humides ou avec les mains mouillées, afin d'éviter que des liquides ne pénètrent dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise et contactez le service après-vente agréé de la société ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants :
a) du liquide s'est infiltré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur inhabituelle, de la fumée ou émet des bruits étranges, c) le cordon d'alimentation est endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans des endroits où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise après chaque utilisation de l'appareil.
7. N'introduisez rien dans les ouvertures de l'appareil. Si un corps étranger pénètre dans une ouverture, débranchez le cordon d'alimentation et contactez votre revendeur ou le fabricant. 8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. En cas de chute, l'appareil pourrait être endommagé.
9. Afin de garantir la durée de vie prévue de l'appareil, il est recommandé d'attendre une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt, et inversement).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique. Dans le cas contraire, il existe un risque de dysfonctionnement de l'appareil, de détérioration, voire d'incendie.

ATTENTION :

1. En cas de détérioration du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, veuillez contacter un service après-vente agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes à mobilité réduite, des personnes ayant des capacités physiques ou mentales limitées, ainsi que par des personnes inexpérimentées et ne connaissant pas l'équipement, à condition qu'une surveillance ou une formation sur l'utilisation de l'équipement en toute sécurité soit assurée, de manière à ce que les risques associés soient compris.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes ne disposant pas des connaissances suffisantes pour l'utiliser se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort ; c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et conservé hors de portée des enfants.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL



Les appareils électriques, les accessoires et les emballages usagés doivent être remis à des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les poubelles ménagères. Il convient de respecter les règles relatives à mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément, puis remis à des points de collecte de déchets d'équipements électriques et électroniques. À la fin de leur durée de vie, les anciens appareils contiennent des composants de grande valeur pouvant être recyclés ; c'est pourquoi ils doivent être remis en vue de leur recyclage. Il convient donc de les remettre aux points de collecte appropriés ; vous pouvez également les remettre à la société ACTIVESHOP Sp. z o.o.